



<u>English</u>	2
<u>French</u>	18
<u>Spanish</u>	34
<u>German</u>	50
<u>Portuguese</u>	66
<u>Italian</u>	82
<u>Swedish</u>	98
<u>Dutch</u>	114
<u>Japanese</u>	130

DEXIS-exocad integration setup


User accounts you need

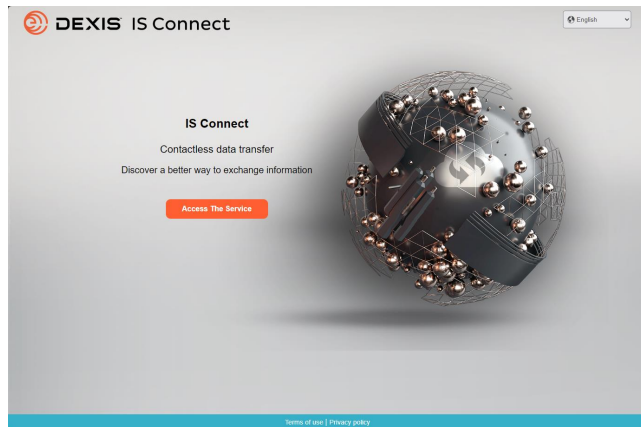

☐ IS Connect account

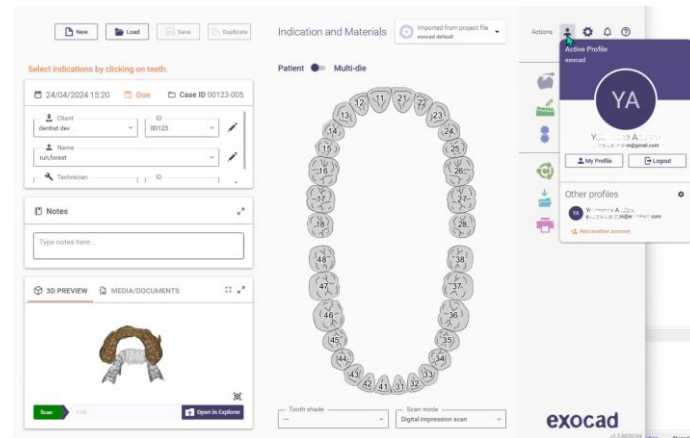


☐ exocad DB account

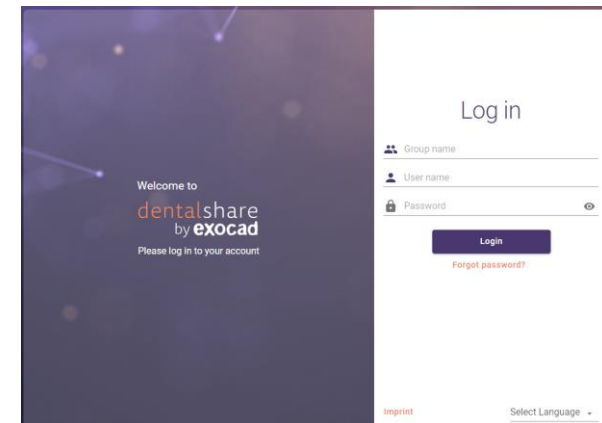

☐ exocad dentalshare account

Do you have a dentalshare account ?

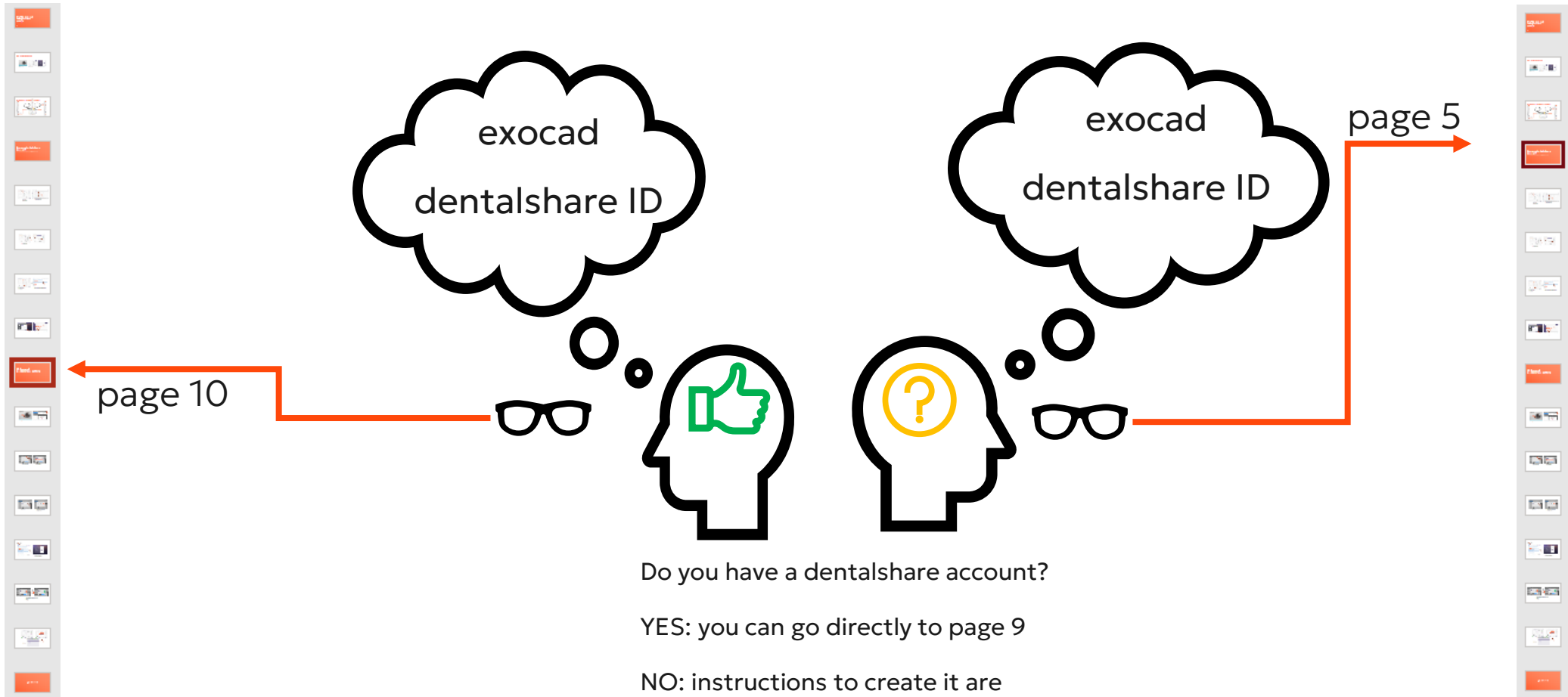


Do you have a dentalshare account?

YES: you can go directly to page 9


NO: instructions to create it are provided page 4. You may also visit

https://wiki.exocad.com/wiki/index.php/Signing_up_to_Dentalshare


Create dentalshare account

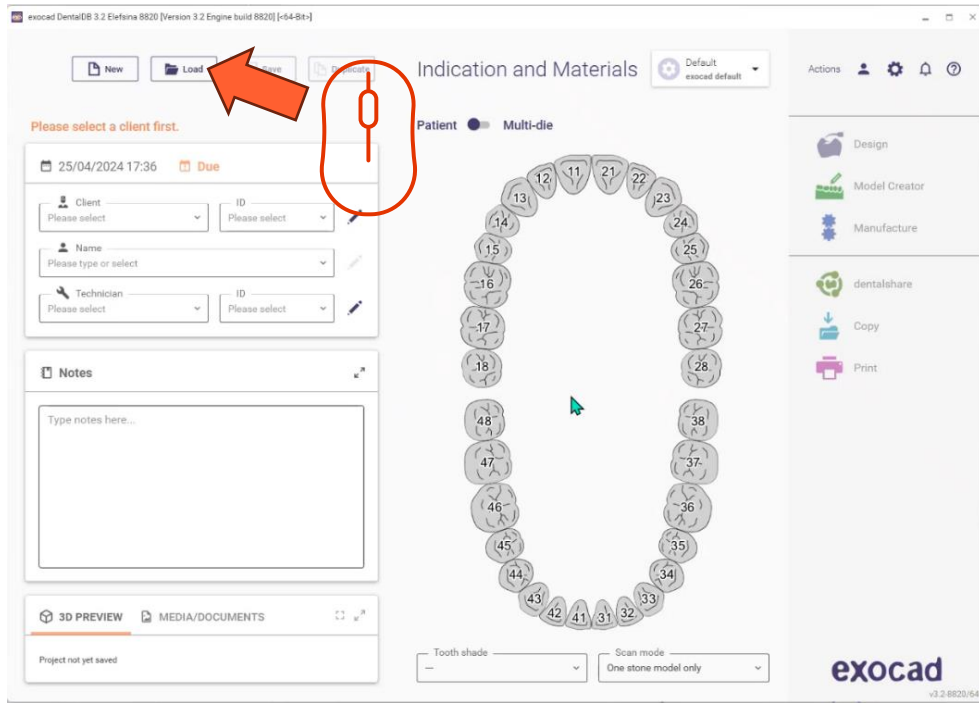


- Open exocad DB
- Click on load button

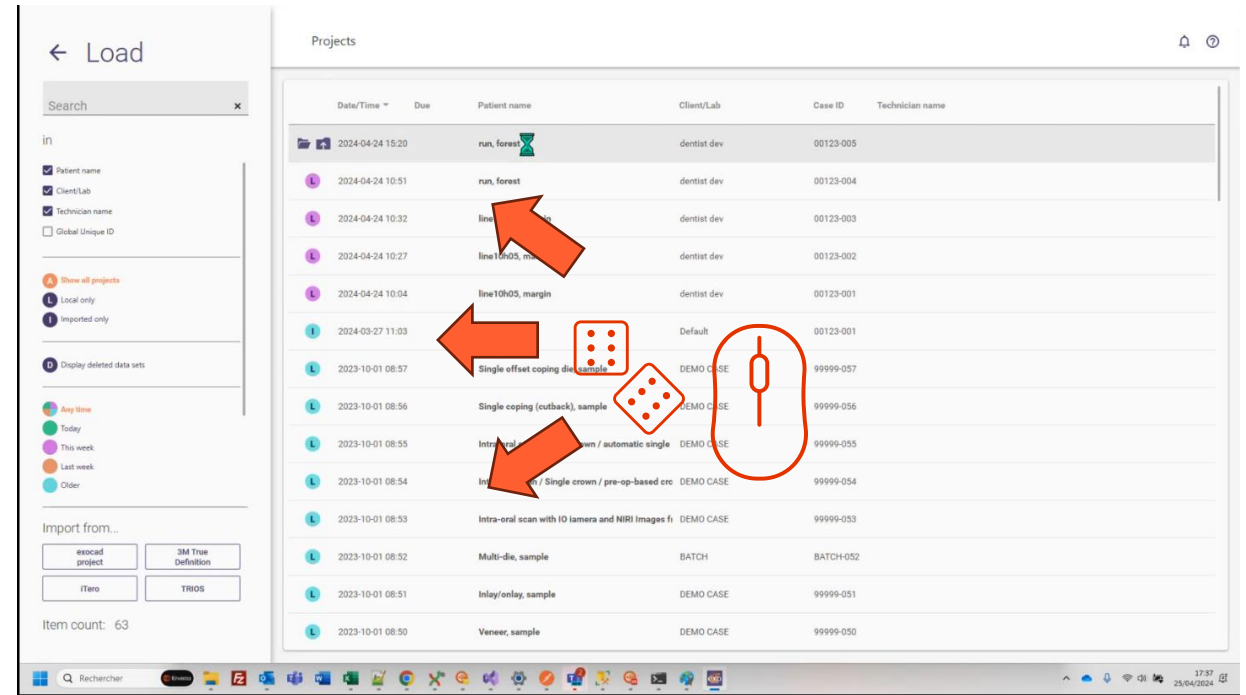


- Select any project and load it

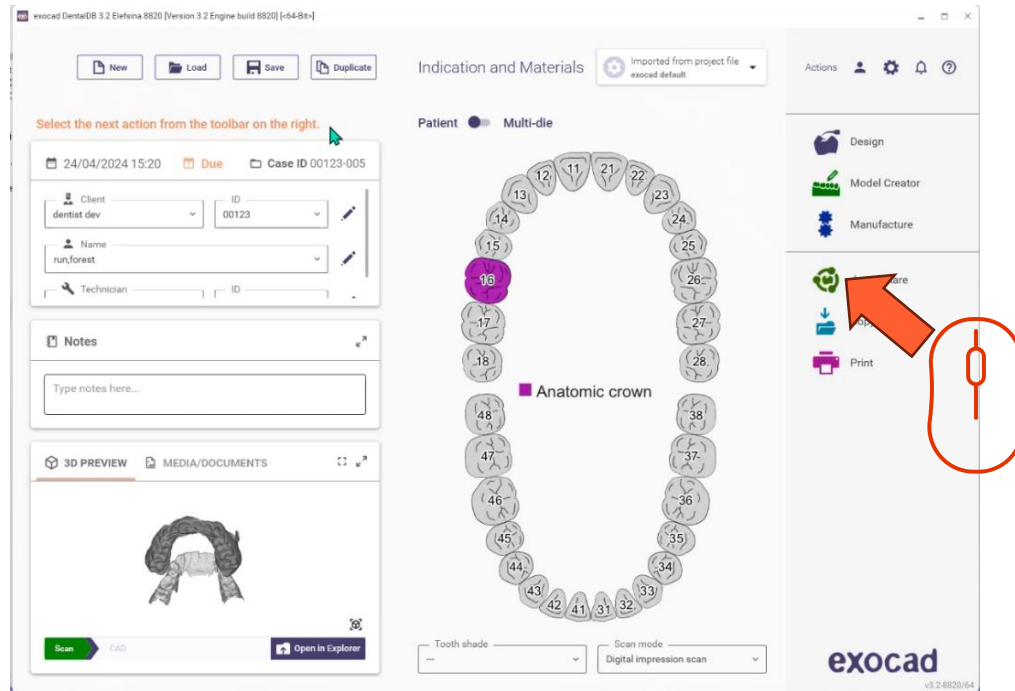

- Click the dentalshare icon

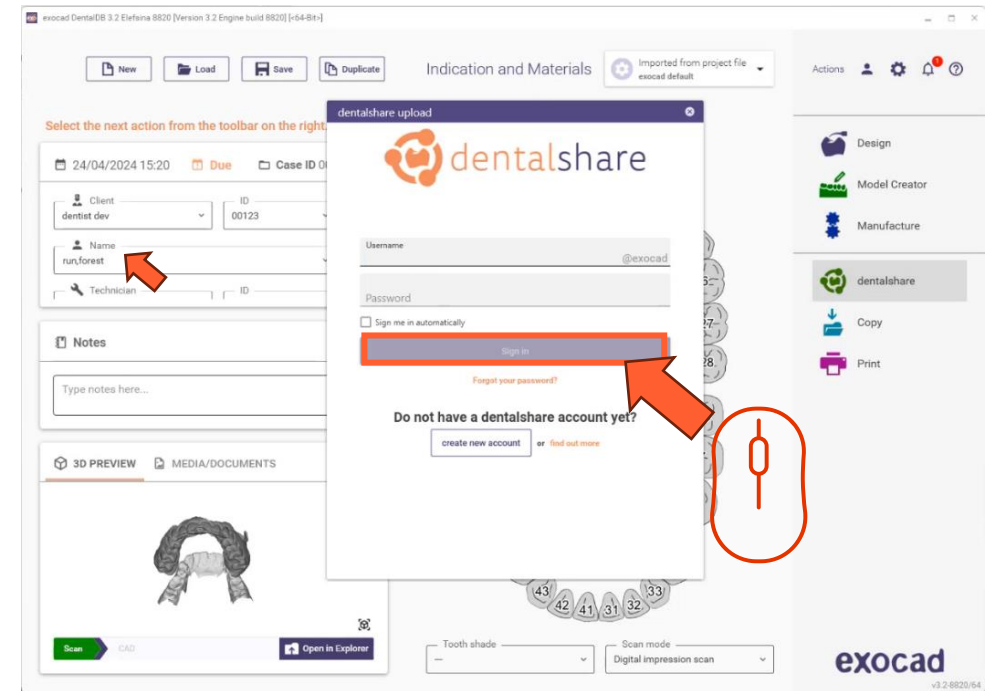


- Click on 'create account'

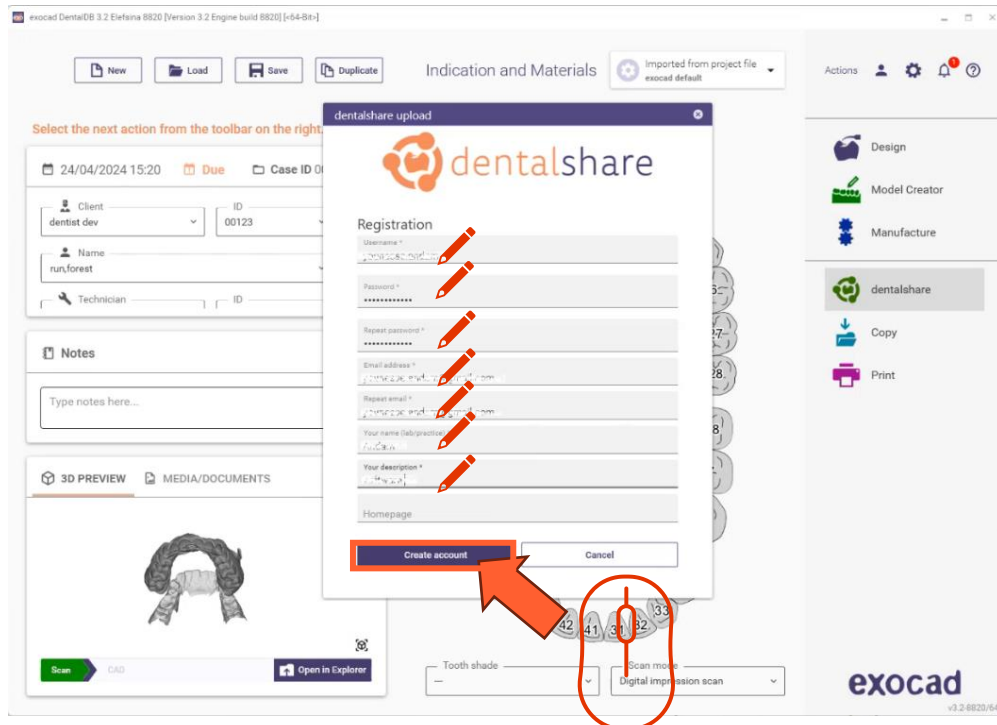


- Fill in requested information
- Click 'create account'
- An email is sent to your exocad account email


dentalshare: action required

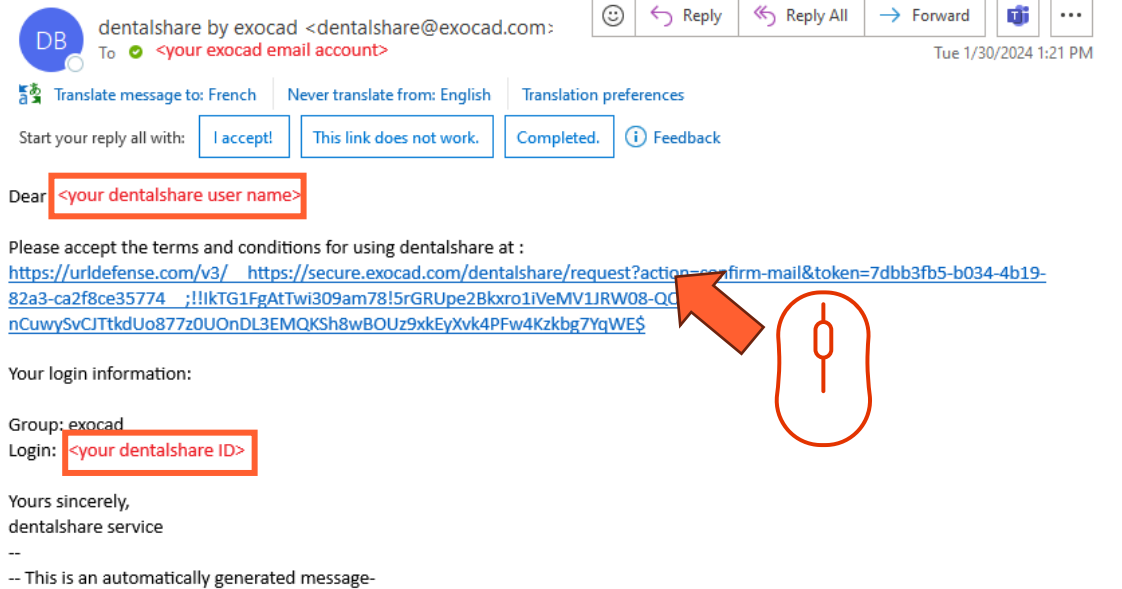

- Click on link provided in the dentalshare email to accept dentalshare terms and conditions

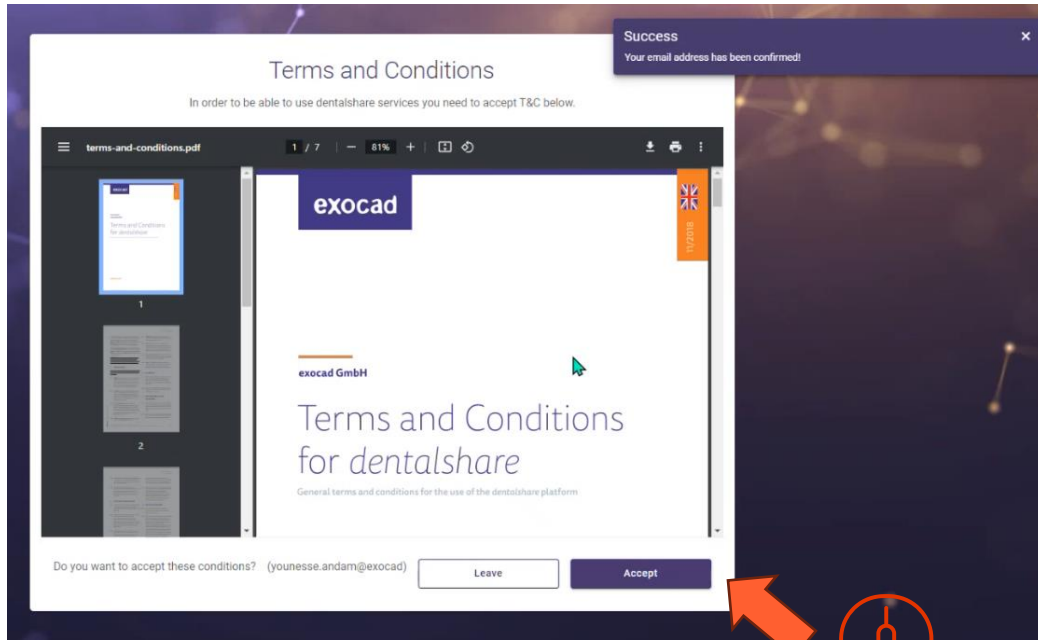


- Accept terms and conditions

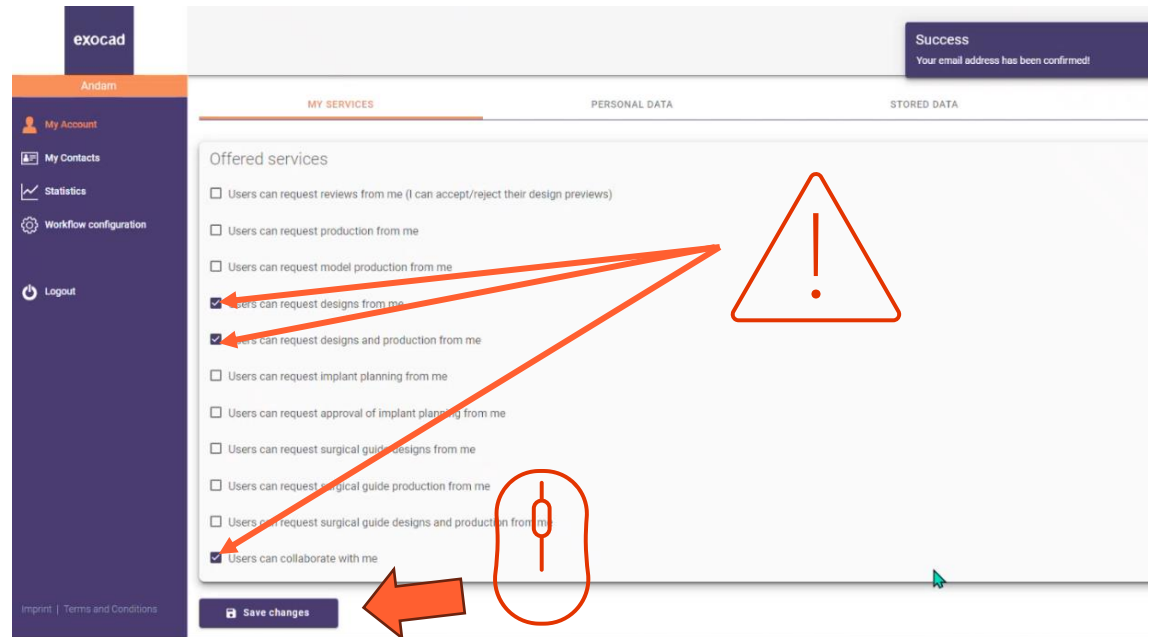


- Ensure your dentalshare account is configured to accept design requests
- Click on 'save changes'


IS Connect dentalshare setting

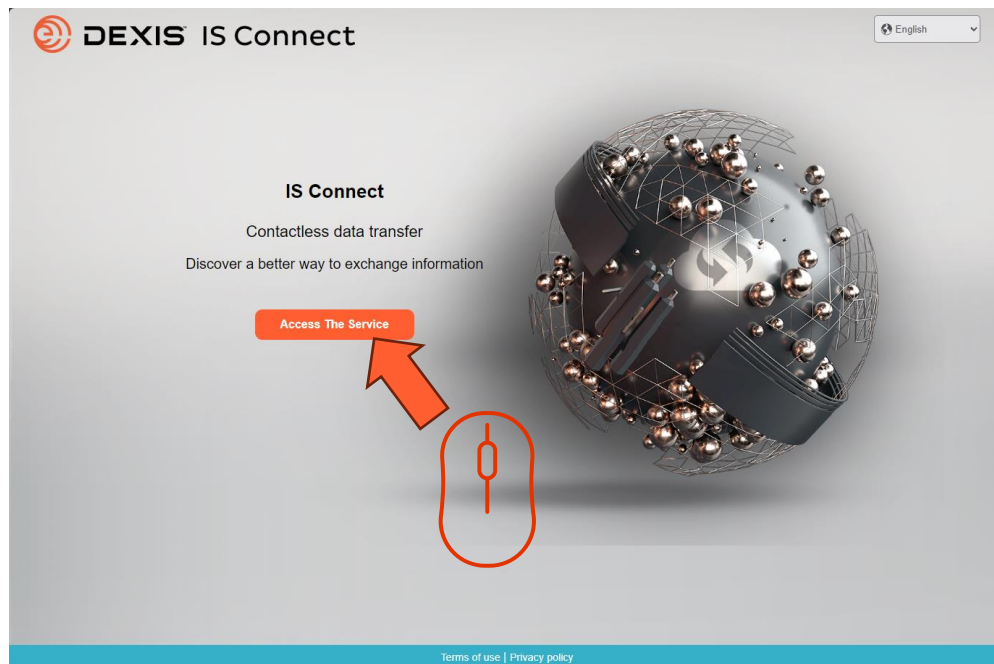


- Sign in IS Connect

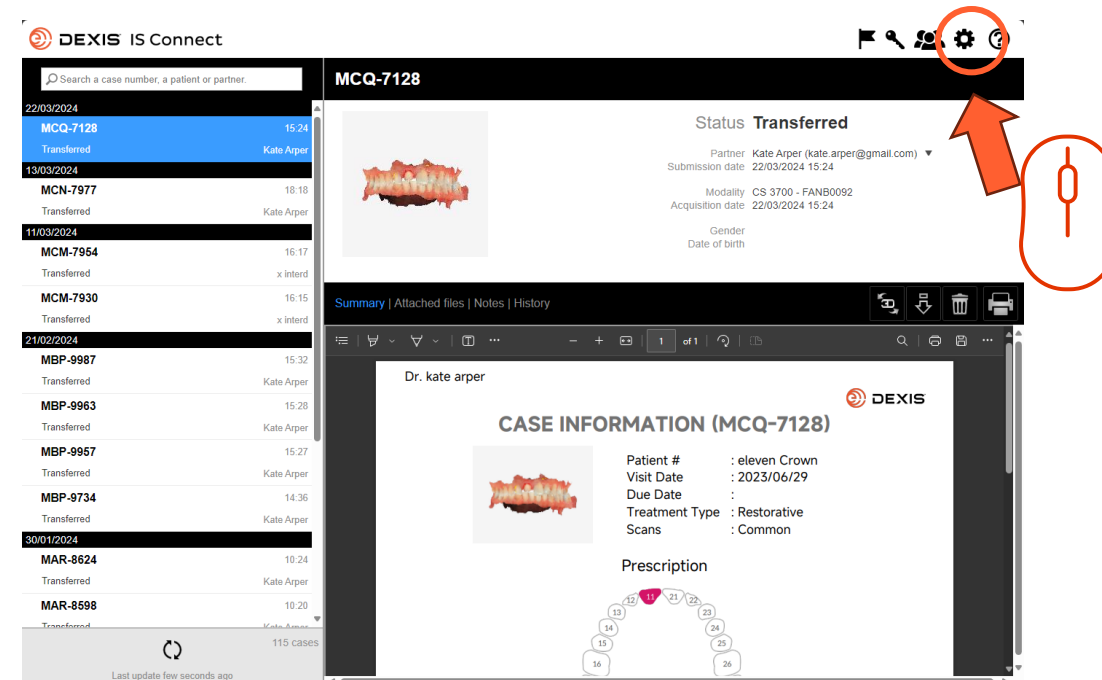


- Click on setting icon

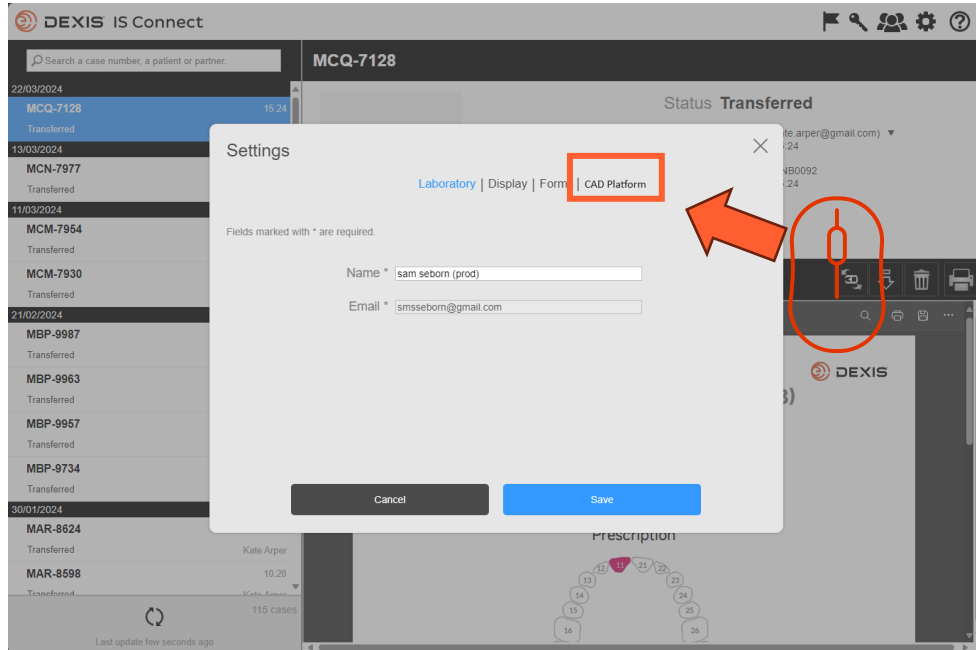


- Click on 'CAD Platform' tab

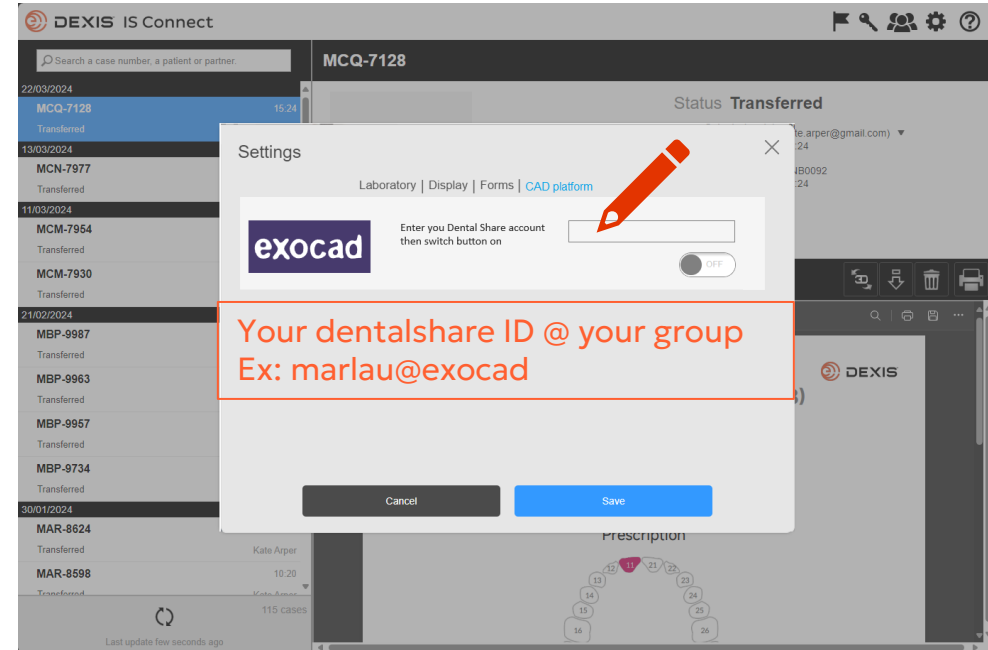

- Type your dentalshare ID

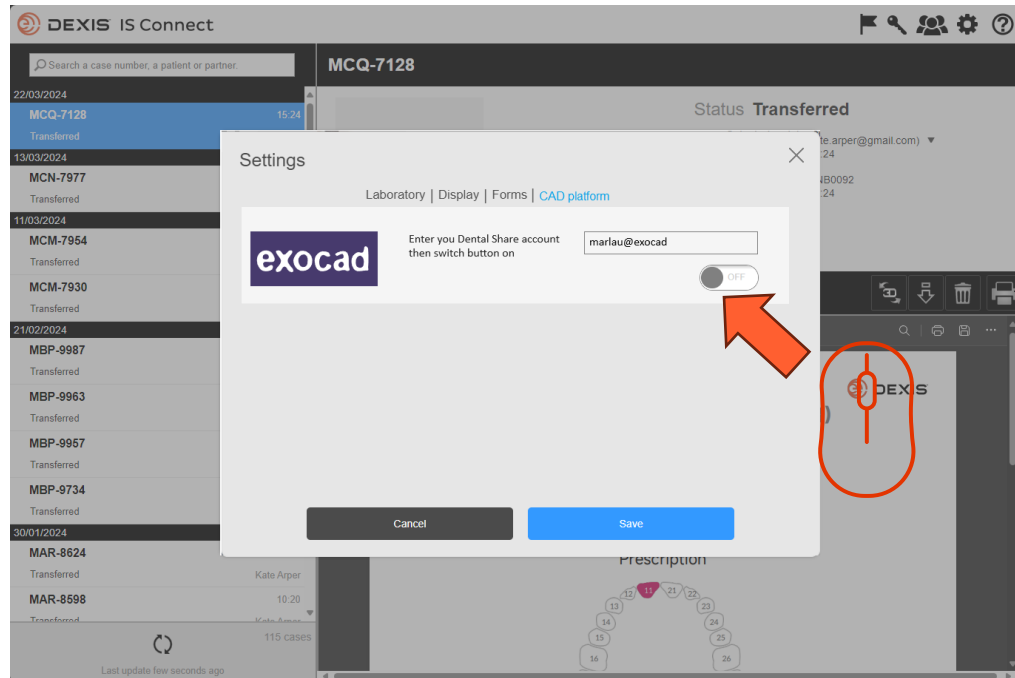


- Switch the button

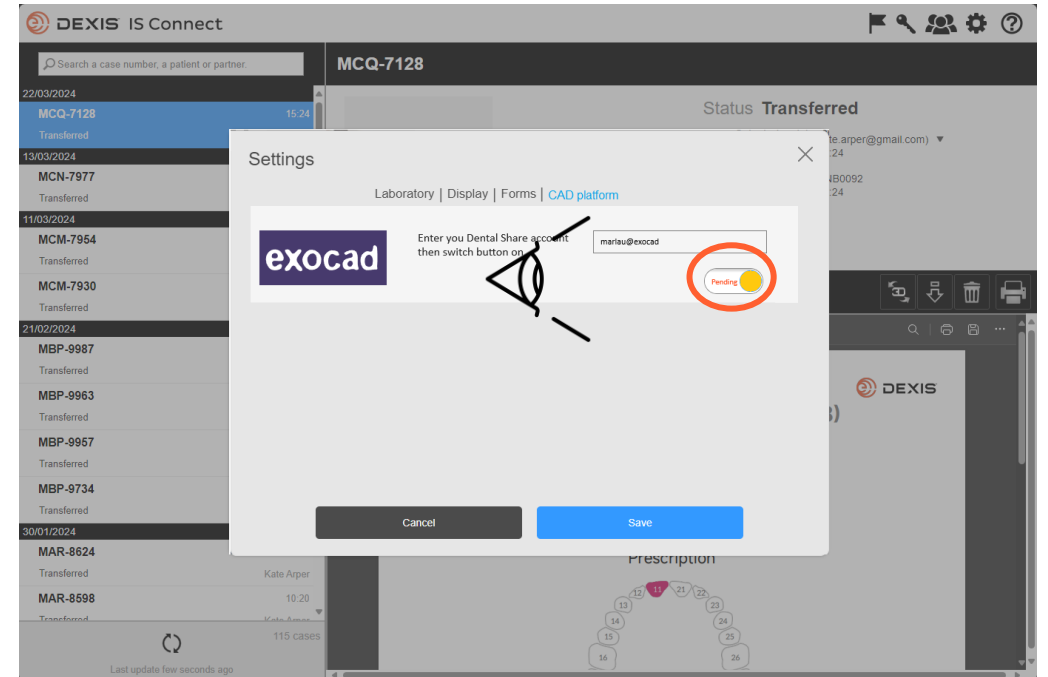

- The button changes to 'pending' state
- You may quit IS Connect and wait for a dentalshare invitation



dentalshare contact request

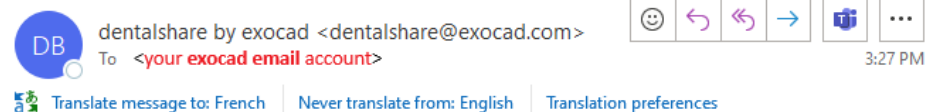

Dear <your dentalshare ID>

DEXIS IS Connect wants to offer a dentalshare community contact to you.

If you want to accept this contact, please click this link:

[https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=accept-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwi309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqibiv62VZzb3Ac\\$](https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=accept-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwi309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqibiv62VZzb3Ac$)


if you do not, please click this link:

[https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=decline-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwi309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqibiv62s4kiM30\\$](https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=decline-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwi309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqibiv62s4kiM30$)



Yours sincerely,
dentalshare service

-- This is an automatically generated message --


- You receive a dentalshare invitation from DEXIS IS Connect account
- Click on the link to accept it

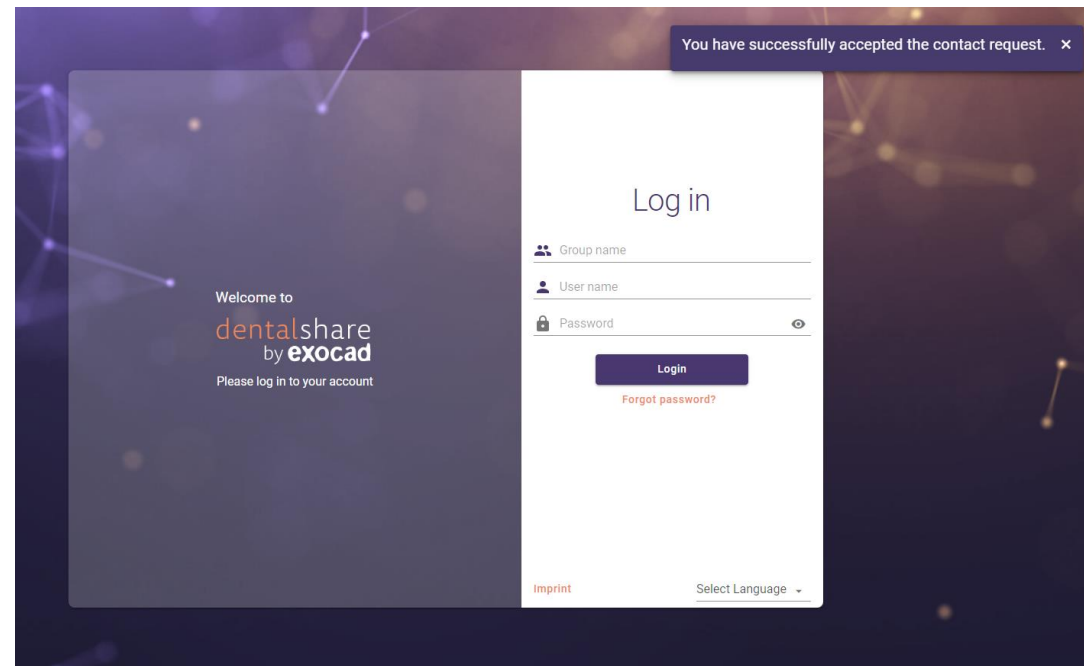


- You invitation is confirmed
- You may close the dentalshare screen

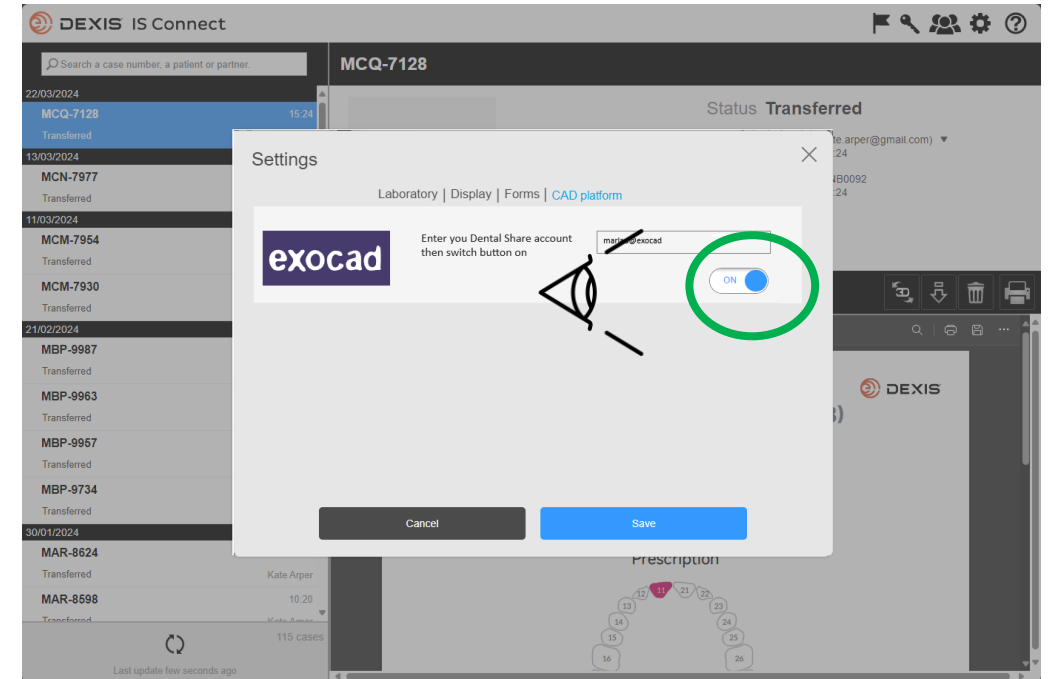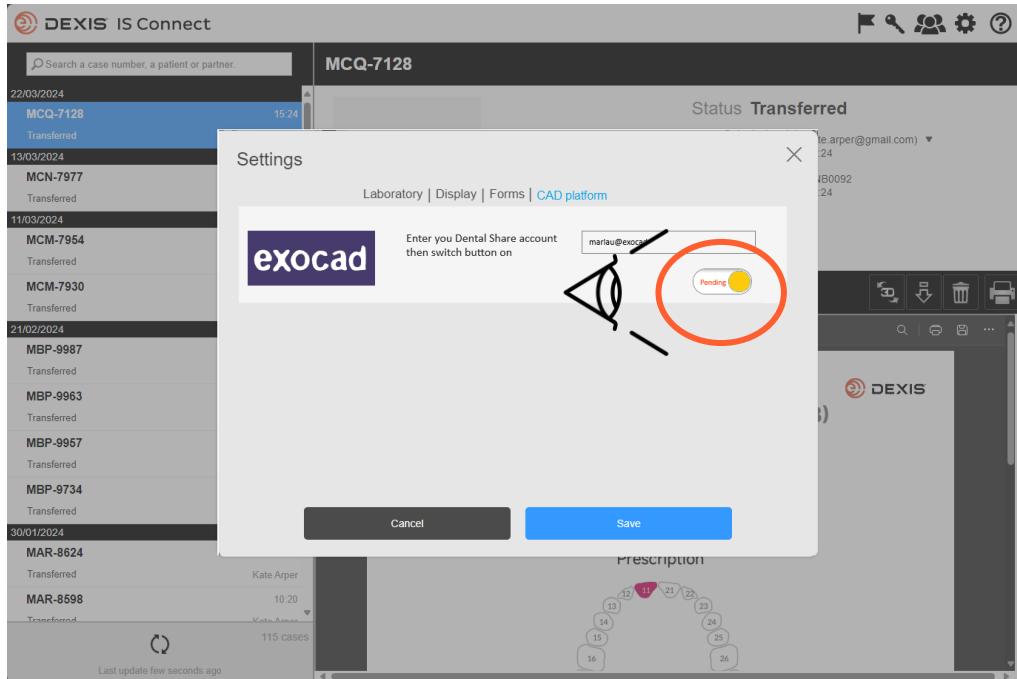

- After you have accepted the dentalshare DEXIS IS Connect invitation, the exocad button in IS Connect setting will switch from pending to 'ON'
- A delay may be observed
- The integration is now registered

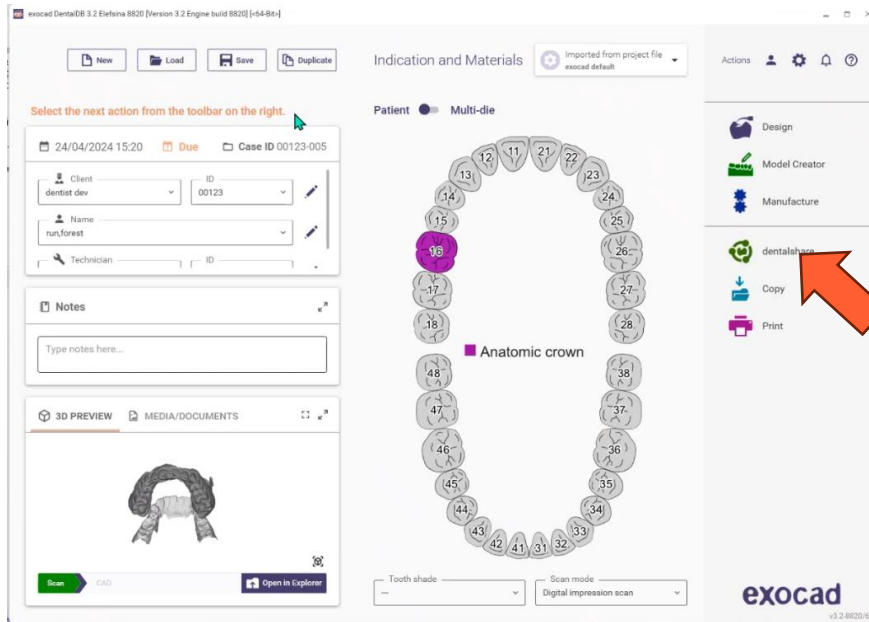


- You must be logged in dentalshare while in exocad DB to make the integration active

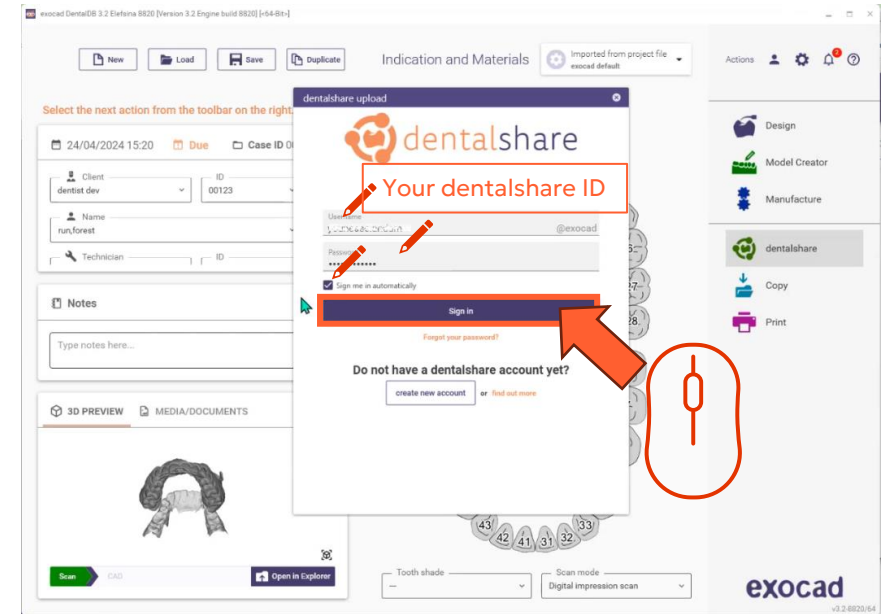

- Sign in dentalshare from exocad DB with your dentalshare ID and select 'sign in automatically'


- Dentalshare opens, you may close it
- IS Connect cases sent to your lab will now be delivered as dental project imported into your exocad DB

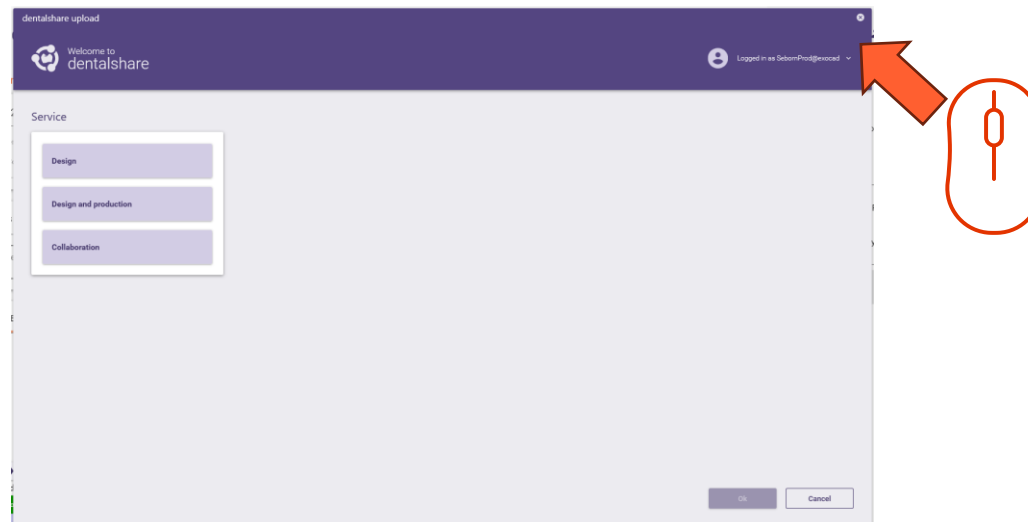




Instructions pour l'intégration DEXIS-exocad


Comptes nécessaires

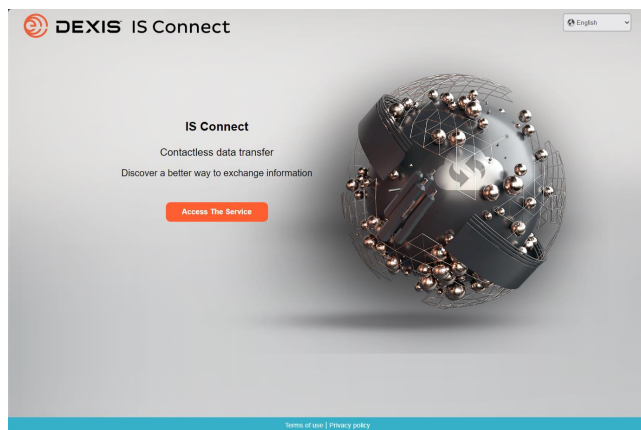

☐ IS Connect

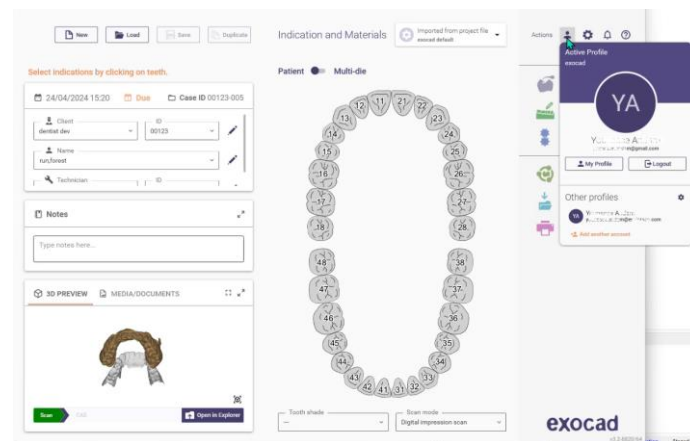


☐ exocad DB

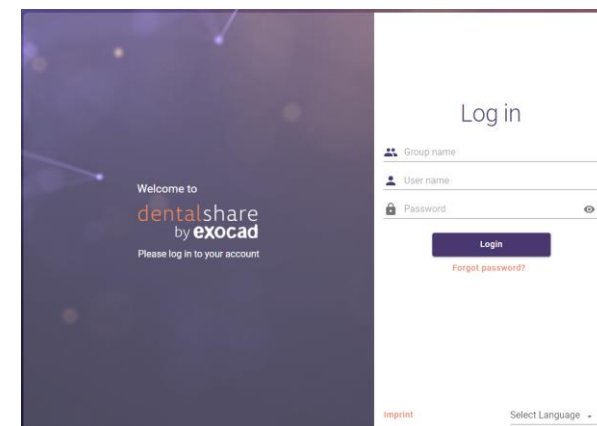


☐ exocad dentalshare

Avez-vous un compte dentalshare ?

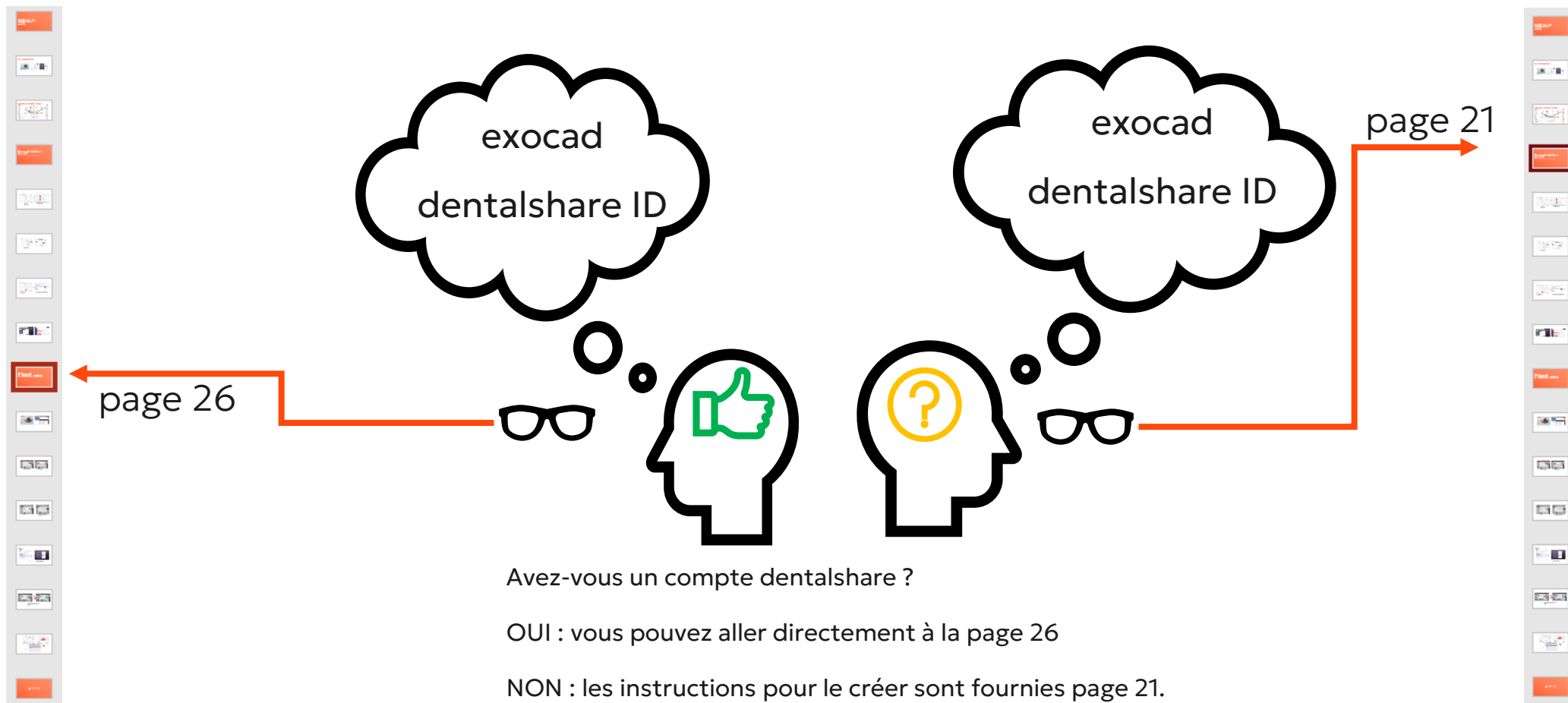


https://wiki.exocad.com/wiki/index.php/Signing_up_to_Dentalshare


Créer un identifiant dentalshare

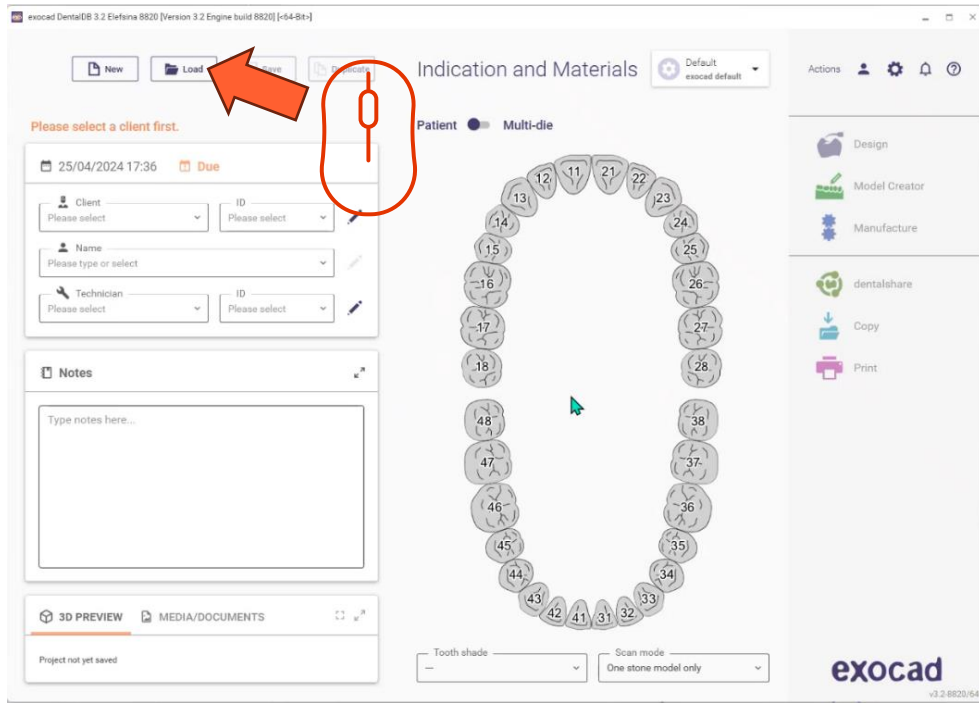


- Ouvrir la DB exocad
- Cliquez sur le bouton charger

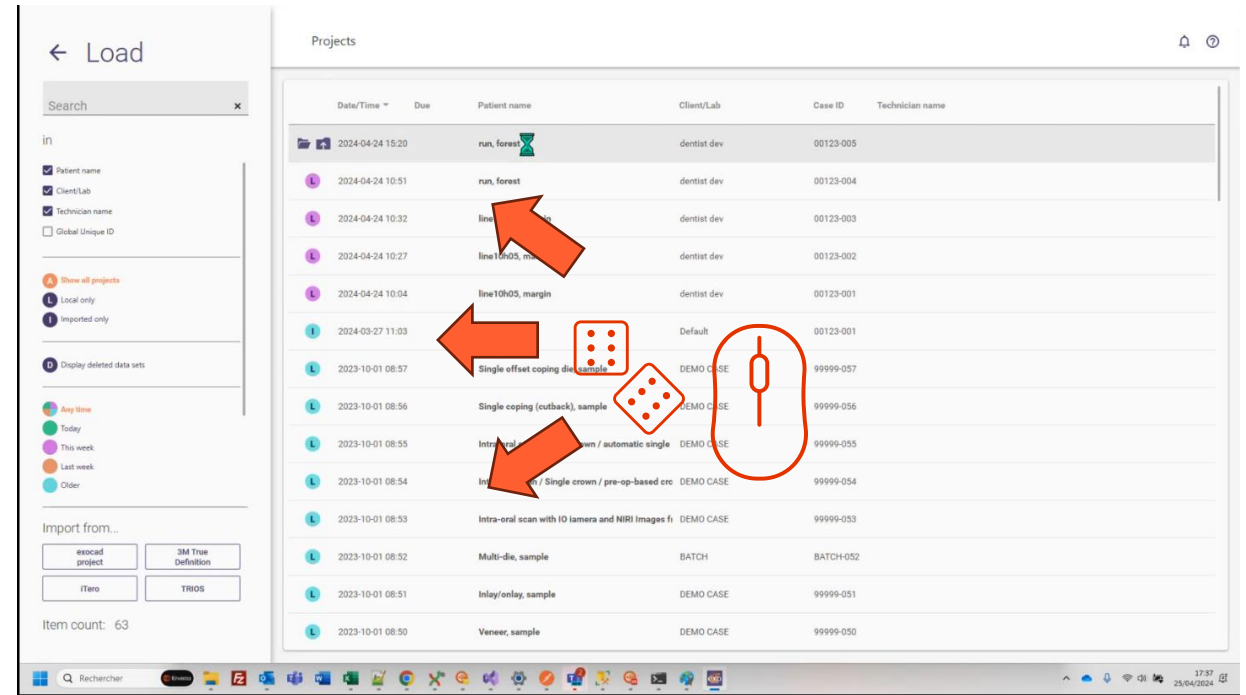


- Sélectionnez n'importe quel projet et chargez-le

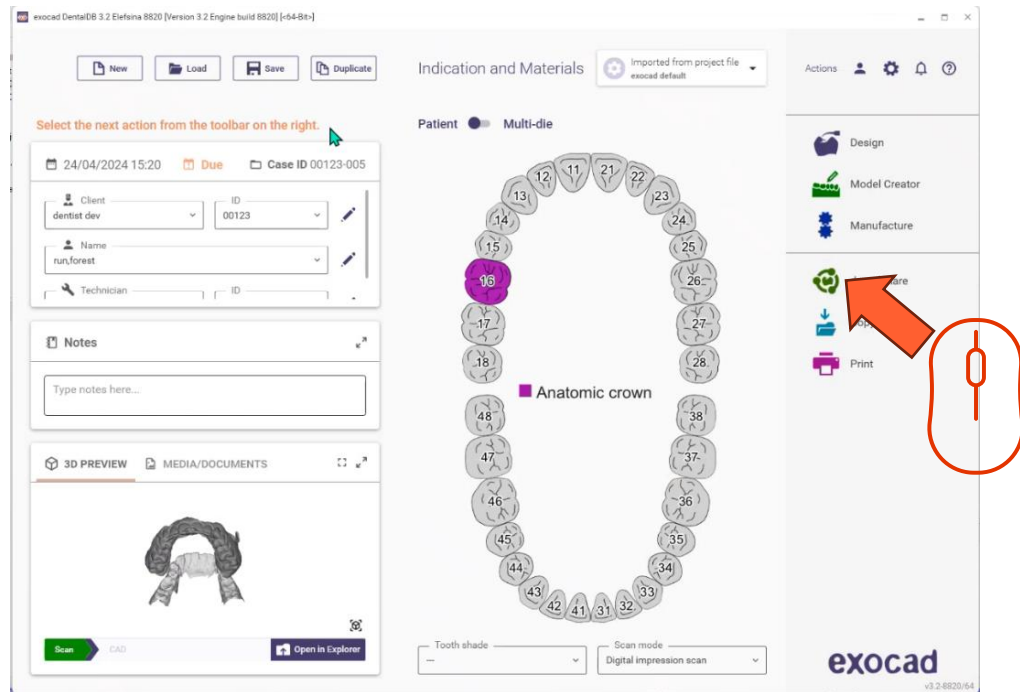


- Cliquez sur l'icône dentalshare

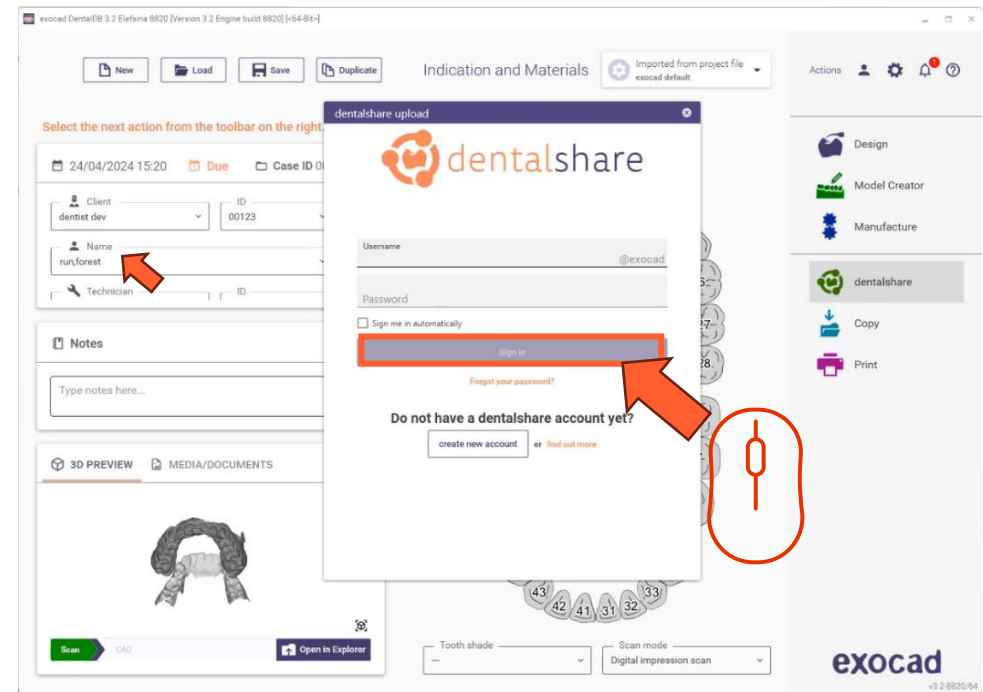


- Cliquez sur 'créer un compte'

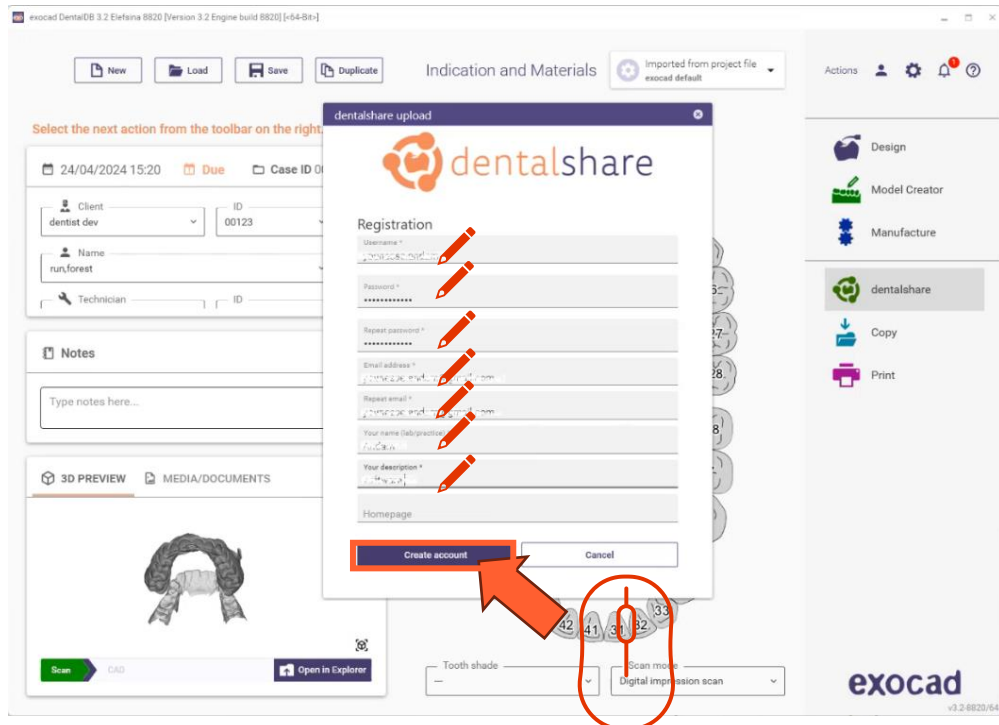


- Remplir les informations demandées
- Cliquez sur « créer un compte ».
- Un courriel est envoyé à l'adresse de votre compte exocad.

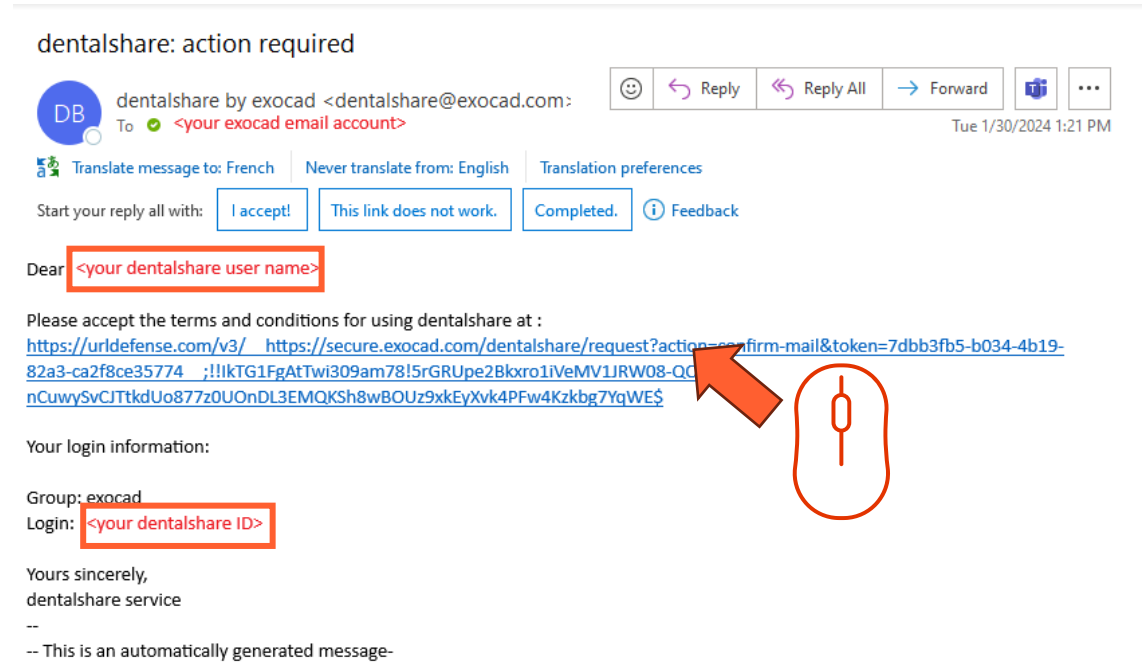

- Cliquez sur le lien fourni dans le courriel de dentalshare pour accepter les termes et conditions de dentalshare

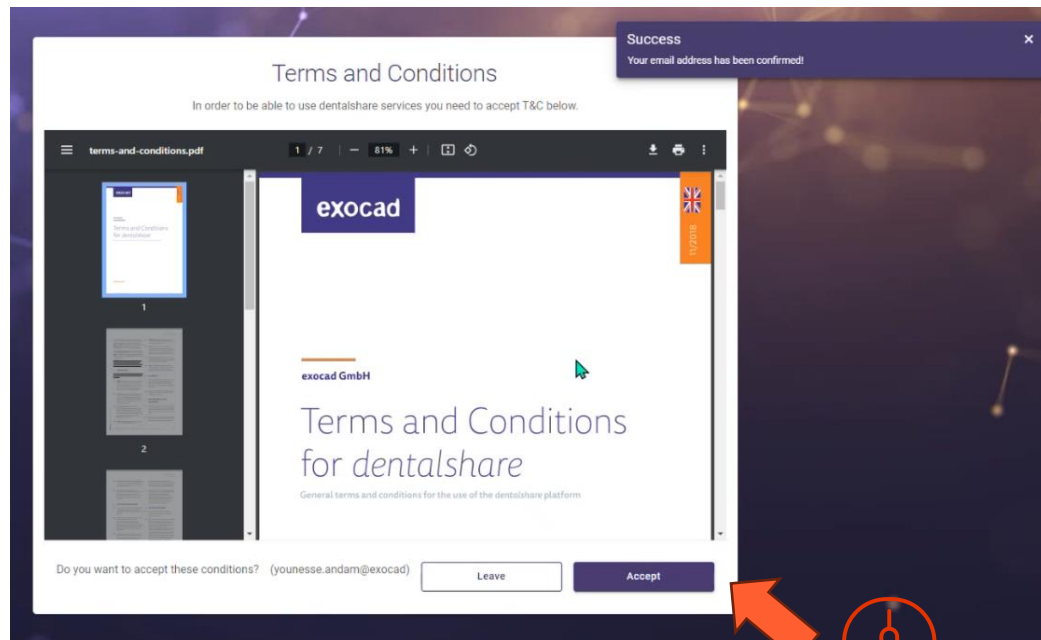


- Accepter les termes et conditions

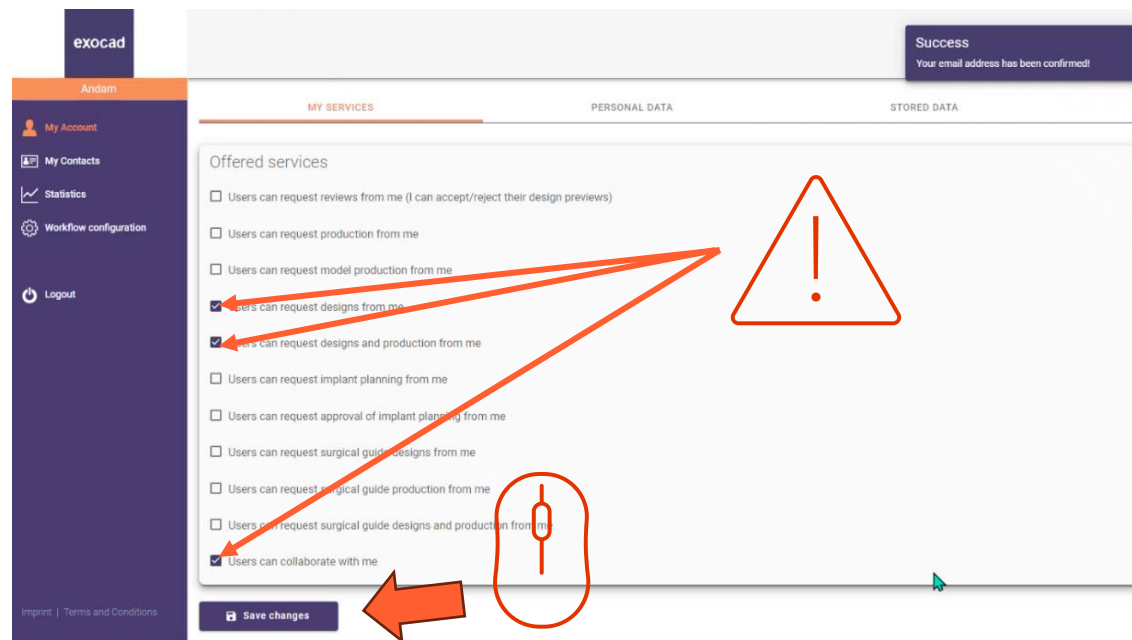


- Assurez-vous que votre compte dentalshare est configuré pour accepter les demandes de conception.
- Cliquez sur « enregistrer les changements »


Activer l'intégration exocad dans IS Connect

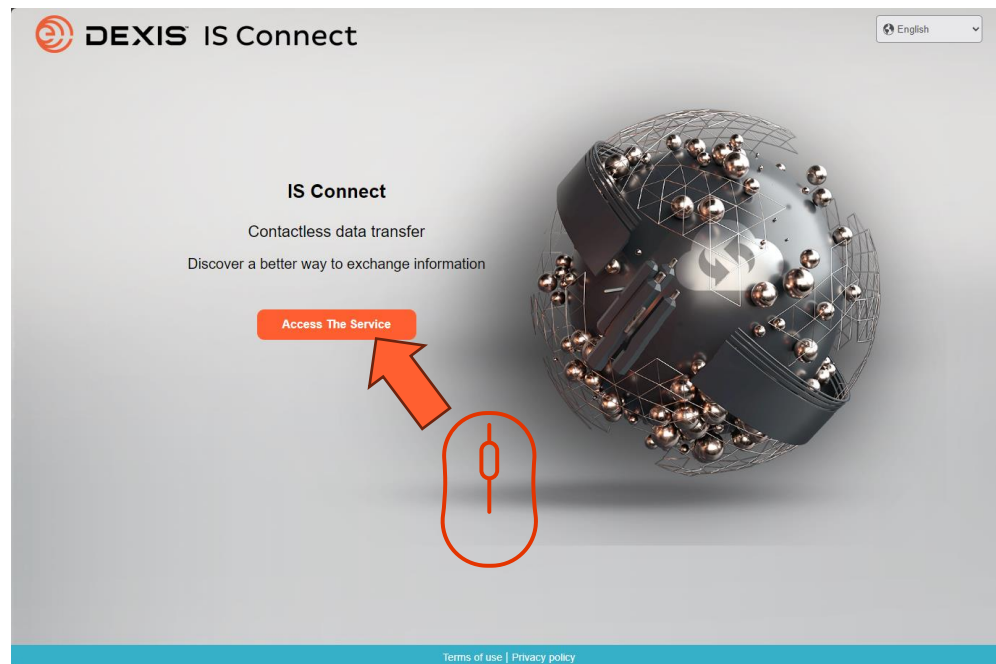


- Connectez-vous à IS Connect

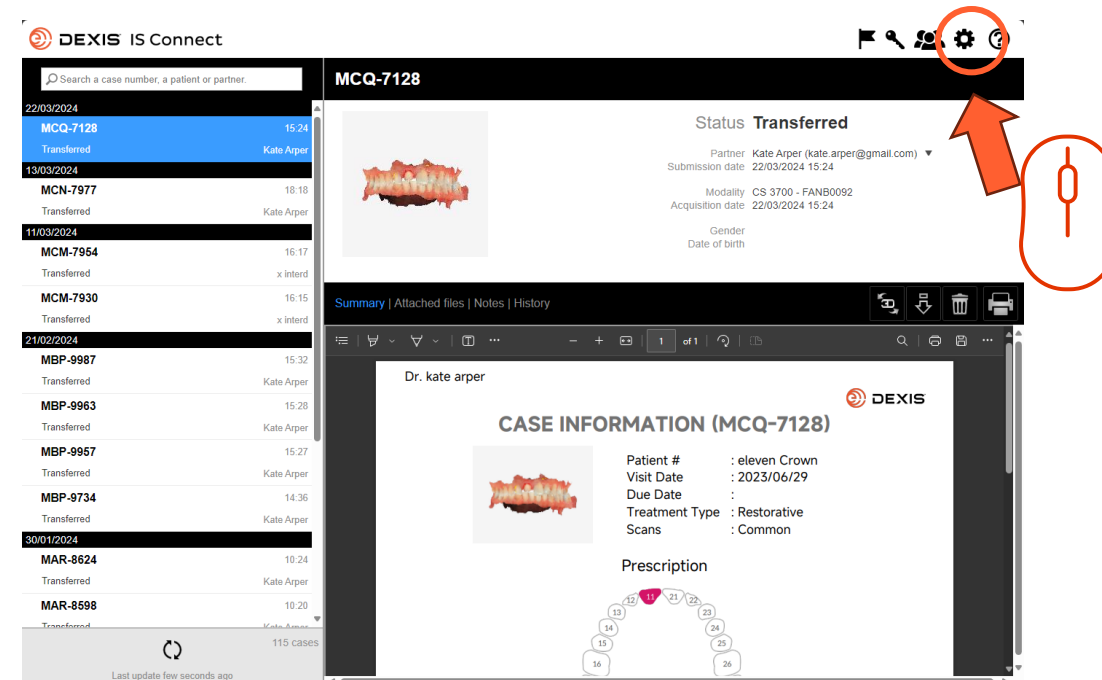


- Cliquez sur l'icône des paramètres

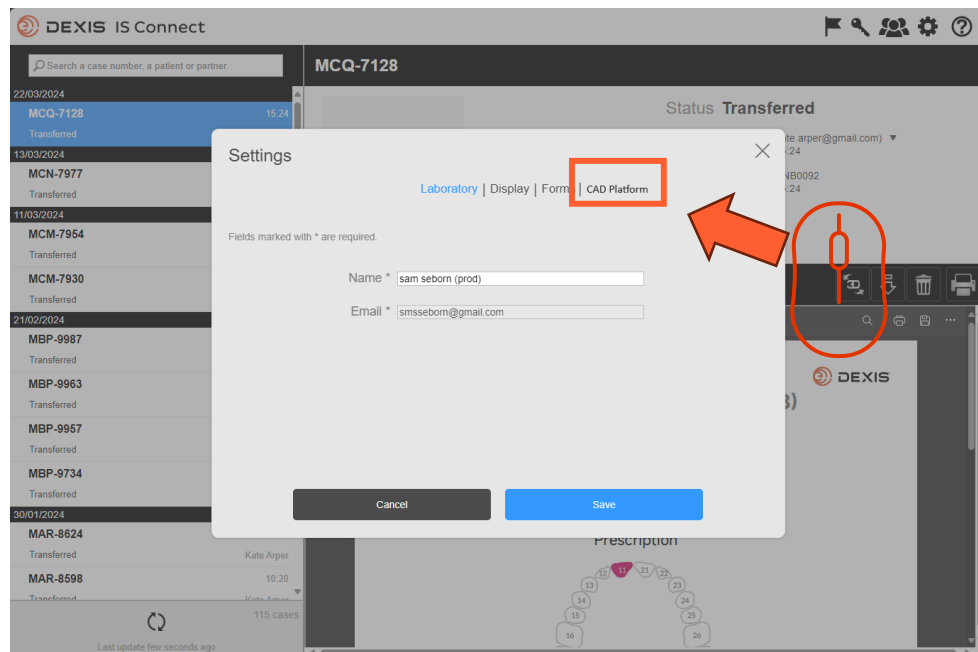


- Cliquez sur l'onglet 'CAD Platform'

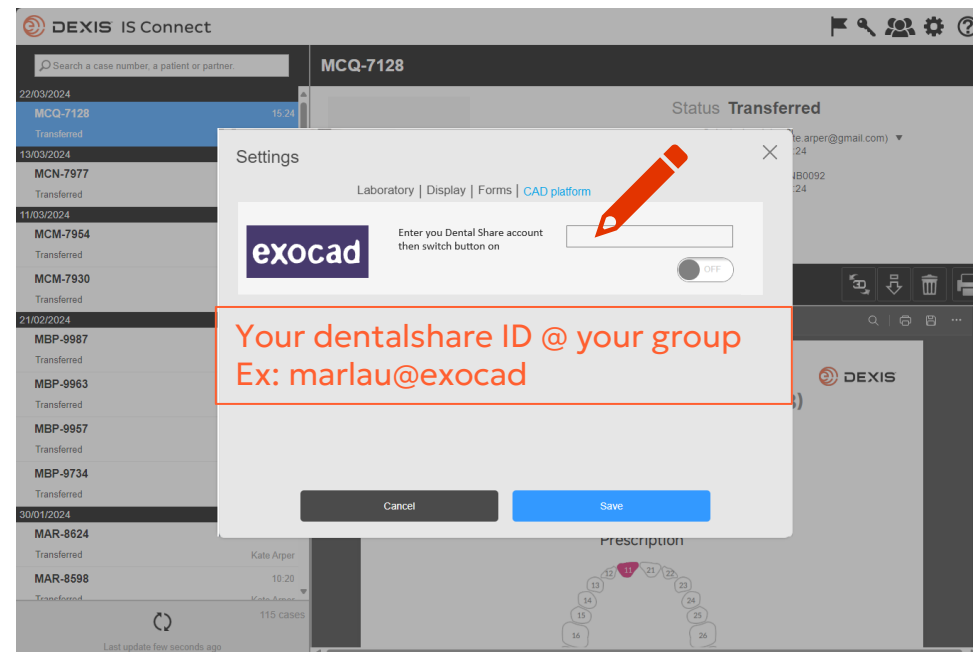

- Tapez votre ID dentalshare

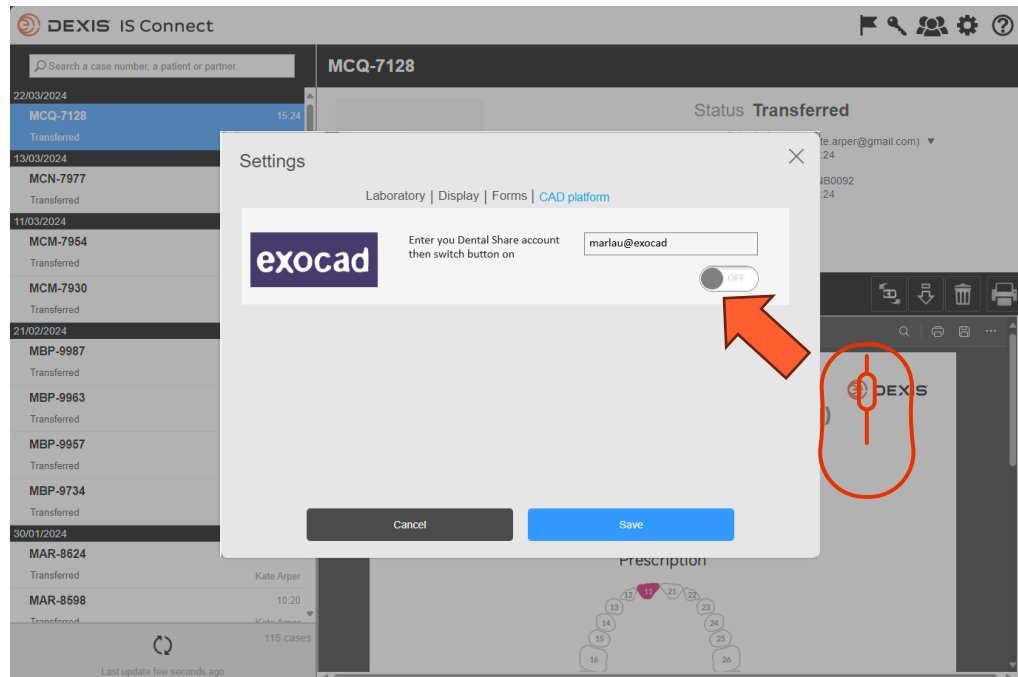


- Appuyer sur le bouton

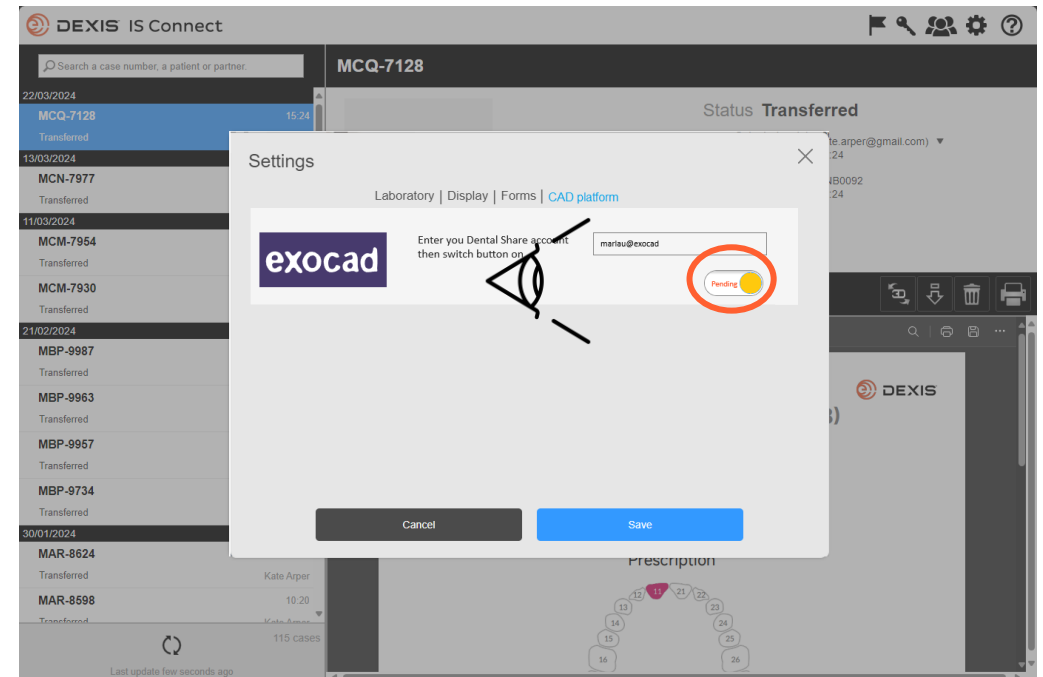

- Le bouton passe à l'état « en attente ».
- Vous pouvez quitter IS Connect et attendre une invitation dentalshare.



dentalshare contact request

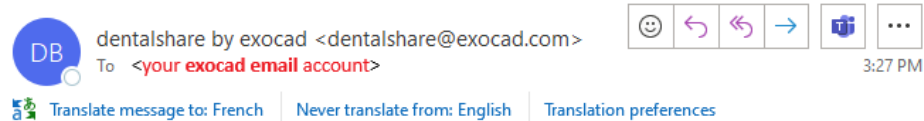

Dear <your dentalshare ID>

DEXIS IS Connect wants to offer a dentalshare community contact to you.

If you want to accept this contact, please click this link:

[https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=accept-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62VZzb3Ac\\$](https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=accept-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62VZzb3Ac$)


if you do not, please click this link:

[https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=decline-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62s4kiM30\\$](https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=decline-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62s4kiM30$)



Yours sincerely,
dentalshare service

-- This is an automatically generated message --



- Vous recevez une invitation dentalshare du compte DEXIS IS Connect
- Cliquez sur le lien pour l'accepter

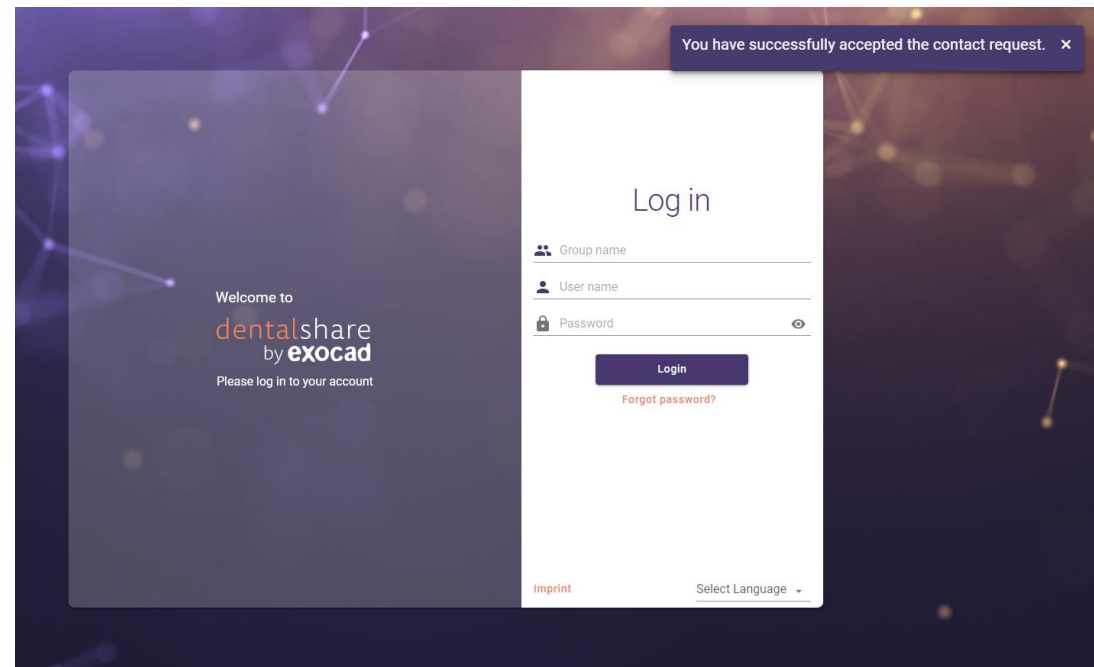

- Votre invitation est confirmée
- Vous pouvez fermer les écrans dentalshare

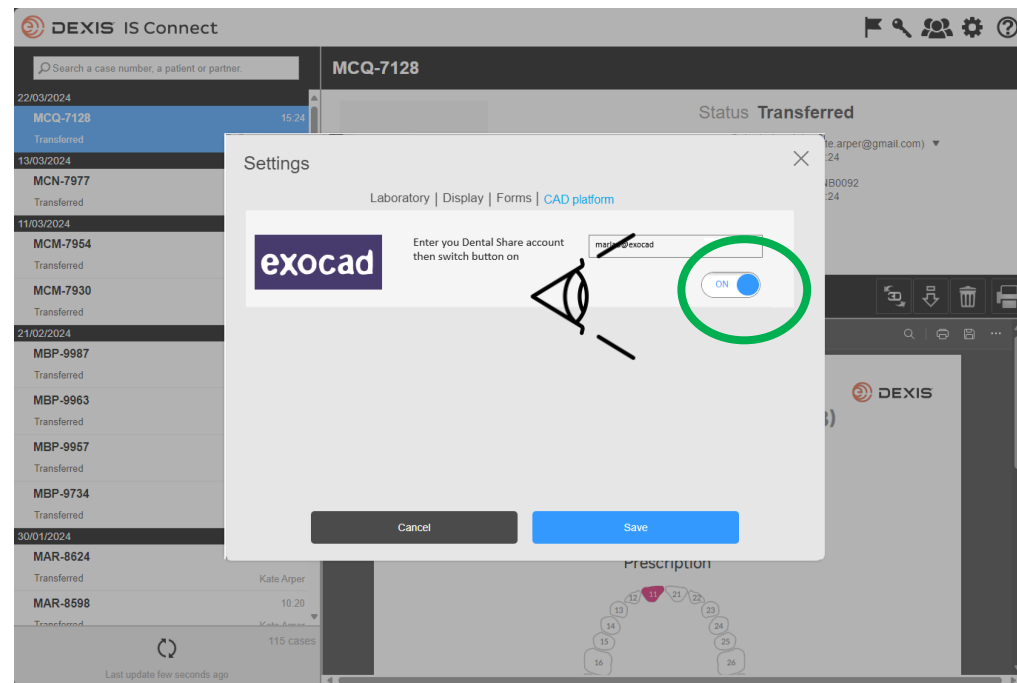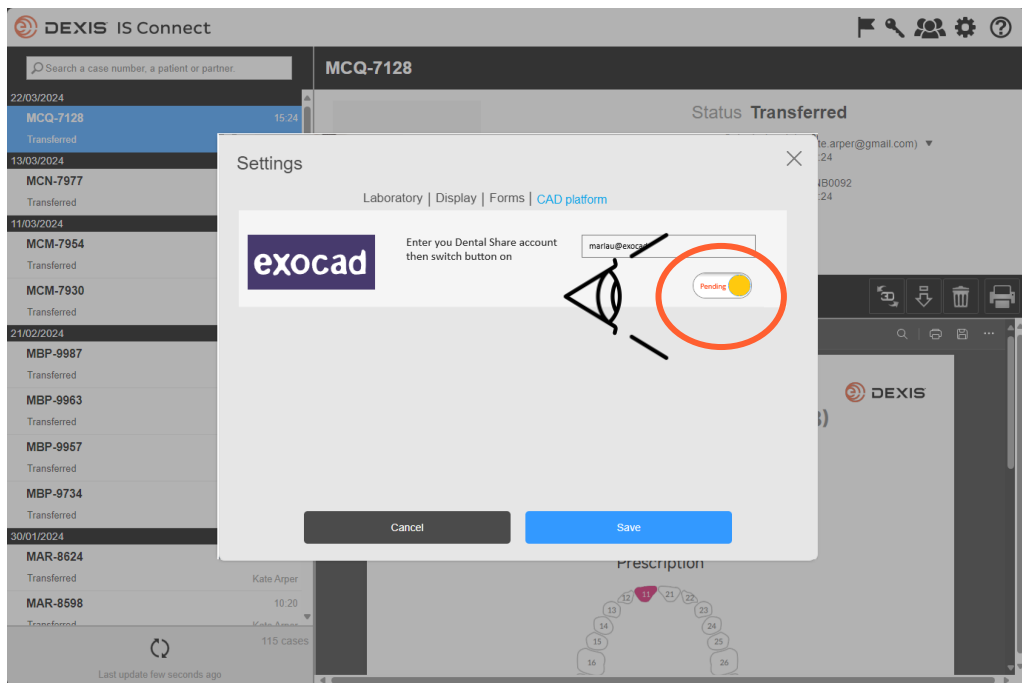


- Après avoir accepté l'invitation dentalshare DEXIS IS Connect, le bouton exocad dans les paramètres d'IS Connect passera de « en attente » à « activé ».
- Un délai peut être observé.
- L'intégration est maintenant enregistrée

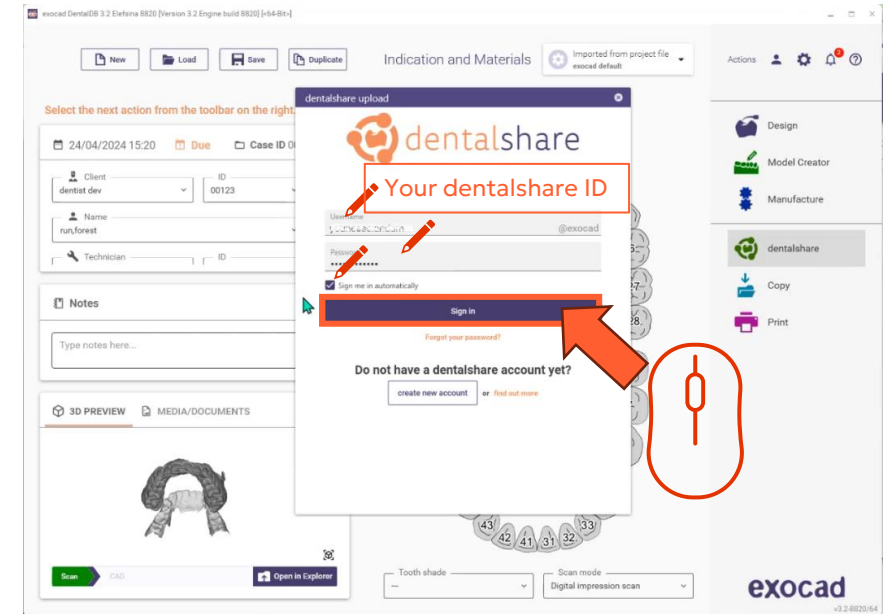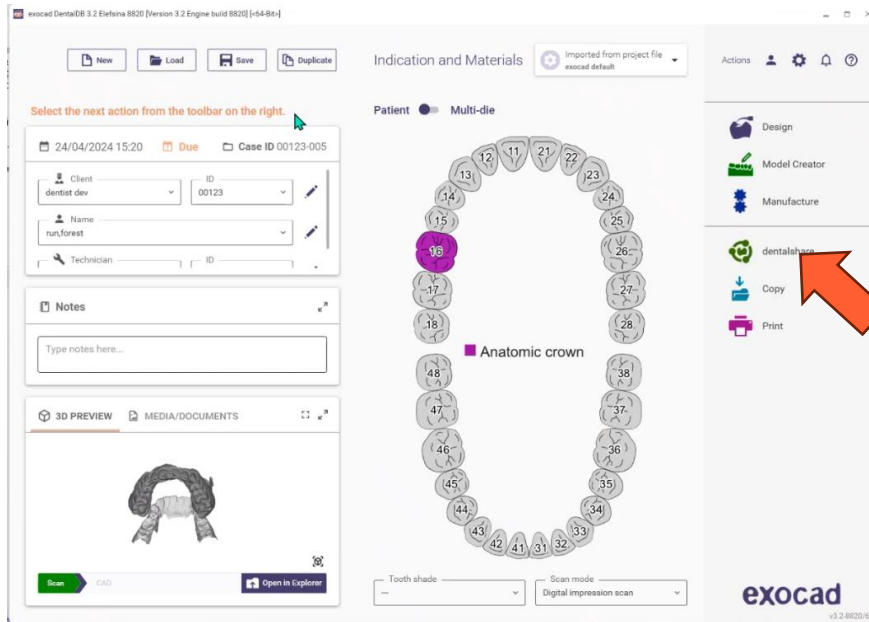

- Vous devez être connecté à dentalshare pendant que vous êtes dans la DB exocad pour rendre l'intégration active.

- Connectez-vous à dentalshare à partir d'exocad DB avec votre ID dentalshare et sélectionnez 'sign in automatically'.


- Dentalshare s'ouvre, vous pouvez le fermer.
- Les cas envoyés à votre laboratoire sont désormais délivrés au format .dentalproject et importés dans exocad

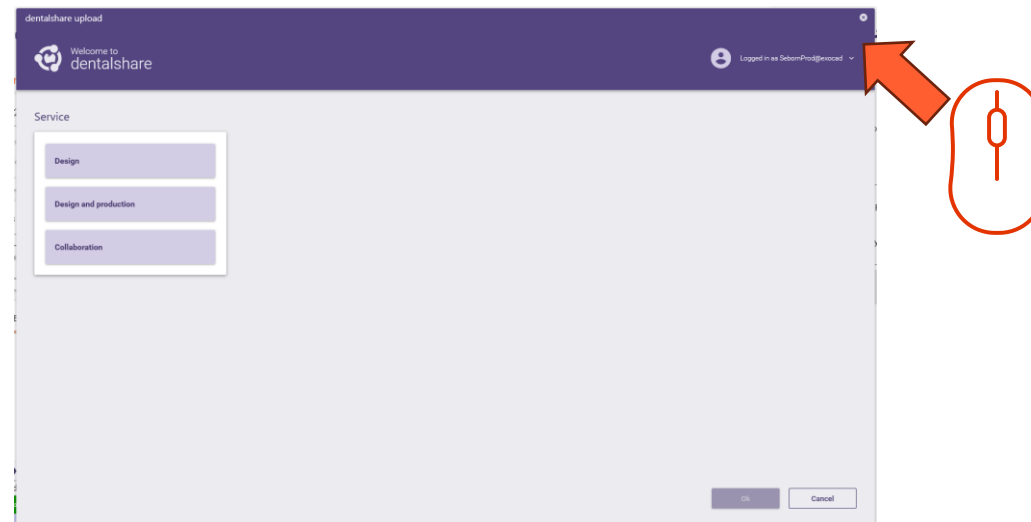




Instrucciones de integración DEXIS-exocad


Cunta necesaria

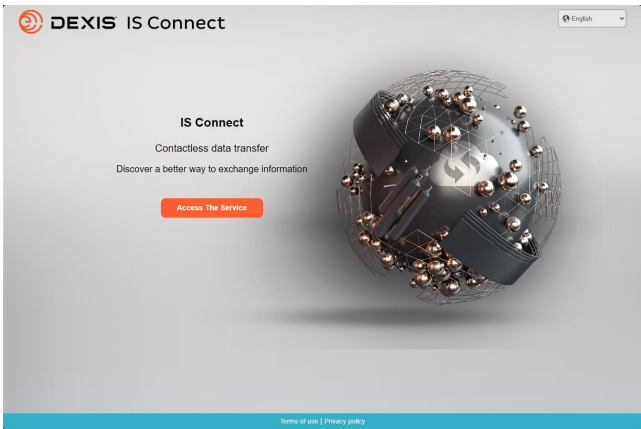

☐ IS Connect

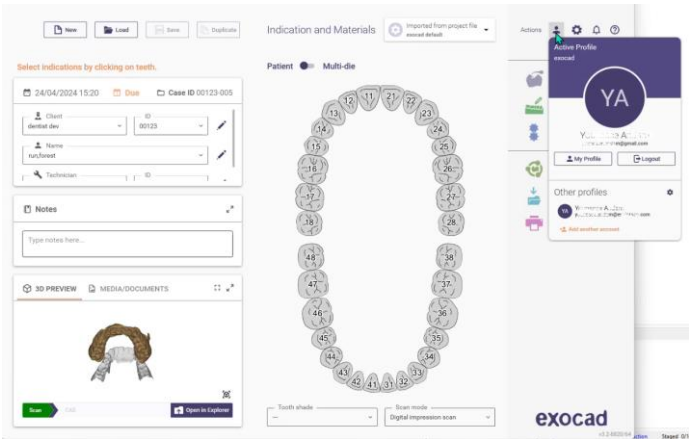


☐ exocad DB

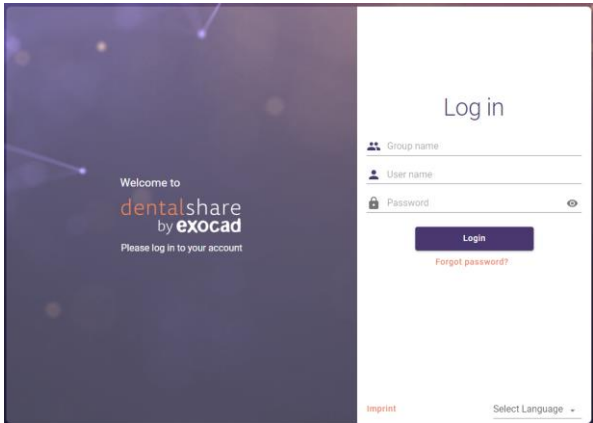

☐ exocad dentalshare

¿Tiene una cuenta dentalshare?

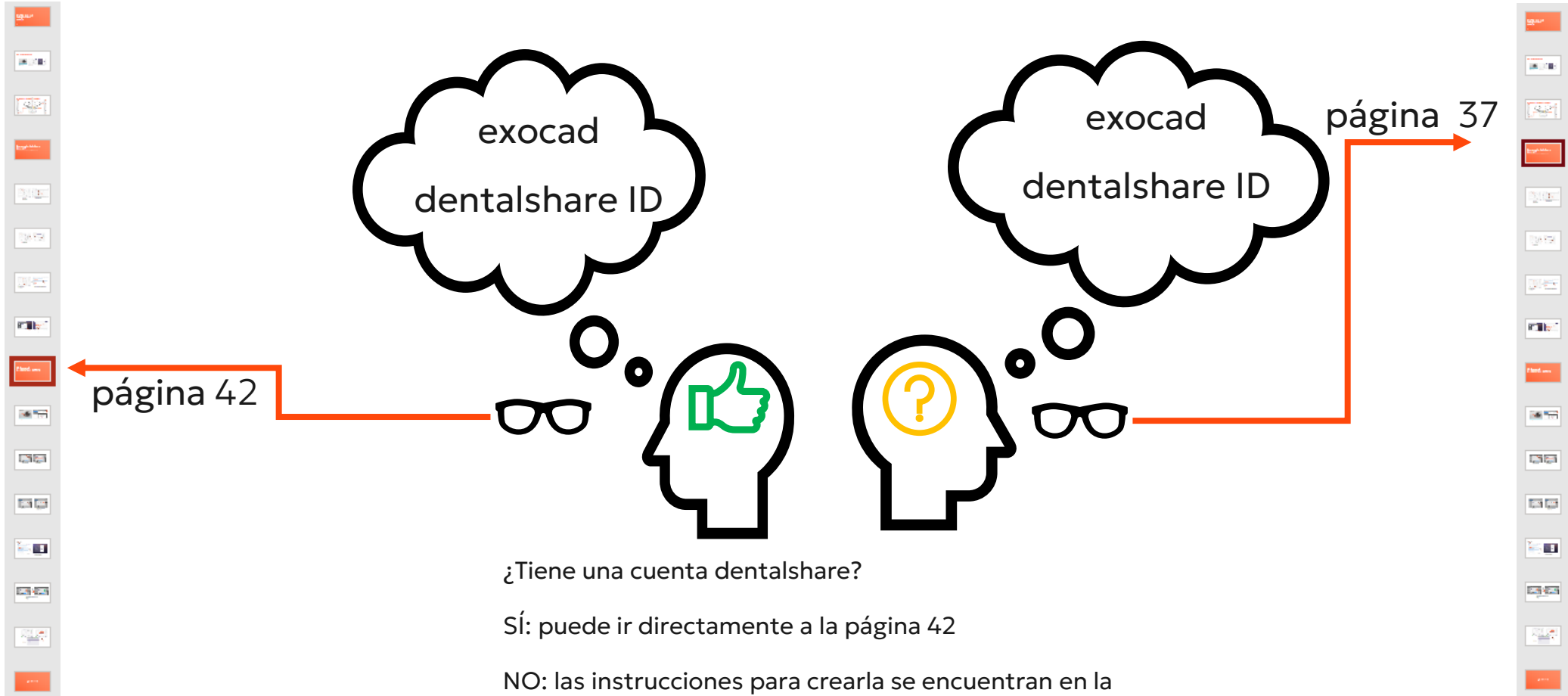


¿Tiene una cuenta dentalshare?

SÍ: puede ir directamente a la página 42


NO: las instrucciones para crearla se encuentran en la página 37. También puede visitar

https://wiki.exocad.com/wiki/index.php/Signing_up_to_Dentalshare


Crear un dentalshare ID

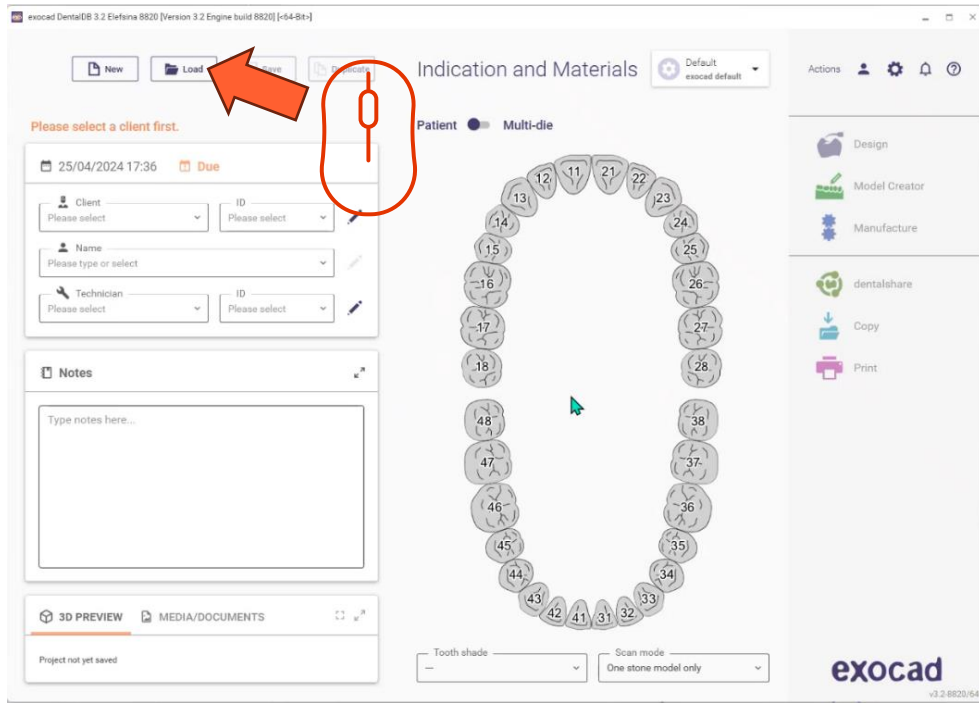


- Abrir exocad DB
- Haga clic en el botón cargar

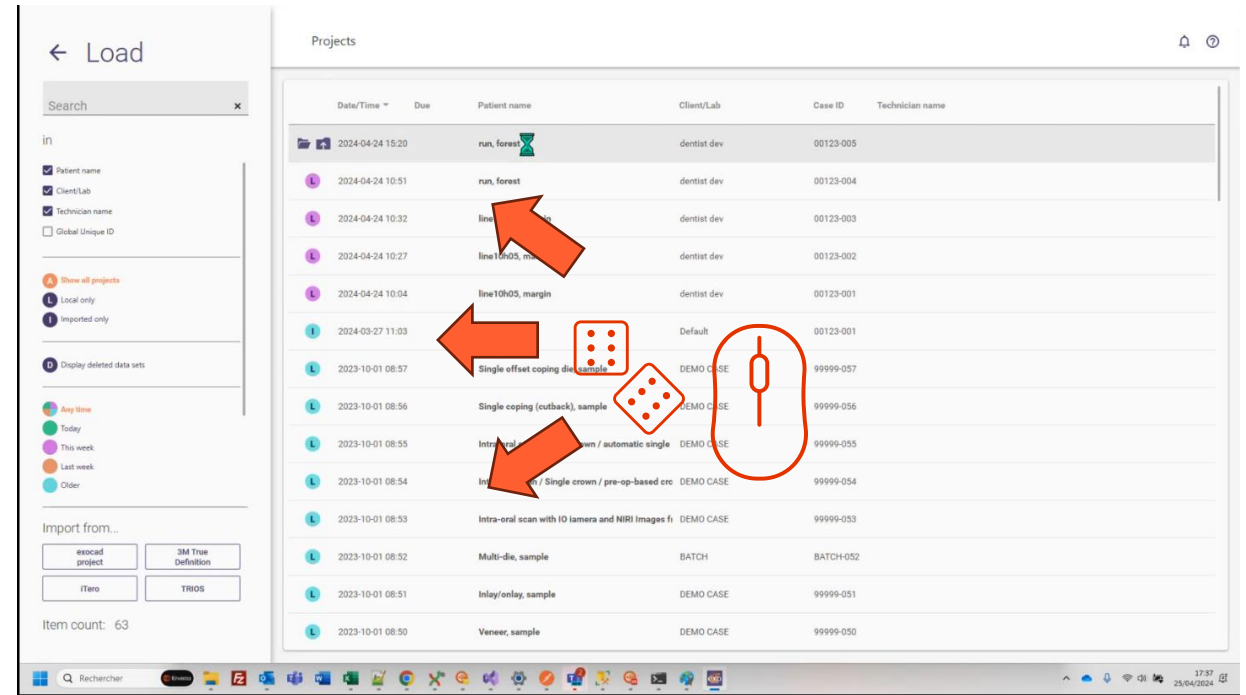


- Seleccione cualquier proyecto y cárguelo

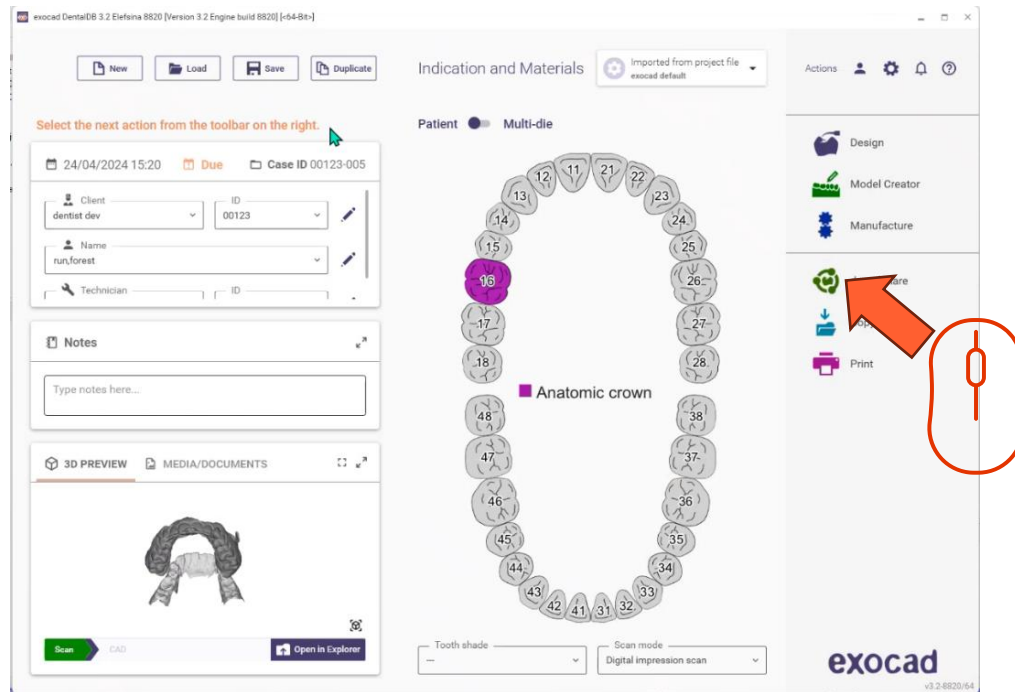


- Haga clic en el icono dentalshare

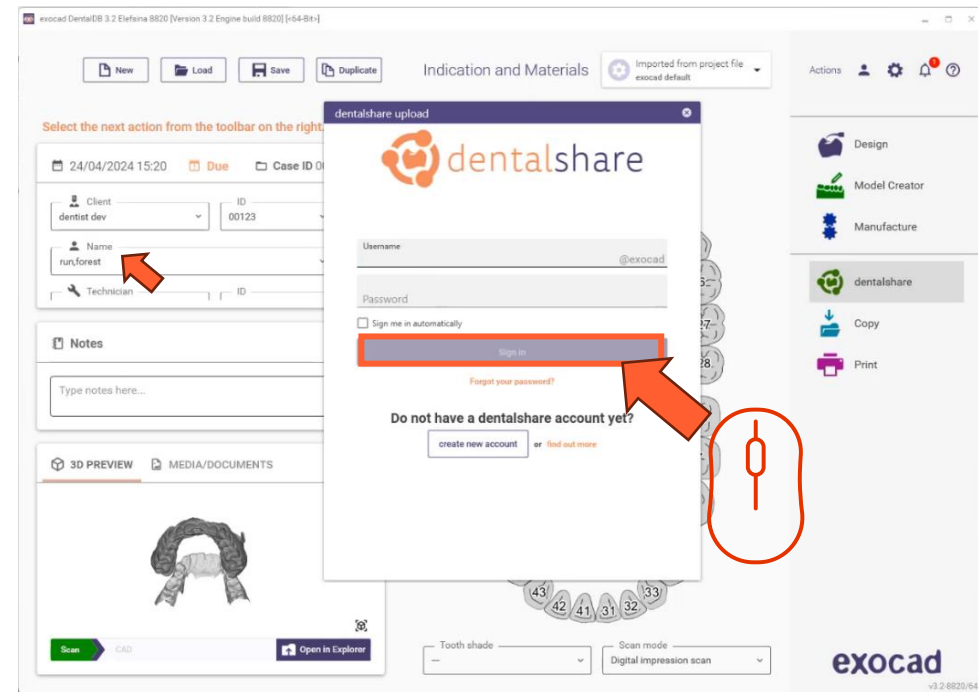


- Haga clic en 'crear cuenta'

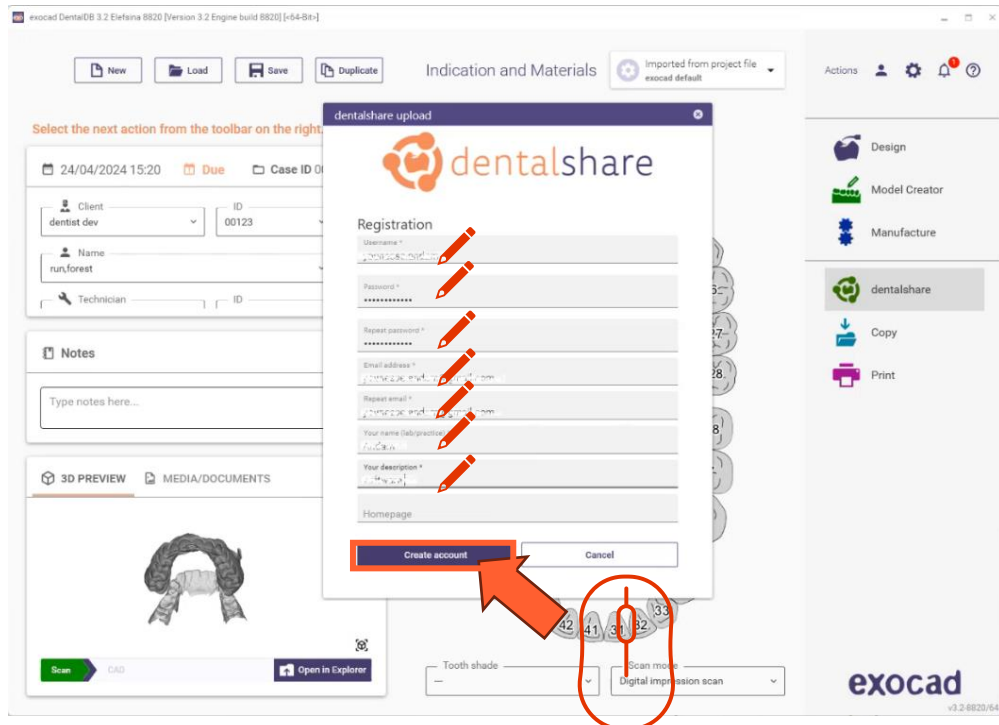


- Rellene la información solicitada
- Haga clic en “crear cuenta”
- Se enviará un correo electrónico a la dirección de su cuenta exocad

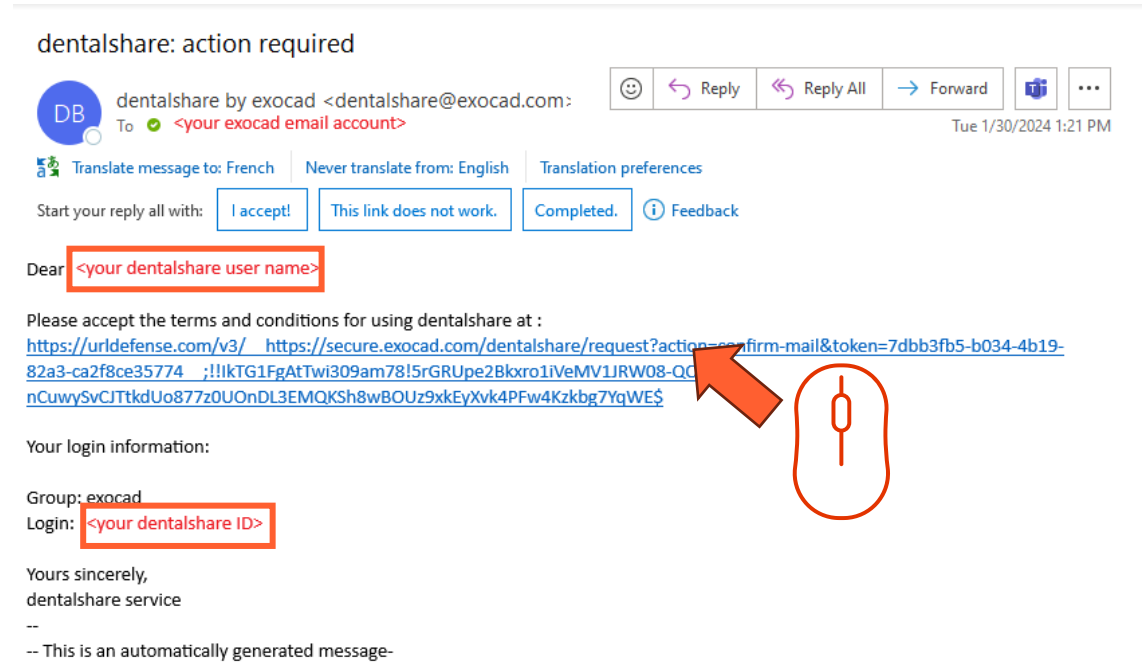

- Haga clic en el enlace proporcionado en el correo electrónico de dentalshare para aceptar los términos y condiciones de dentalshare

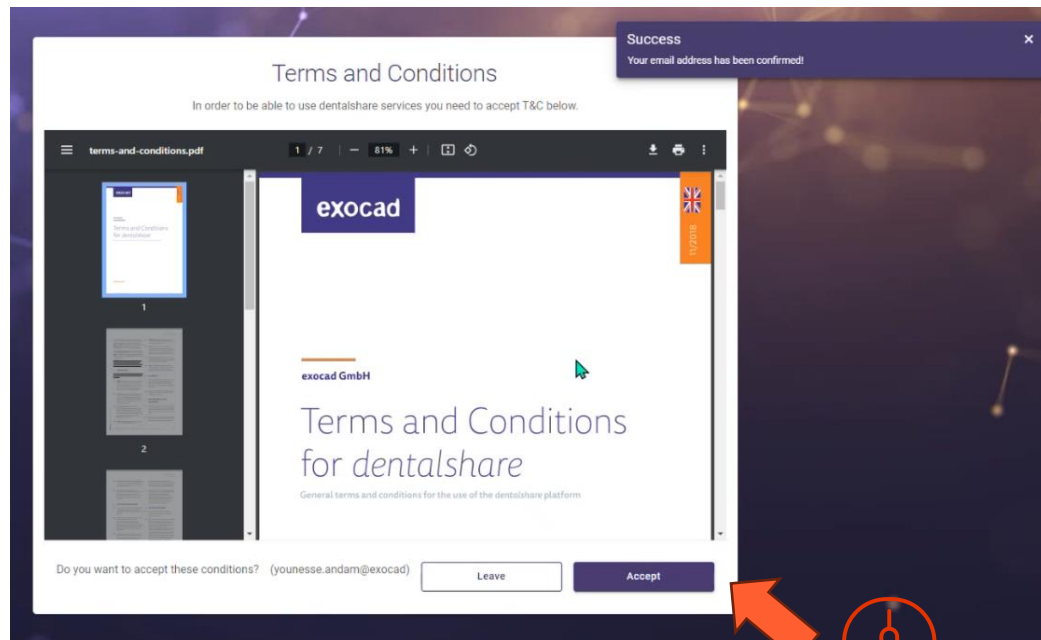


- Acepte los términos y condiciones

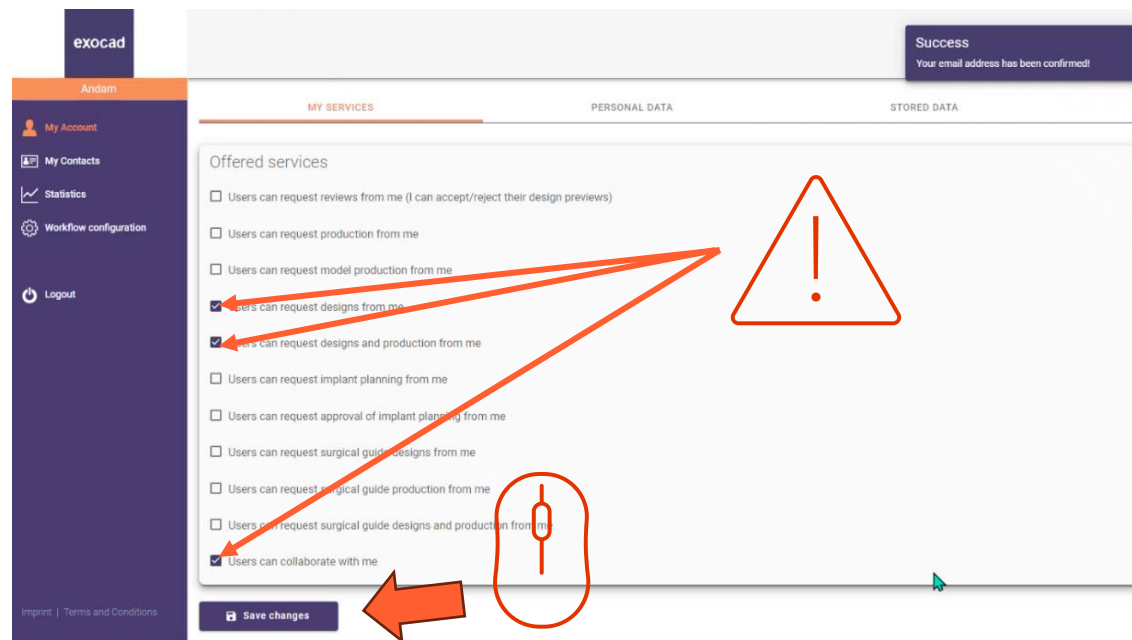


- Asegúrese de que su cuenta dentalshare está configurada para aceptar solicitudes de diseño
- Haga clic en “guardar cambios”


Activar la integracion exocad en IS Connect

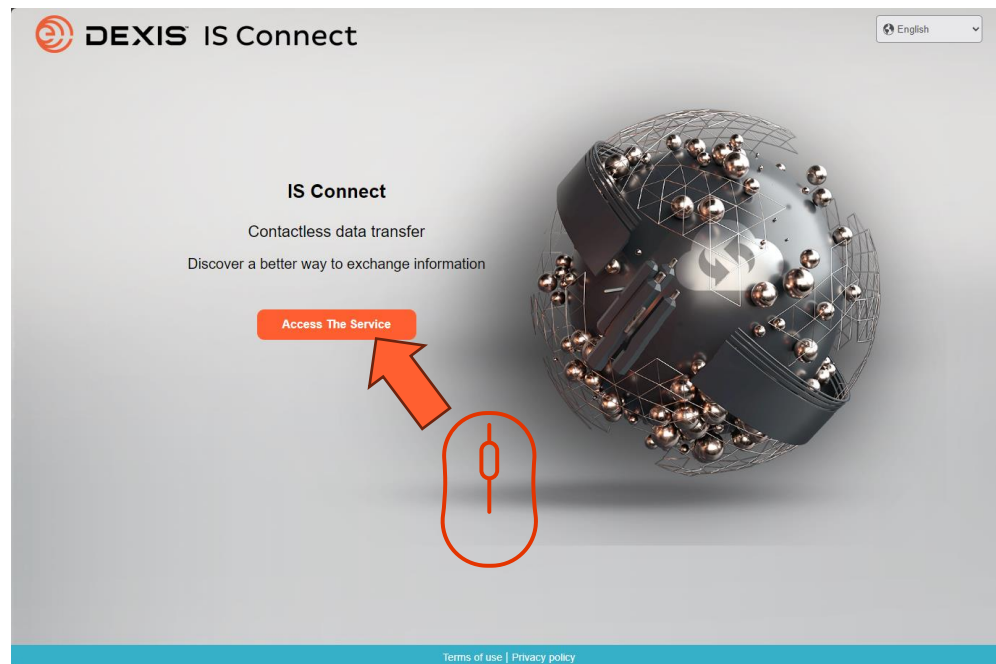


- Inicie sesión en IS Connect

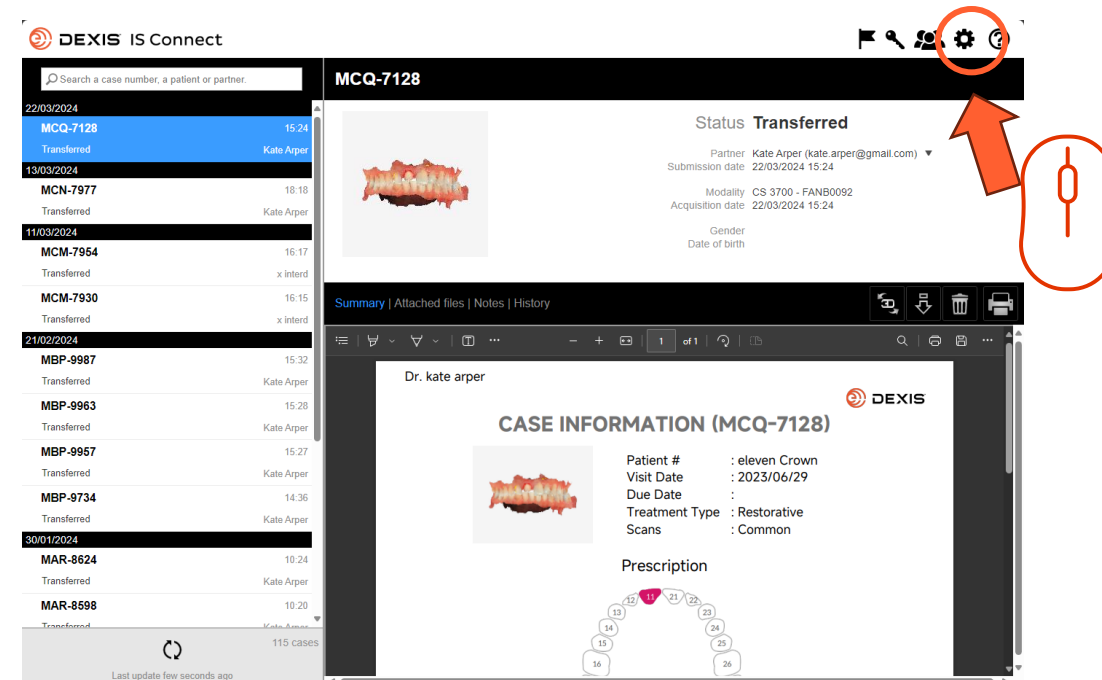


- Haga clic en el icono de configuración

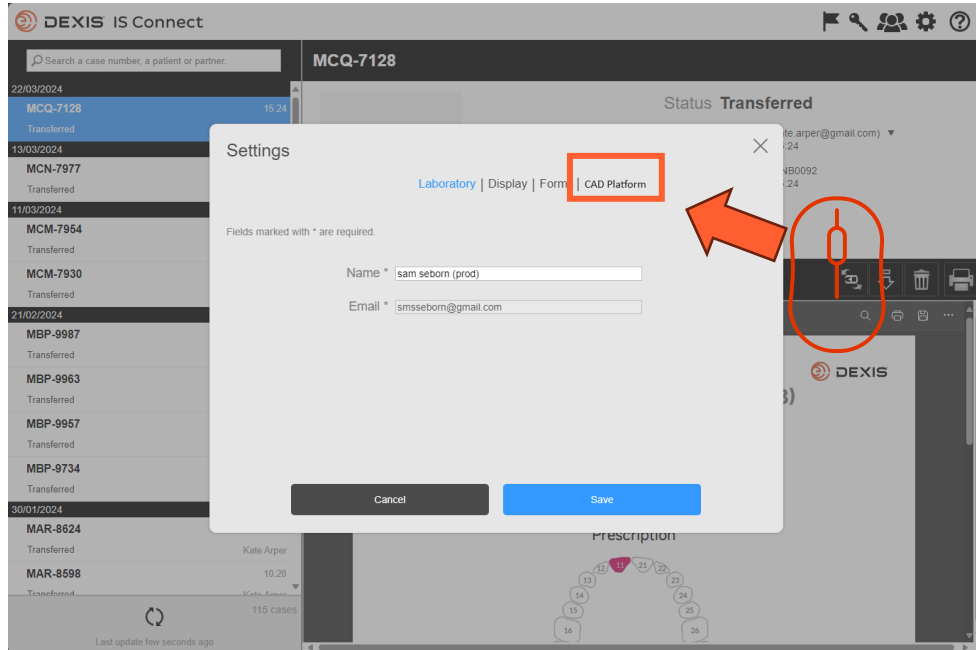


- Haga clic en la pestaña 'Plataforma CAD'

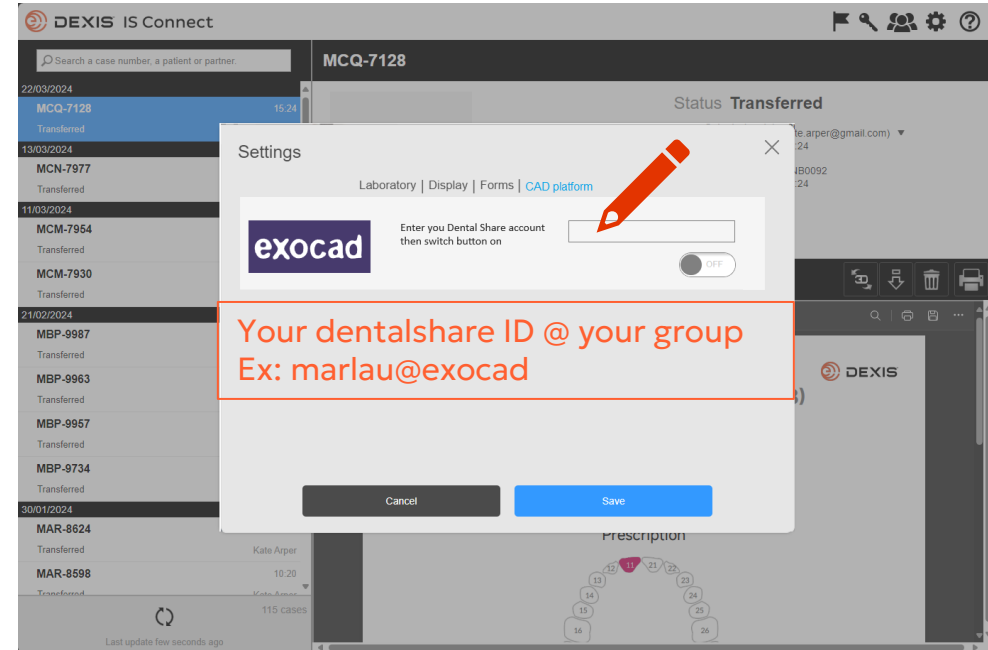

- Escriba su ID de dentalshare

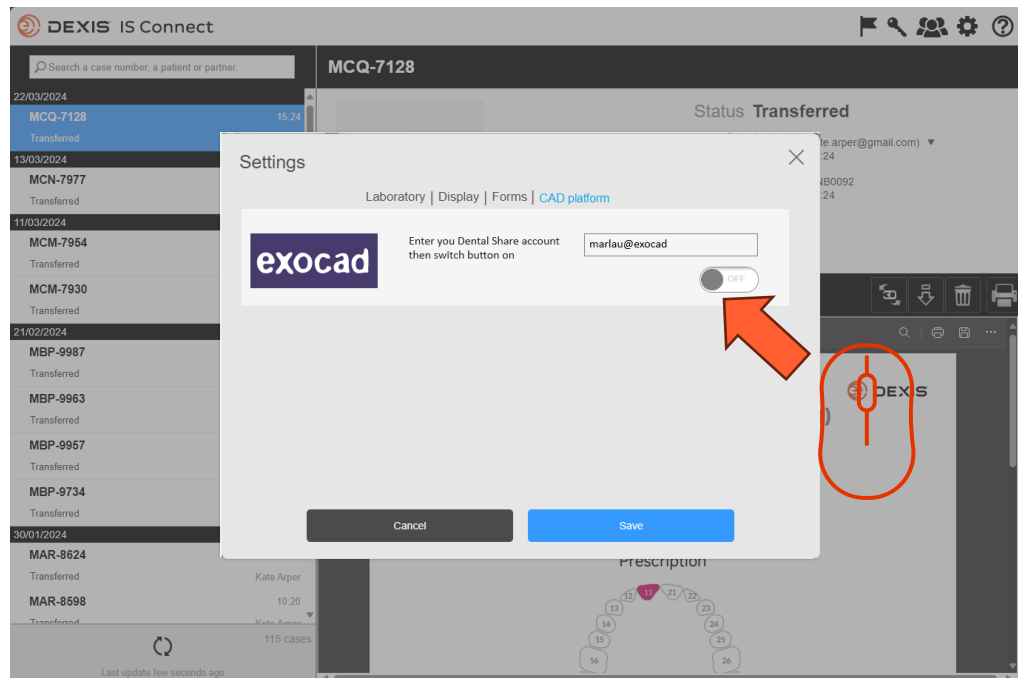


- Cambia el botón

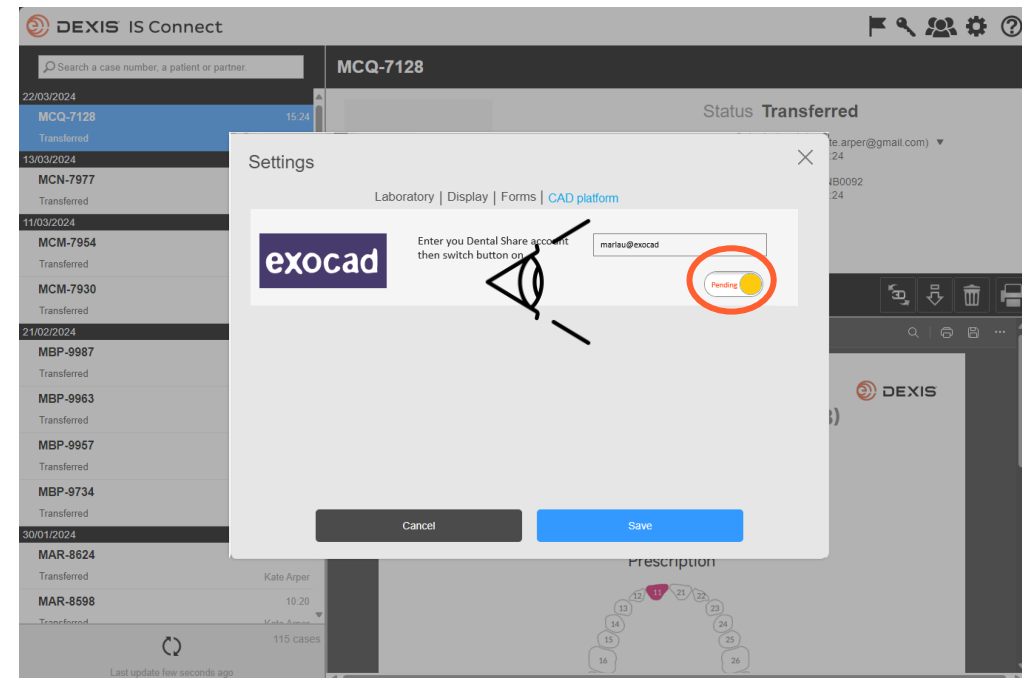

- El botón cambia al estado “pendiente”
- Puede salir de IS Connect y esperar una invitación dentalshare



dentalshare contact request

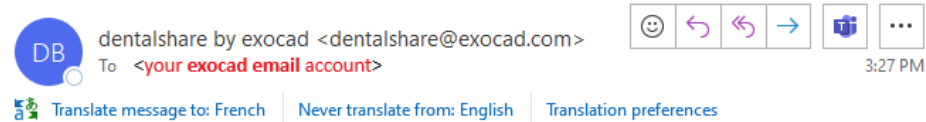

Dear <your dentalshare ID>

DEXIS IS Connect wants to offer a dentalshare community contact to you.

If you want to accept this contact, please click this link:

[https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=accept-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05SqBiv62VZzb3Ac\\$](https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=accept-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05SqBiv62VZzb3Ac$)


if you do not, please click this link:

[https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=decline-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05SqBiv62s4kiM30\\$](https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=decline-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05SqBiv62s4kiM30$)



Yours sincerely,
dentalshare service

-- This is an automatically generated message --


- Recibe una invitación dentalshare de la cuenta DEXIS IS Connect
- Haga clic en el enlace para aceptarla

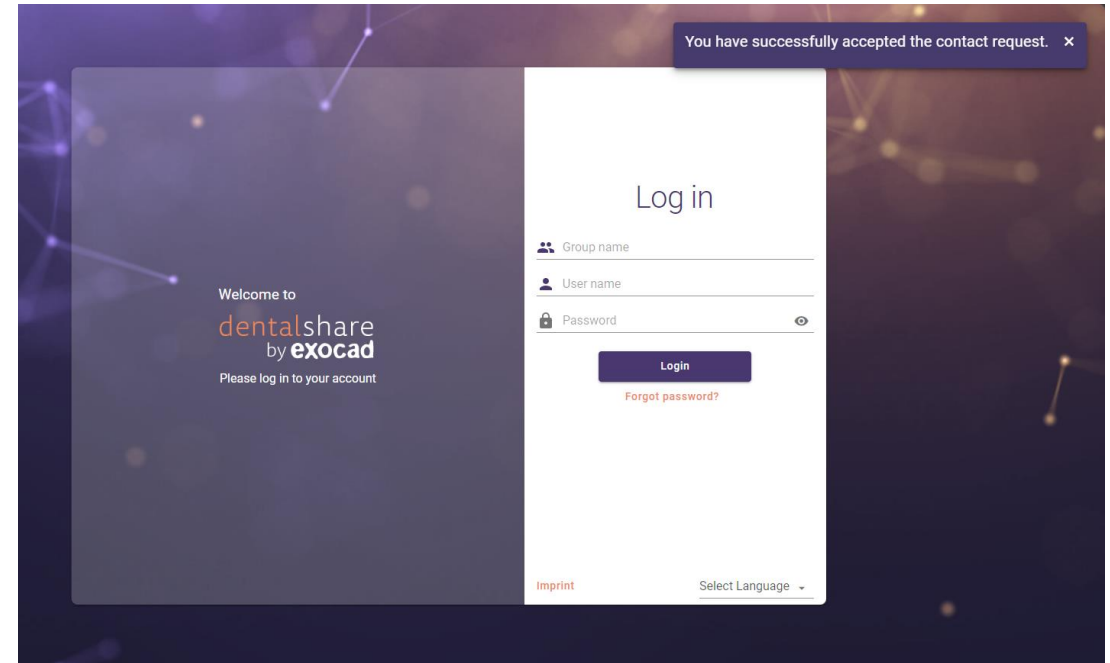


- Su invitación está confirmada
- Puede cerrar las pantallas de dentalshare

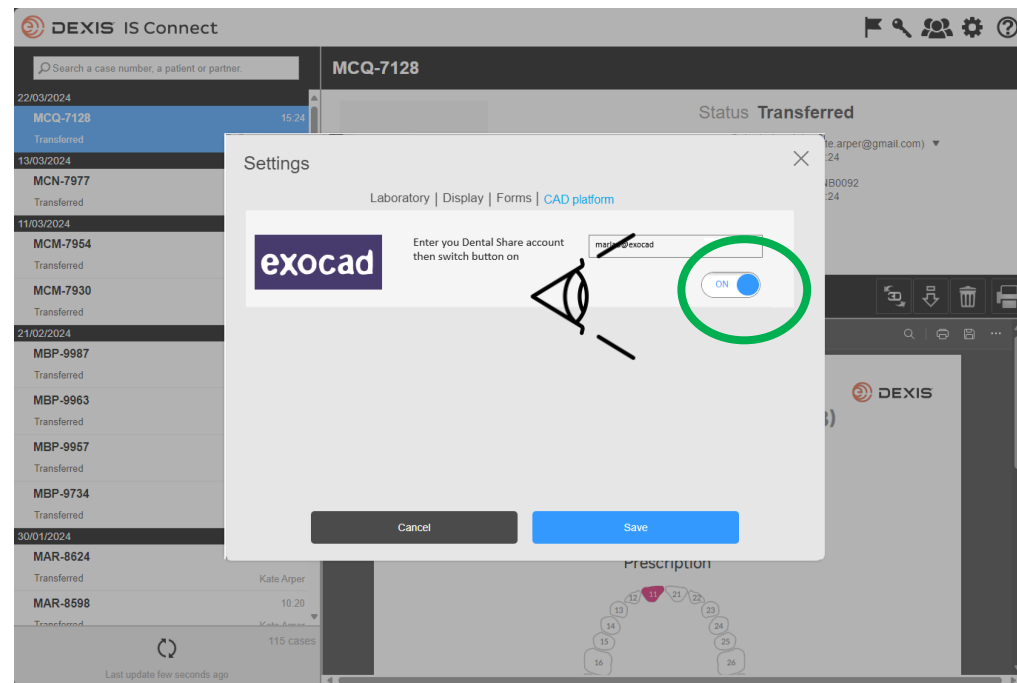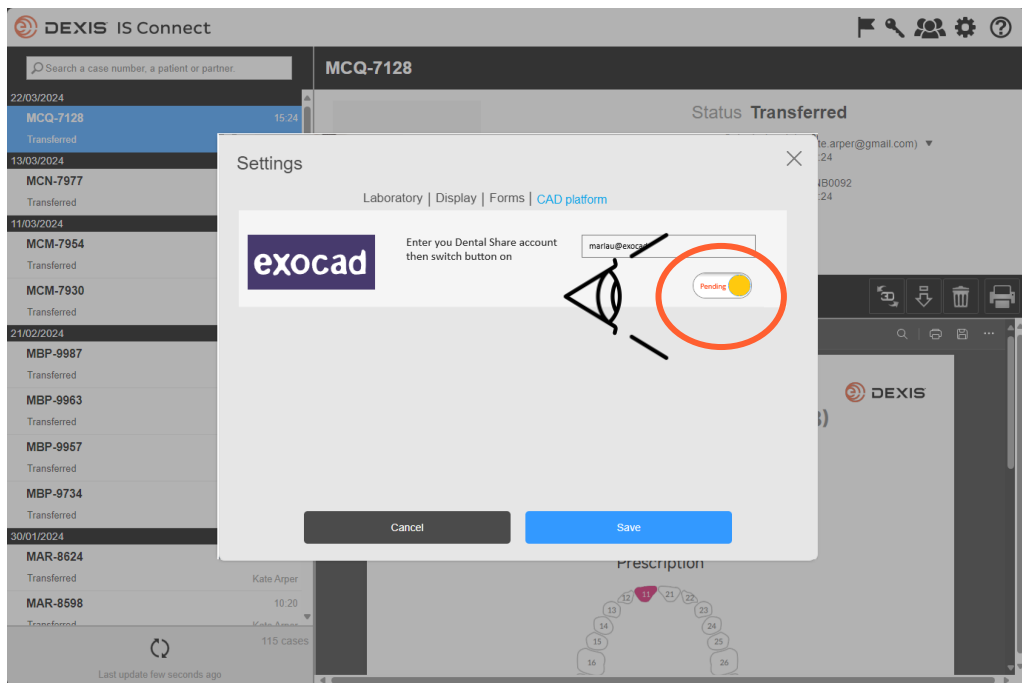

- Después de aceptar la invitación de dentalshare DEXIS IS Connect, el botón exocad en la configuración de IS Connect cambiará de pendiente a 'ON'
- Puede observarse un retraso
- La integración ya está registrada

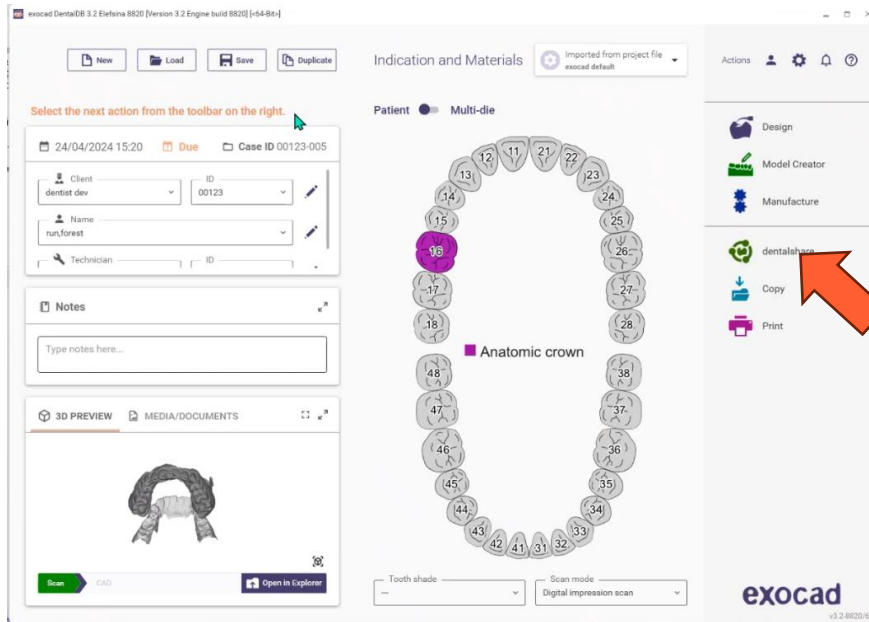


- Debe iniciar sesión en dentalshare mientras está en exocad DB para que la integración esté activa

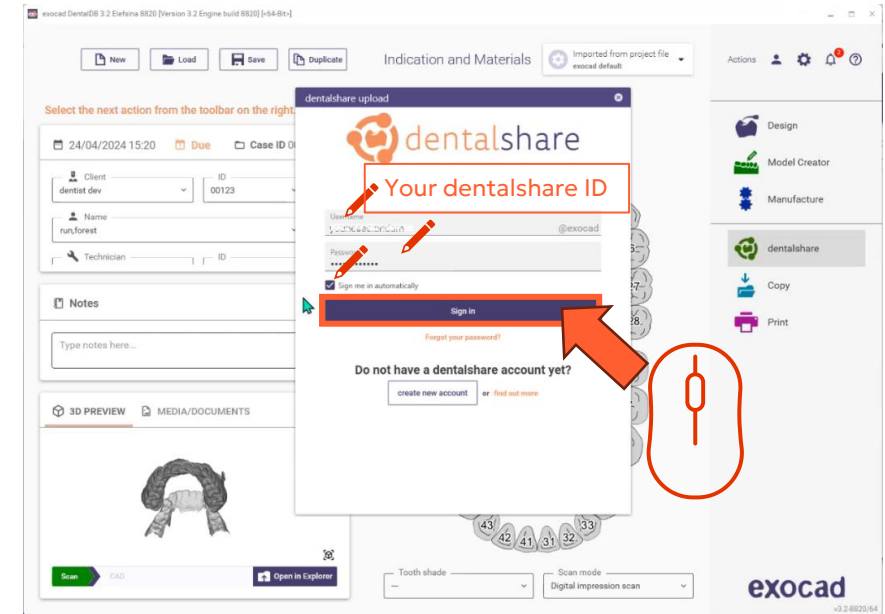

- Inicie sesión en dentalshare desde exocad DB con su ID de dentalshare y seleccione «iniciar sesión automáticamente».


- Se abre dentalshare, puedes cerrarlo
- Los casos de IS Connect enviados a tu laboratorio se entregarán ahora como casos dentales.

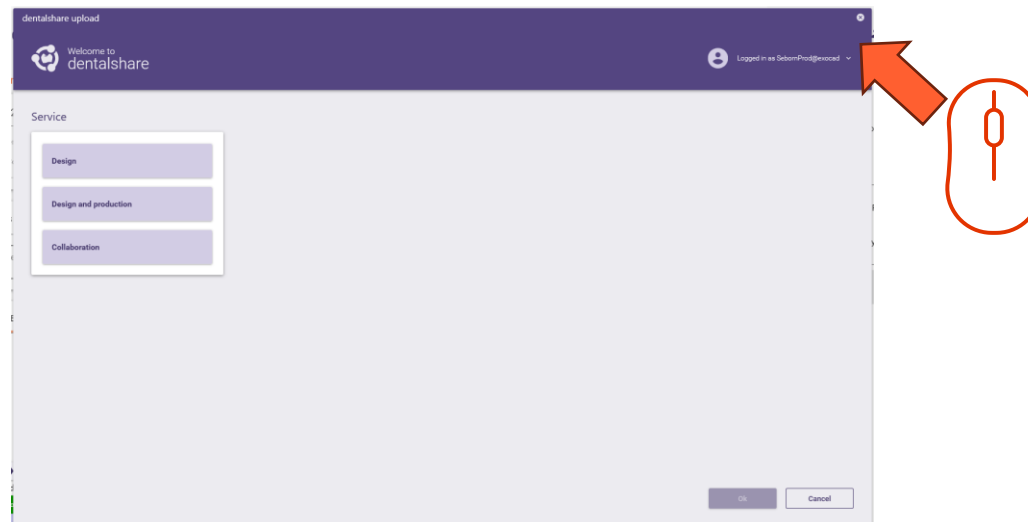




Anweisungen zur DEXIS-exocad Integration


Benötigtes konten

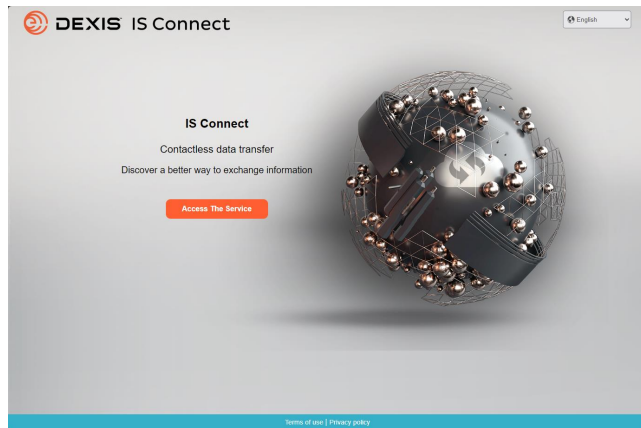

☐ IS Connect

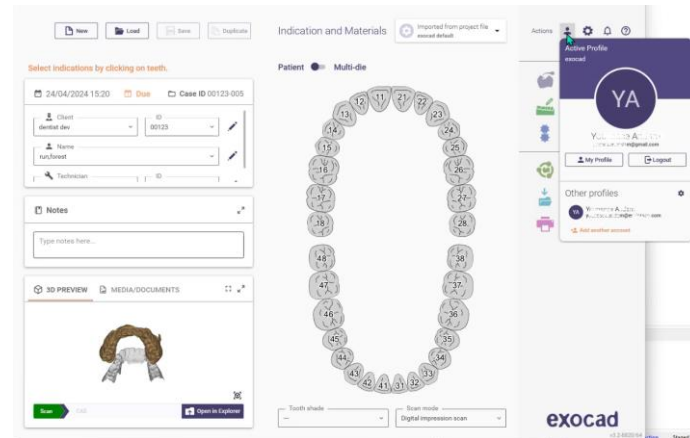


☐ exocad DB

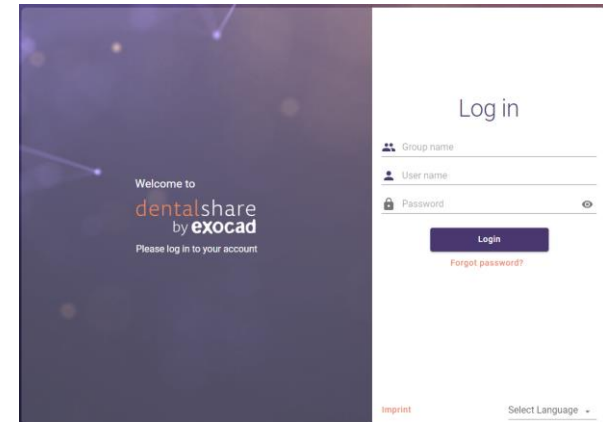

☐ exocad dentalshare

Haben Sie ein dentalshare-Konto?

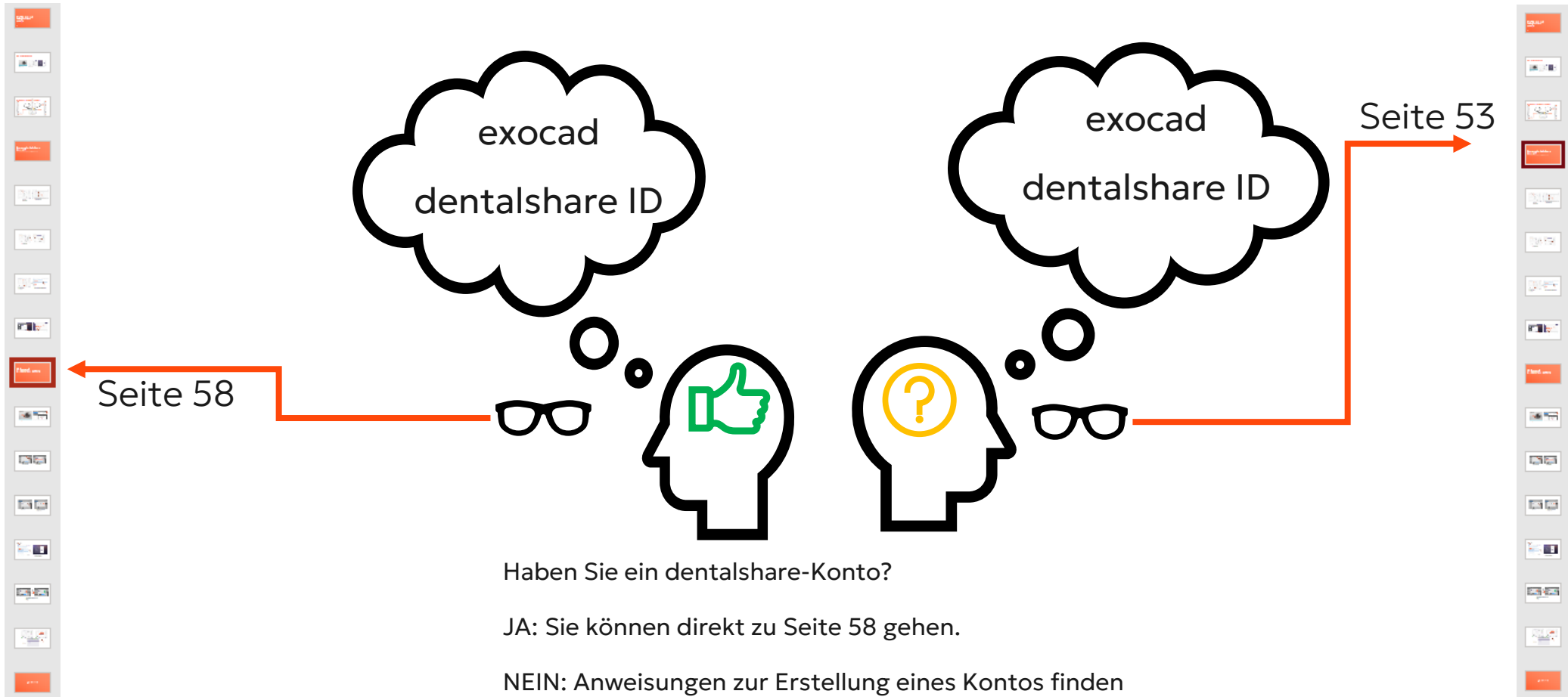


Haben Sie ein dentalshare-Konto?

JA: Sie können direkt zu Seite 58 gehen.


NEIN: Anweisungen zur Erstellung eines Kontos finden
Sie auf Seite 53. Sie können auch besuchen

https://wiki.exocad.com/wiki/index.php/Signing_up_to_Dentalshare


Erstellen einer dentalshare ID

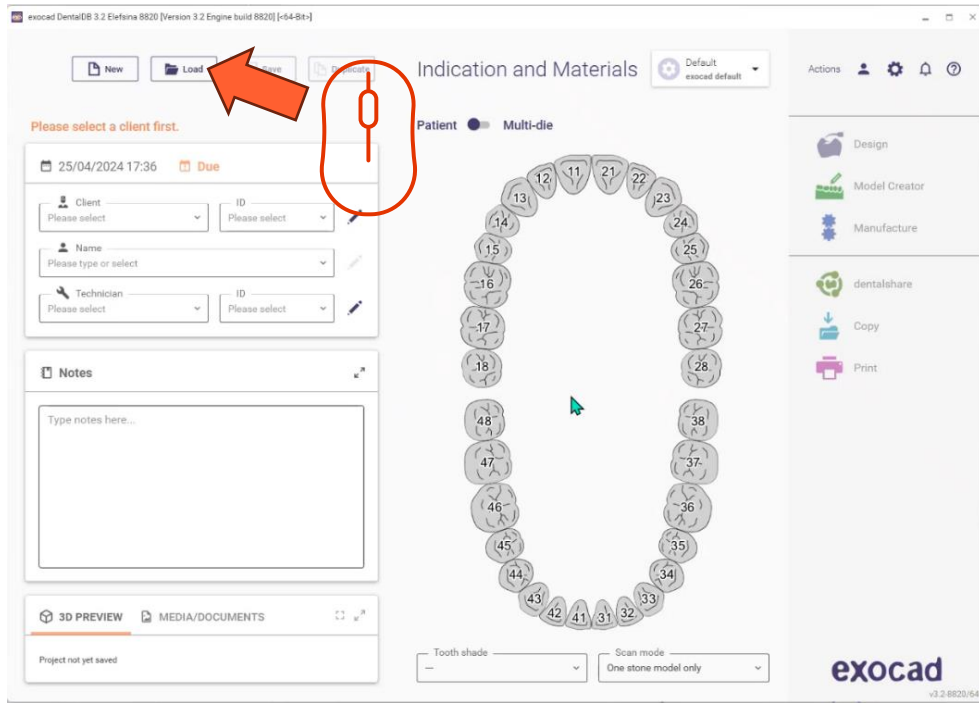


- Öffnen Sie exocad DB
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Laden

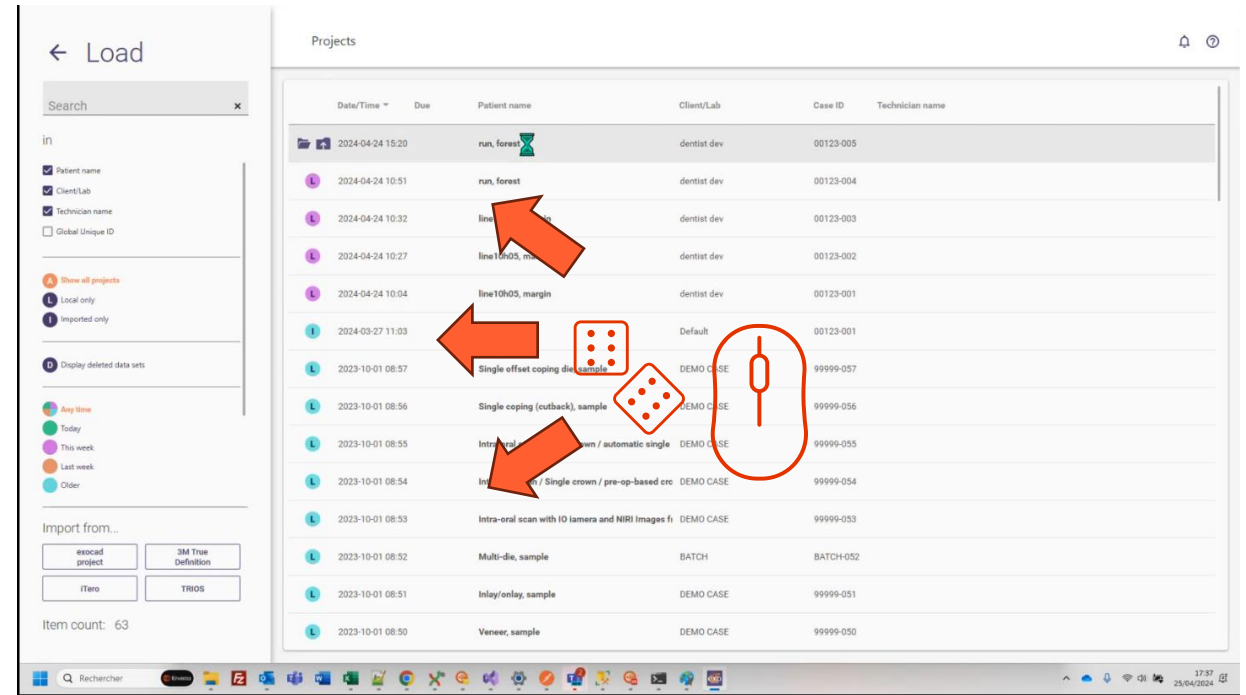


- Wählen Sie ein beliebiges Projekt und laden Sie es

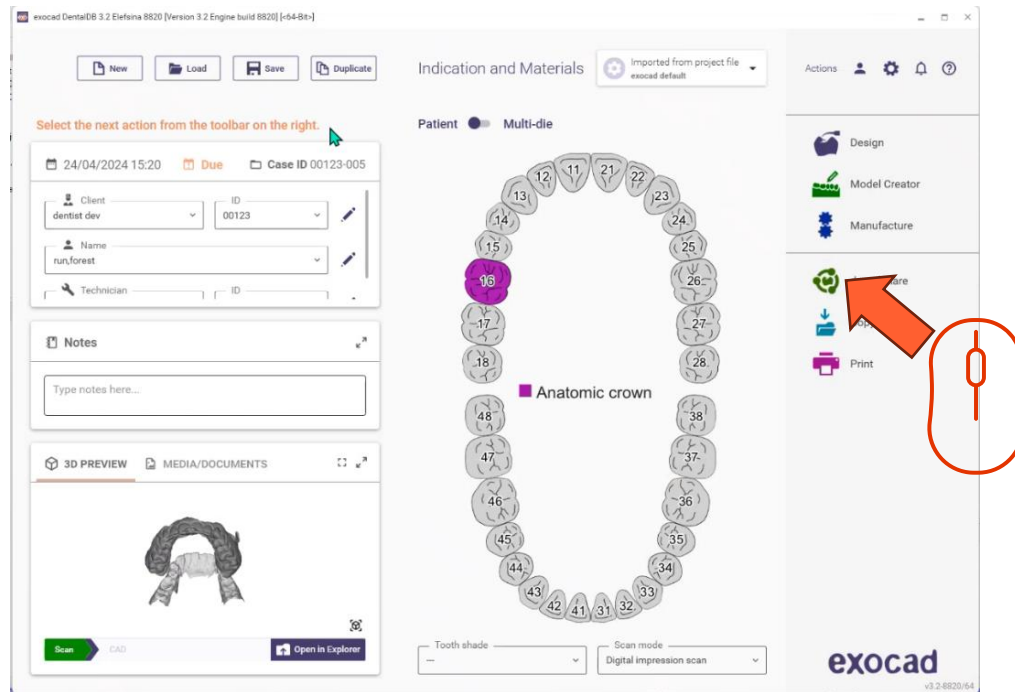


- Klicken Sie auf das dentalshare-Symbol

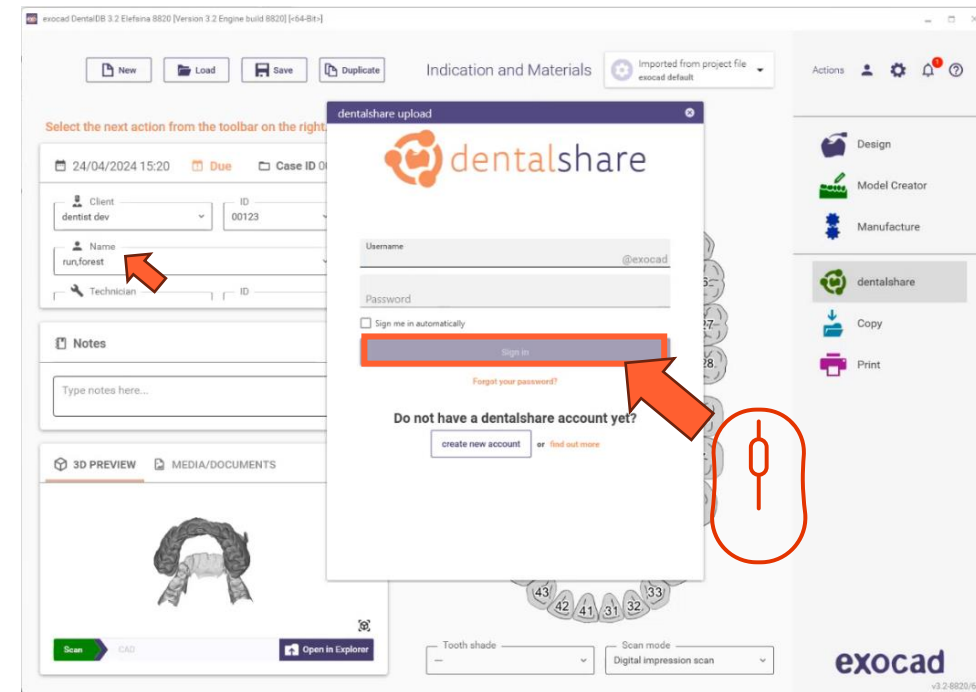


- Klicken Sie auf 'Konto erstellen'

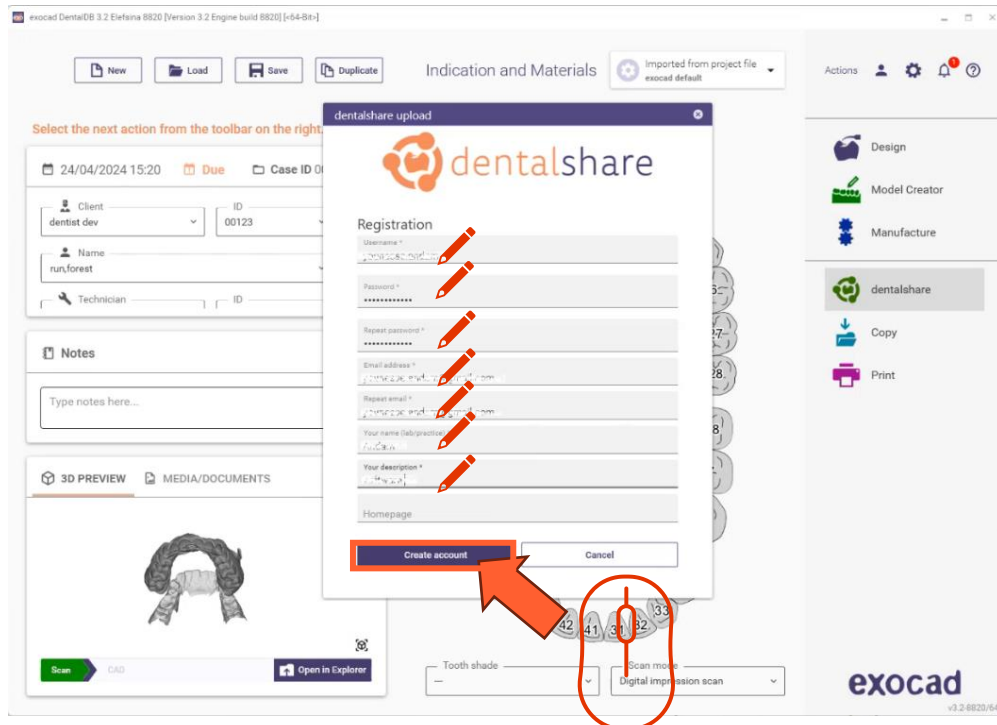


- Füllen Sie die erforderlichen Informationen aus
- Klicken Sie auf 'Konto erstellen'
- Eine E-Mail wird an Ihre exocad-Konto-E-Mail-Adresse gesendet

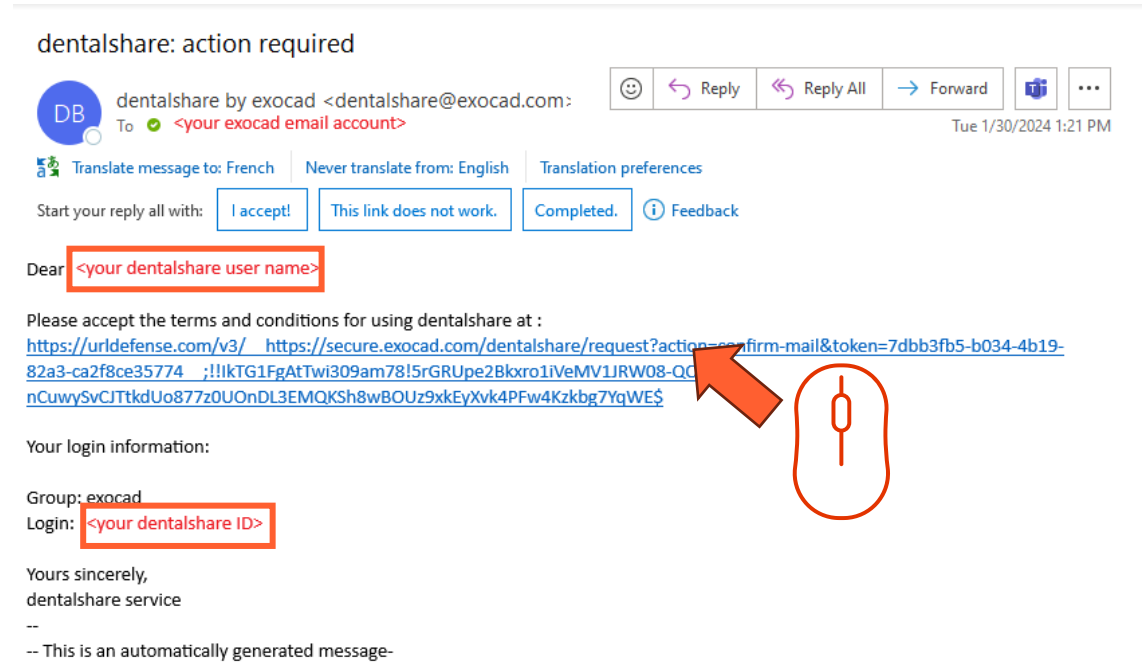

- Klicken Sie auf den Link in der dentalshare-E-Mail, um die dentalshare-Bedingungen zu akzeptieren

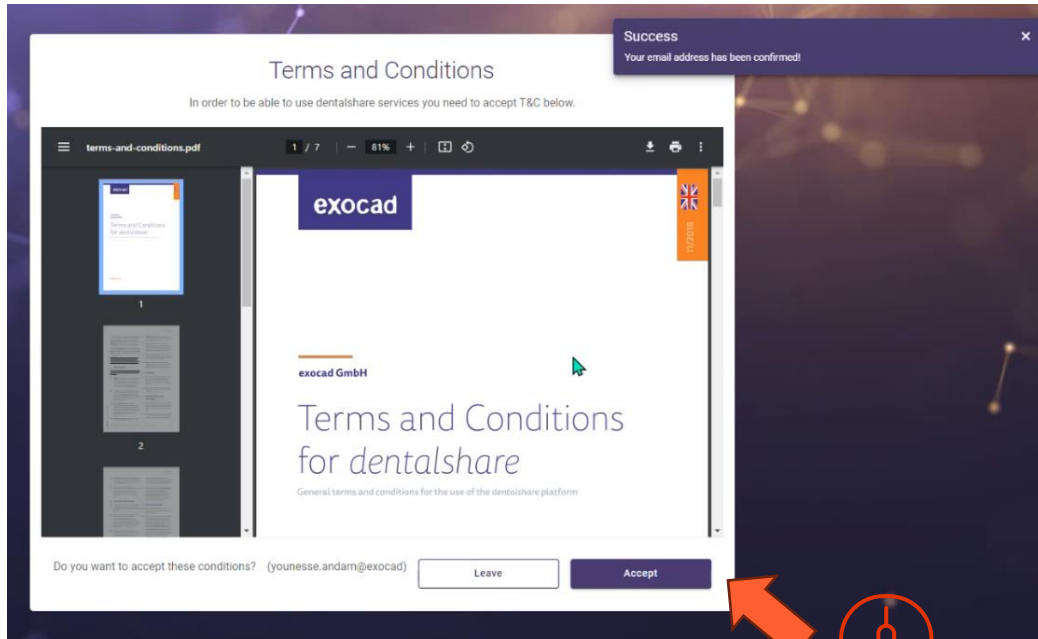


- Akzeptieren Sie die Bedingungen

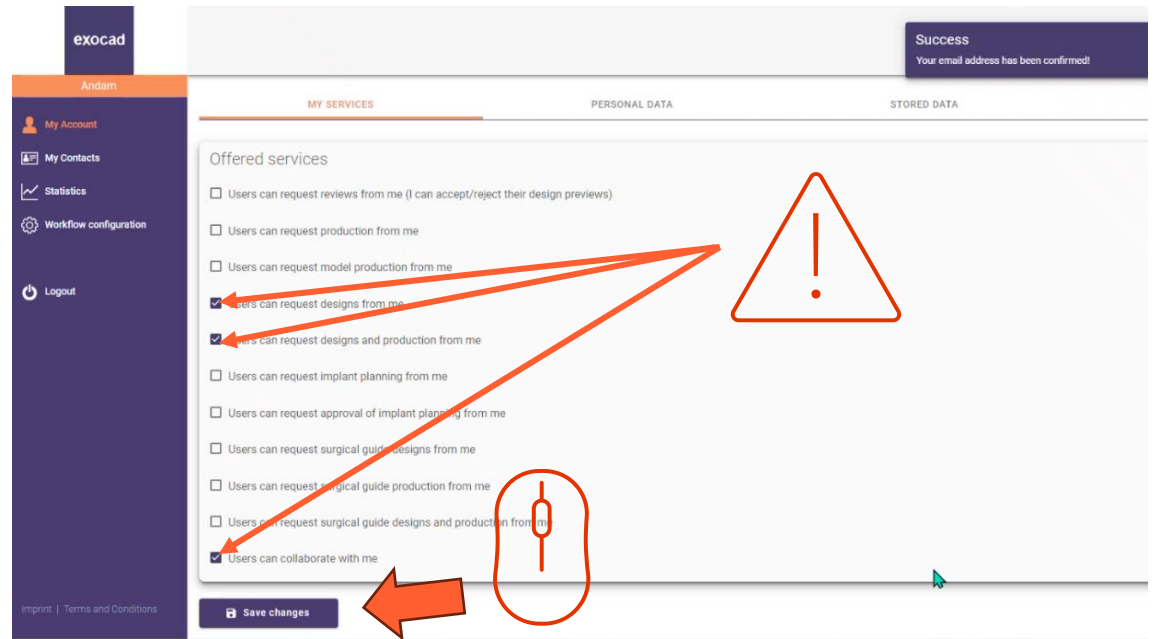


- Vergewissern Sie sich, dass Ihr dentalshare-Konto so konfiguriert ist, dass es Designanfragen akzeptiert
- Klicken Sie auf „Änderungen speichern“


Aktivieren der exocad integration in IS Connect

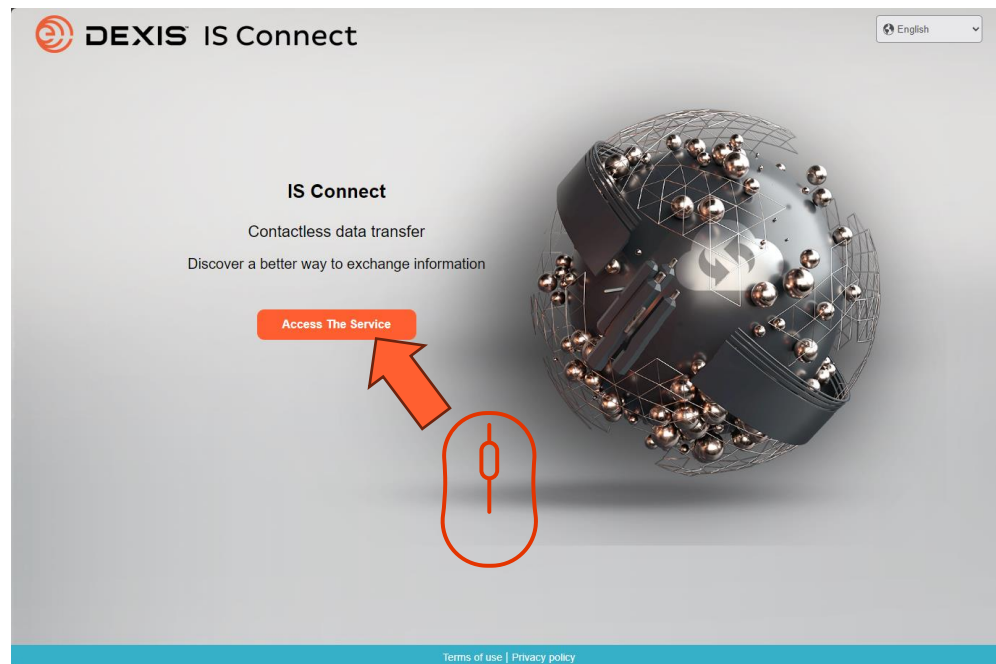


- Melden Sie sich bei IS Connect an

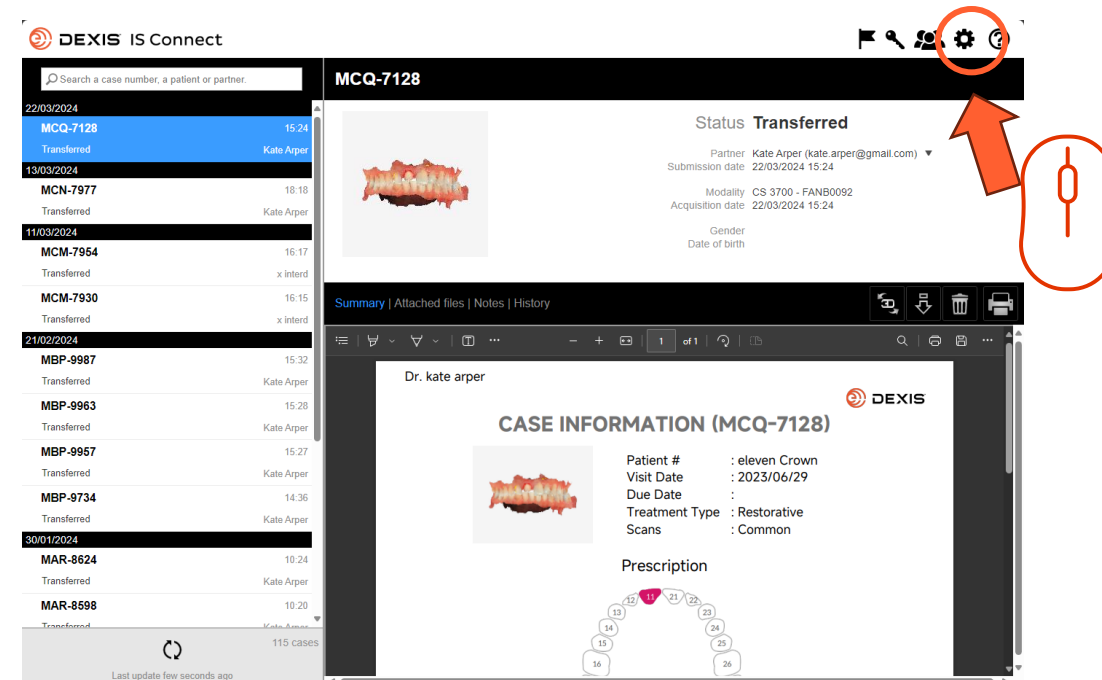


- Klicken Sie auf das Einstellungssymbol

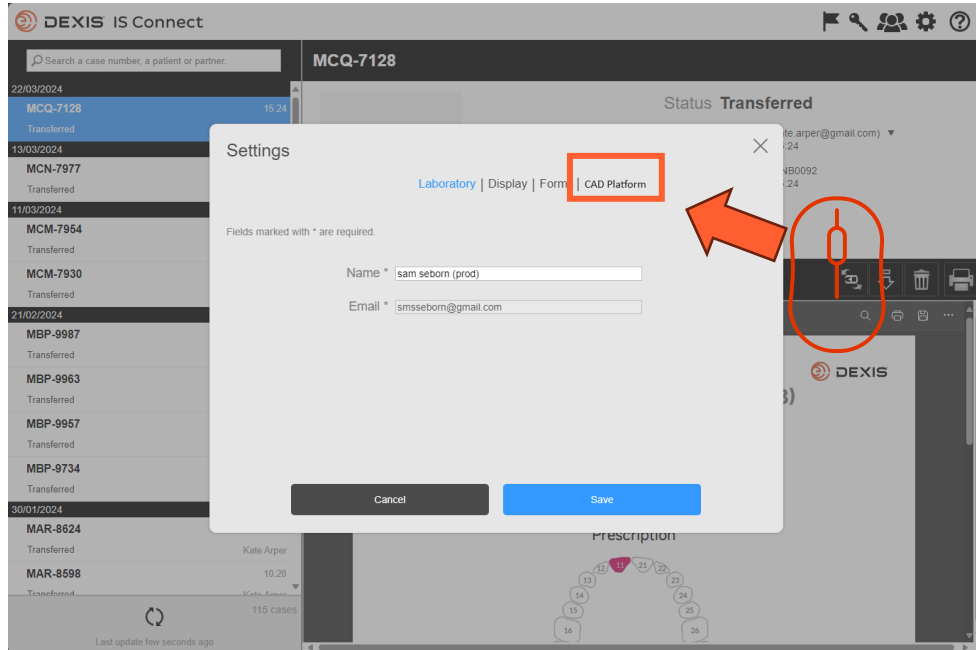


- Klicken Sie auf die Registerkarte 'CAD-Plattform'.

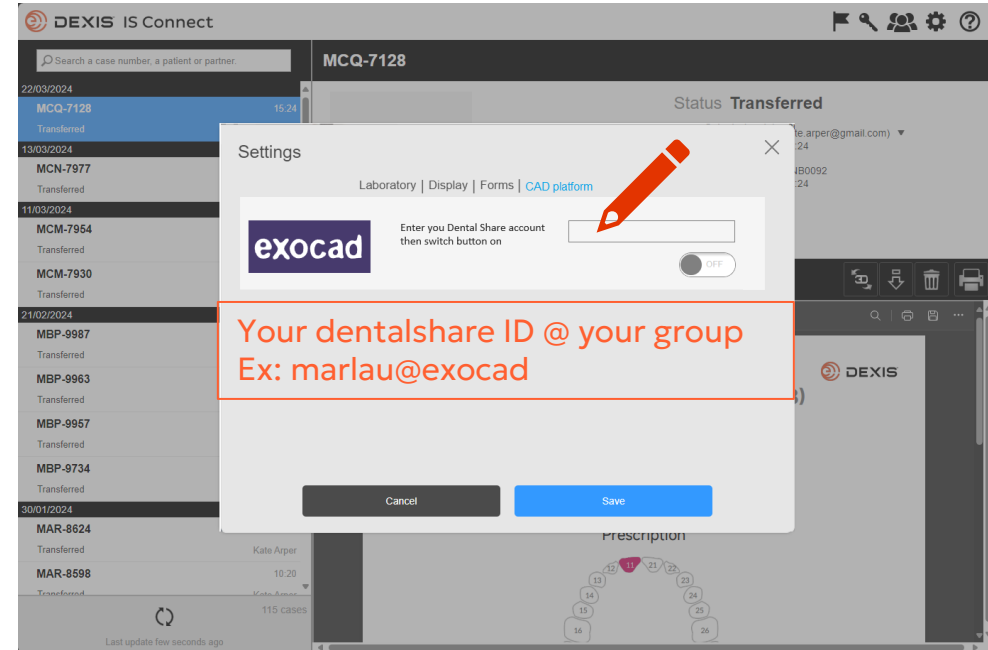

- Geben Sie Ihre dentalshare ID ein

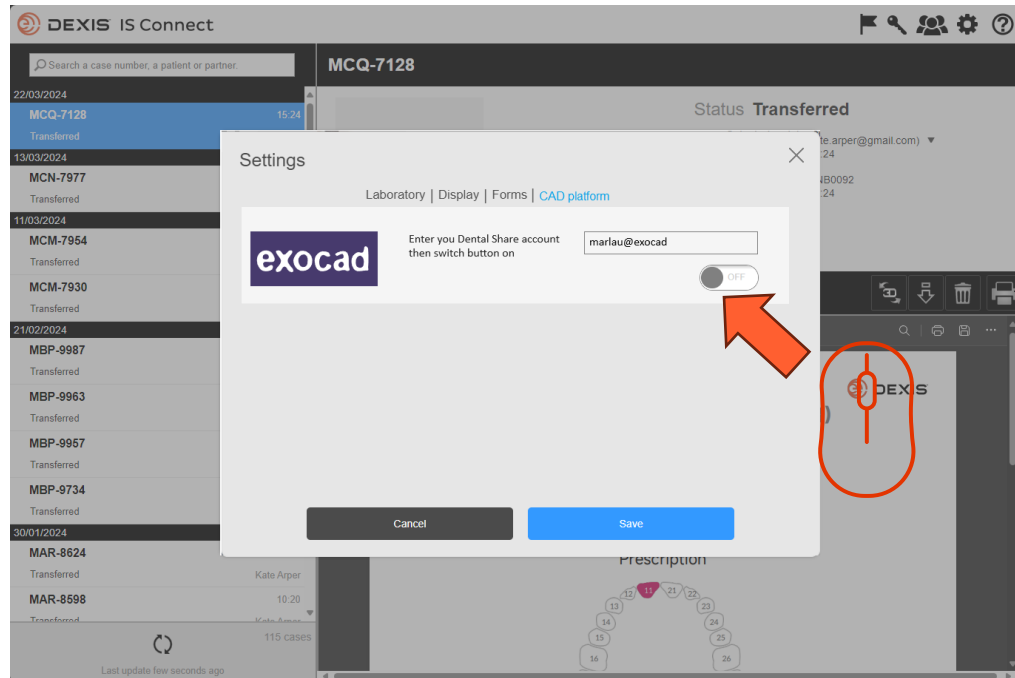


- Schalten Sie die Schaltfläche

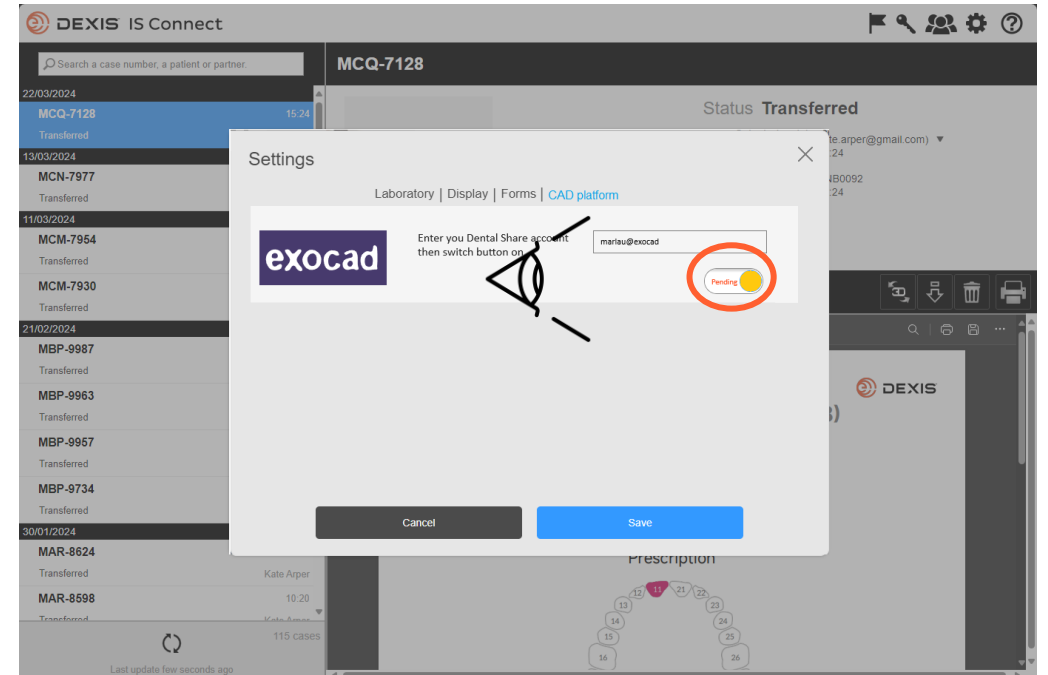

- Die Schaltfläche wechselt in den Status 'pending'.
- Sie können IS Connect beenden und auf eine dentalshare-Einladung warten



dentalshare contact request

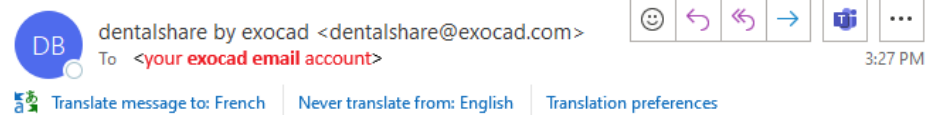

Dear <your dentalshare ID>

DEXIS IS Connect wants to offer a dentalshare community contact to you.

If you want to accept this contact, please click this link:

[https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=accept-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEOJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62VZZb3Ac\\$](https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=accept-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEOJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62VZZb3Ac$)


if you do not, please click this link:

[https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=decline-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEOJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62s4kiM30\\$](https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=decline-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEOJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62s4kiM30$)




Yours sincerely,
dentalshare service

--
-- This is an automatically generated message --



- Sie erhalten eine dentalshare-Einladung vom DEXIS IS Connect-Konto
- Klicken Sie auf den Link, um die Einladung anzunehmen

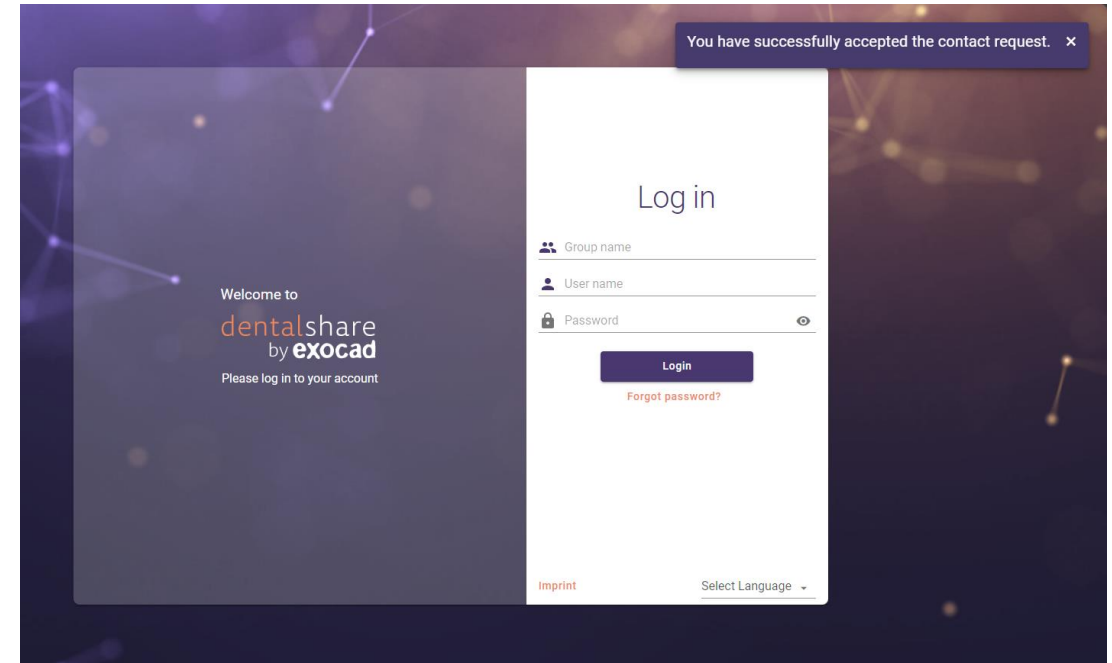

- Ihre Einladung wird bestätigt
- Sie können die dentalshare-Bildschirme schließen

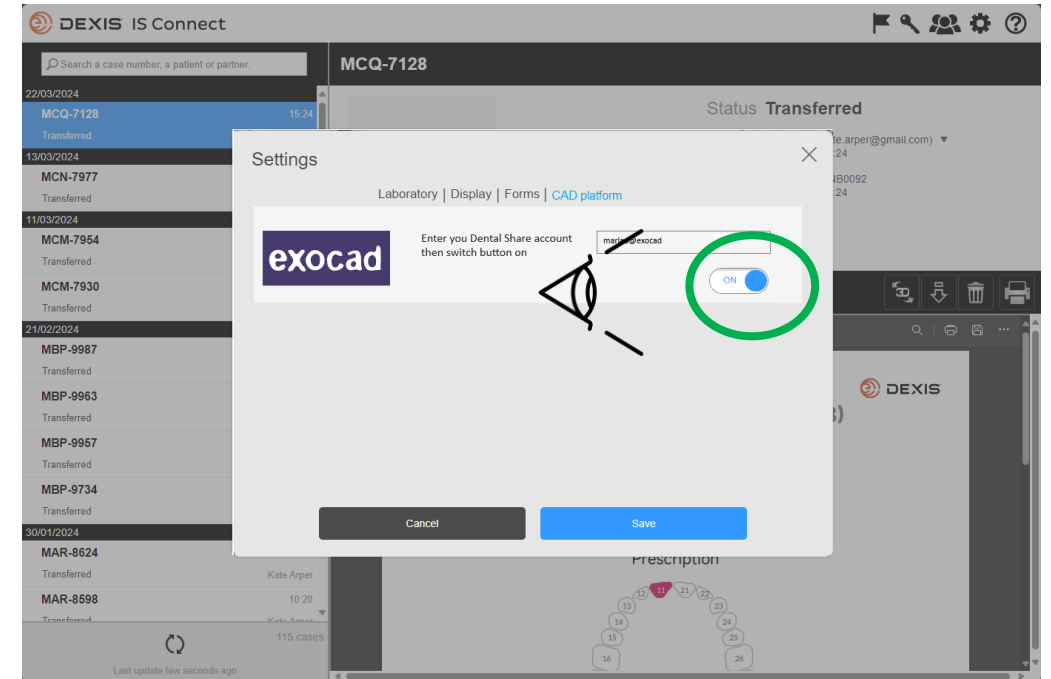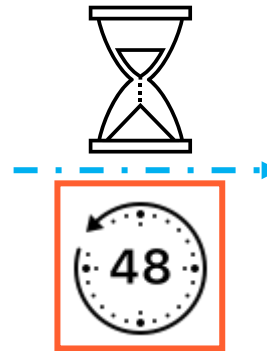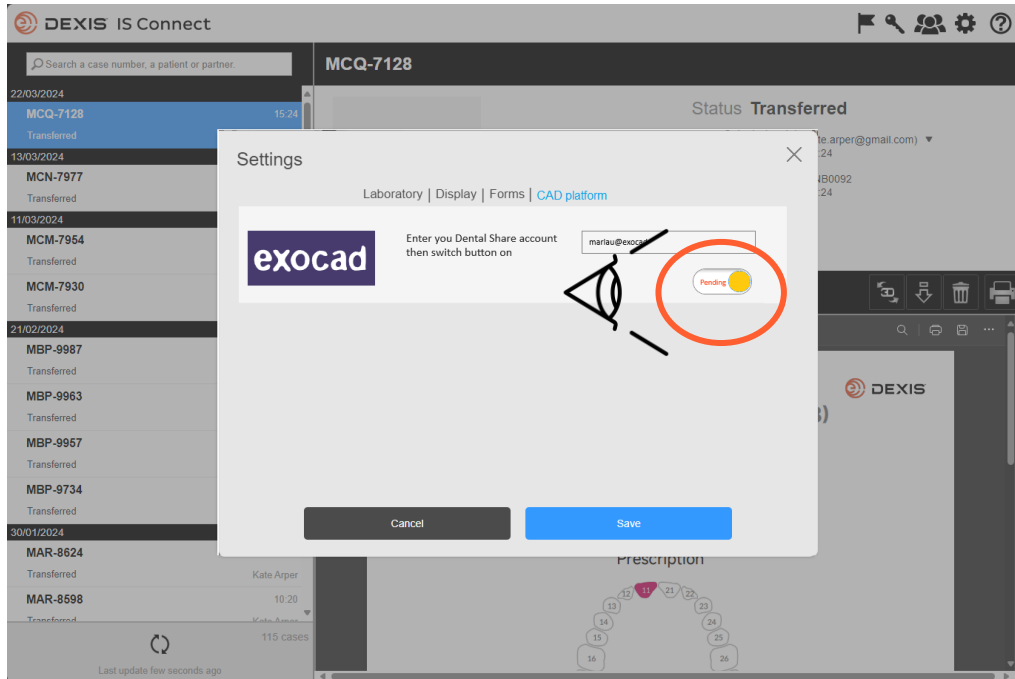


- Nachdem Sie die dentalshare-Einladung von DEXIS IS Connect angenommen haben, wird die Exocad-Schaltfläche in den IS Connect-Einstellungen von „Ausstehend“ auf „Ein“ umgestellt.
- Es kann eine Verzögerung auftreten
- Die Integration ist nun registriert

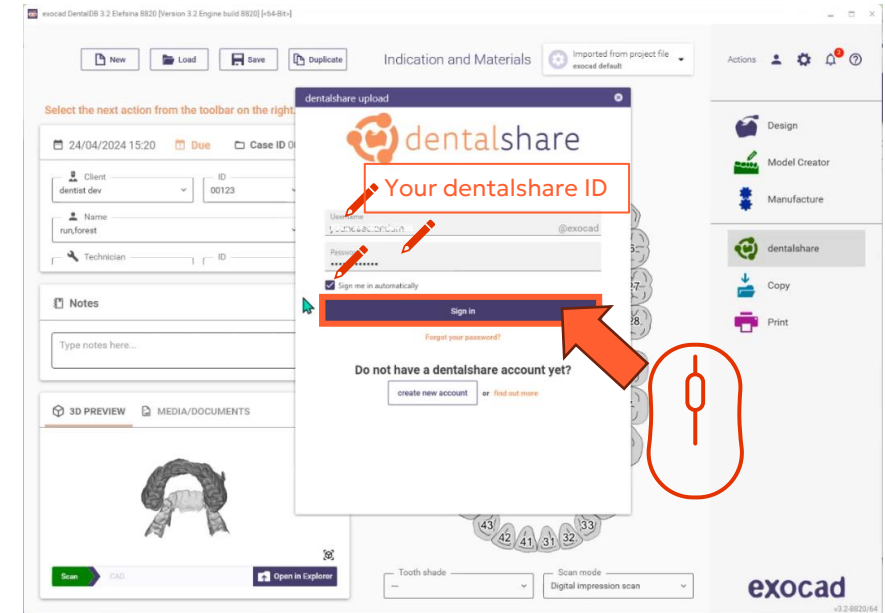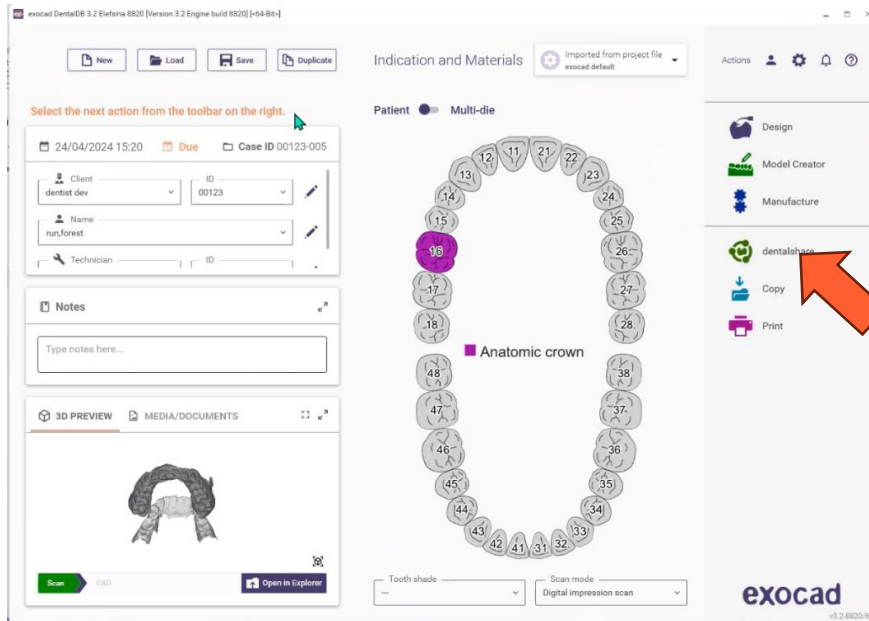

- Sie müssen in dentalshare angemeldet sein, während Sie sich in exocad DB befinden, um die Integration zu aktivieren

- Melden Sie sich in dentalshare von exocad DB aus mit Ihrer dentalshare-ID an und wählen Sie 'automatisch anmelden'.


- Dentalshare öffnet sich, Sie können es schließen
- IS Connect-Fälle, die an Ihr Labor gesendet werden, werden jetzt als dentalshare geliefert.

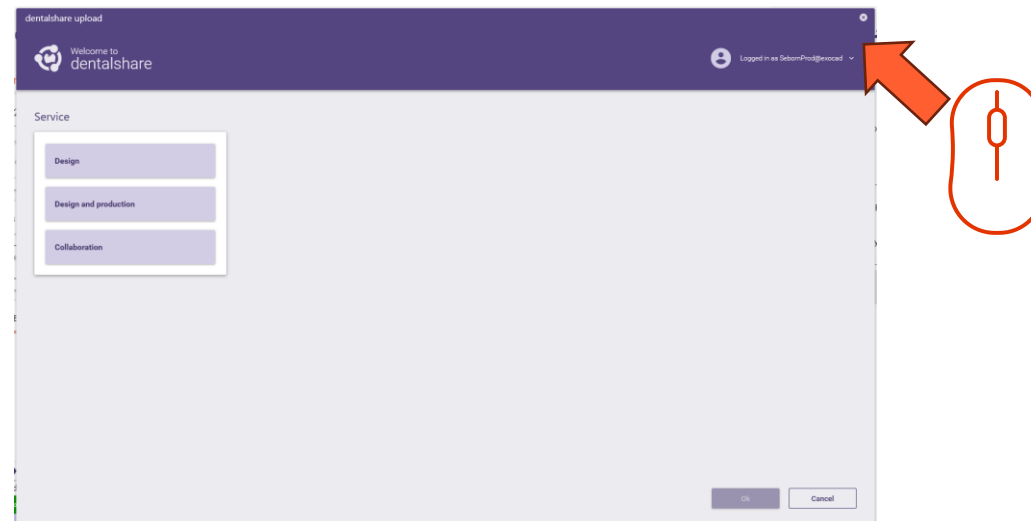




Instruções de integração DEXIS-exocad


Contas necessarias

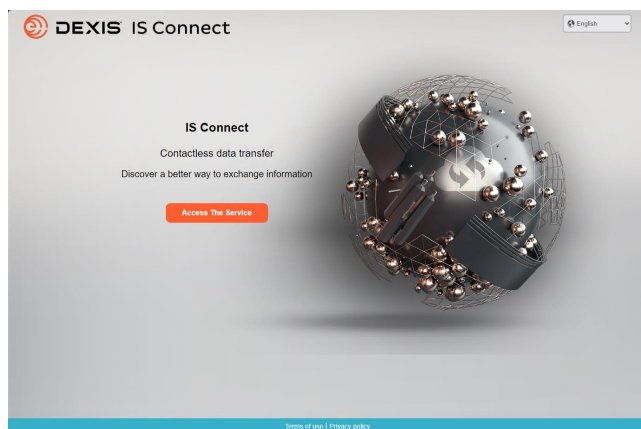

☐ IS Connect

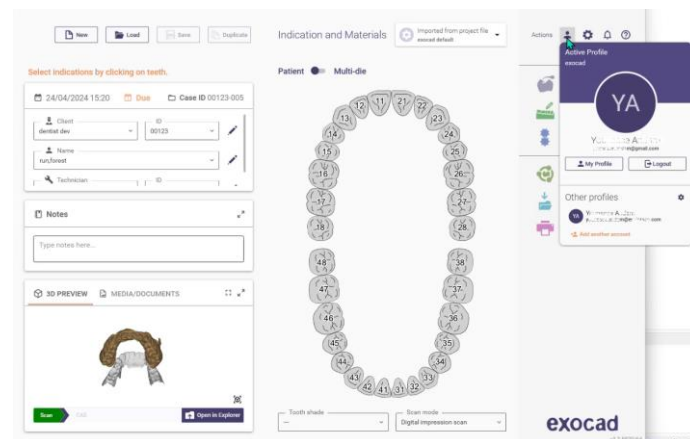


☐ exocad DB

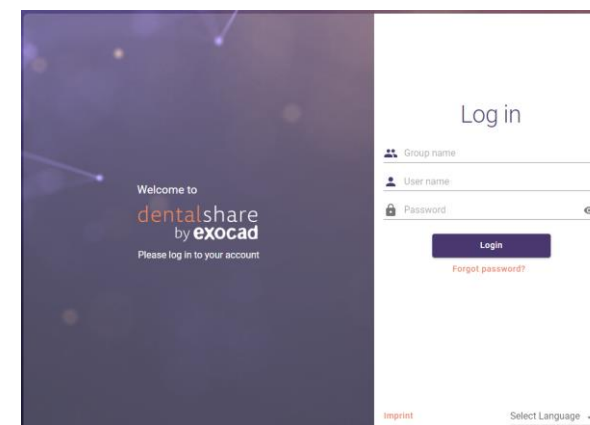

☐ exocad dentalshare

Tem uma conta dentalshare?

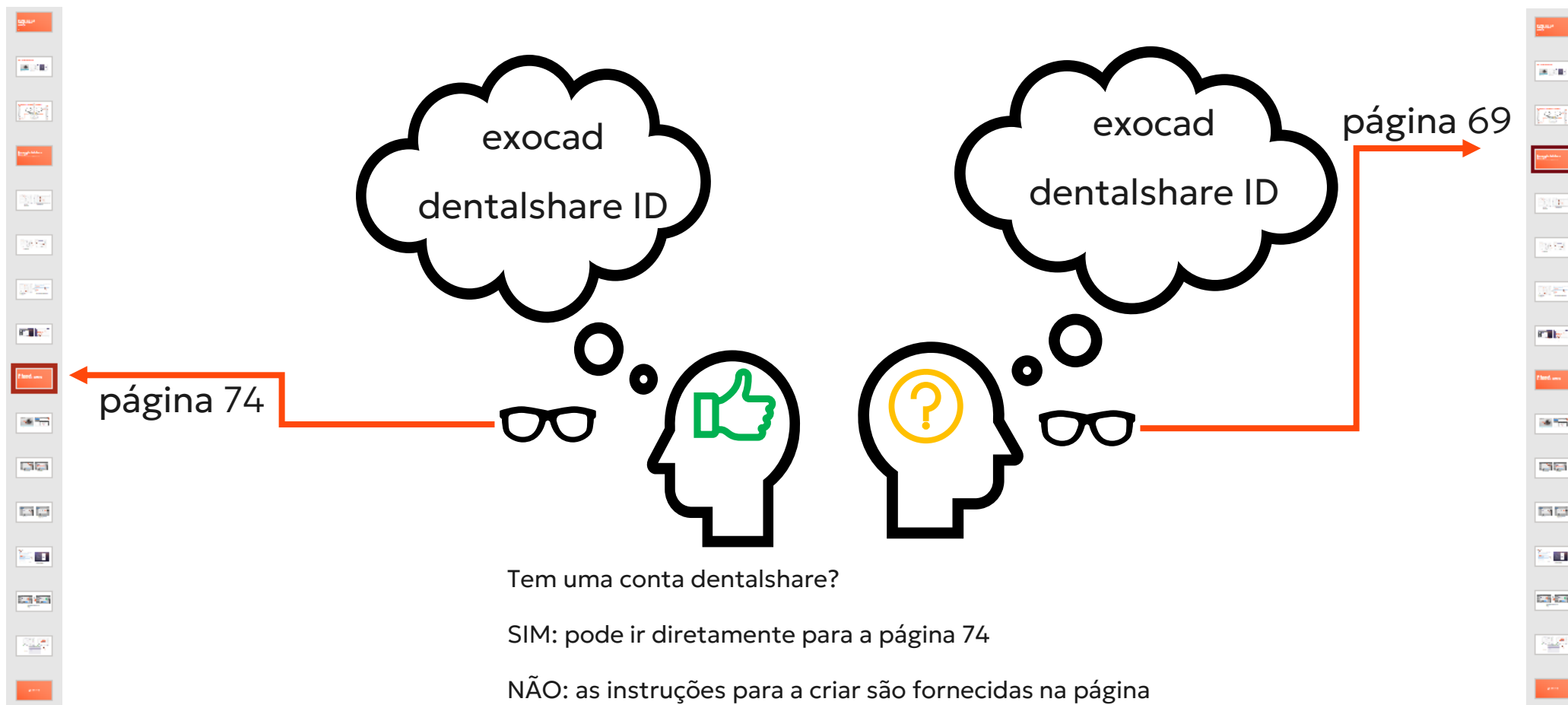


Tem uma conta dentalshare?

SIM: pode ir diretamente para a página 74


NÃO: as instruções para a criar são fornecidas na página 69. Também pode visitar

https://wiki.exocad.com/wiki/index.php/Signing_up_to_Dentalshare


Criar uma ID dentalshare

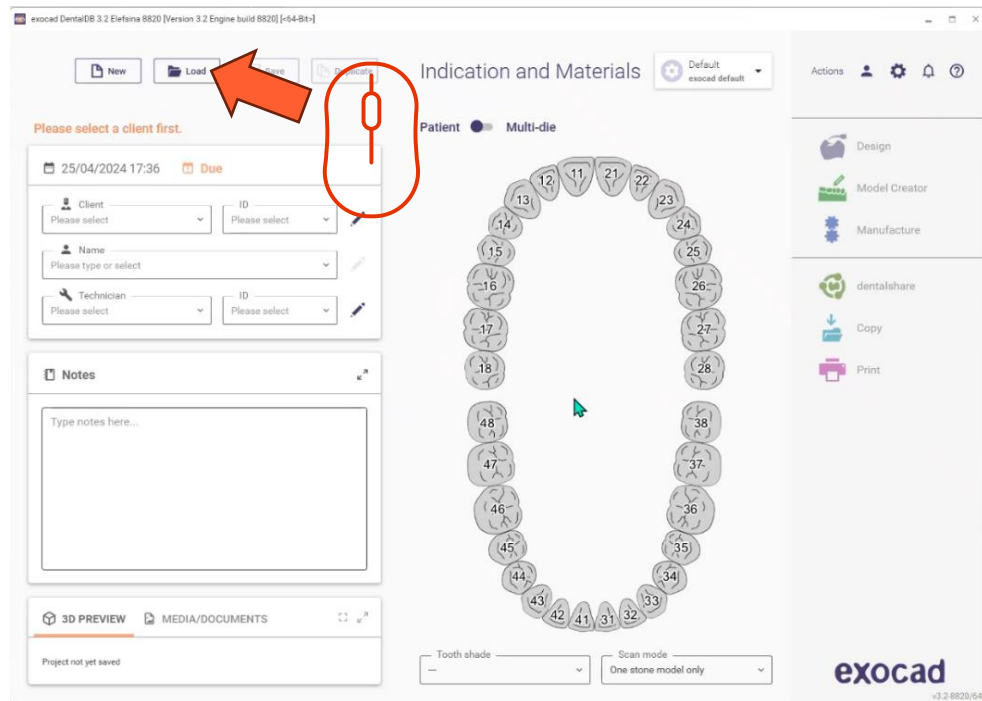


- Abrir o exocad DB
- Clique no botão carregar

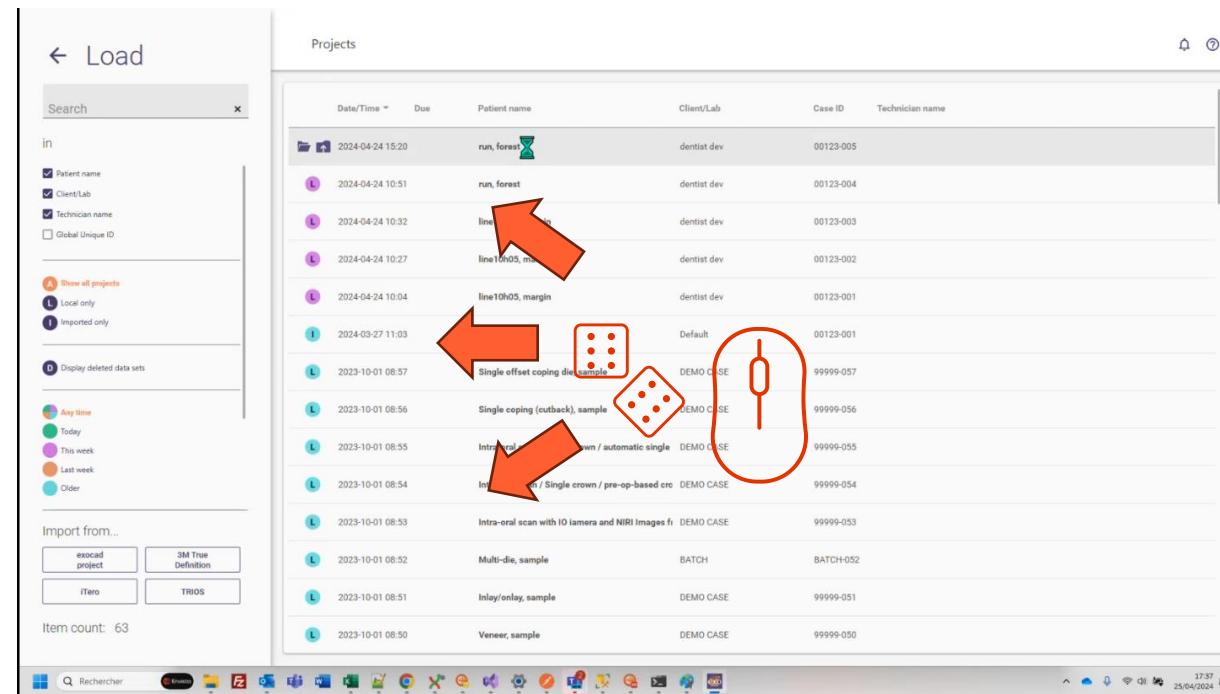


- Selecione qualquer projeto e carregue-o

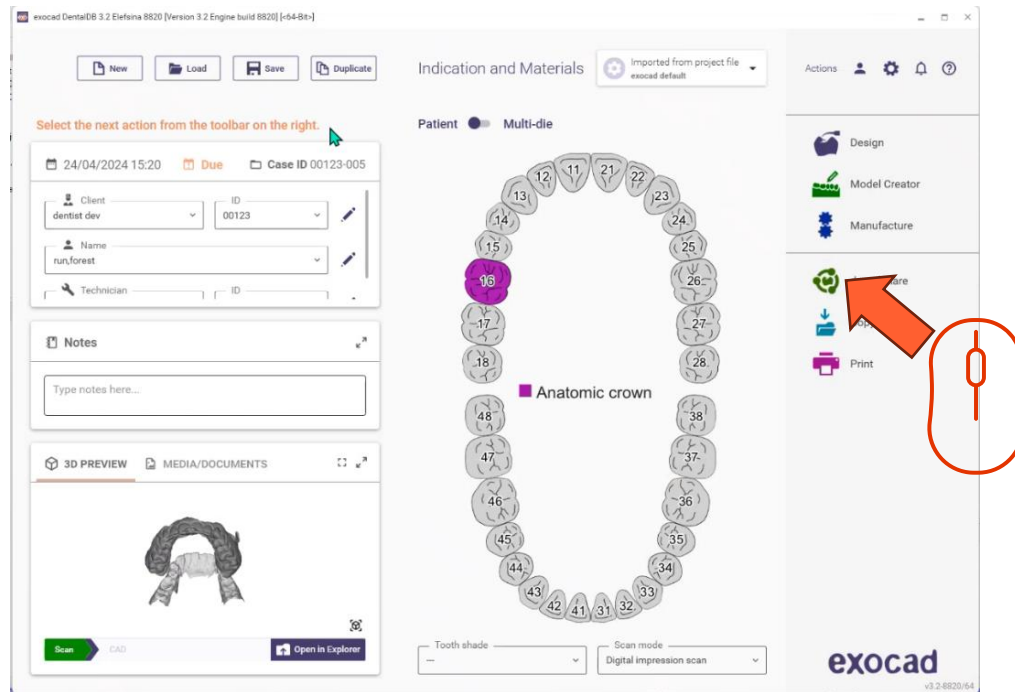


- Clique no ícone dentalshare

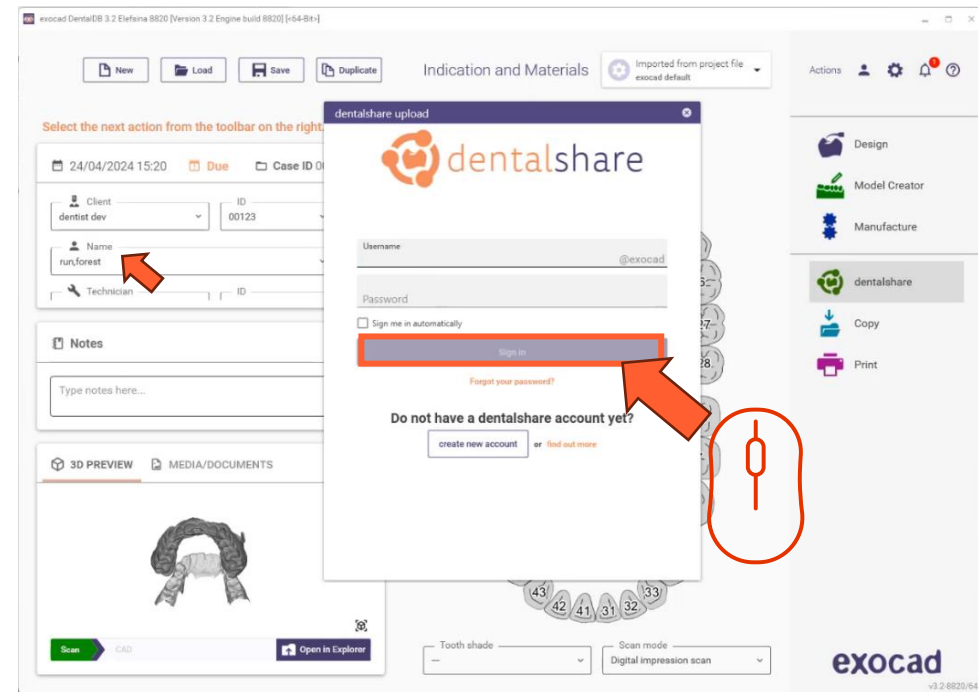


- Clique em “criar conta”.

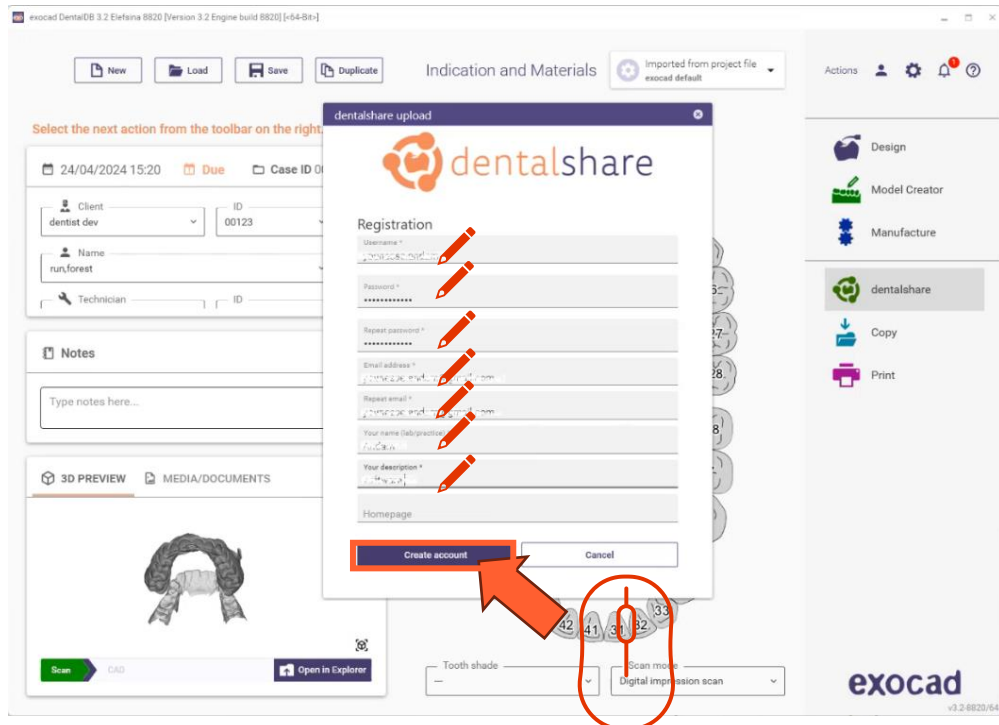


- Preencher as informações solicitadas
- Clique em 'criar conta'
- É enviado um e-mail para o e-mail da sua conta exocad

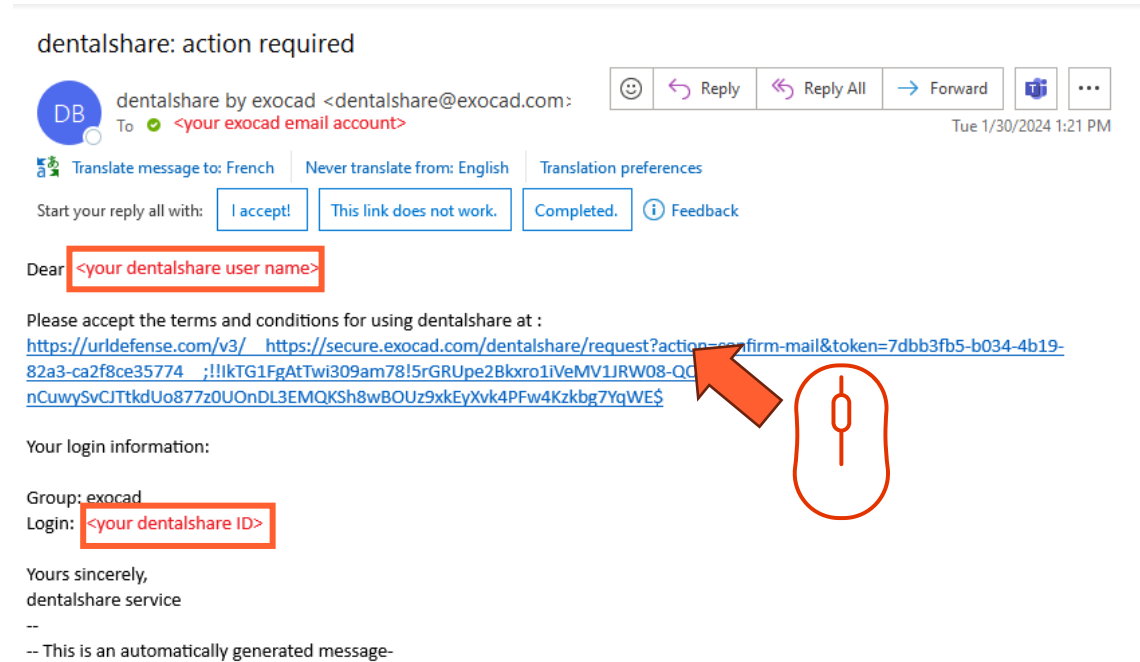

- Clique no link fornecido no e-mail dentalshare para aceitar os termos e condições dentalshare

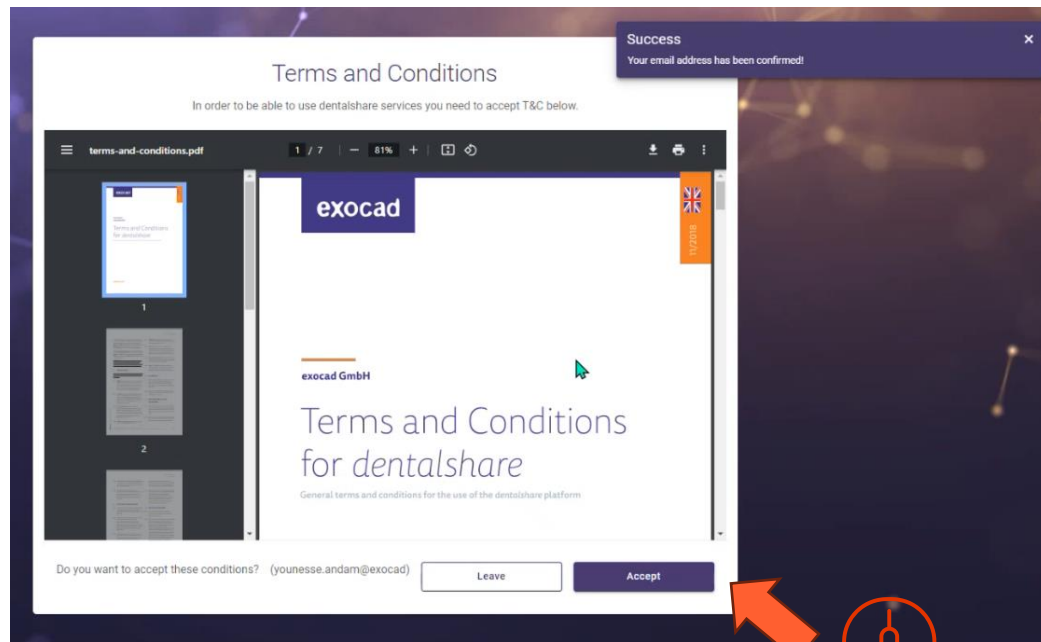


- Aceitar os termos e condições

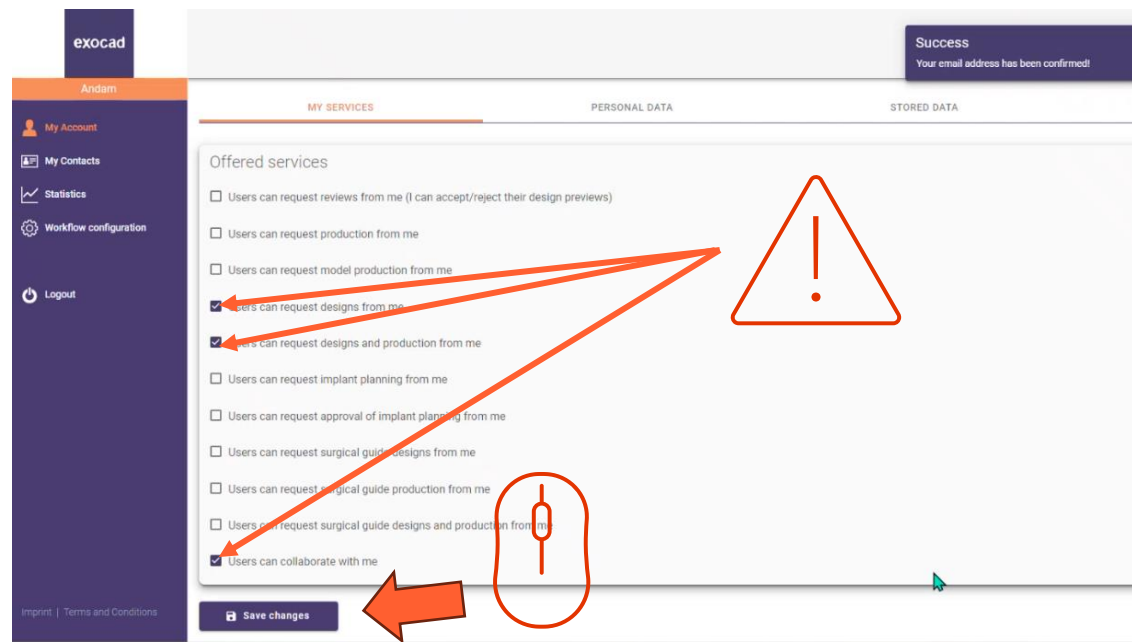


- Certifique-se de que a sua conta dentalshare está configurada para aceitar pedidos de desenho
- Clique em “guardar alterações”


Ativar a integração do exocad em IS Connect

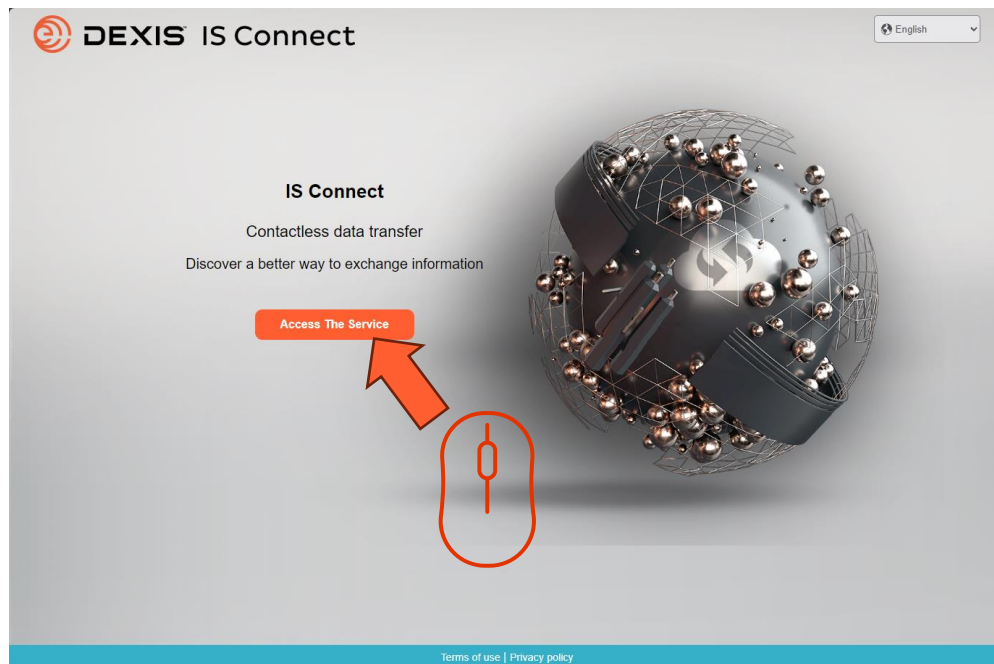


- Iniciar sessão no IS Connect

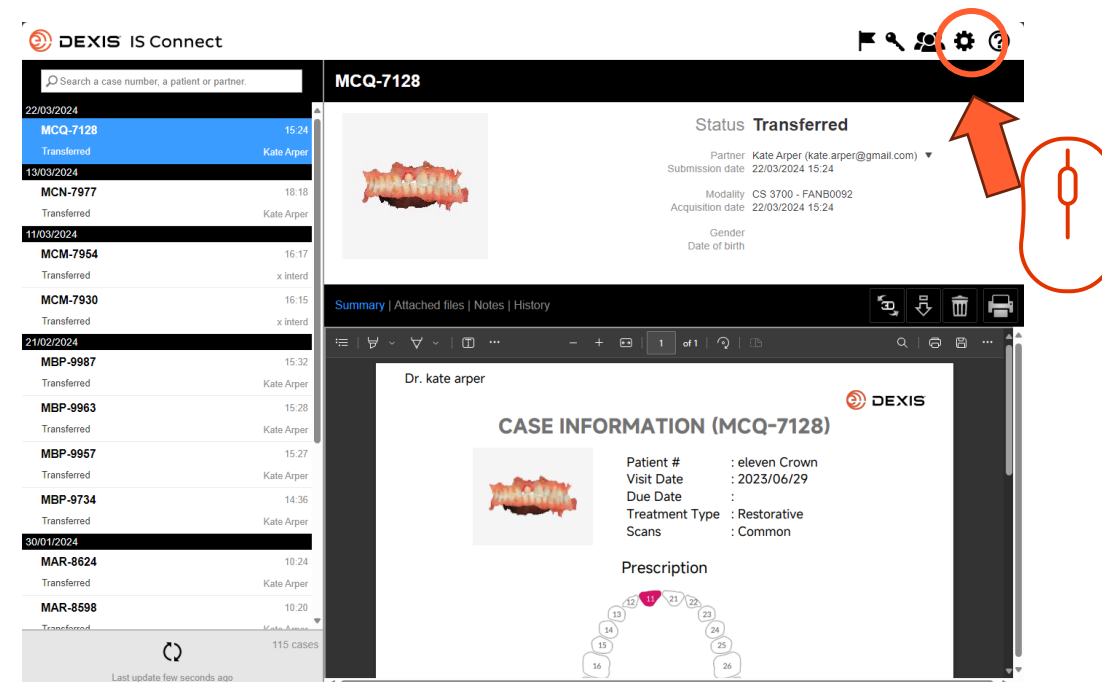


- Clique no ícone de definições

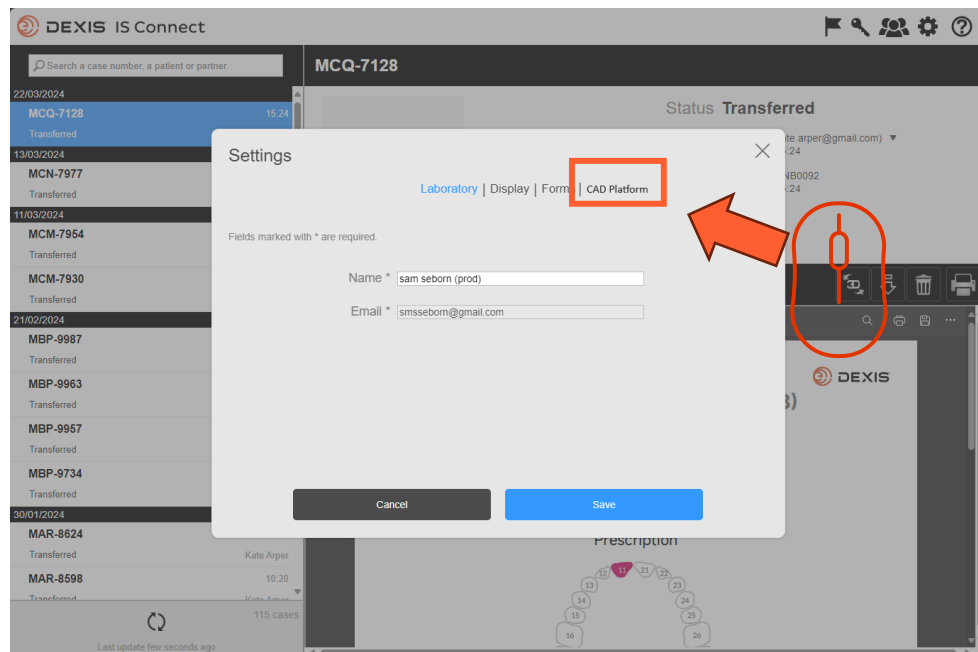


- Clique no separador “Plataforma CAD”

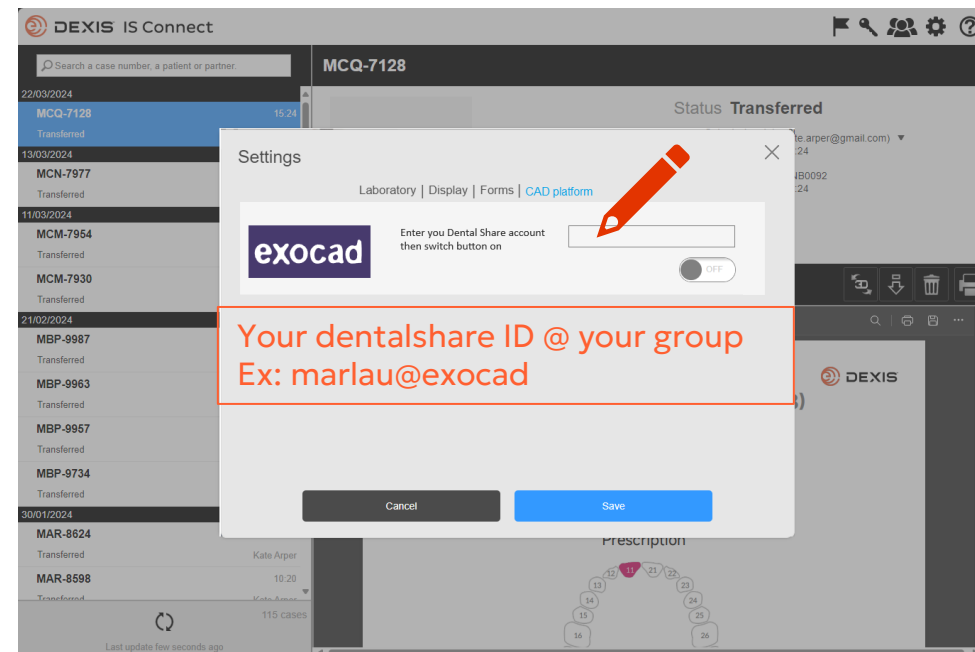

- Introduza o seu ID dentalshare

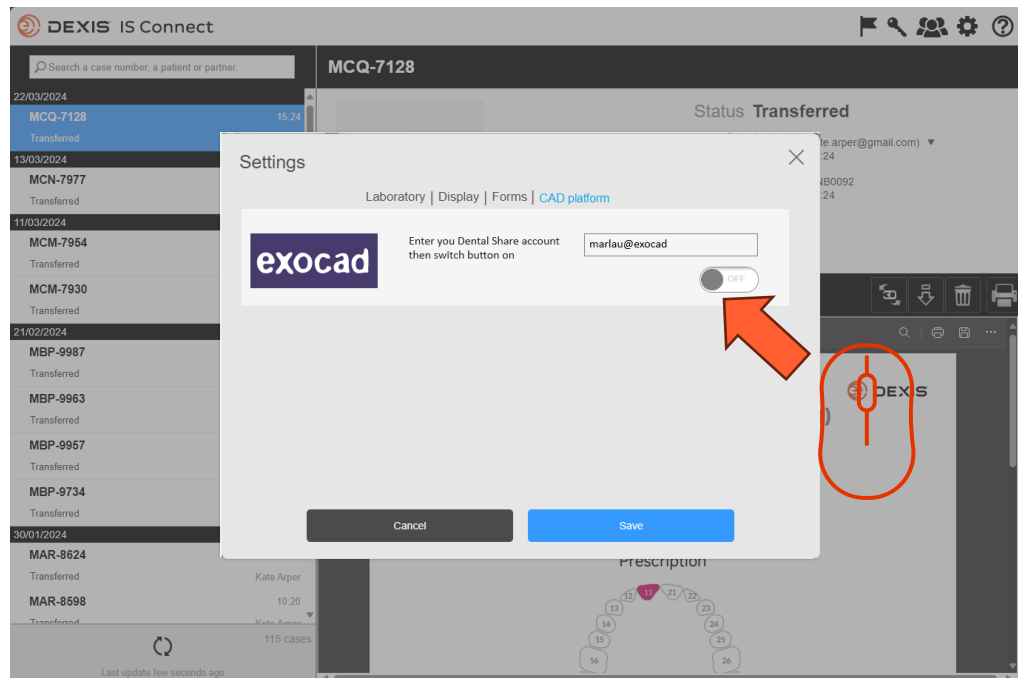


- Mudar o botão

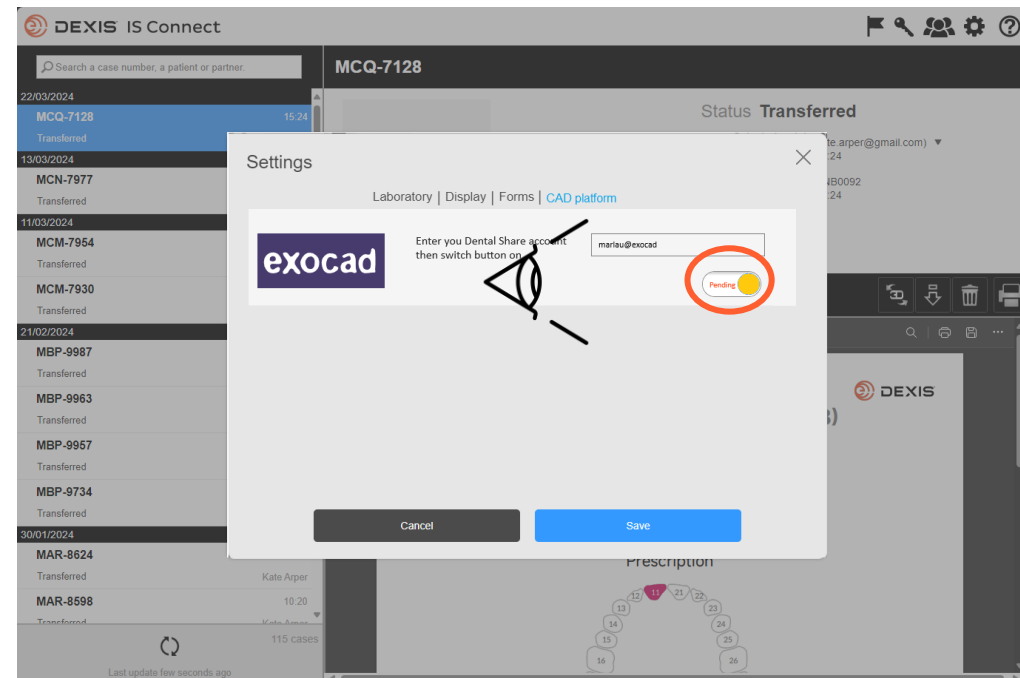

- O botão muda para o estado “pendente”.
- Pode sair do IS Connect e esperar por um convite dentalshare



dentalshare contact request

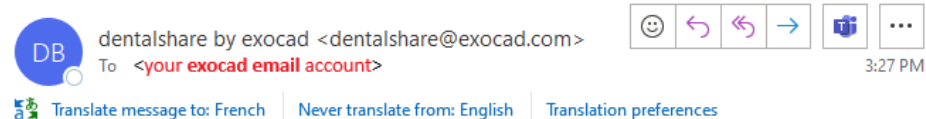

Dear <your dentalshare ID>

DEXIS IS Connect wants to offer a dentalshare community contact to you.

If you want to accept this contact, please click this link:

[https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=accept-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05SqBiv62VZzb3Ac\\$](https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=accept-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05SqBiv62VZzb3Ac$)


if you do not, please click this link:

[https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=decline-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05SqBiv62s4kiM30\\$](https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=decline-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05SqBiv62s4kiM30$)




Yours sincerely,
dentalshare service

--
-- This is an automatically generated message --



- Recebe um convite dentalshare da conta DEXIS IS Connect
- Clique na ligação para o aceitar

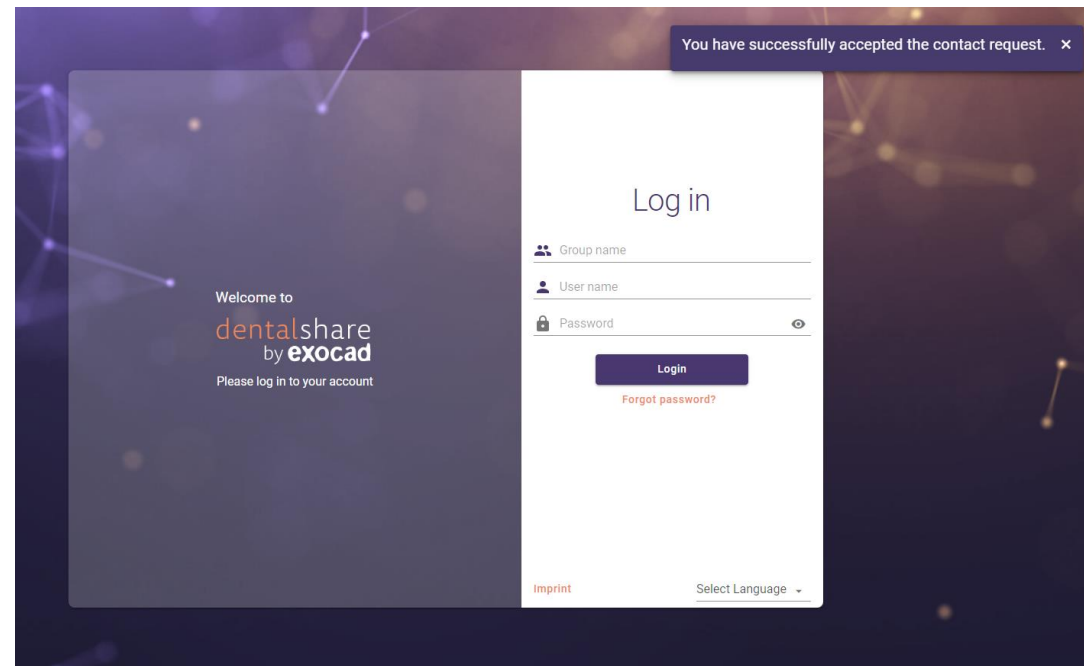

- O convite é confirmado
- Pode fechar os ecrãs dentalshare

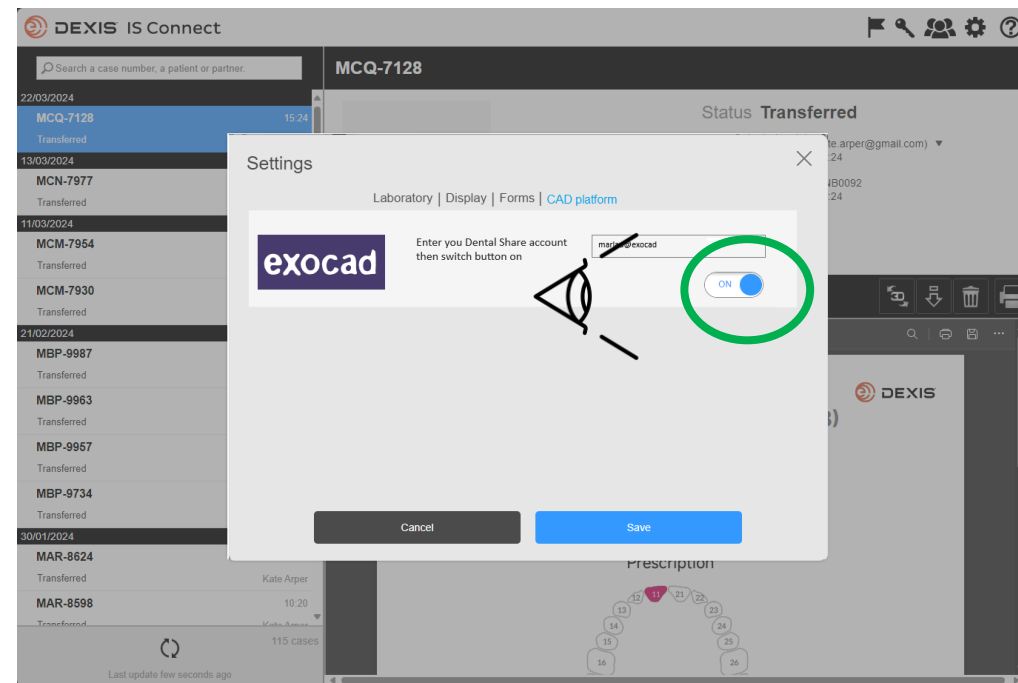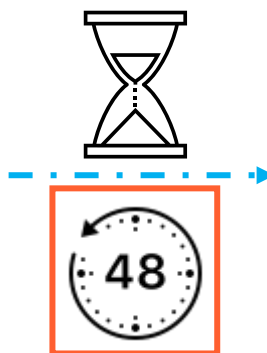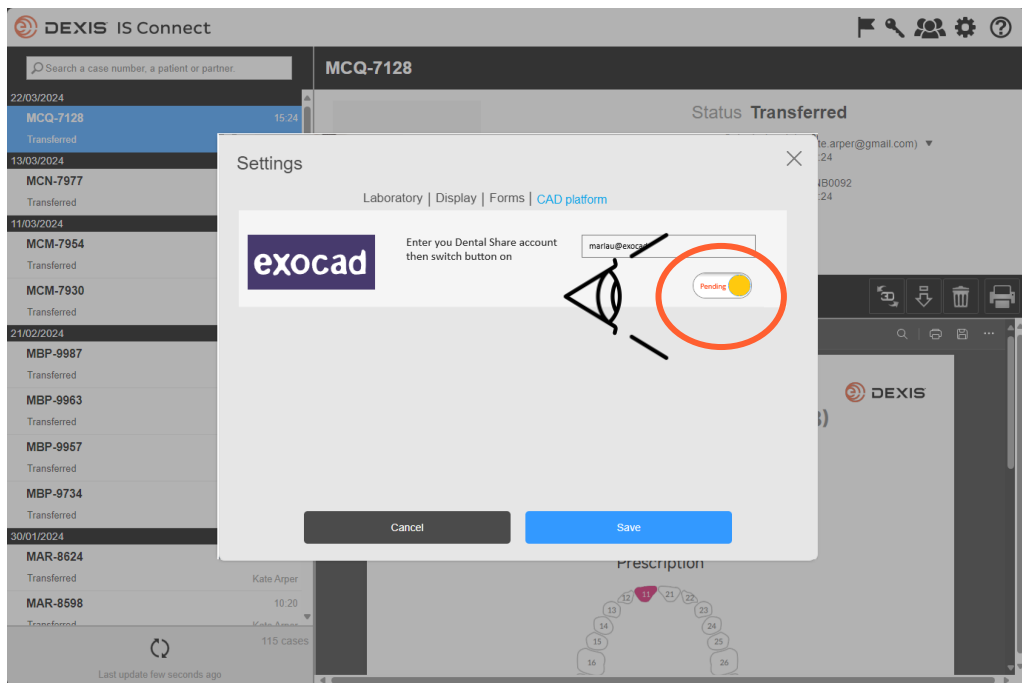


- Depois de ter aceite o convite dentalshare da DEXIS IS Connect, o botão exocad na definição IS Connect passará de pendente para “ON
- Poderá ser observado um atraso
- A integração está agora registada

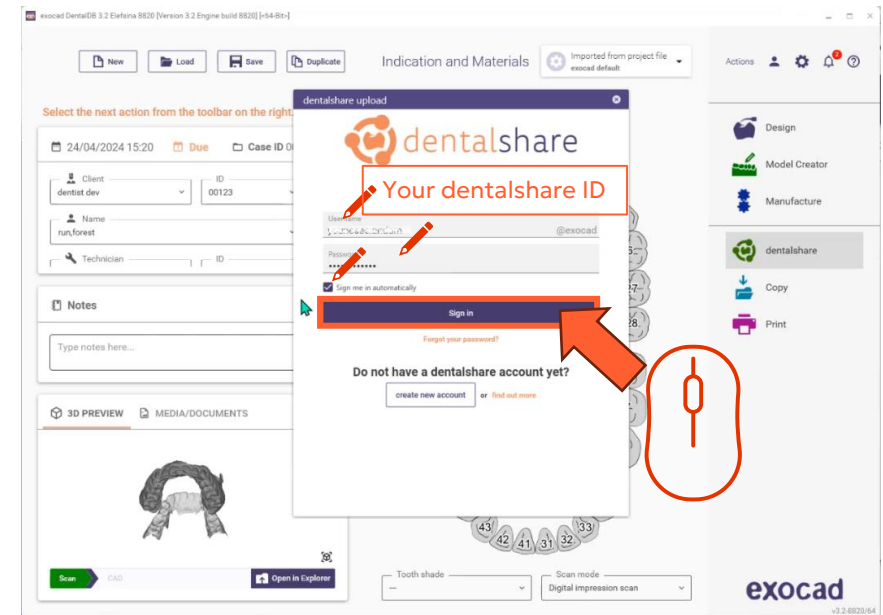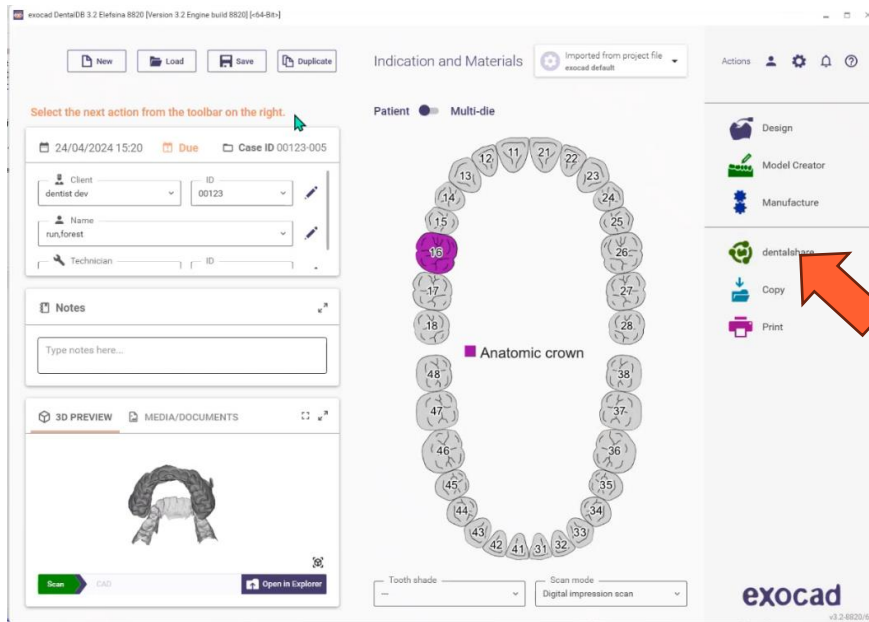

- Tem de iniciar sessão no dentalshare enquanto estiver no exocad DB para tornar a integração ativa

- Inicie sessão no dentalshare a partir do exocad DB com o seu ID dentalshare e selecione “iniciar sessão automaticamente”.


- O Dentalshare abre-se, pode fechá-lo
- Os casos IS Connect enviados para o seu laboratório serão agora entregues como dentários

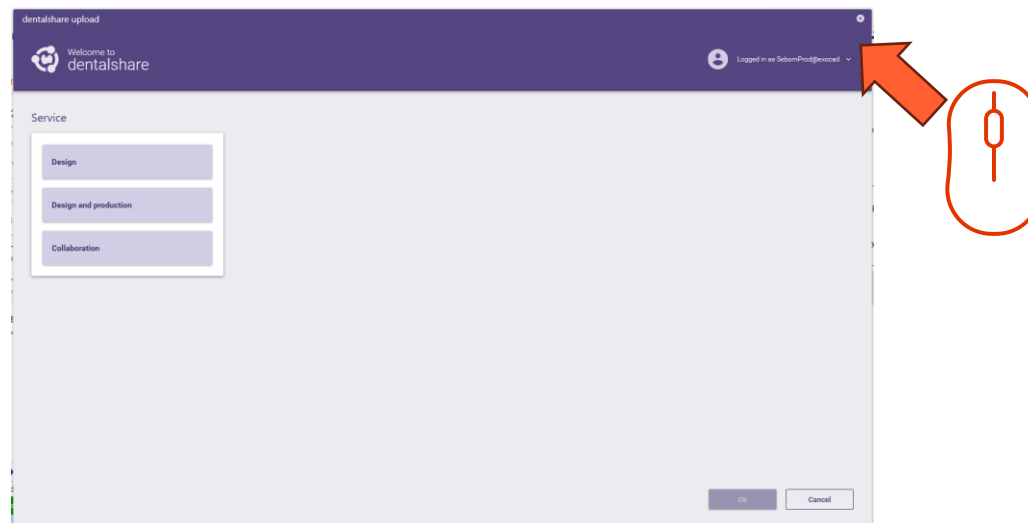




Istruzioni per l'integrazione DEXIS-exocad


Conti necessari

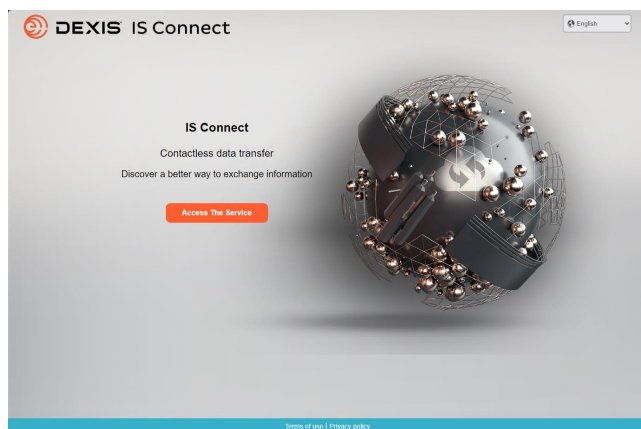

☐ IS Connect

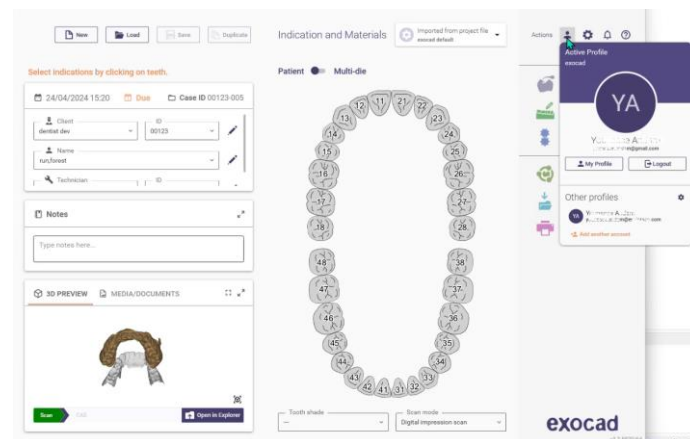


☐ exocad DB

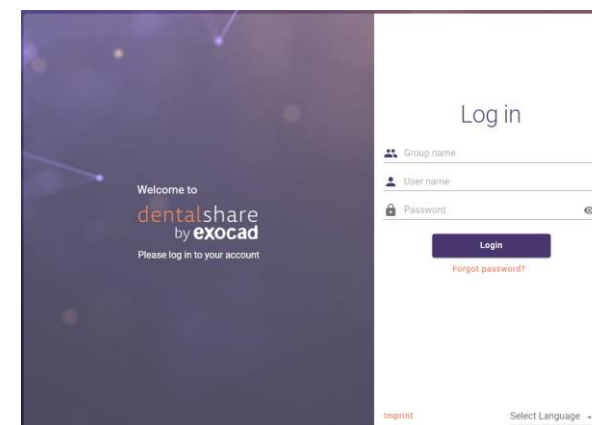

☐ exocad dentalshare

Avete un account dentalshare?

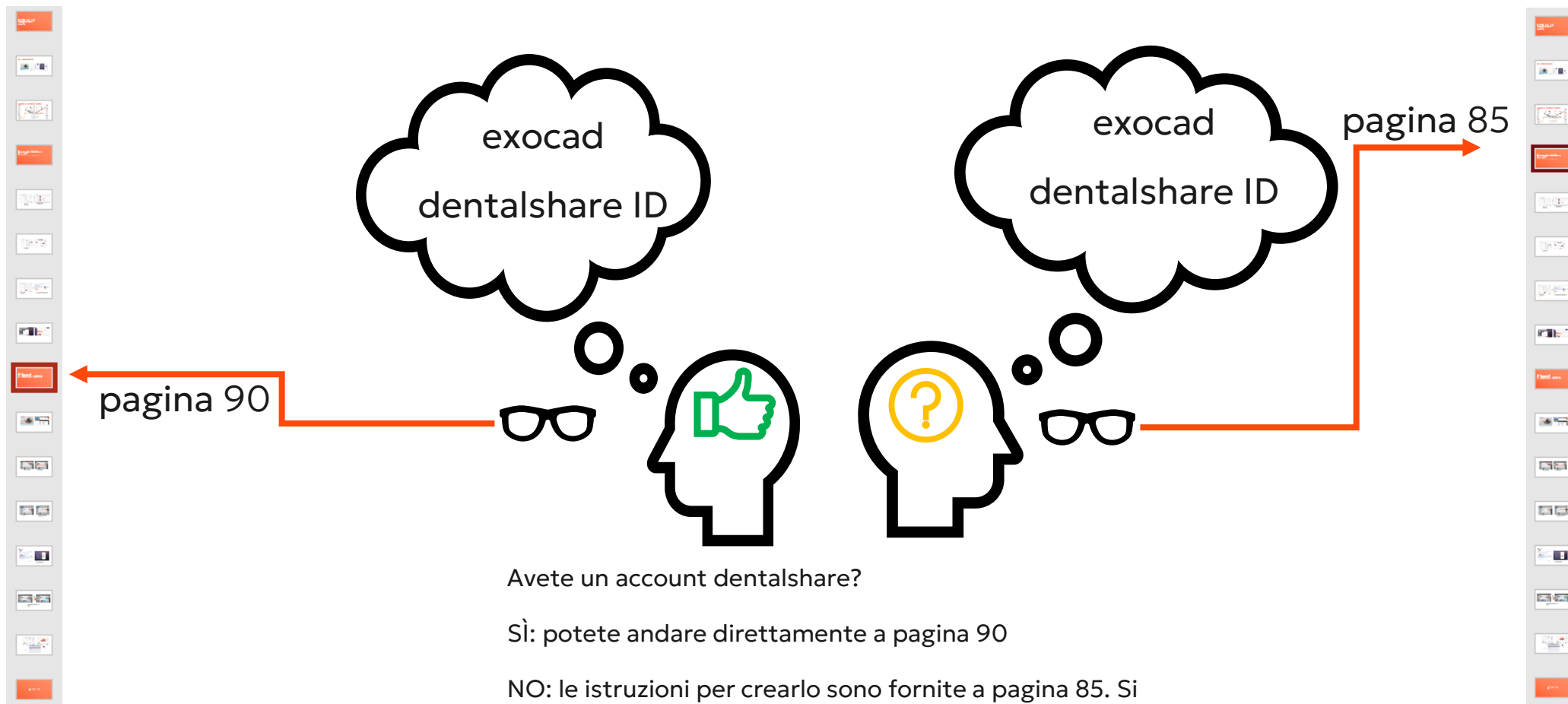


Avete un account dentalshare?

Sì: potete andare direttamente a pagina 90


NO: le istruzioni per crearlo sono fornite a pagina 85. Si
può anche visitare

https://wiki.exocad.com/wiki/index.php/Signing_up_to_Dentalshare


Creare un dentalshare ID

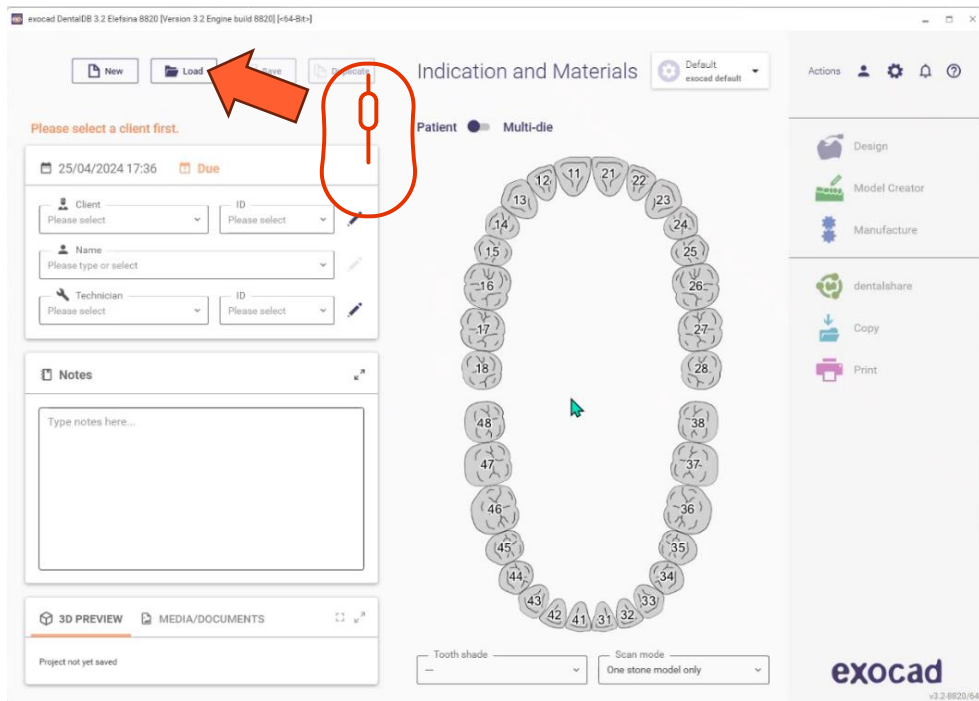


- Aprire il DB exocad
- Fare clic sul pulsante Carica

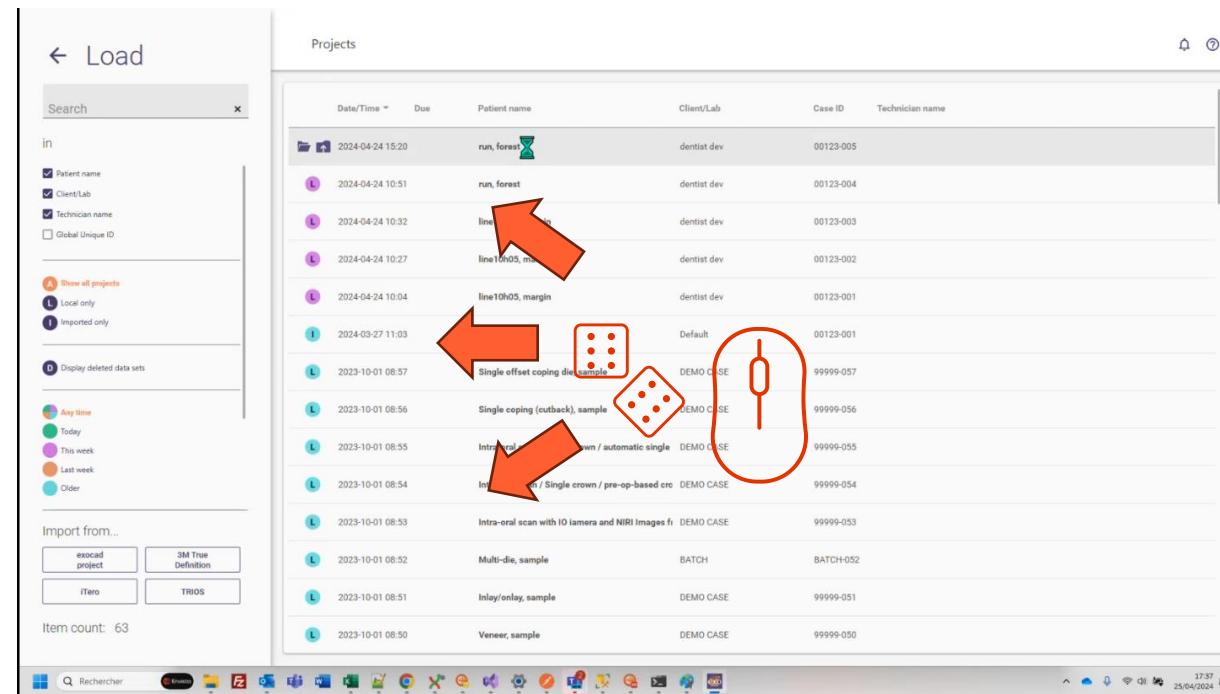


- Selezionare un progetto qualsiasi e caricarlo

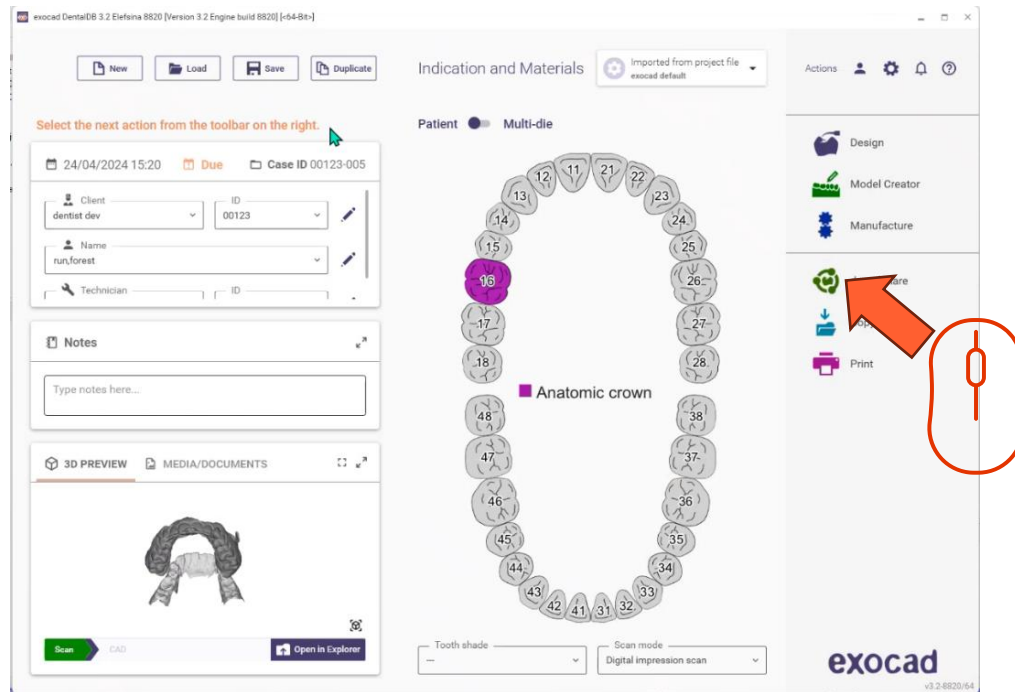


- Fare clic sull'icona dentalshare

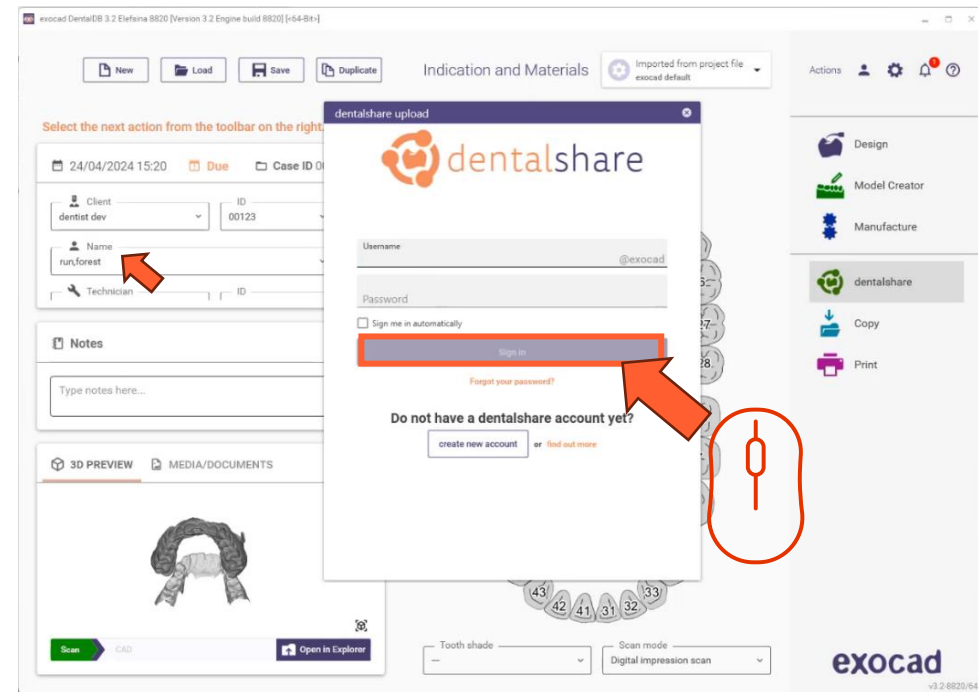


- Fare clic su "crea account"

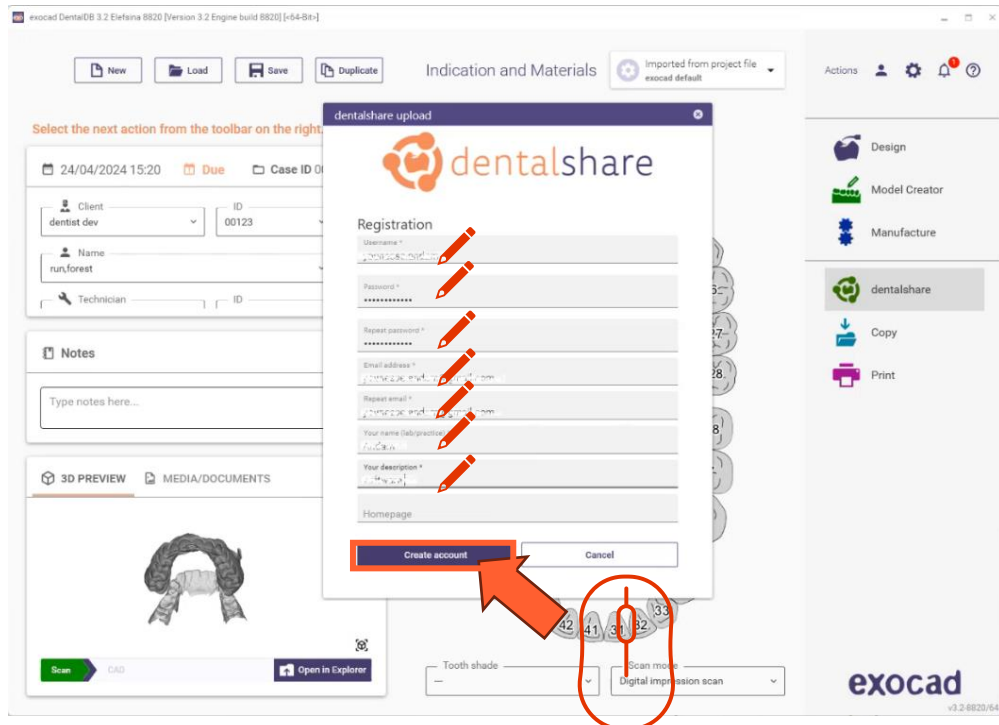


- Compilare le informazioni richieste
- Fare clic su “crea account”.
- Viene inviata un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica dell'account exocad

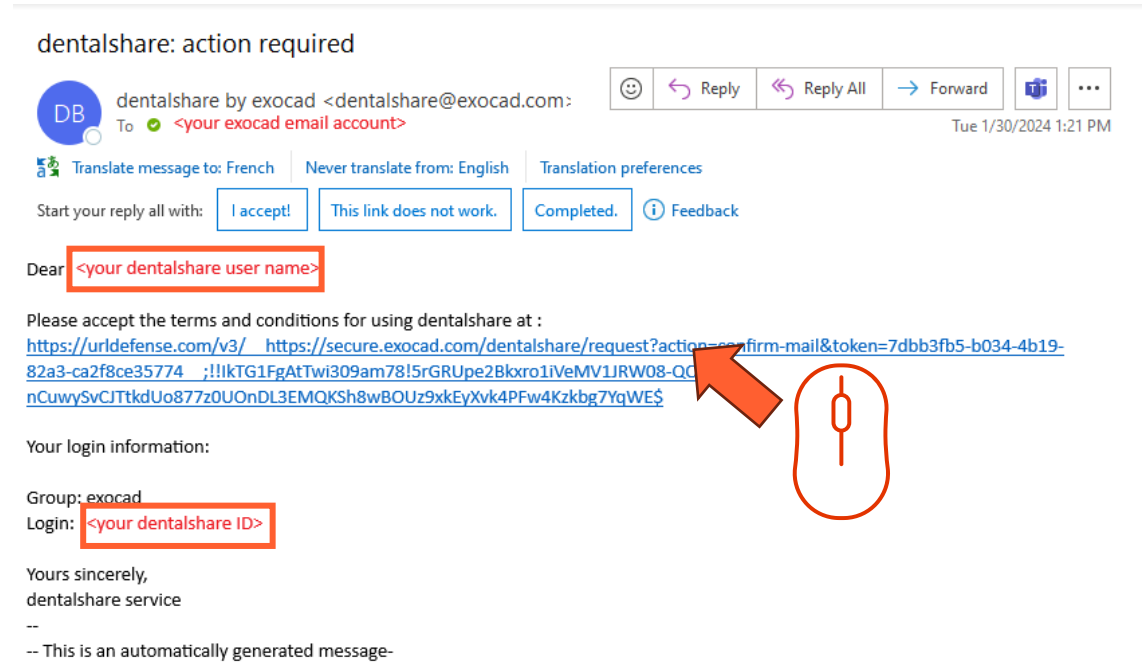

- Fare clic sul link fornito nell'e-mail di dentalshare per accettare i termini e le condizioni di dentalshare.

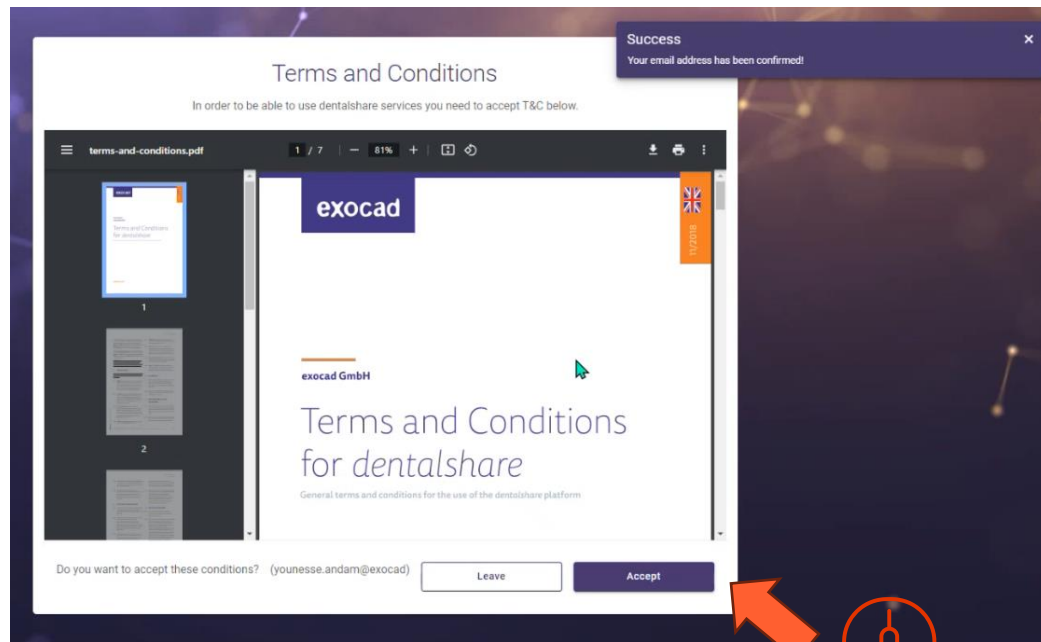


- Accettare i termini e le condizioni

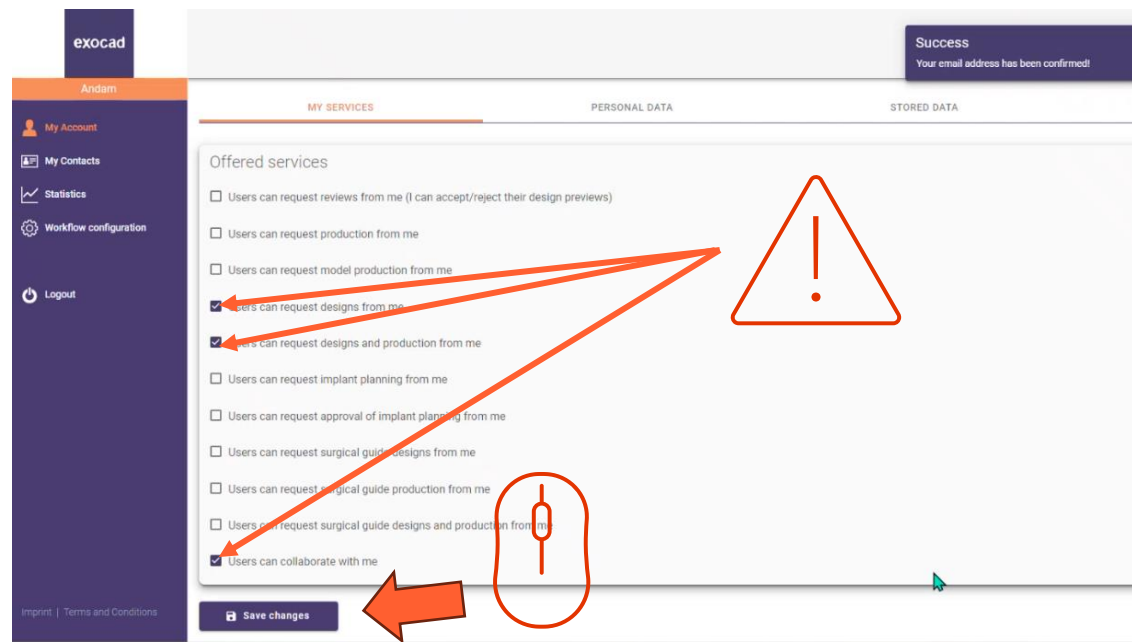


- Assicurarsi che l'account dentalshare sia configurato per accettare le richieste di progettazione.
- Fare clic su «Salva modifiche»


Abilitazione dell'integrazione di exocad in IS Connect

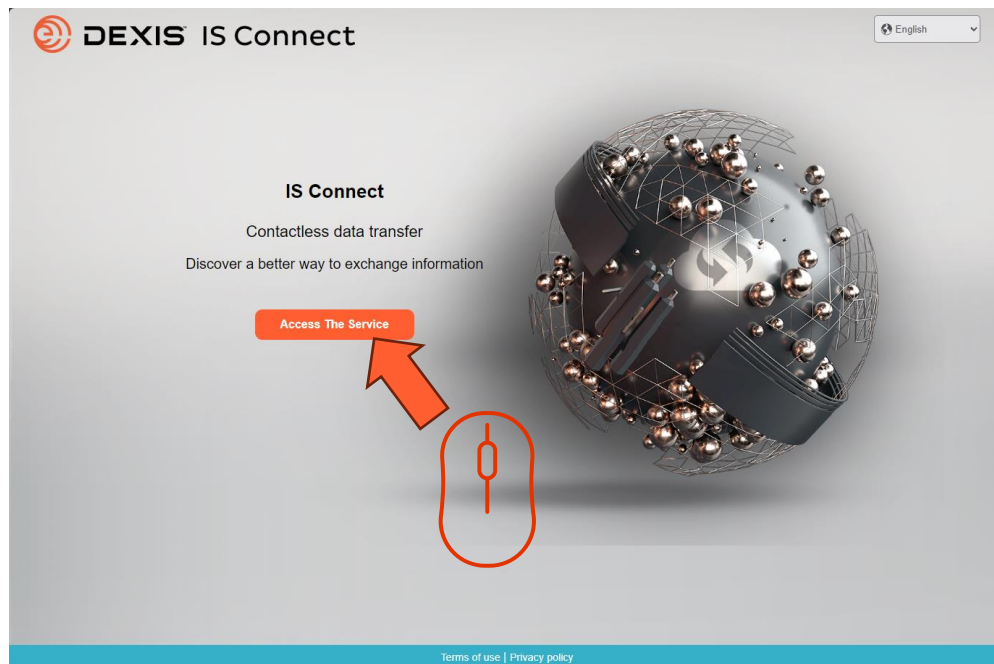


- Accedere a IS Connect

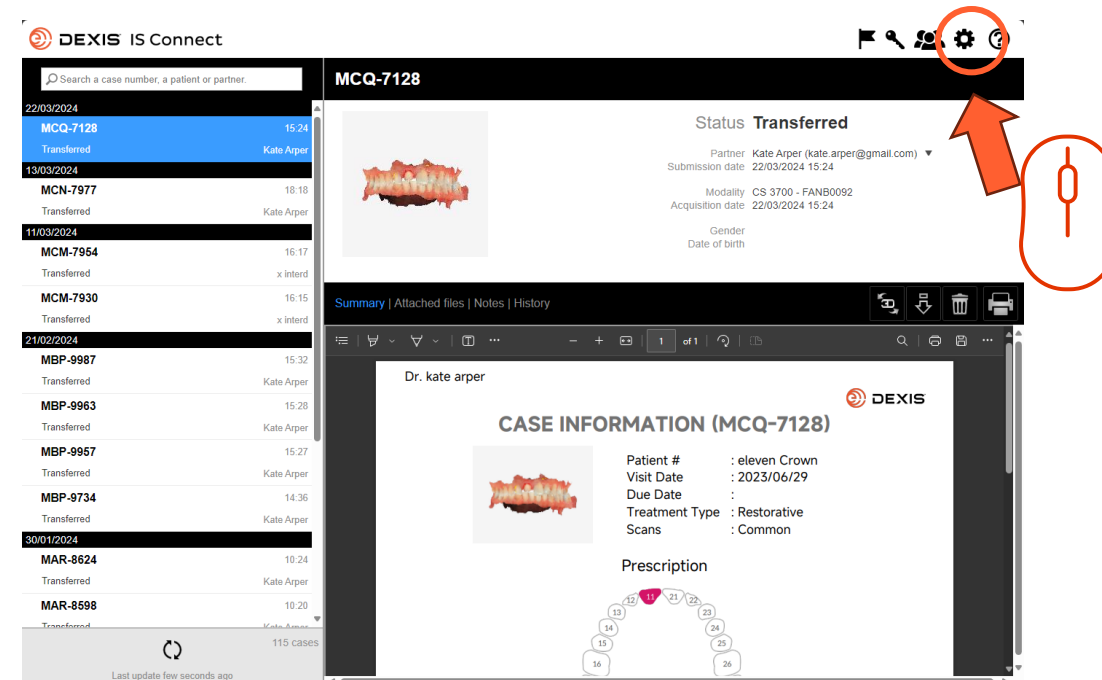


- Fare clic sull'icona delle impostazioni

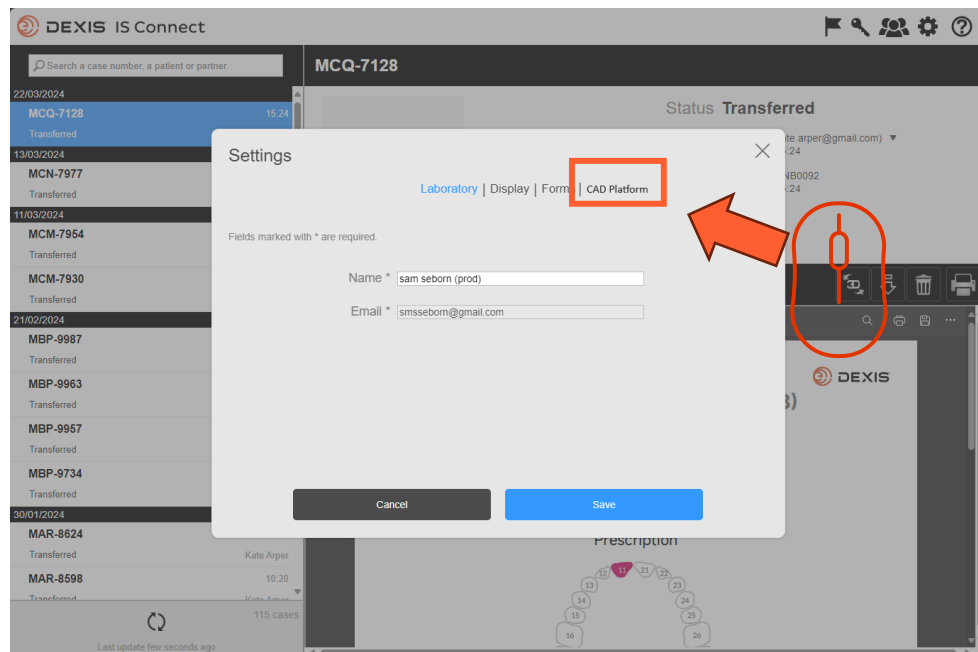


- Fare clic sulla scheda «Piattaforma CAD»

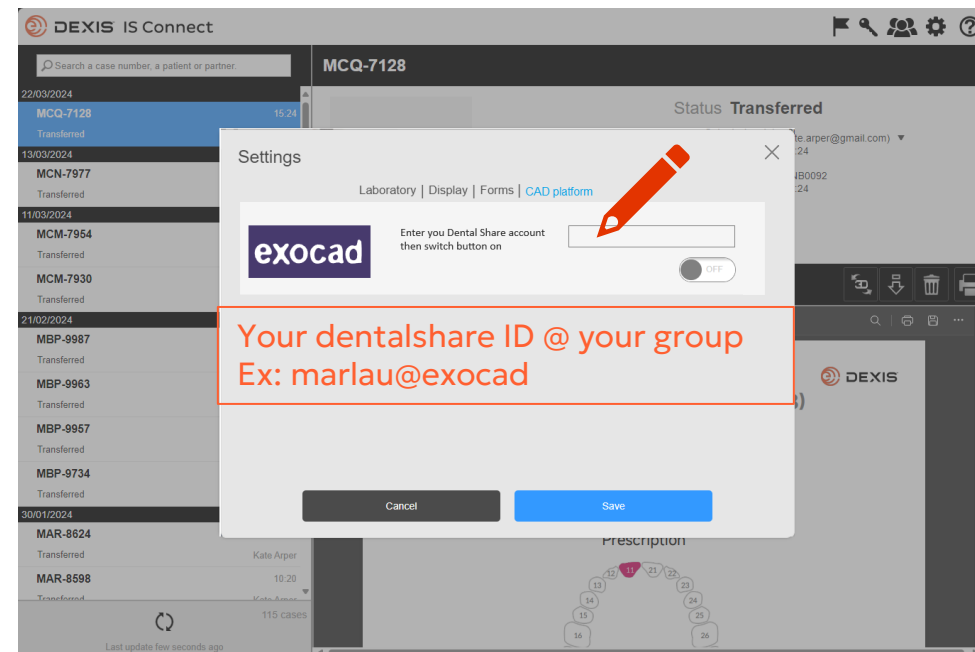

- Digitare il proprio ID dentalshare

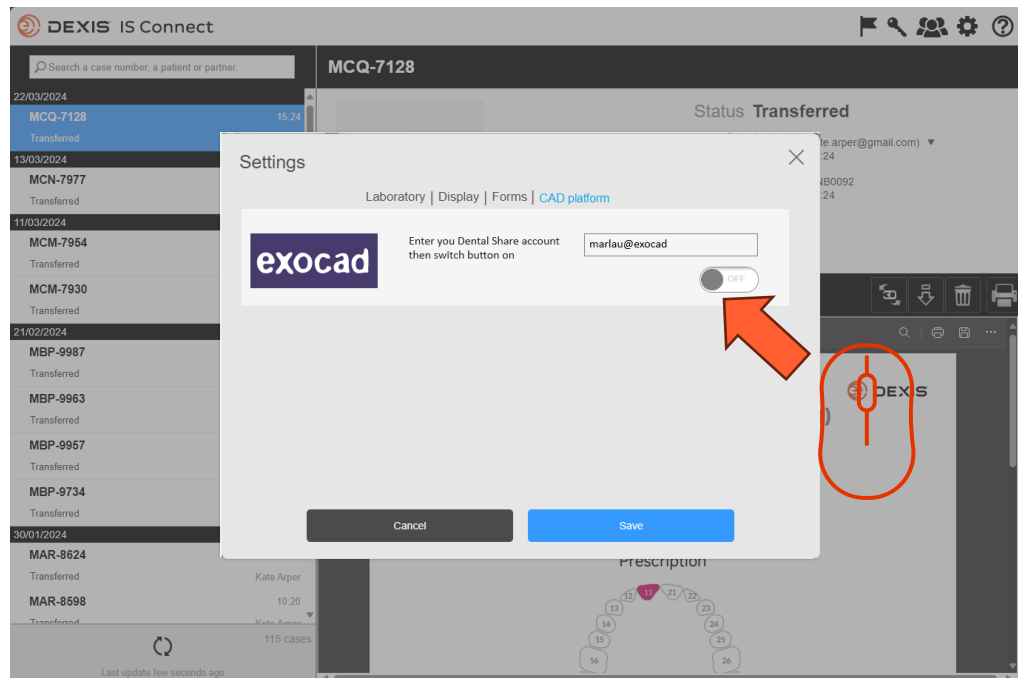


- Cambiare il pulsante

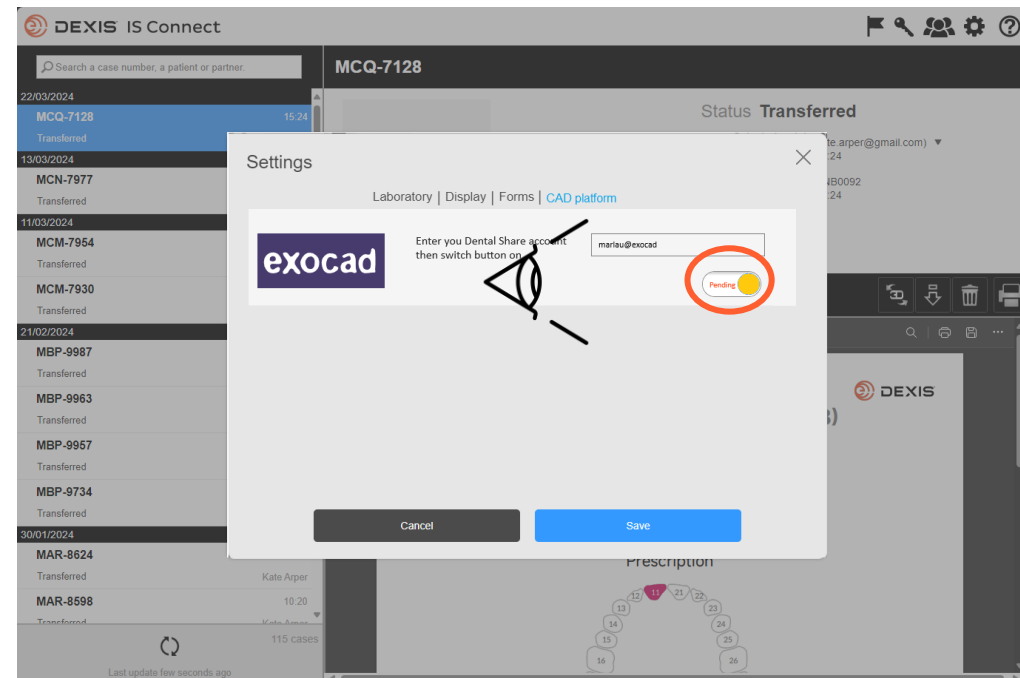

- Il pulsante passa allo stato “in attesa”.
- Si può uscire da IS Connect e attendere un invito dentalshare



dentalshare contact request

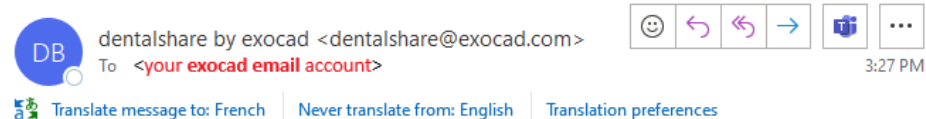

Dear <your dentalshare ID>

DEXIS IS Connect wants to offer a dentalshare community contact to you.

If you want to accept this contact, please click this link:

[https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=accept-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwi309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62VZzb3Ac\\$](https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=accept-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwi309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62VZzb3Ac$)


if you do not, please click this link:

[https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=decline-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwi309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62s4kiM30\\$](https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=decline-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwi309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62s4kiM30$)




Yours sincerely,
dentalshare service

-- This is an automatically generated message --



- Si riceve un invito a dentalshare dall'account DEXIS IS Connect
- Fare clic sul link per accettarlo

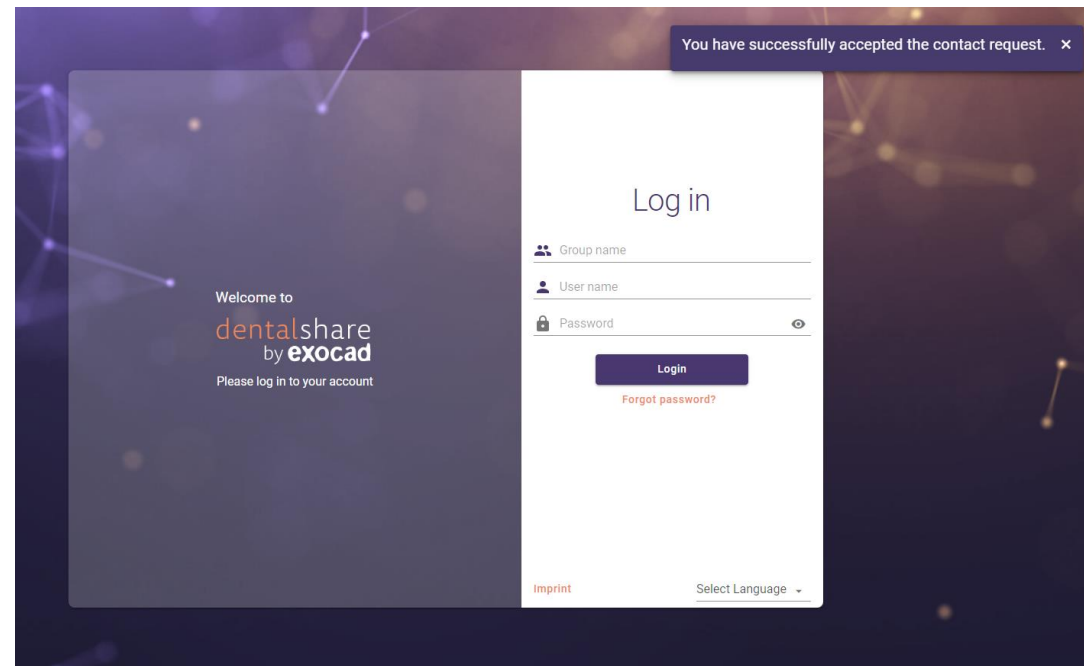

- L'invito è confermato
- Si possono chiudere le schermate di dentalshare

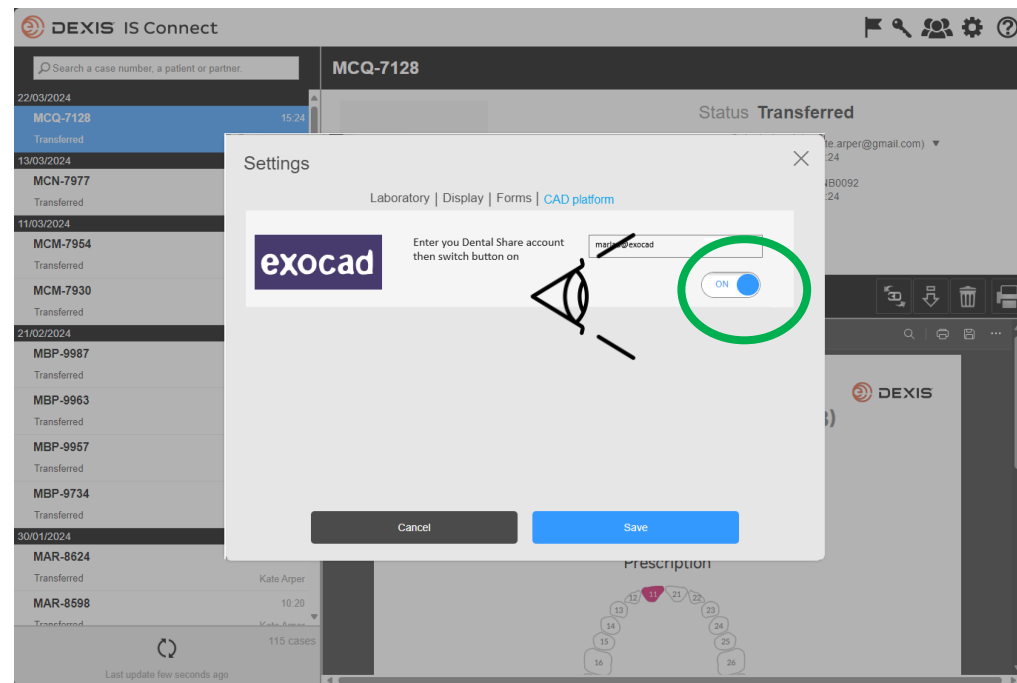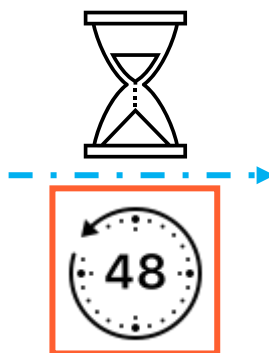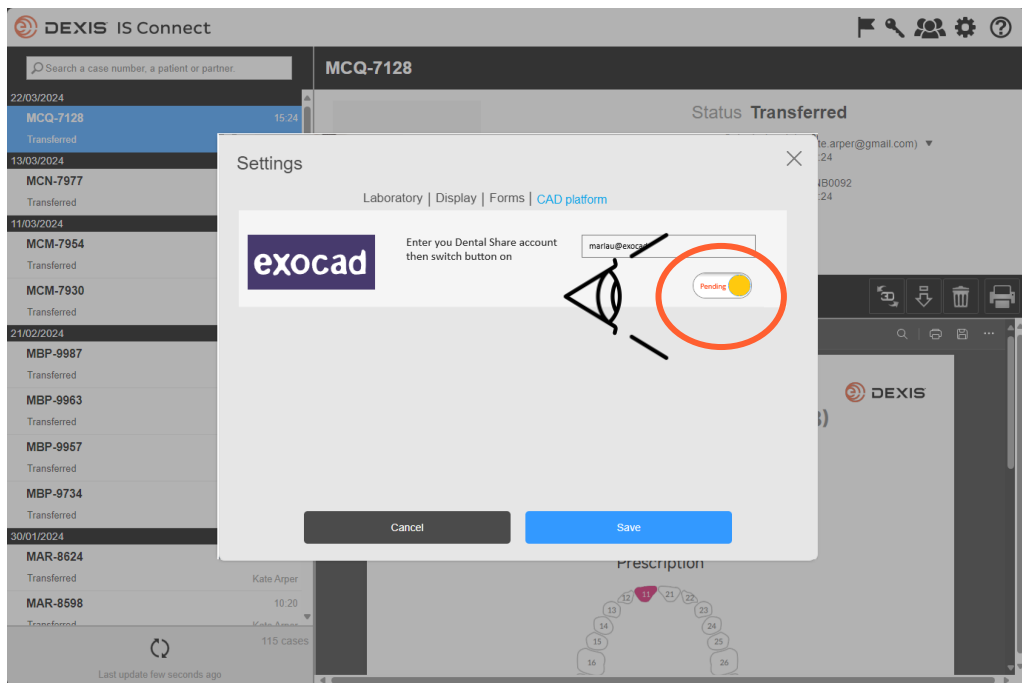


- Dopo aver accettato l'invito a dentalshare DEXIS IS Connect, il pulsante exocad nelle impostazioni di IS Connect passerà da “pending” a “ON”.
- Si può osservare un ritardo
- L'integrazione è ora registrata

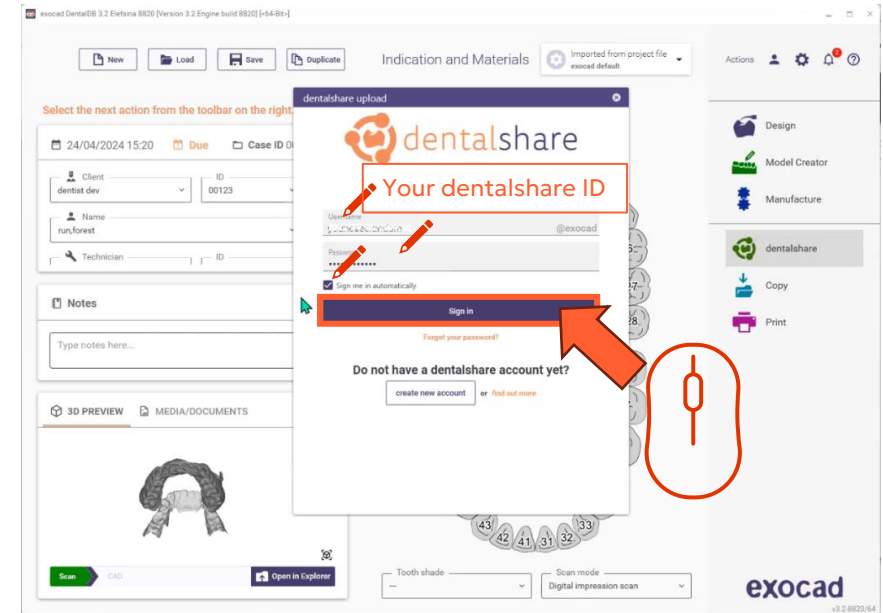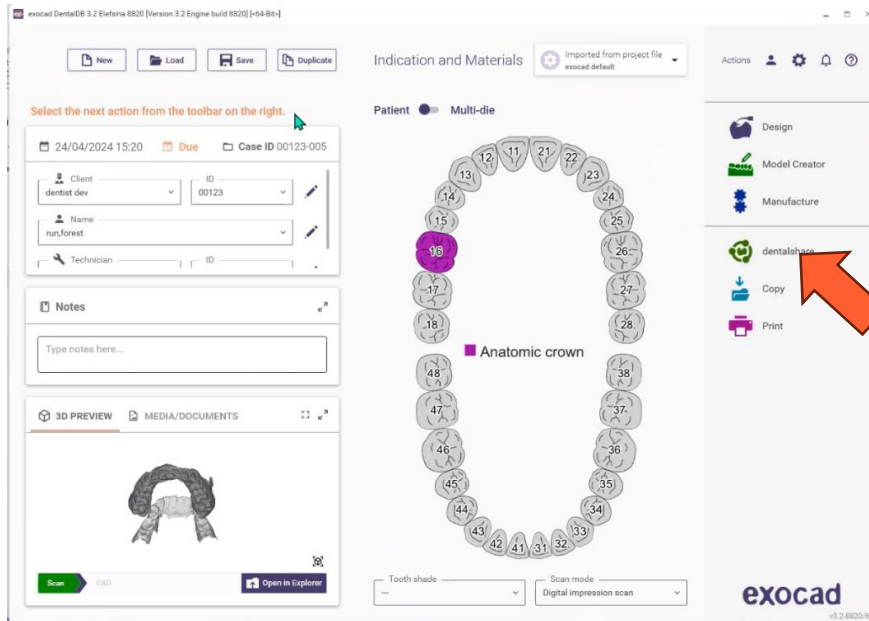

- Per rendere attiva l'integrazione, è necessario accedere a dentalshare mentre si è nel DB di exocad.

- Accedere a dentalshare da exocad DB con il proprio ID dentalshare e selezionare “Accedi automaticamente”.


- Dentalshare si apre, si può chiudere
- I casi IS Connect inviati al vostro laboratorio saranno ora consegnati come dentalshare

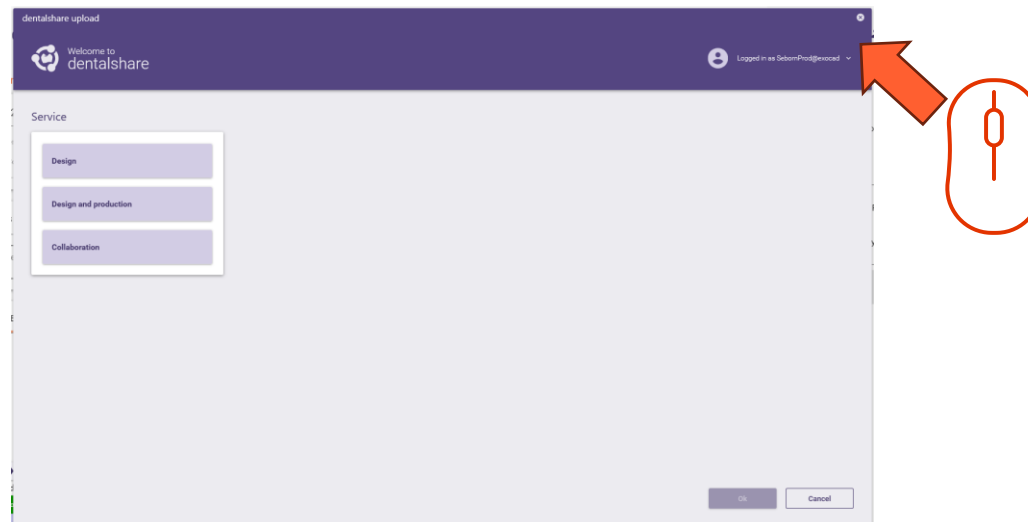




Instruktioner för integration av DEXIS-exocad


Nödvändiga konton

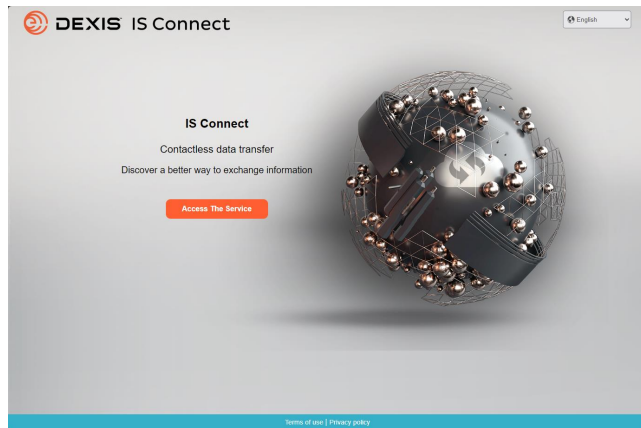

☐ IS Connect

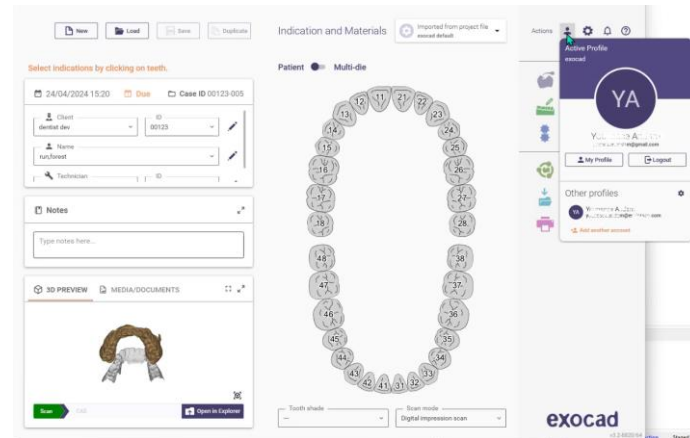


☐ exocad DB

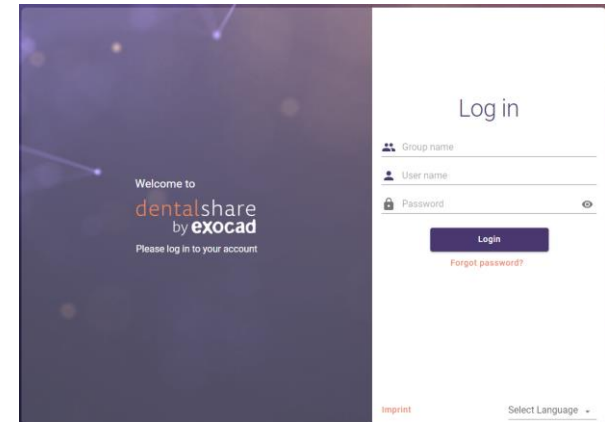

☐ exocad dentalshare

Har du ett dentalshare-konto?

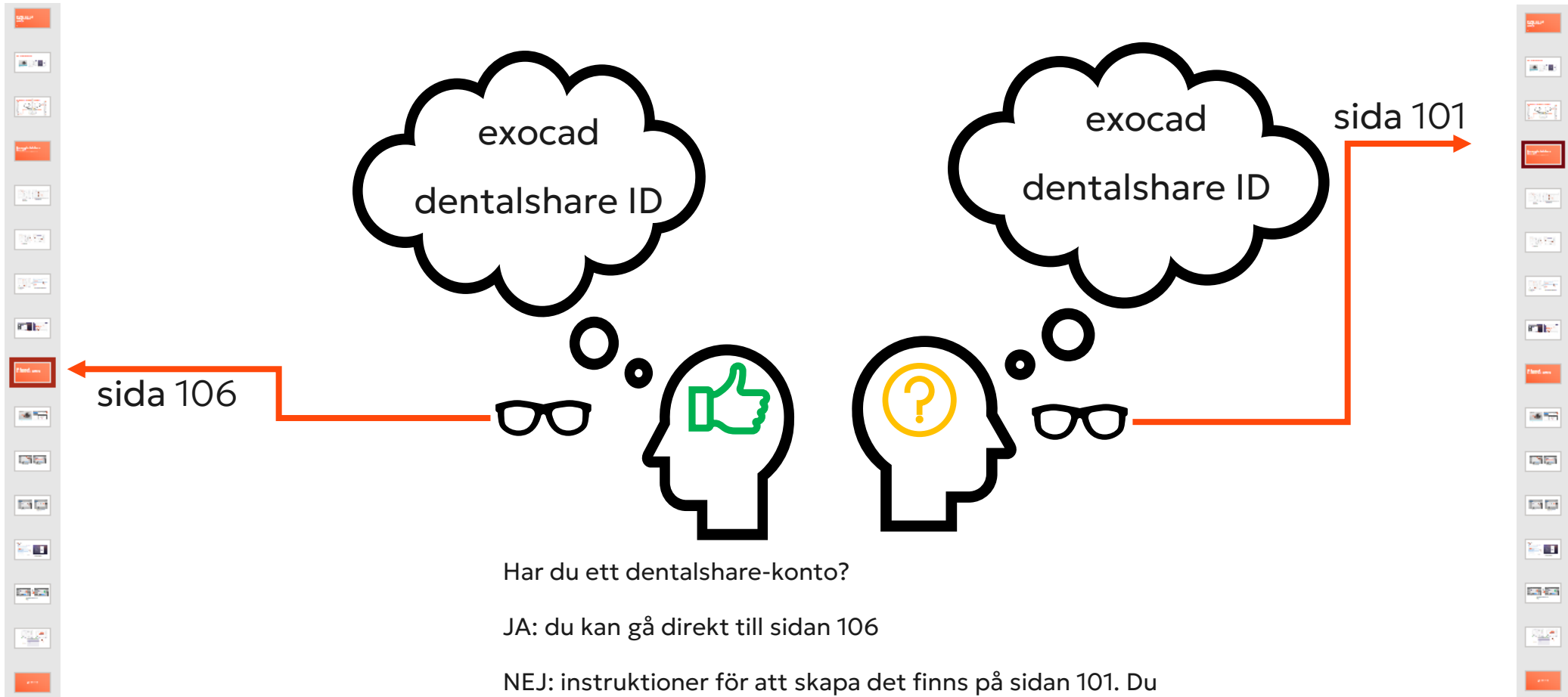


Har du ett dentalshare-konto?

JA: du kan gå direkt till sidan 106


NEJ: instruktioner för att skapa det finns på sidan 101. Du kan också besöka

https://wiki.exocad.com/wiki/index.php/Signing_up_to_Dentalshare


Skapa ett dentalshare ID

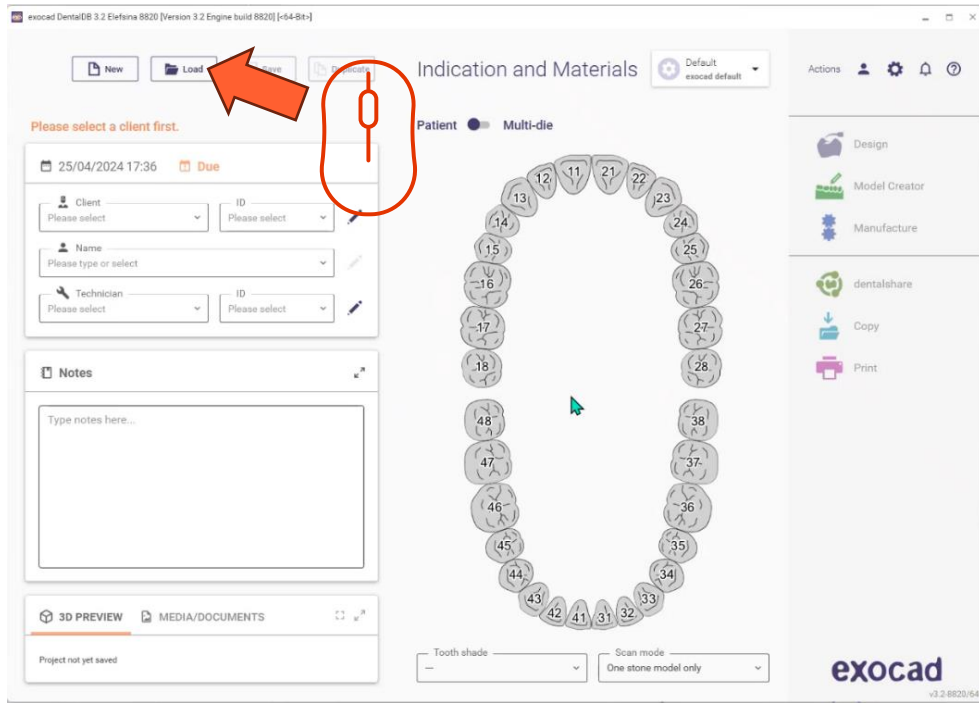


- Öppna exocad DB
- Klicka på laddningsknappen

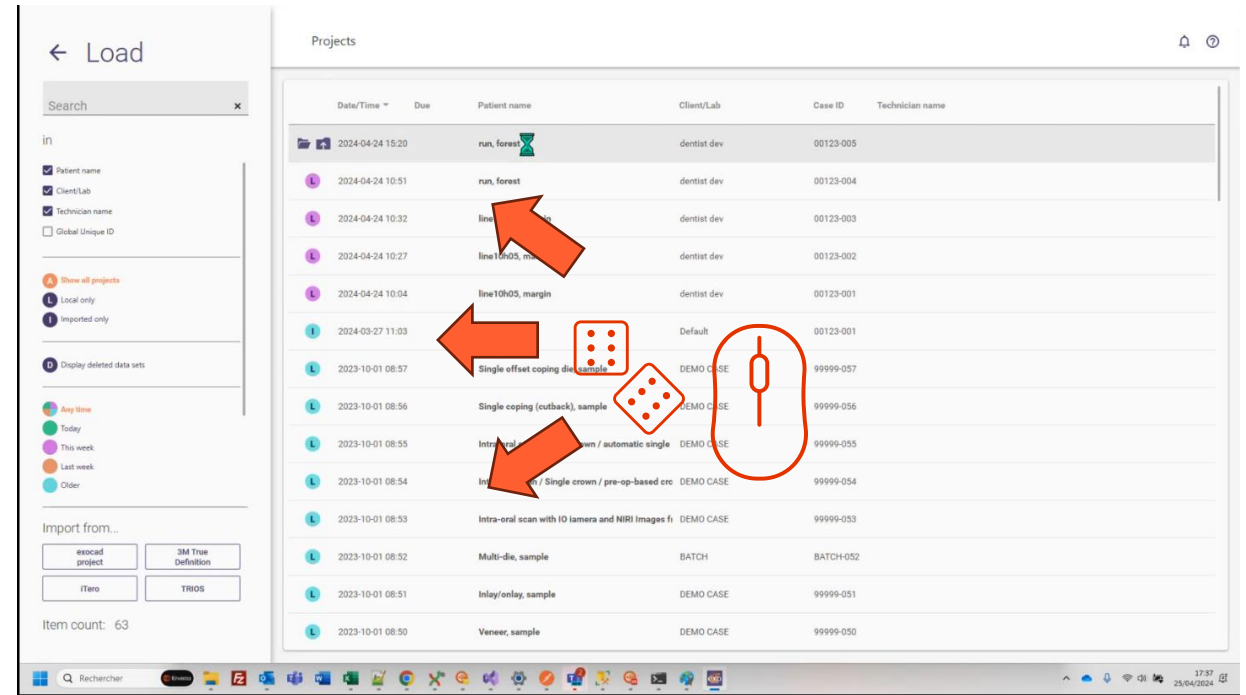


- Välj valfritt projekt och ladda det

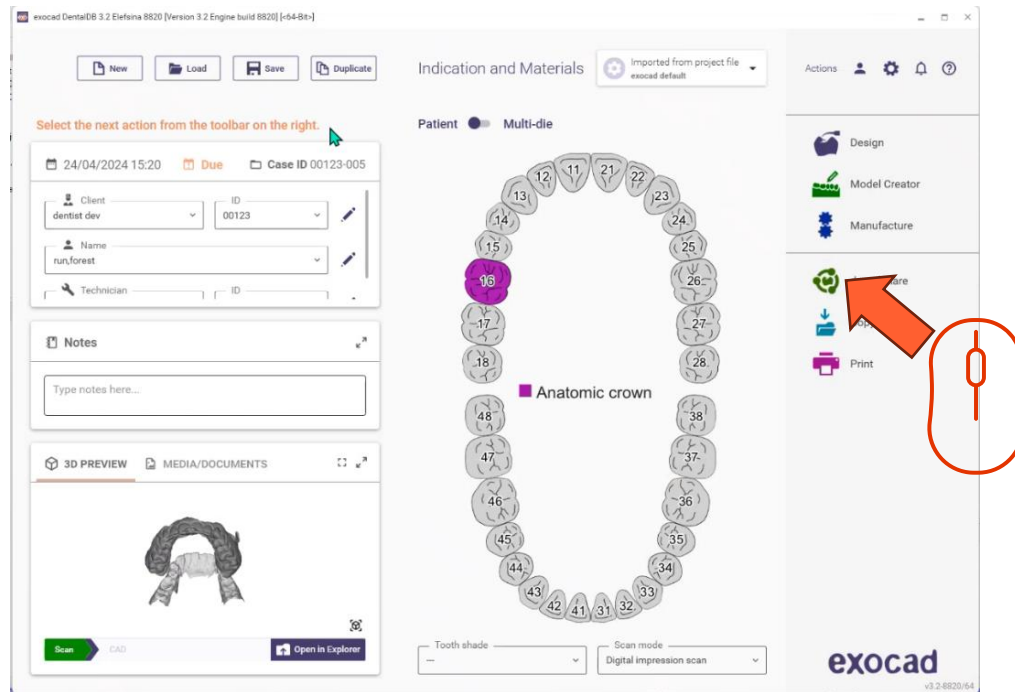


- Klicka på dentalshare-ikonen

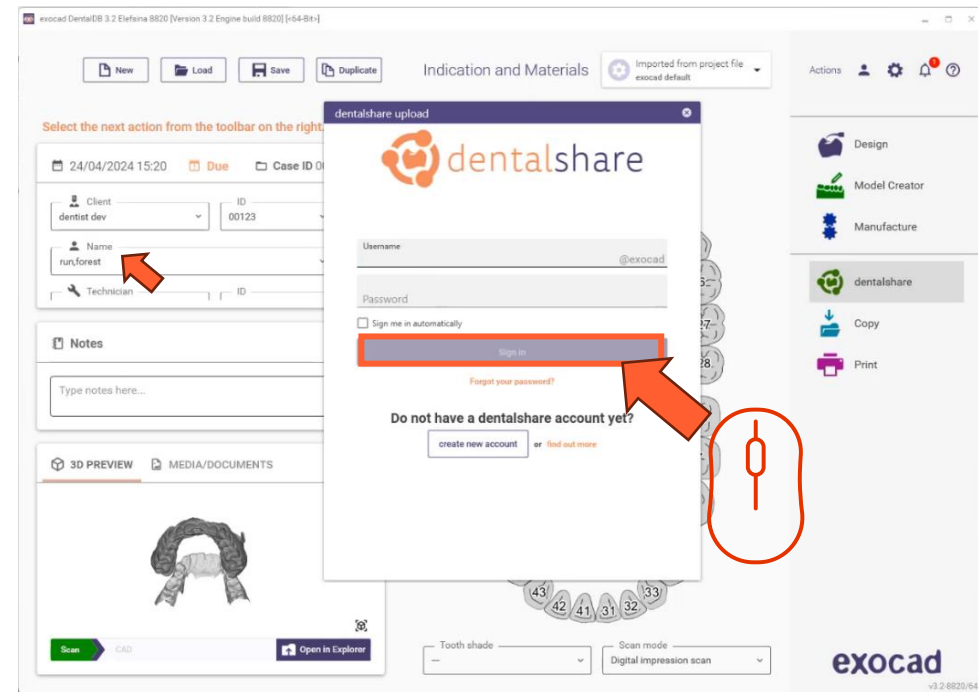


- Klicka på ”skapa konto“

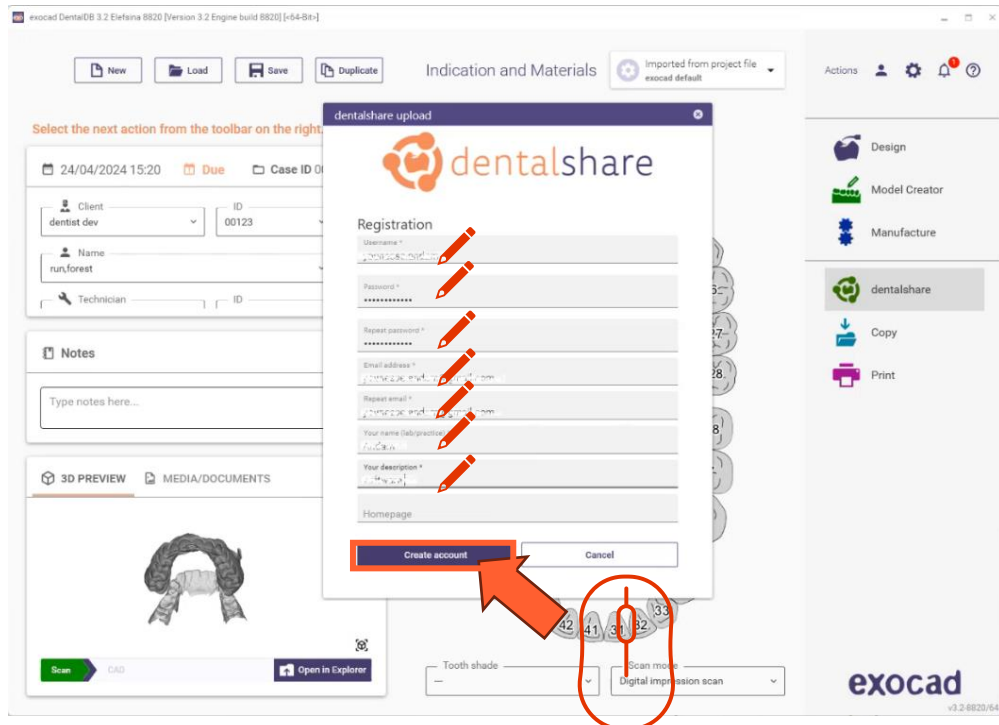


- Fyll i begärd information
- Klicka på 'skapa konto'
- Ett e-postmeddelande skickas till din exocad-konto-e-post

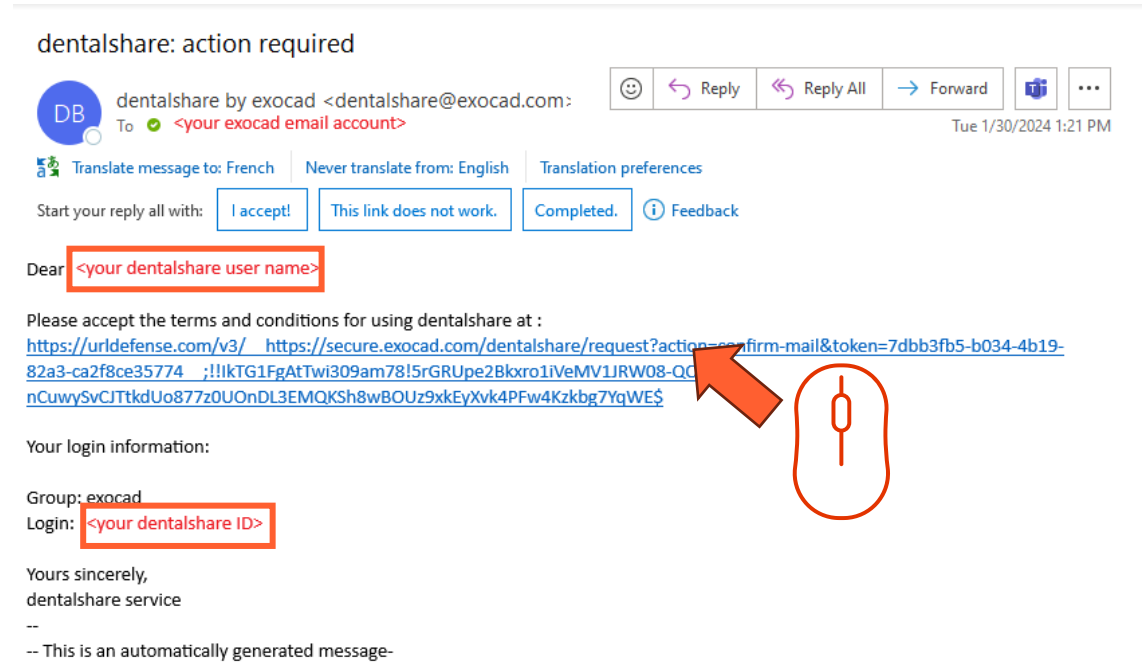

- Klicka på länken i dentalshare-mejlet för att acceptera dentalshare-villkoren

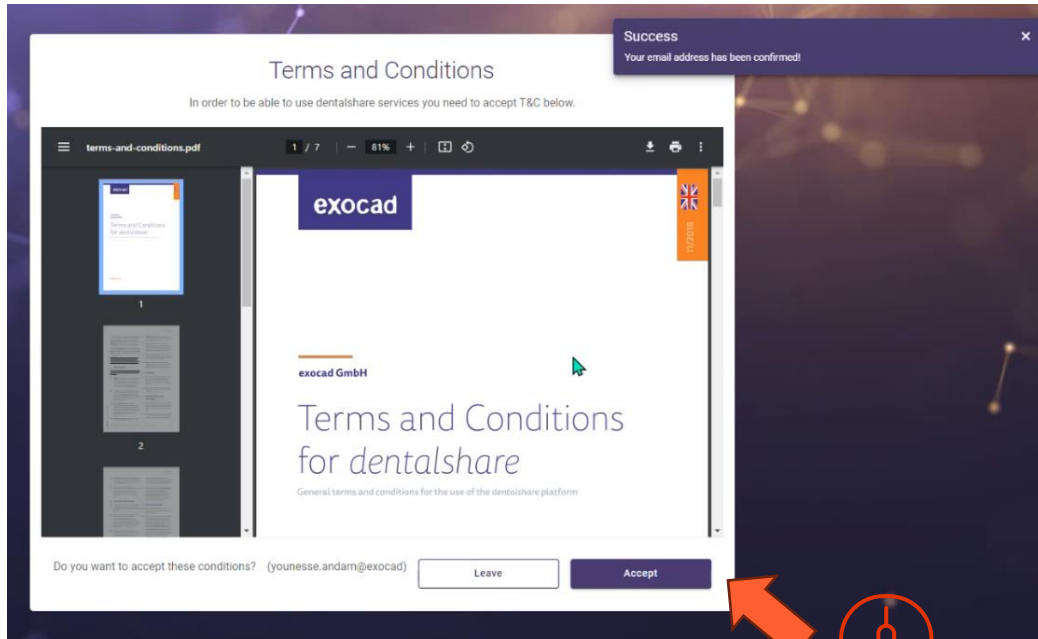


- Acceptera villkor och bestämmelser

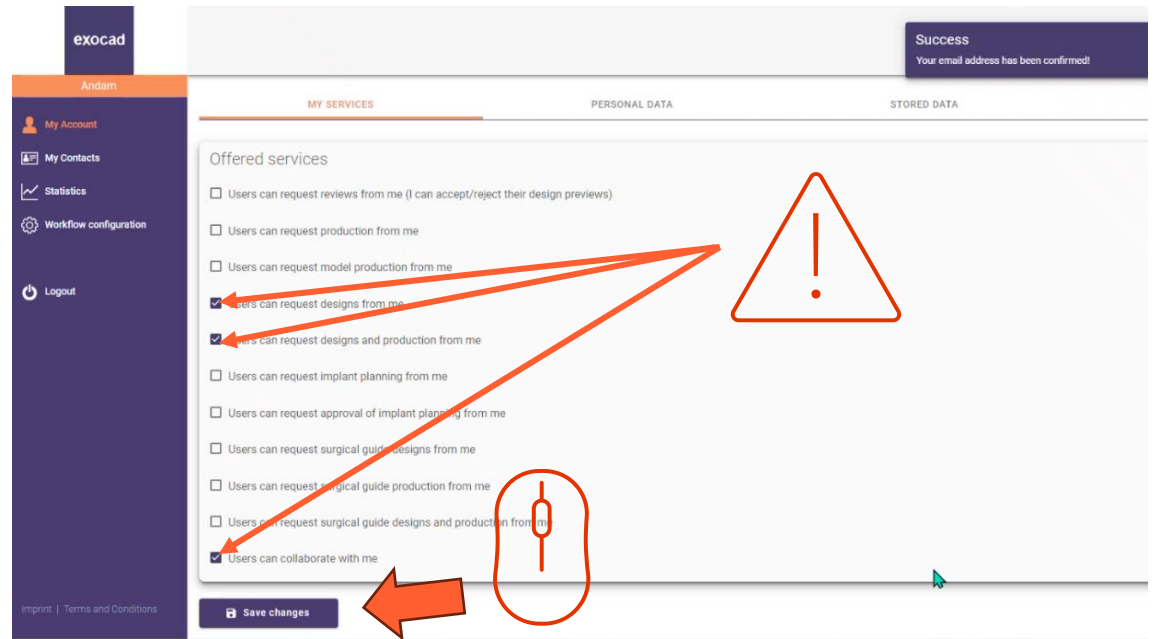


- Se till att ditt dentalshare-konto är konfigurerat för att acceptera designförfrågningar
- Klicka på "spara ändringar"


Aktivera exocad I IS Connect

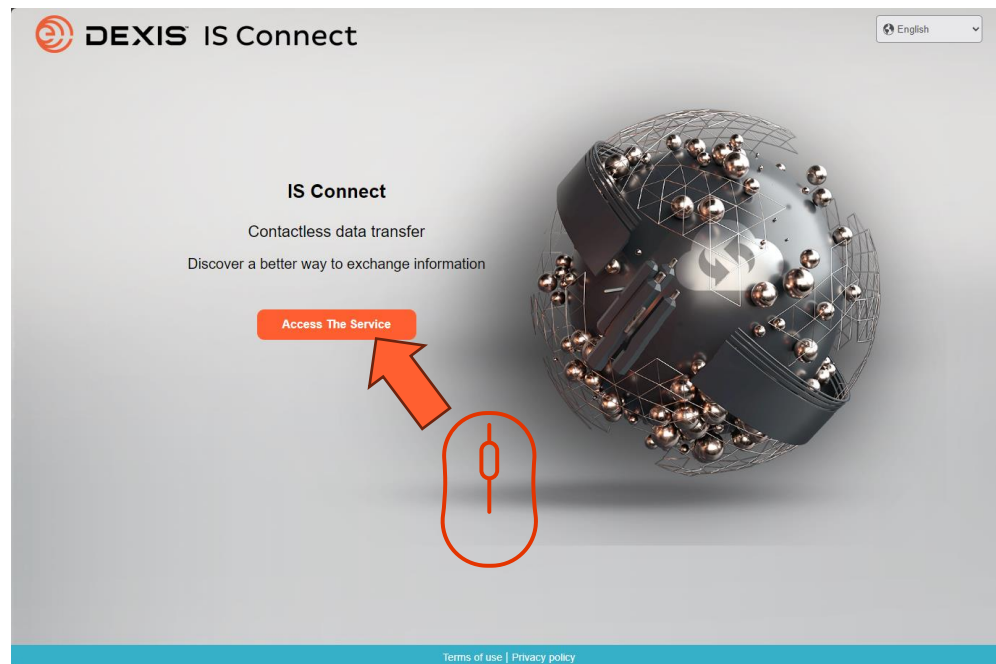


- Logga in på IS Connect

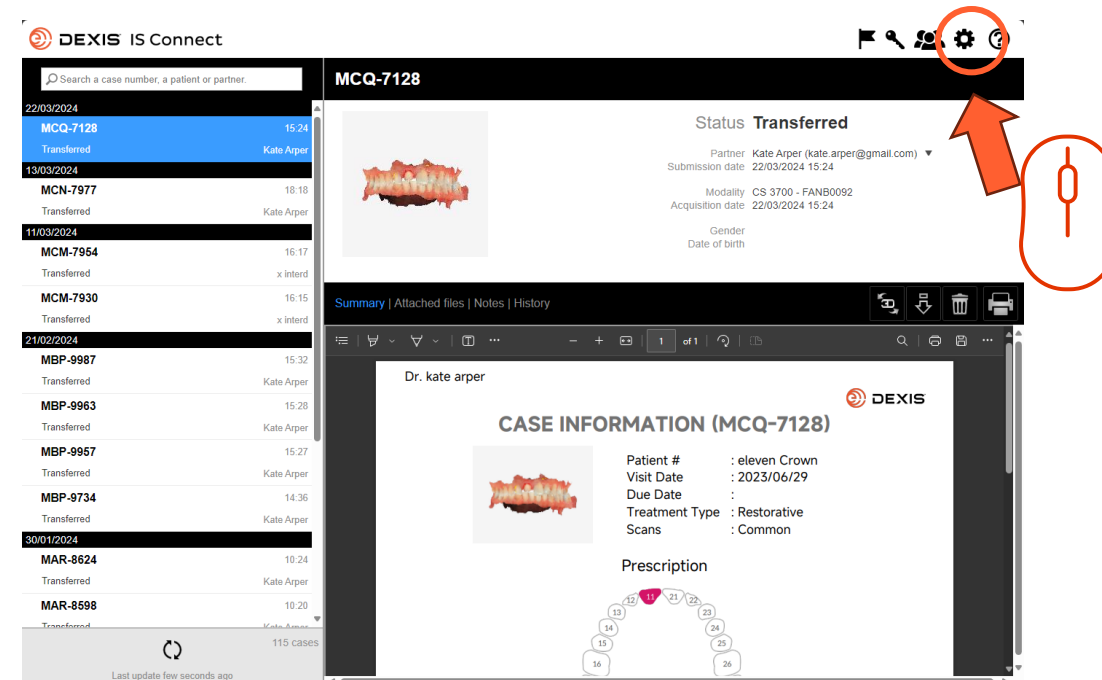


- Klicka på inställningsikonen

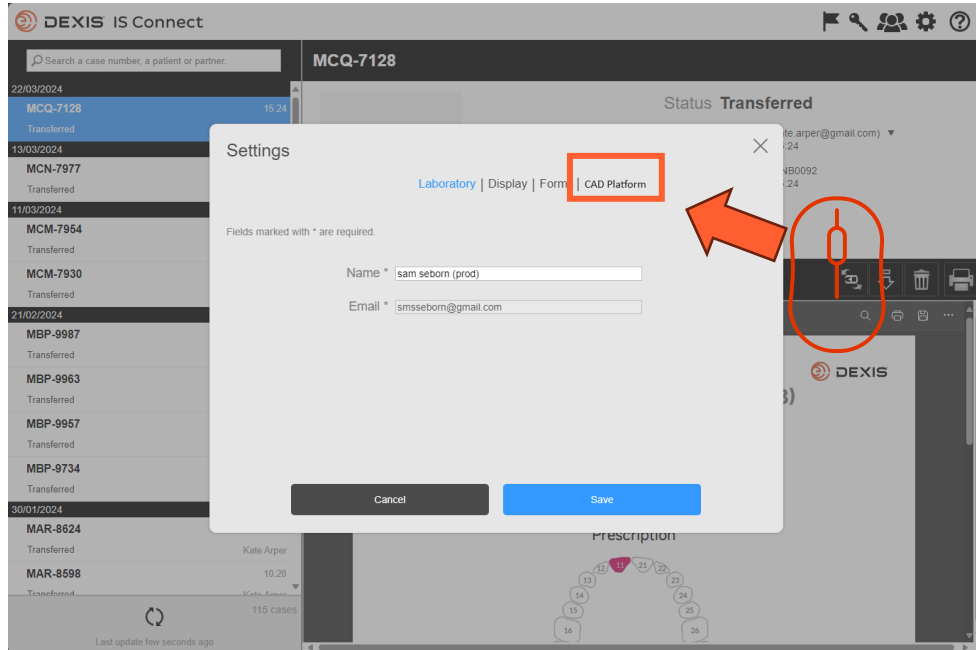


- Klicka på fliken 'CAD-plattform'

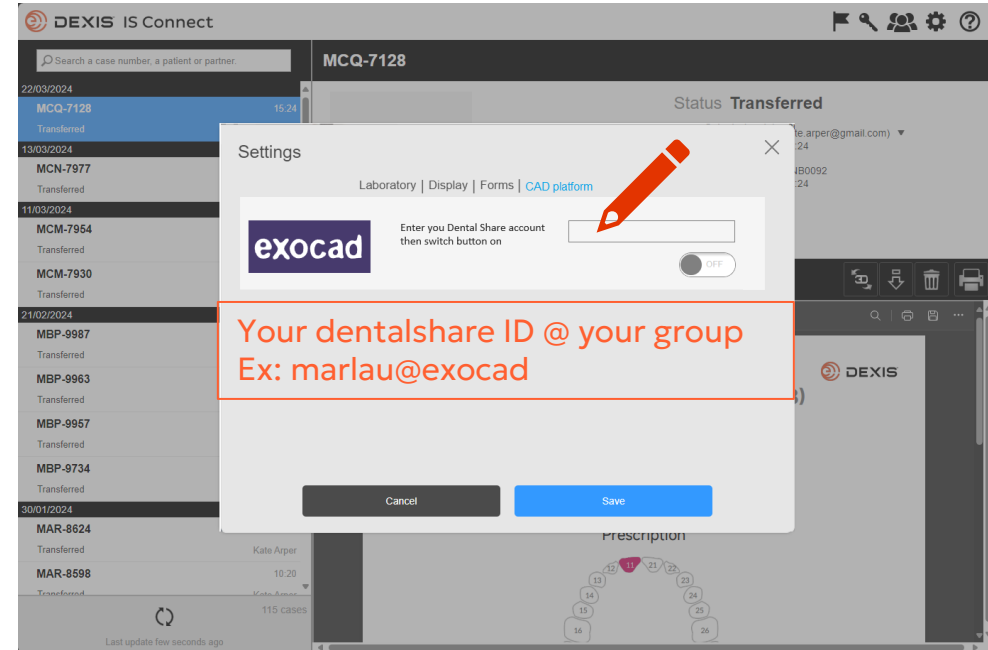

- Skriv in ditt dentalshare-ID

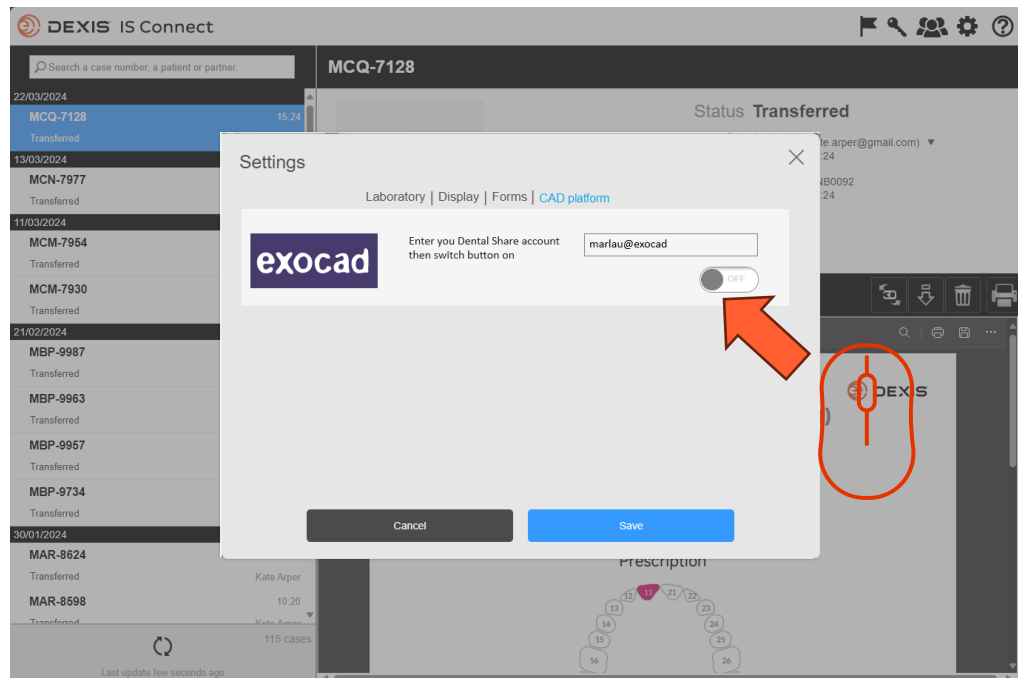


- Växla knappen

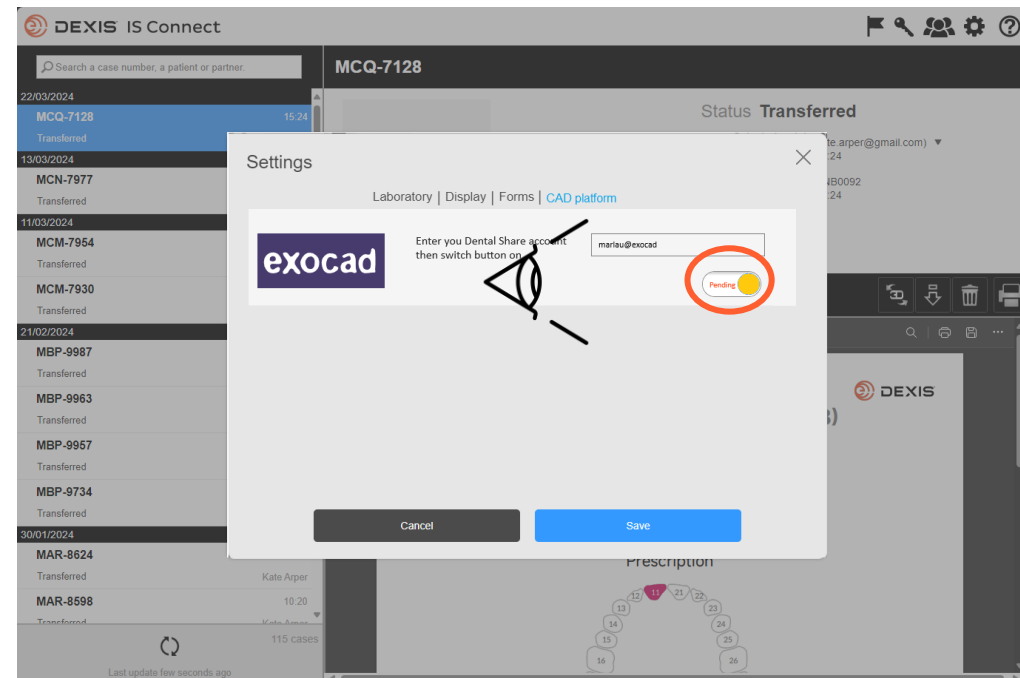

- Knappen ändras till "väntande" tillstånd
- Du kan avsluta IS Connect och vänta på en inbjudan till dentalshare



dentalshare contact request

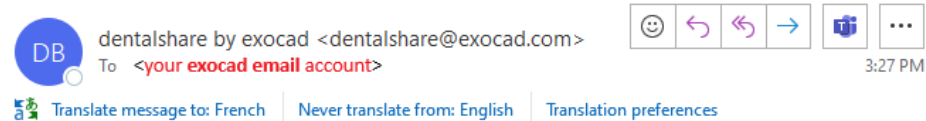

Dear <your dentalshare ID>

DEXIS IS Connect wants to offer a dentalshare community contact to you.

If you want to accept this contact, please click this link:

[https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=accept-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62VZzb3Ac\\$](https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=accept-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62VZzb3Ac$)


if you do not, please click this link:

[https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=decline-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62s4kiM30\\$](https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=decline-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62s4kiM30$)




Yours sincerely,
dentalshare service

--
-- This is an automatically generated message --



- Du får en dentalshare-inbjudan från DEXIS IS Connect-kontot
- Klicka på länken för att acceptera den

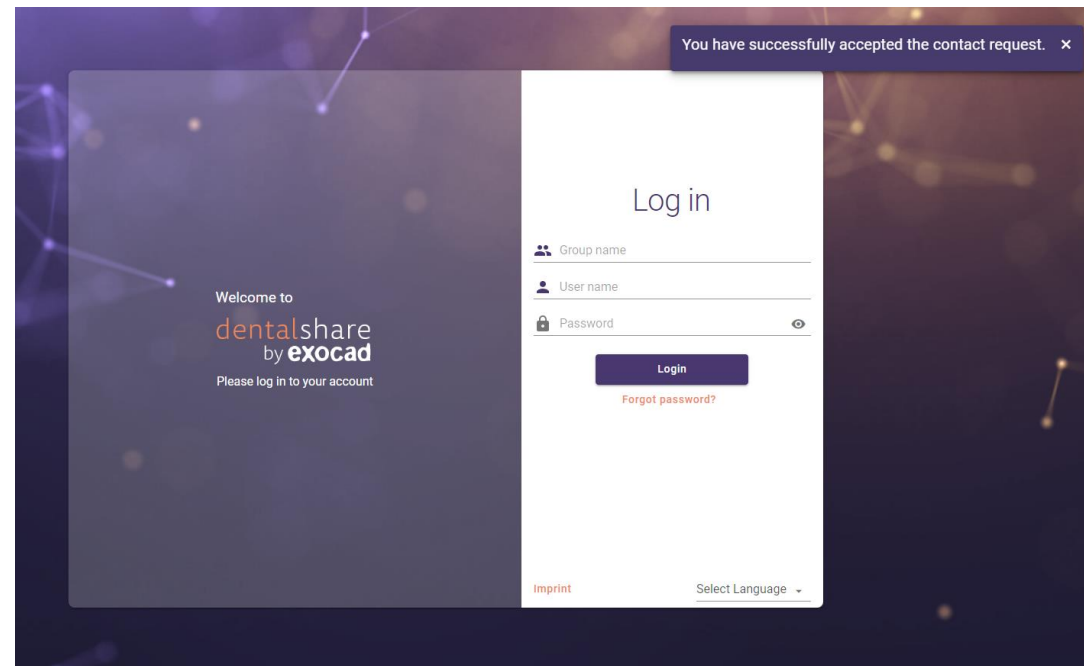

- Din inbjudan är bekräftad
- Du kan stänga dentalshare-skärmarna

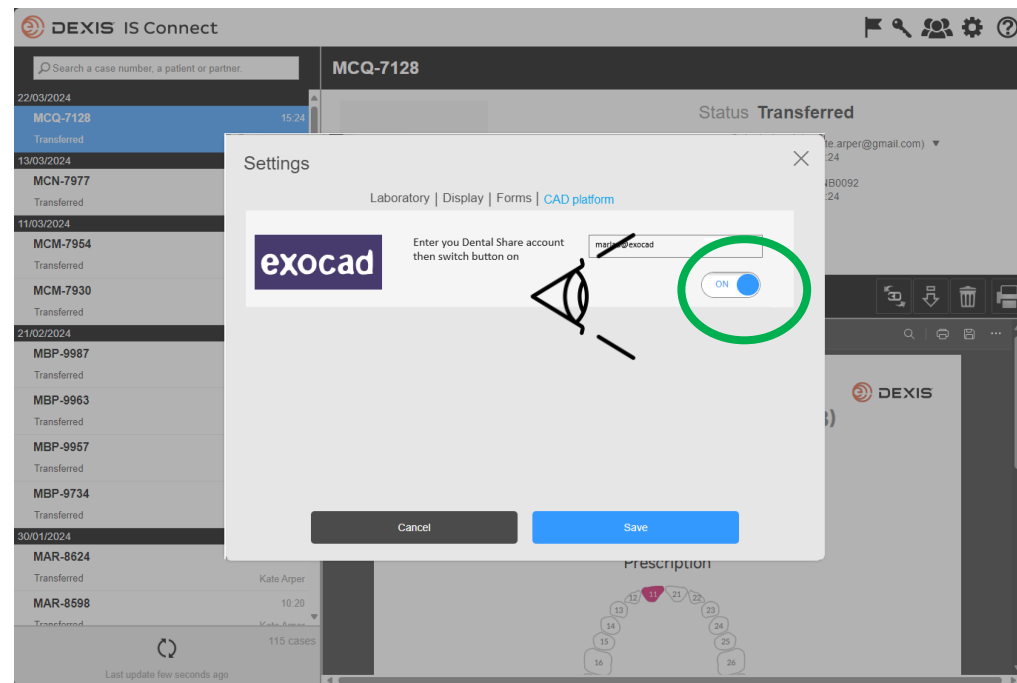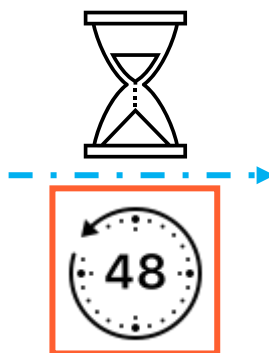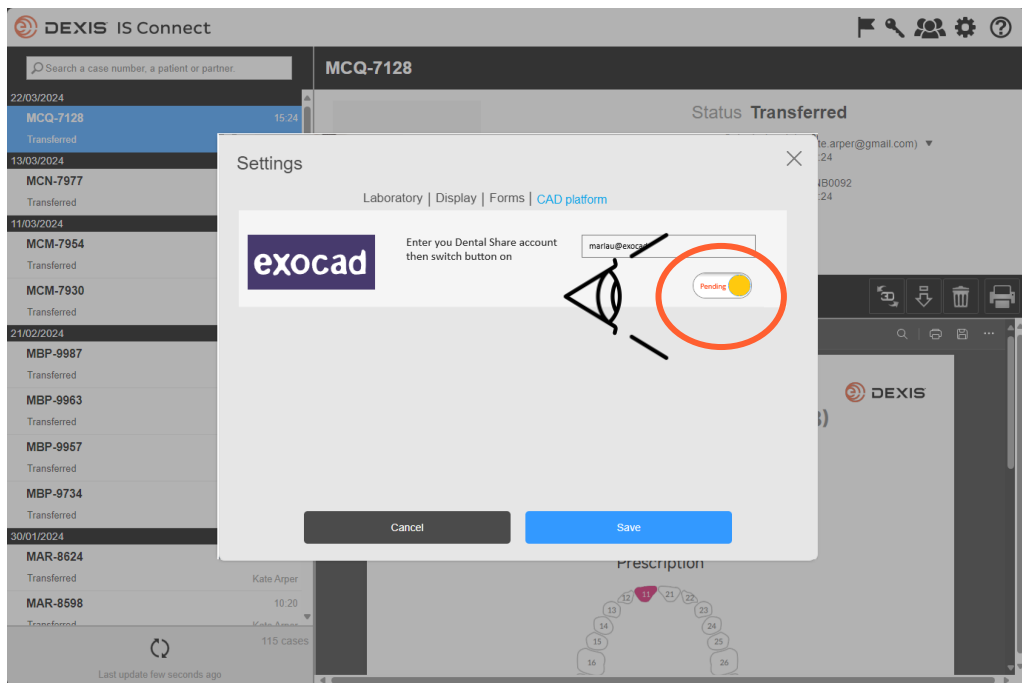


- När du har accepterat dentalshare-inbjudan från DEXIS IS Connect kommer exocad-knappen i IS Connect-inställningarna att ändras från väntande till "ON"
- En fördröjning kan observeras
- Integrationen är nu registrerad

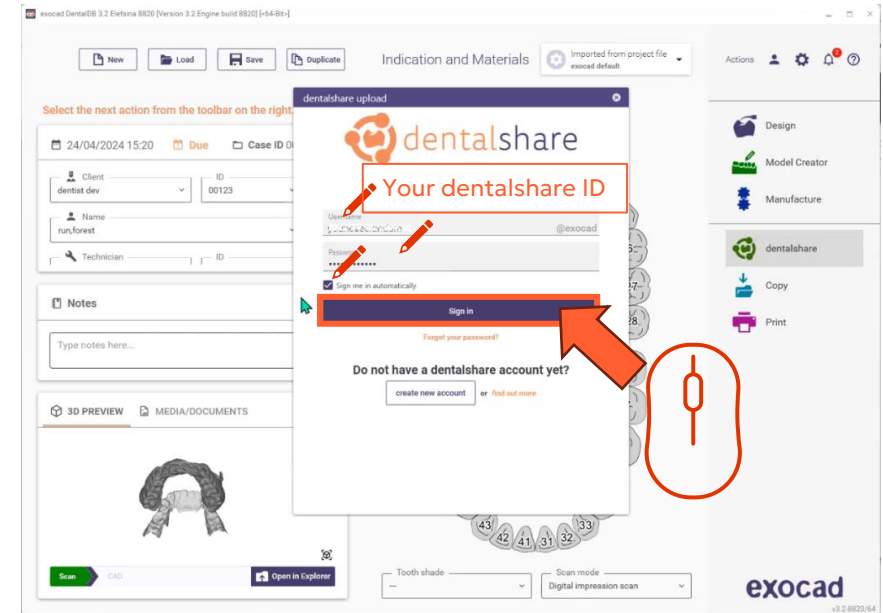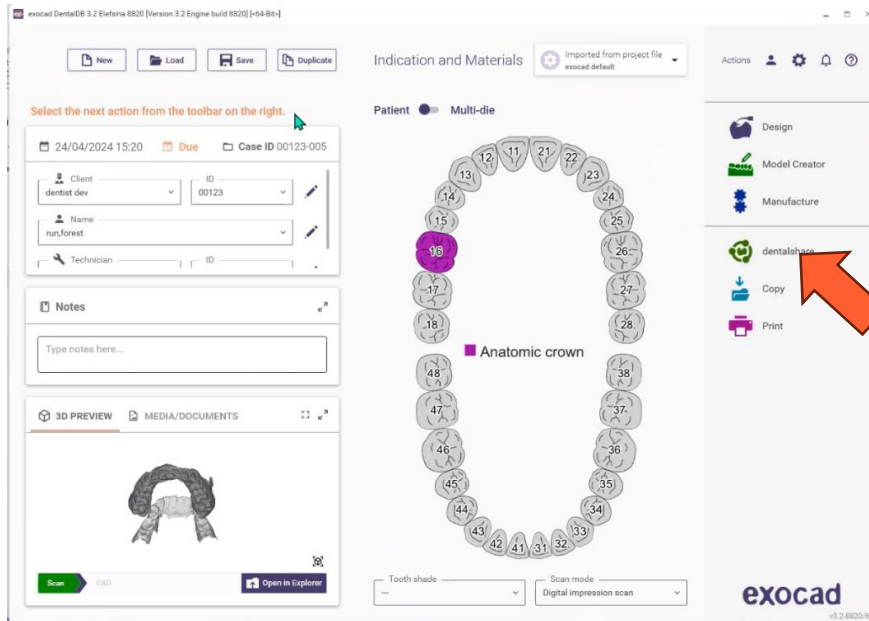

- Du måste vara inloggad i dentalshare medan du är i exocad DB för att göra integrationen aktiv

- Logga in i dentalshare från exocad DB med ditt dentalshare-ID och välj "logga in automatiskt"


- Dentalshare öppnas, du kan stänga det
- IS Connect-fall som skickas till ditt labb kommer nu att levereras som dental

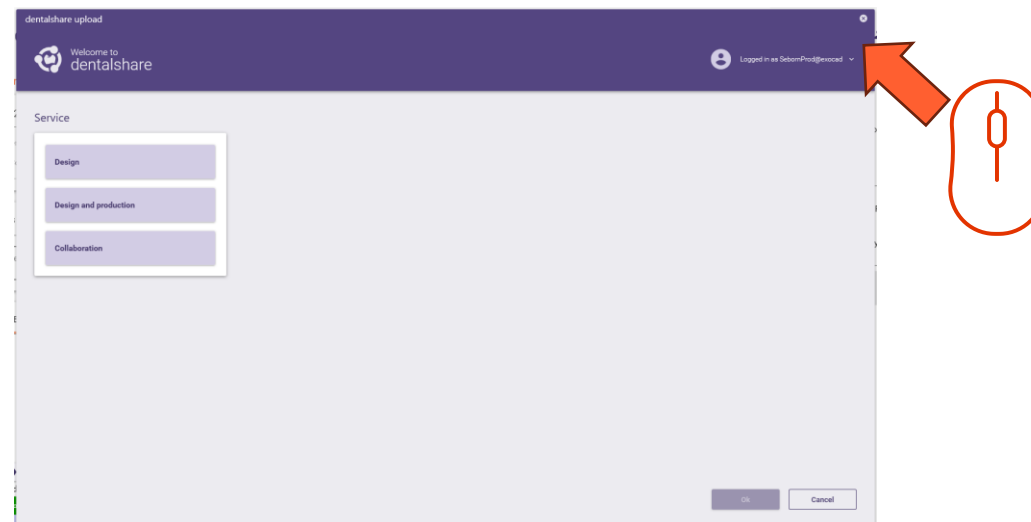




Instructies voor DEXIS-exocad integratie


Benodigde accounts

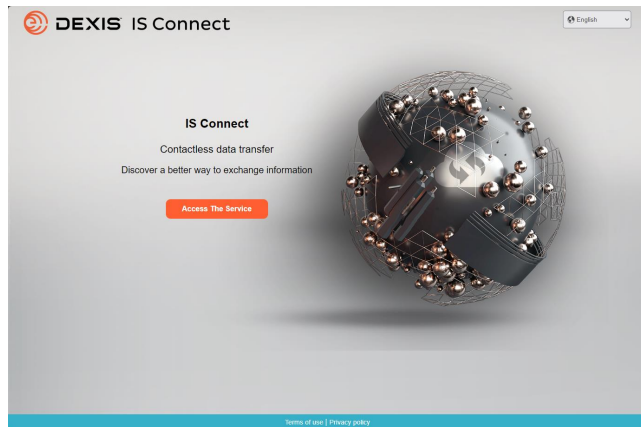

☐ IS Connect

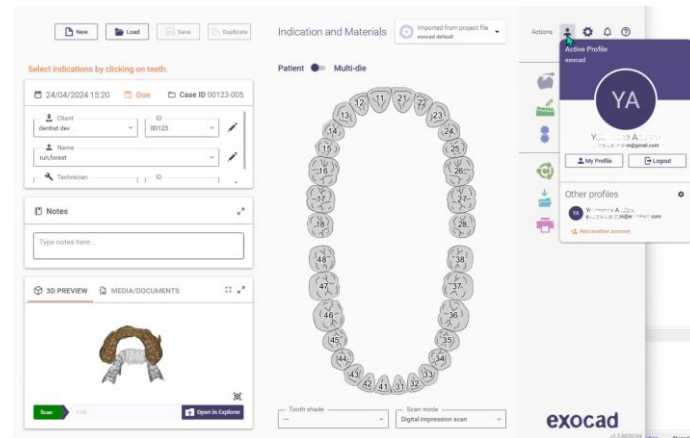


☐ exocad DB

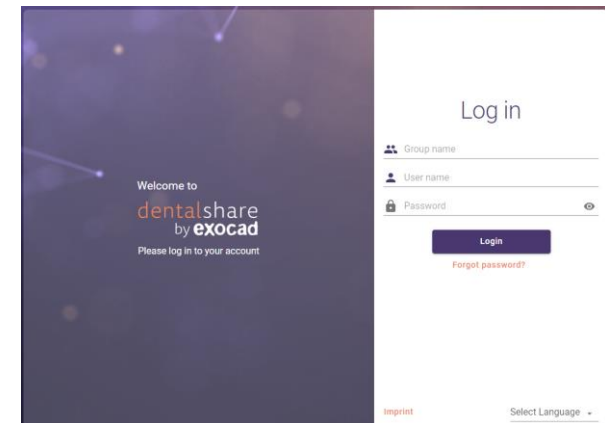

☐ exocad dentalshare

Hebt u een dentalshare-account? du ett dentalshare-konto?

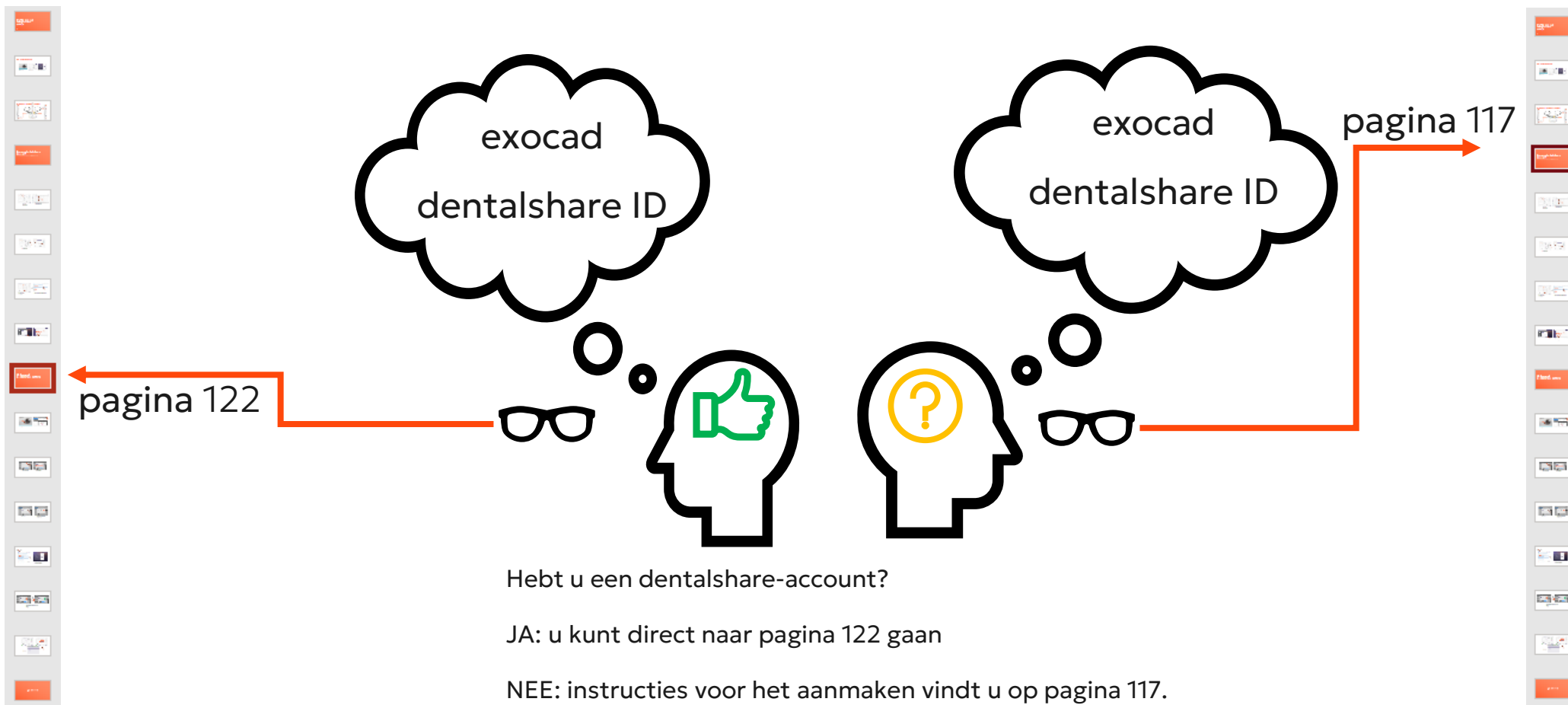

Hebt u een dentalshare-account?


JA: u kunt direct naar pagina 122 gaan

NEE: instructies voor het aanmaken vindt u op pagina 117.


U kunt ook

https://wiki.exocad.com/wiki/index.php/Signing_up_to_Dentalshare


Maak een dentalshare ID aan

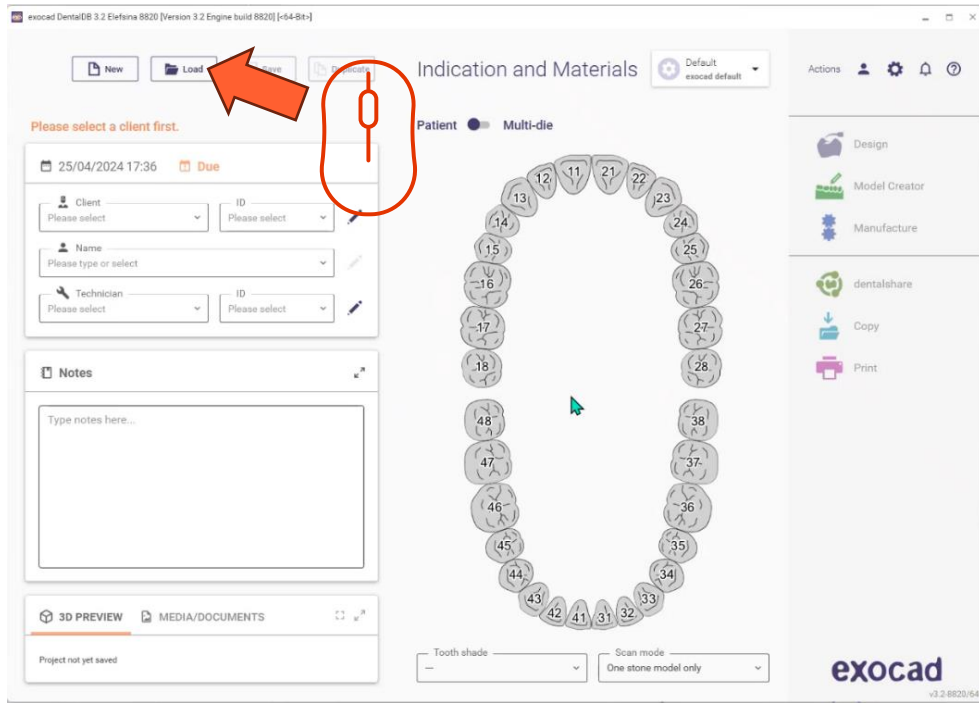


- Open exocad DB
- Klik op de knop Laden

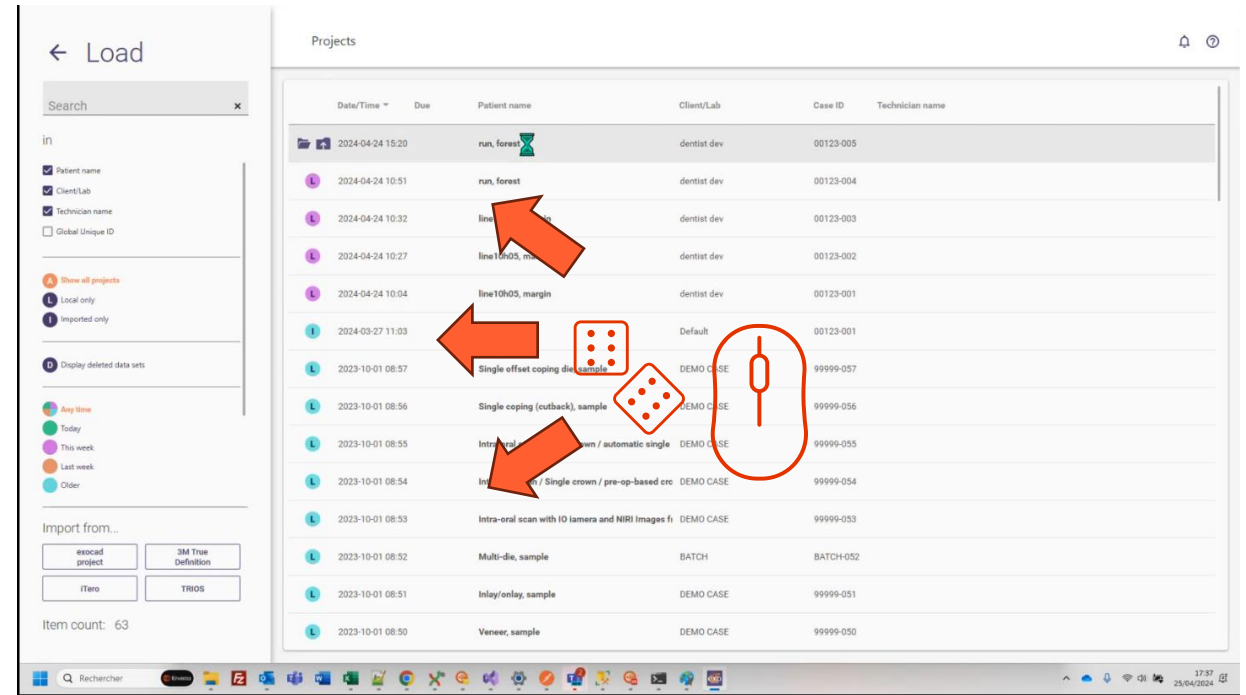


- Selecteer een willekeurig project en laad het

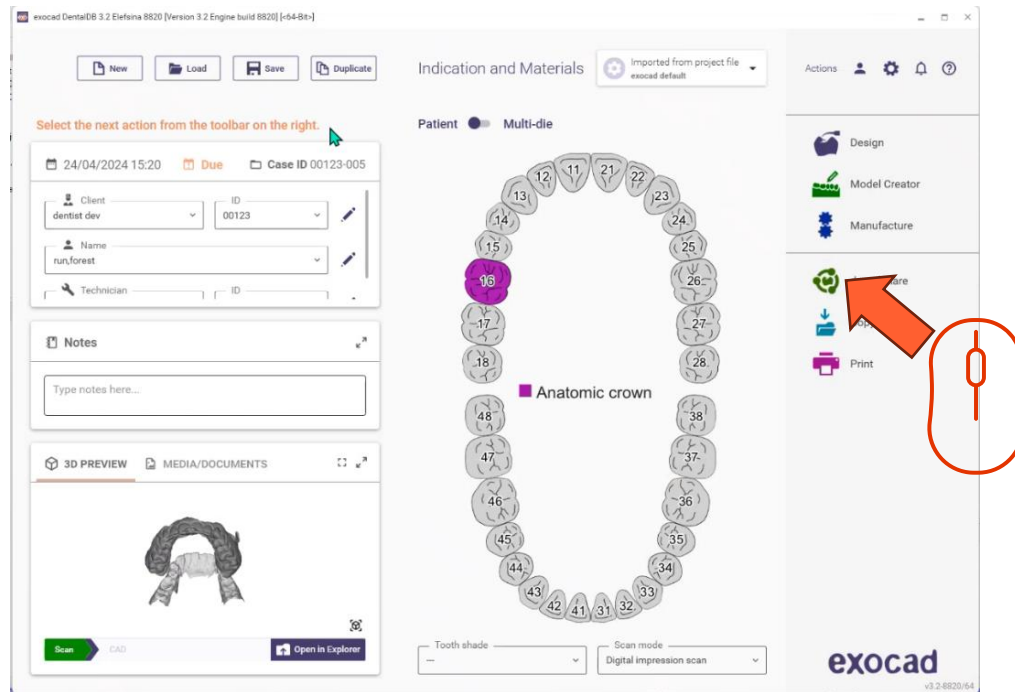


- Klik op het dentalshare-pictogram

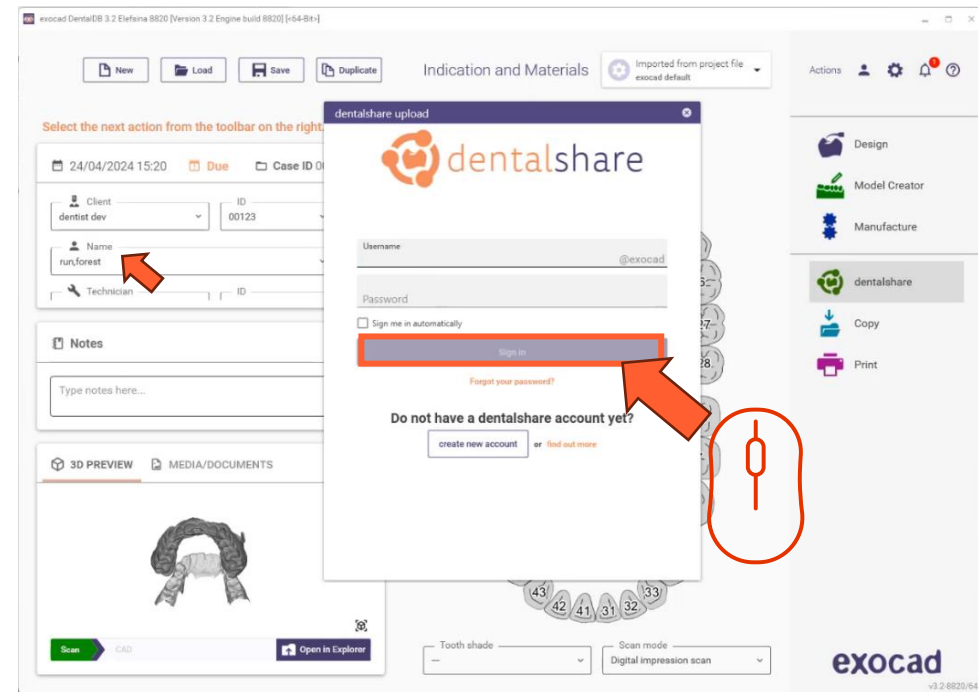


- Klik op 'account aanmaken'

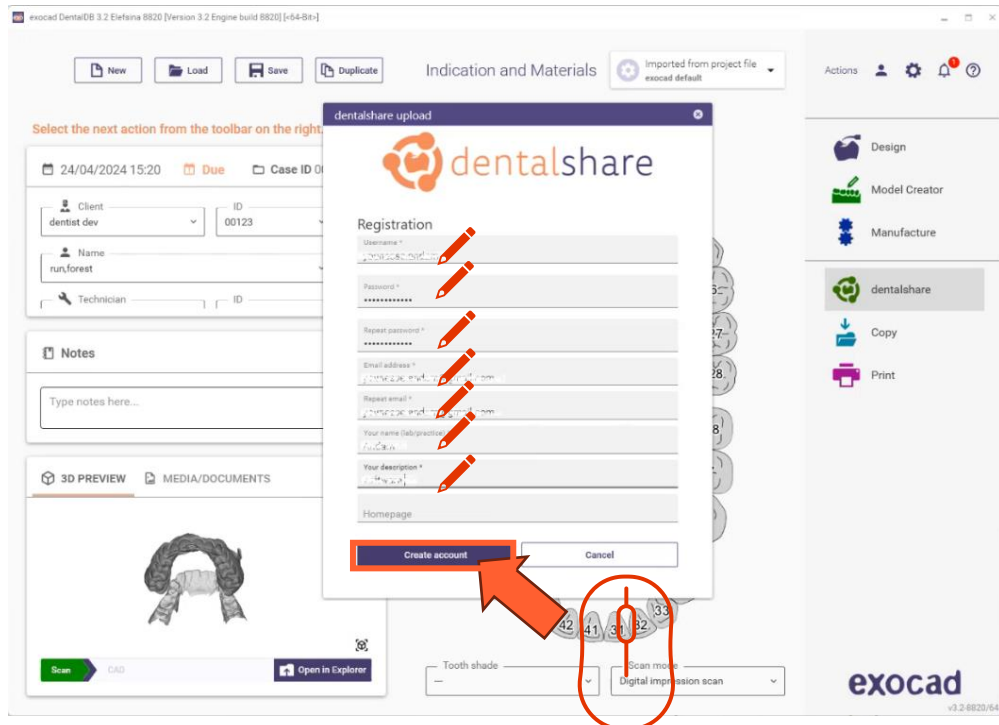


- Vul de gevraagde informatie in
- Klik op 'account aanmaken'
- Er wordt een e-mail verzonden naar het e-mailadres van uw exocad-account

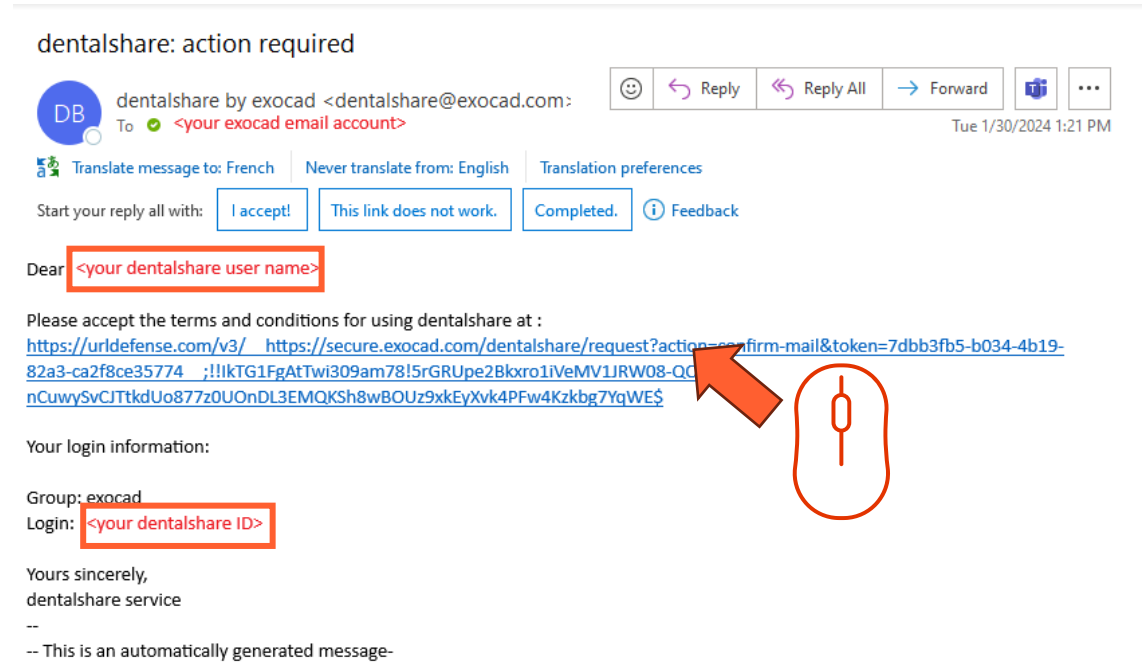

- Klik op de link in de e-mail van dentalshare om de algemene voorwaarden van dentalshare te accepteren

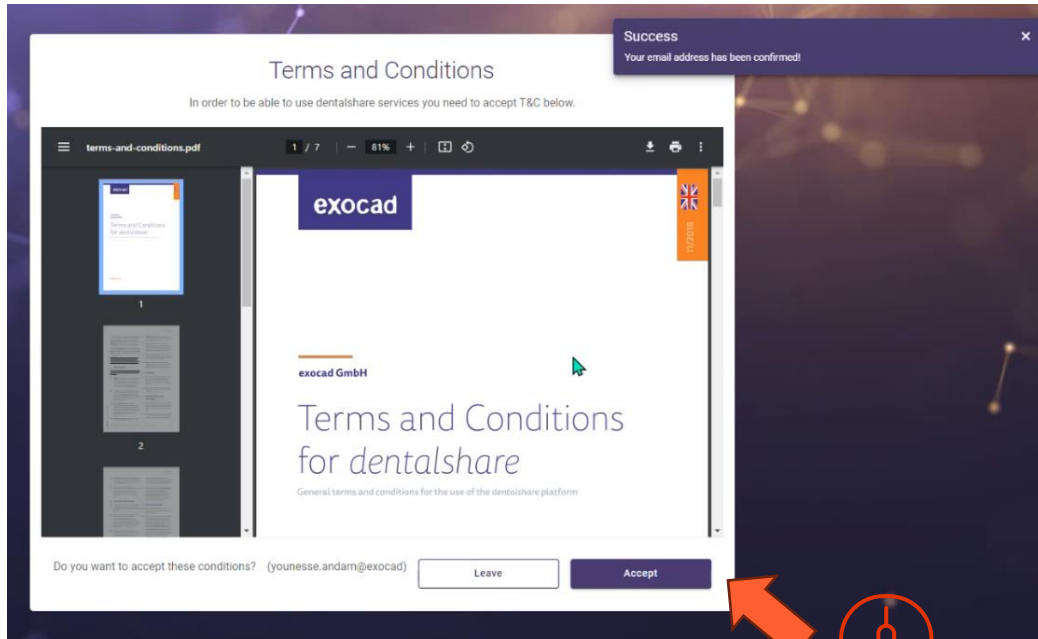


- Algemene voorwaarden accepteren

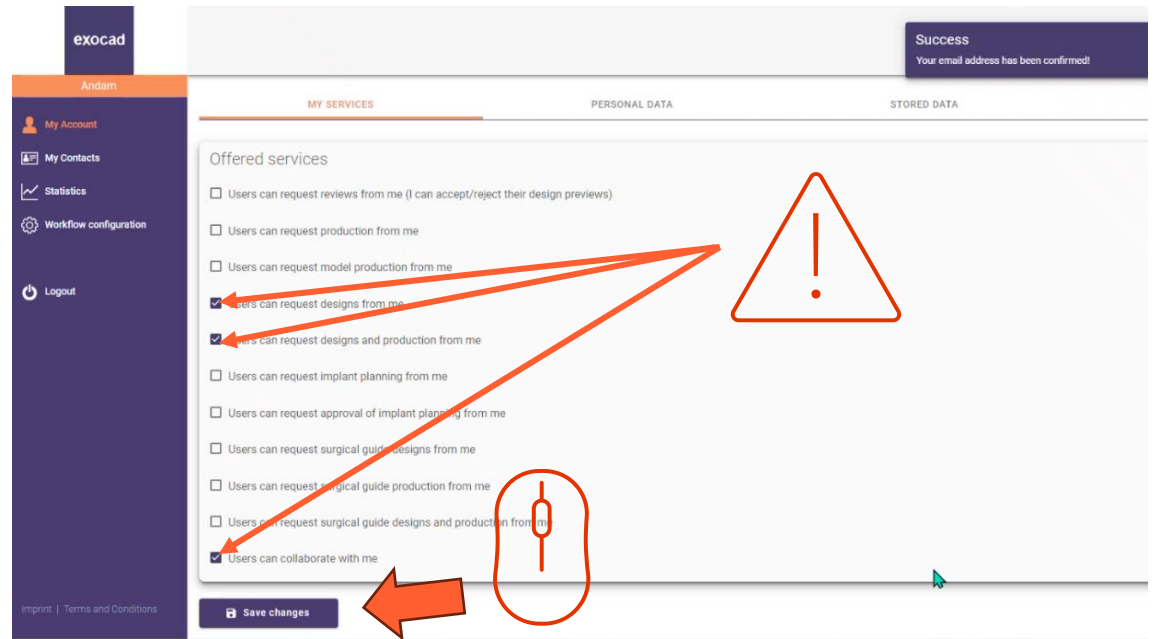


- Zorg ervoor dat uw dentalshare-account is geconfigureerd om ontwerpaanvragen te accepteren
- Klik op 'wijzigingen opslaan'


Inschakelen exocad integratie in IS Connect

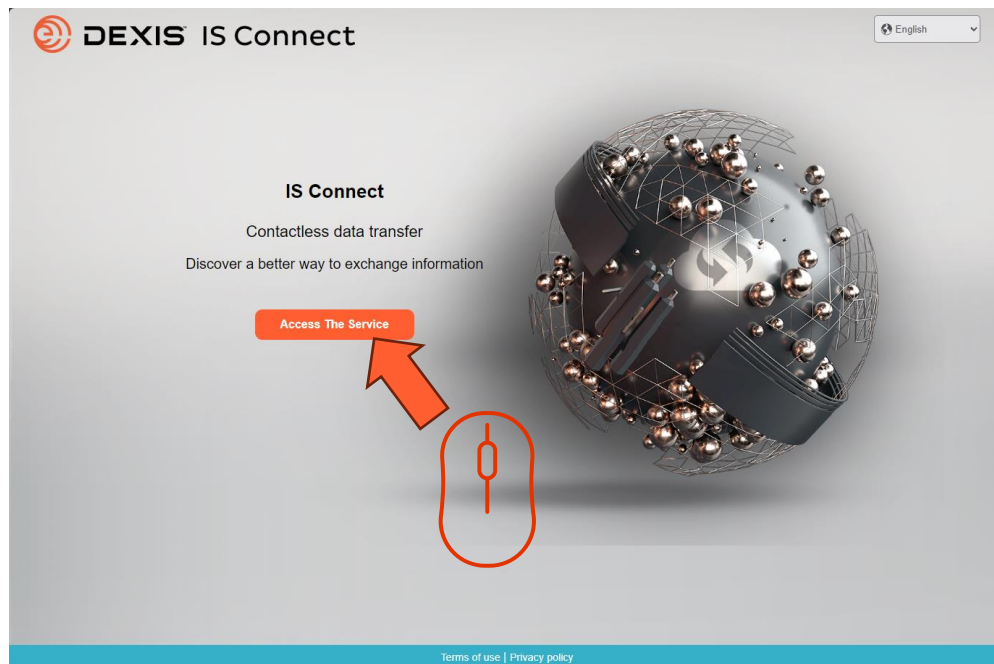


- Meld u aan bij IS Connect

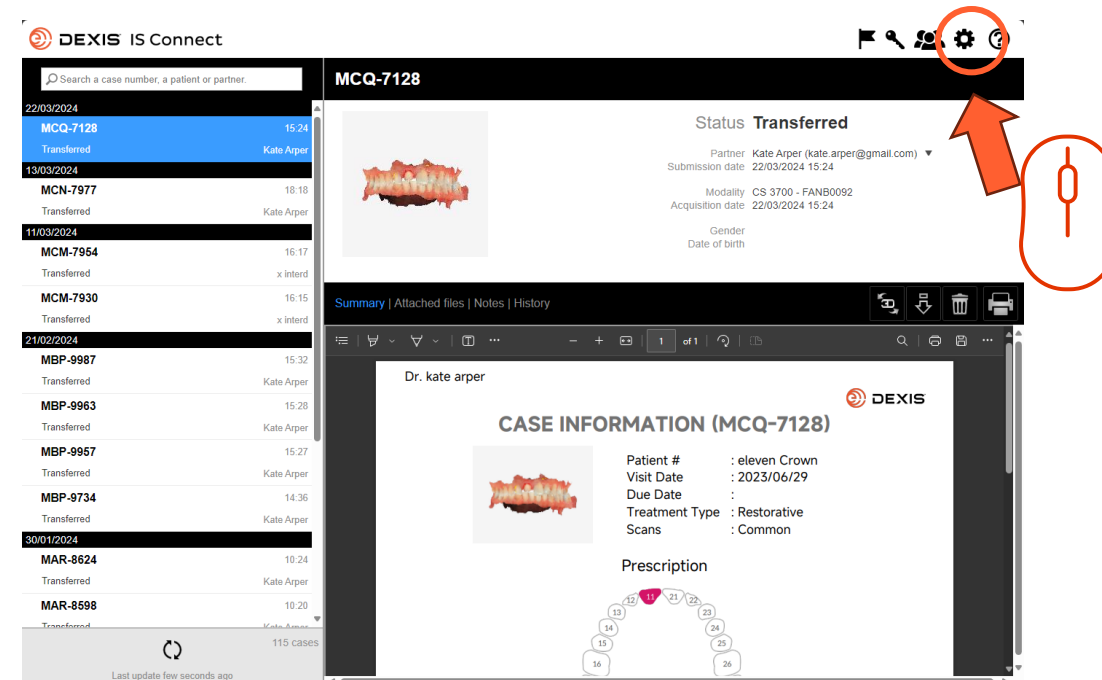


- Klik op het pictogram Instellingen

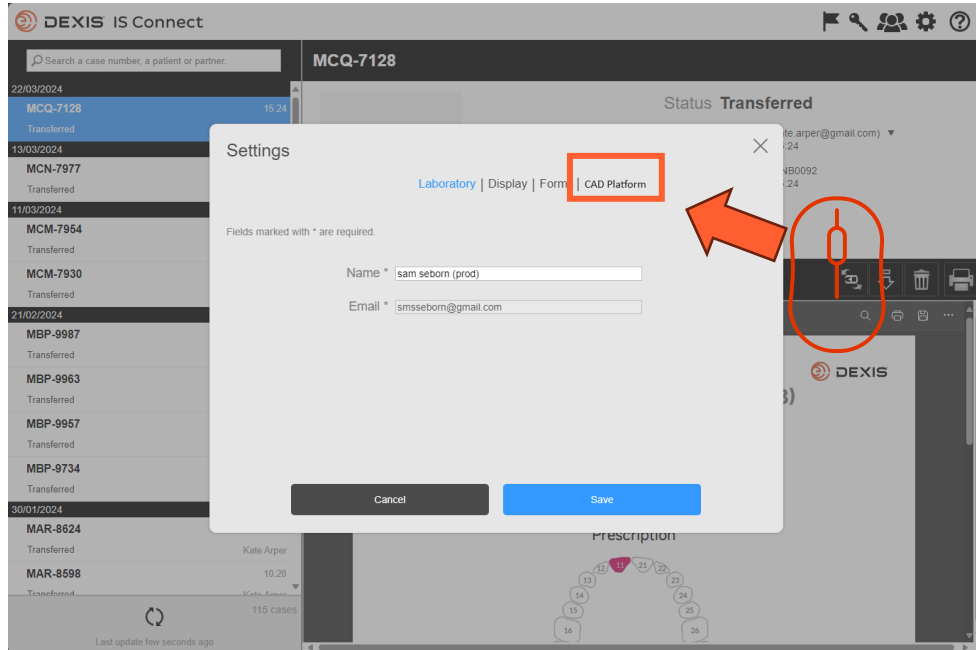


- Klik op het tabblad 'CAD-platform'

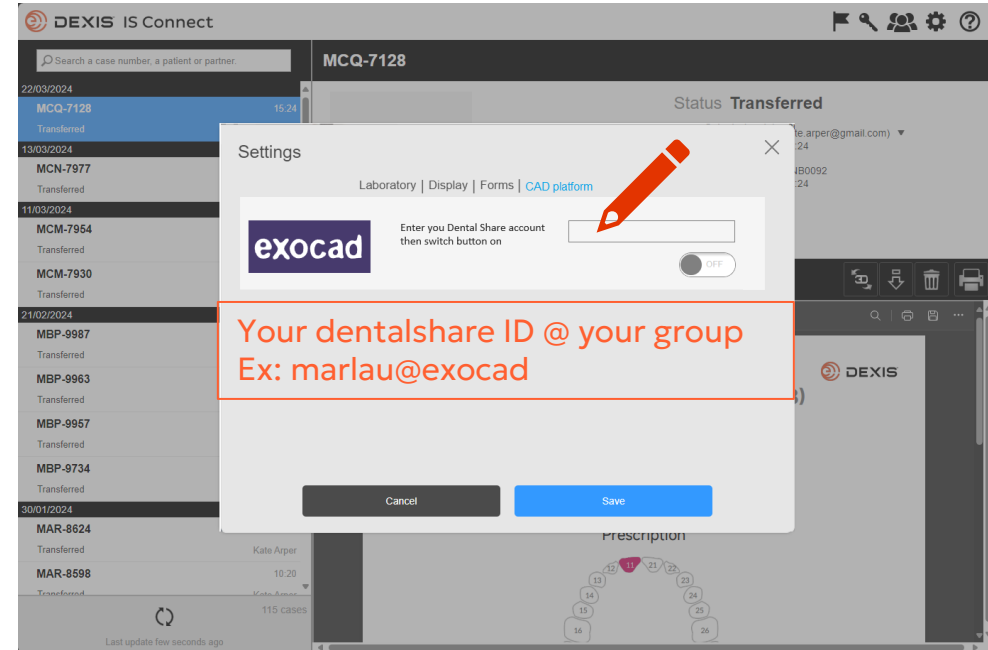

- Typ uw dentalshare ID in

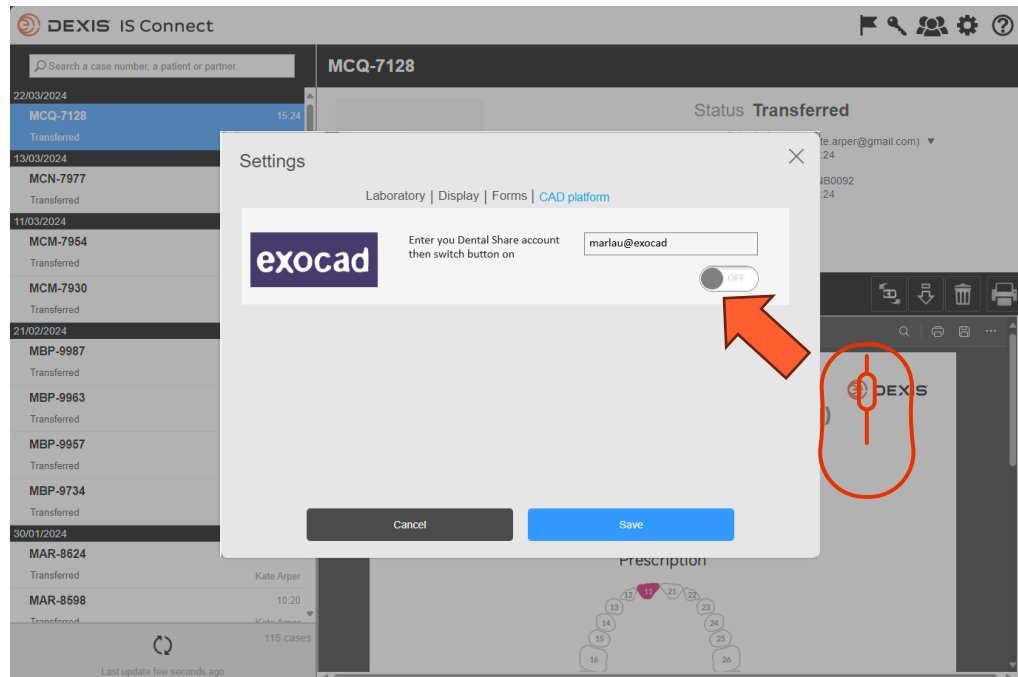


- Schakel de knop

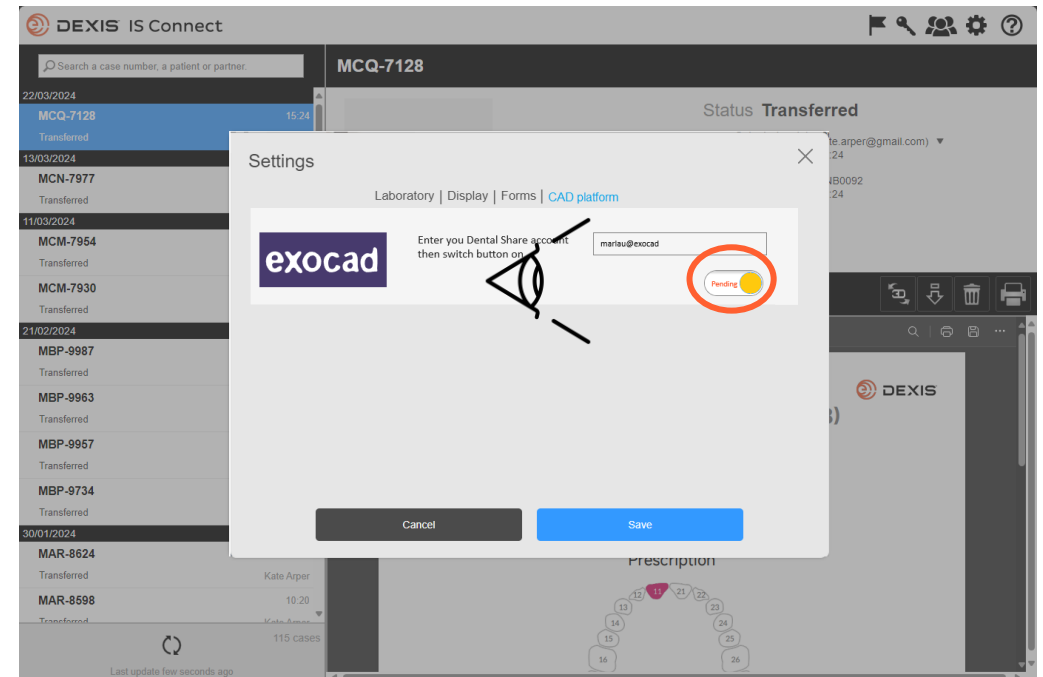

- De knop verandert in de status 'in afwachting van'.
- U kunt IS Connect afsluiten en wachten op een dentalshare-uitnodiging.



dentalshare contact request

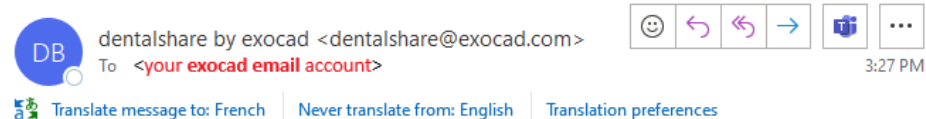

Dear <your dentalshare ID>

DEXIS IS Connect wants to offer a dentalshare community contact to you.

If you want to accept this contact, please click this link:

[https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=accept-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05SqBiv62VZzb3Ac\\$](https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=accept-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05SqBiv62VZzb3Ac$)


if you do not, please click this link:

[https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=decline-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05SqBiv62s4kiM30\\$](https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=decline-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05SqBiv62s4kiM30$)




Yours sincerely,
dentalshare service

-- This is an automatically generated message --



- U ontvangt een uitnodiging voor dentalshare van uw DEXIS IS Connect account.
- Klik op de link om deze te accepteren

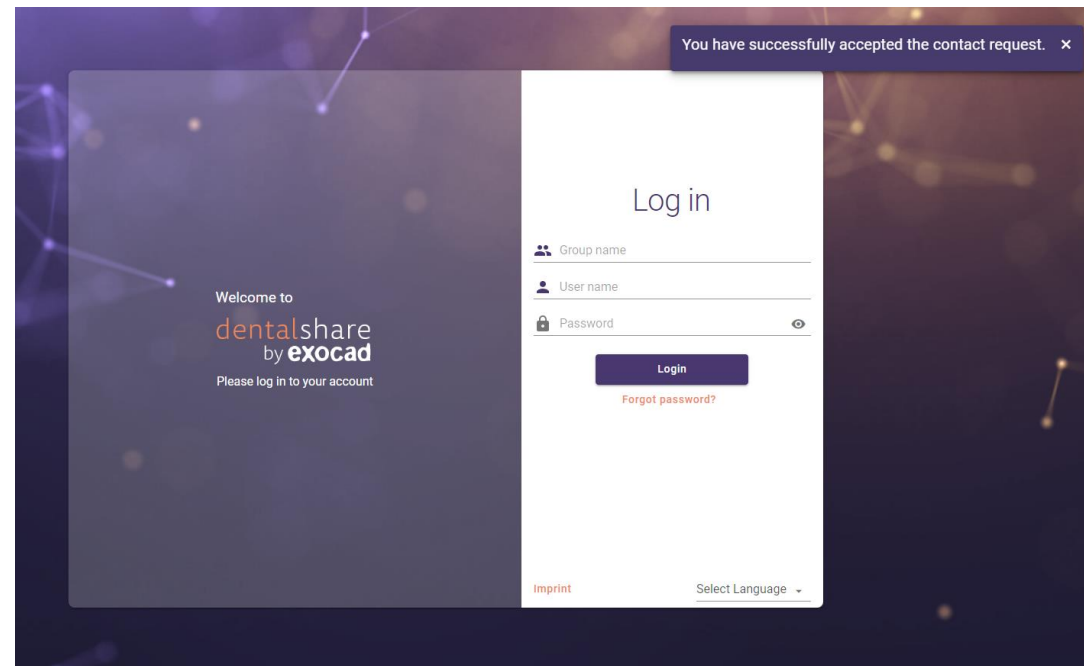

- Uw uitnodiging is bevestigd
- U kunt de dentalshare-schermen sluiten

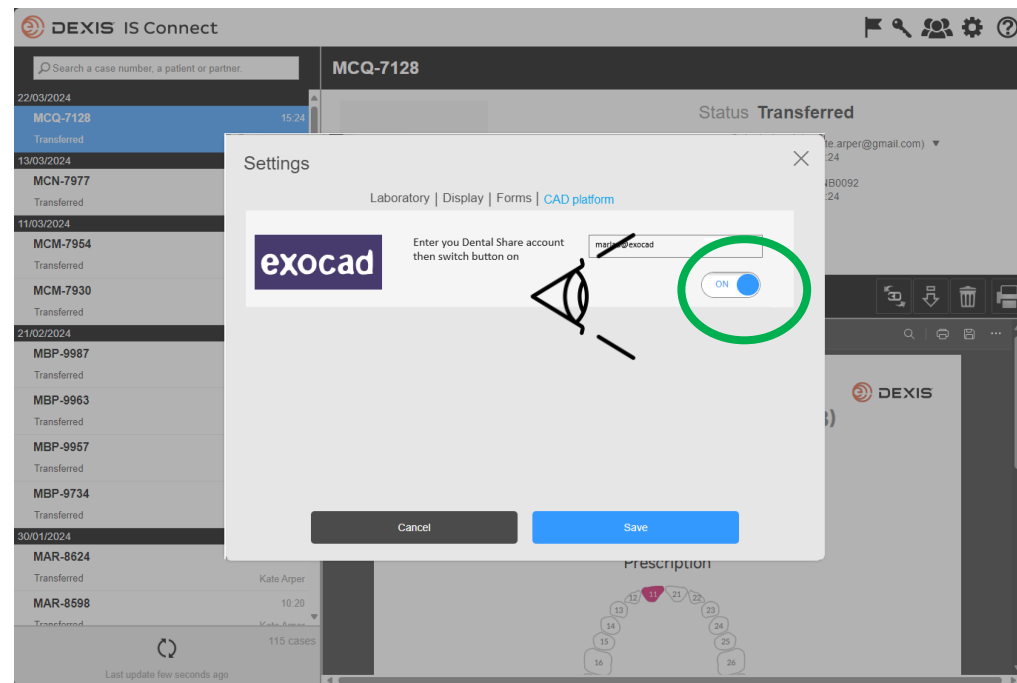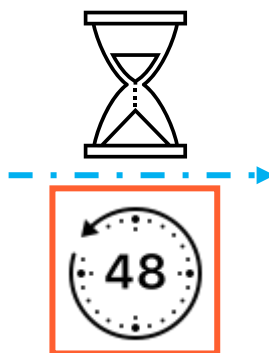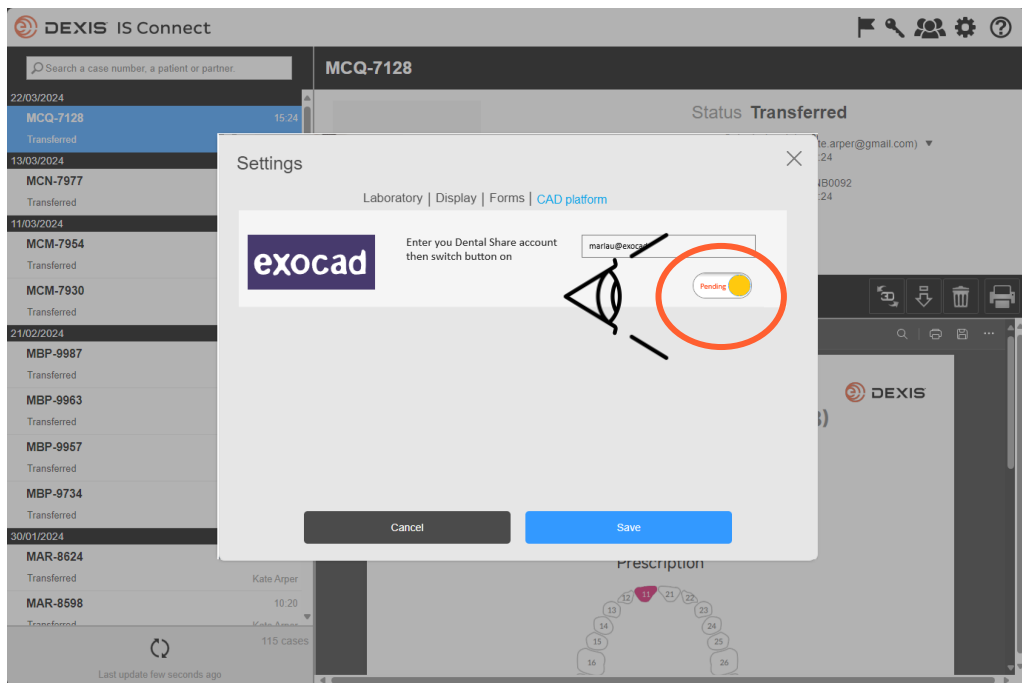


- Nadat u de dentalshare-uitnodiging van DEXIS IS Connect hebt geaccepteerd, schakelt de knop exocad in de IS Connect-instelling over van 'in behandeling' naar 'aan'.
- Er kan een vertraging optreden
- De integratie is nu geregistreerd

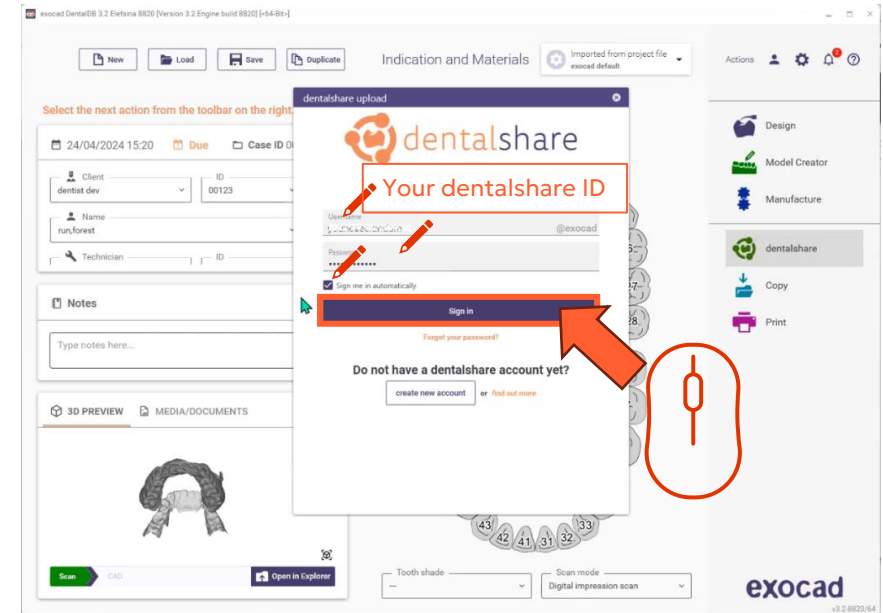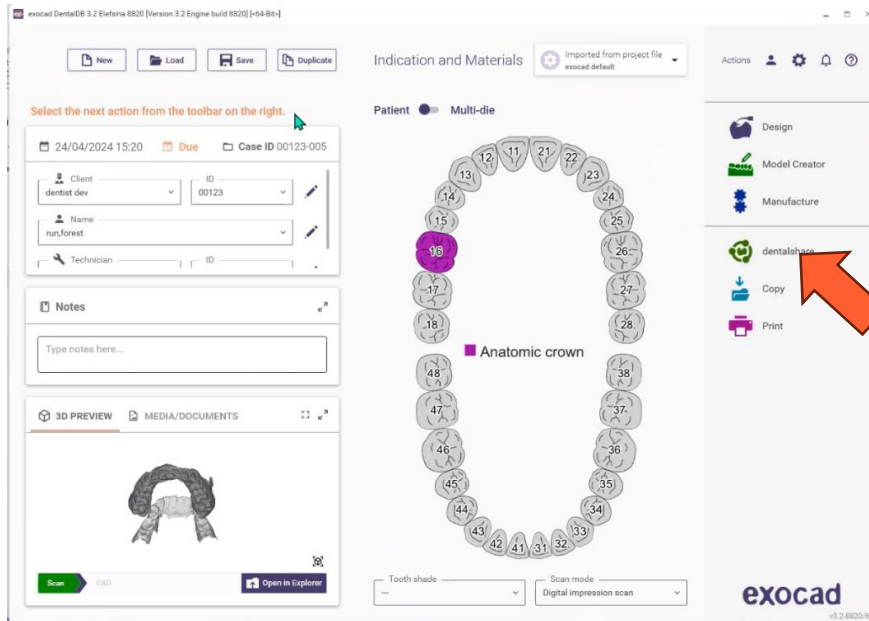

- U moet ingelogd zijn bij dentalshare terwijl u in exocad DB bent om de integratie actief te maken.

- Meld u aan bij dentalshare vanuit exocad DB met uw dentalshare ID en selecteer 'automatisch aanmelden'.


- Dentalshare wordt geopend, u kunt het sluiten
- IS Connect casussen die naar uw lab worden verzonden, worden nu geleverd als dentalshare.

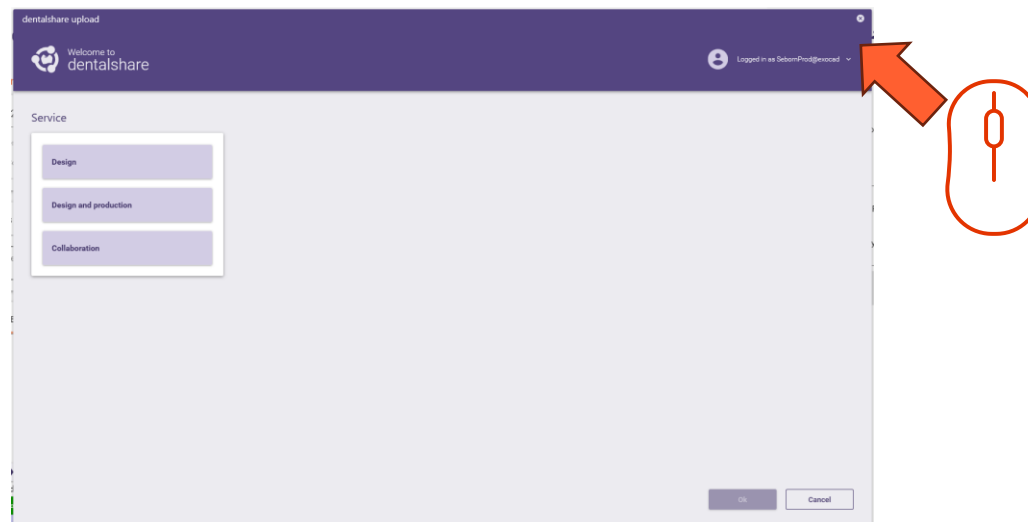




Instructies voor DEXIS-exocad integratie


Benodigde accounts

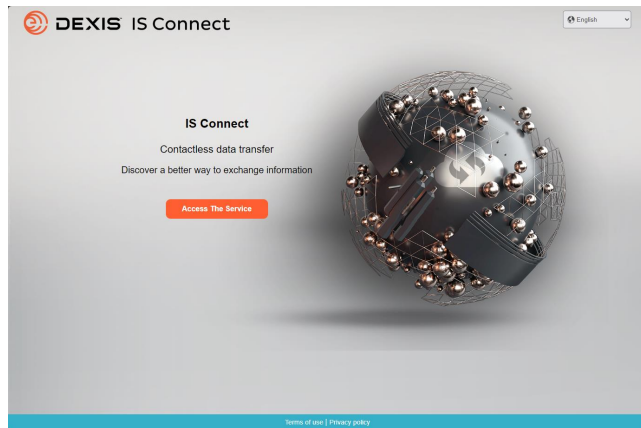

☐ IS Connect

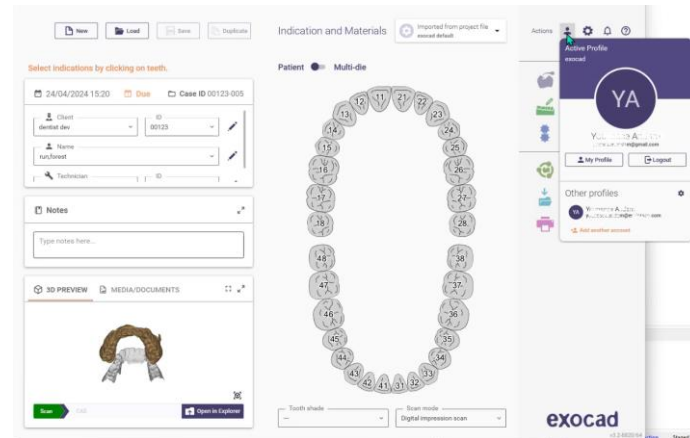

☐ exocad DB

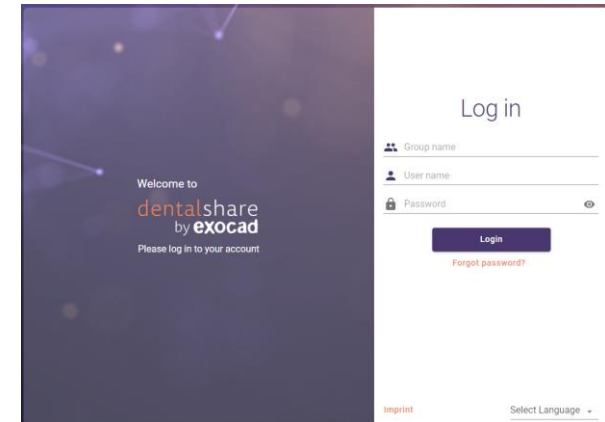

☐ exocad dentalshare

Hebt u een dentalshare-account?




Hebt u een dentalshare-account?

JA: u kunt direct naar pagina 138 gaan


NEE: instructies voor het aanmaken vindt u op pagina 133. U kunt ook

https://wiki.exocad.com/wiki/index.php/Signing_up_to_Dentalshare


Maak een dentalshare ID aan

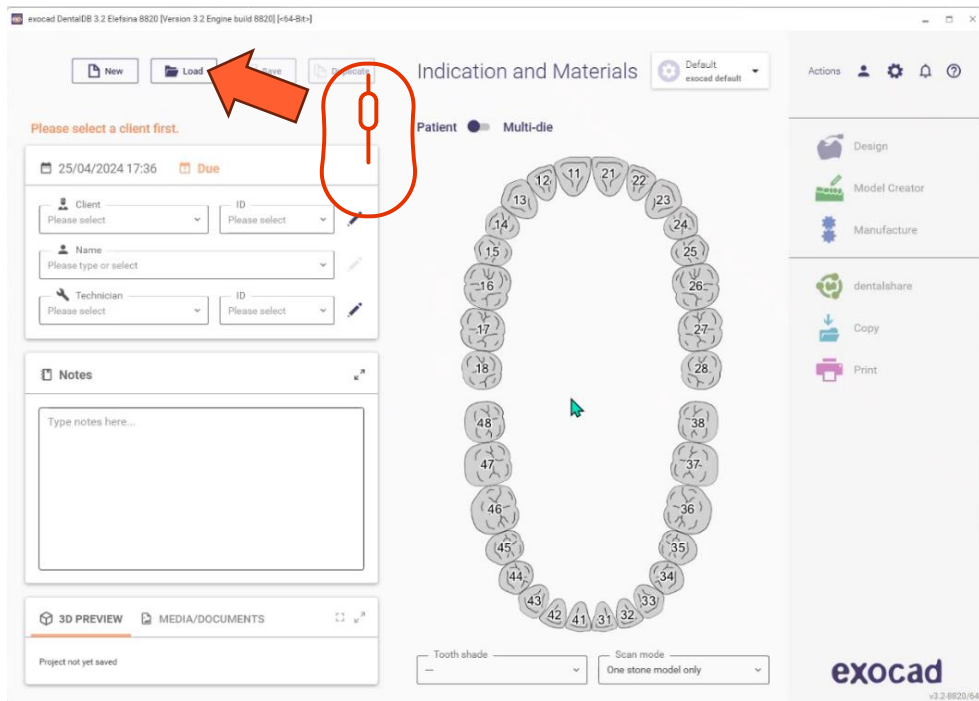


- Open exocad DB
- Klik op de knop Laden

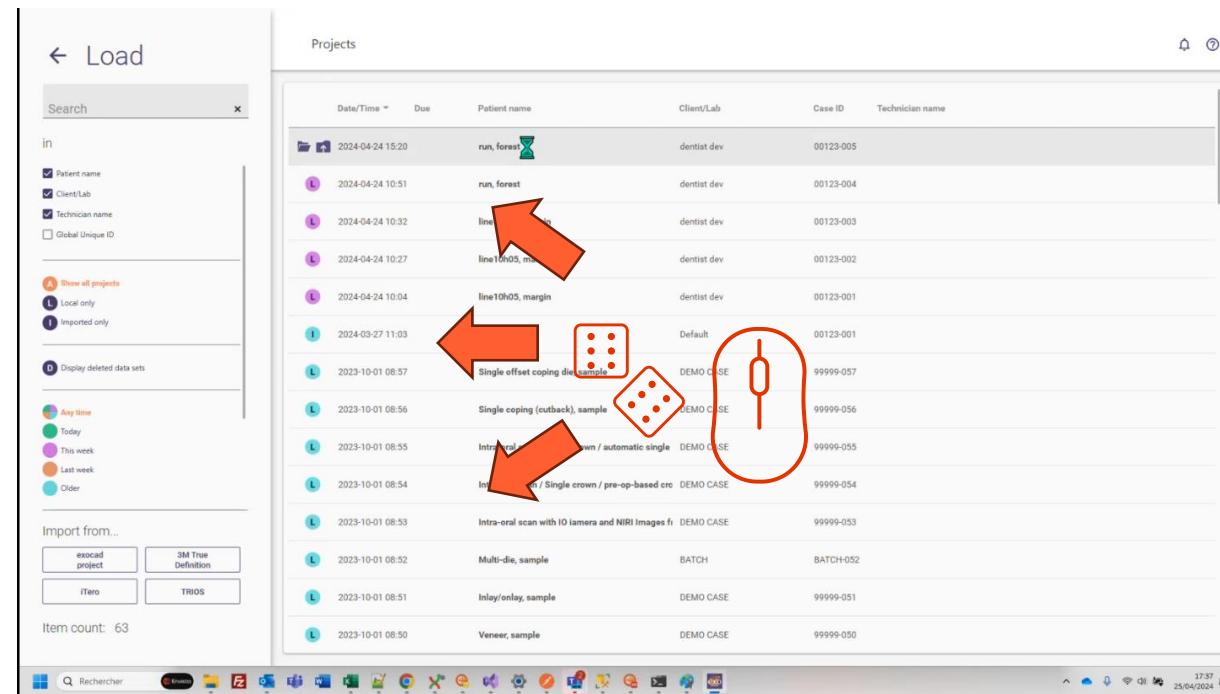


- Selecteer een willekeurig project en laad het

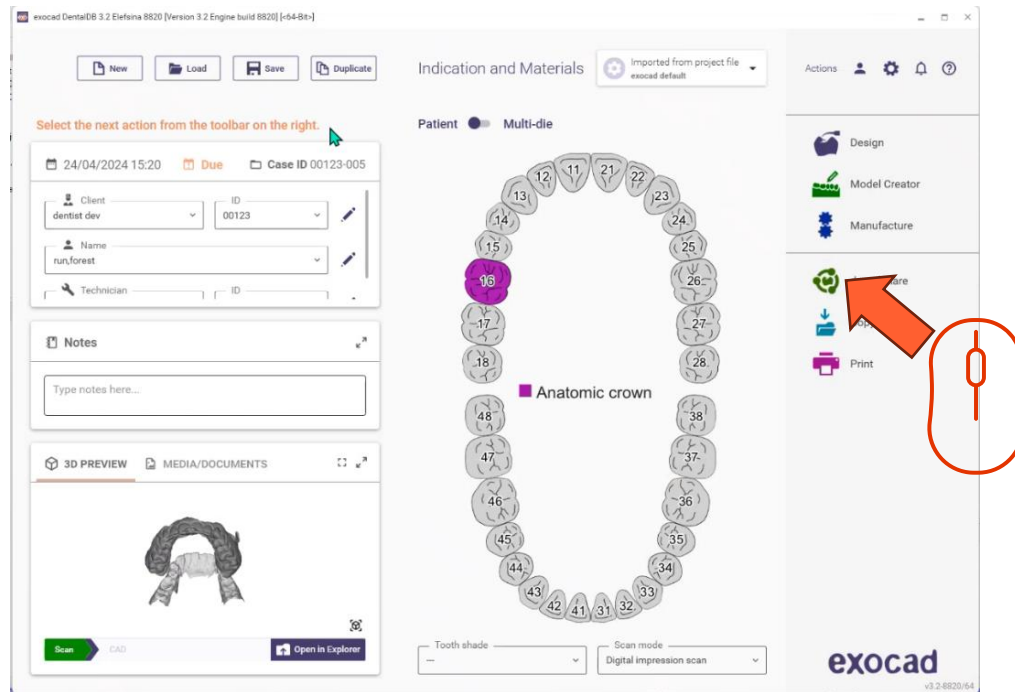


- Klik op het dentalshare-pictogram

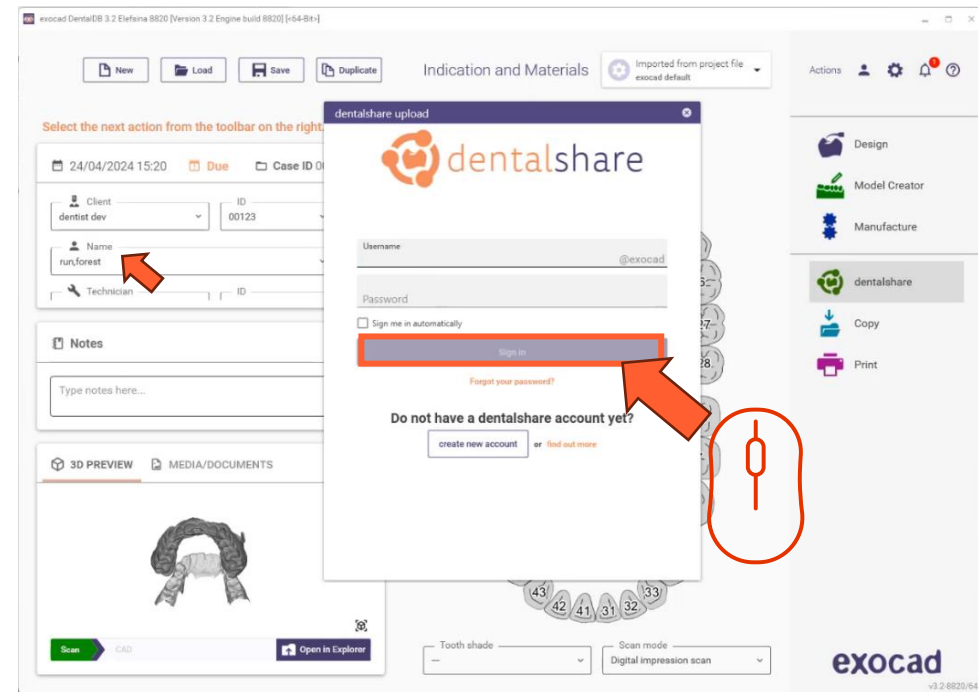


- Klik op 'account aanmaken'

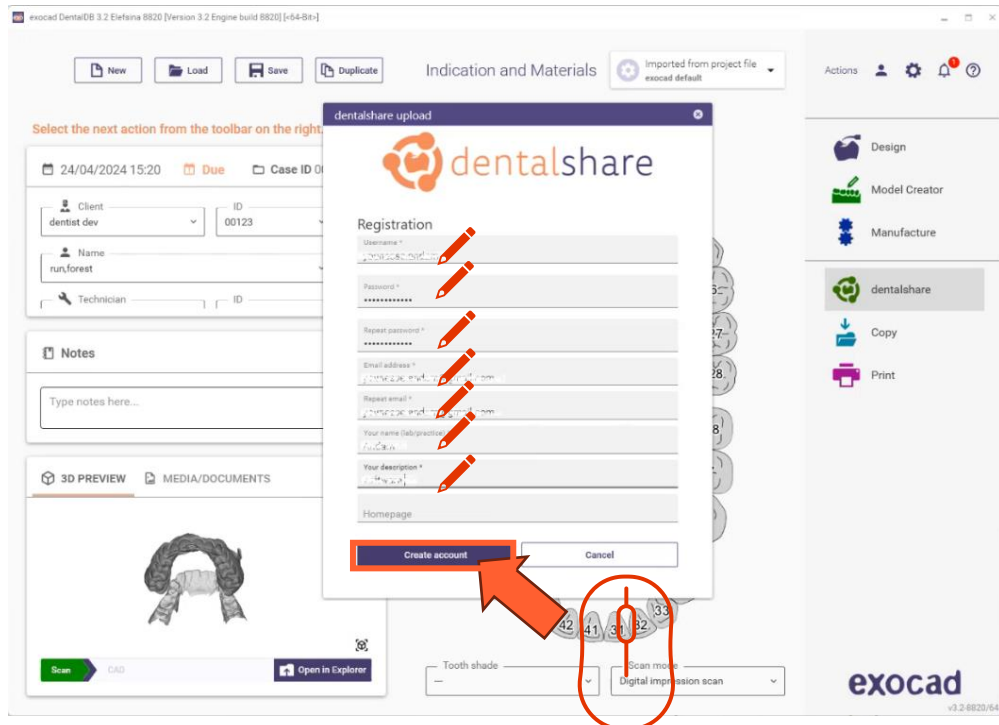


- Vul de gevraagde informatie in
- Klik op 'account aanmaken'
- Er wordt een e-mail verzonden naar het e-mailadres van uw exocad-account

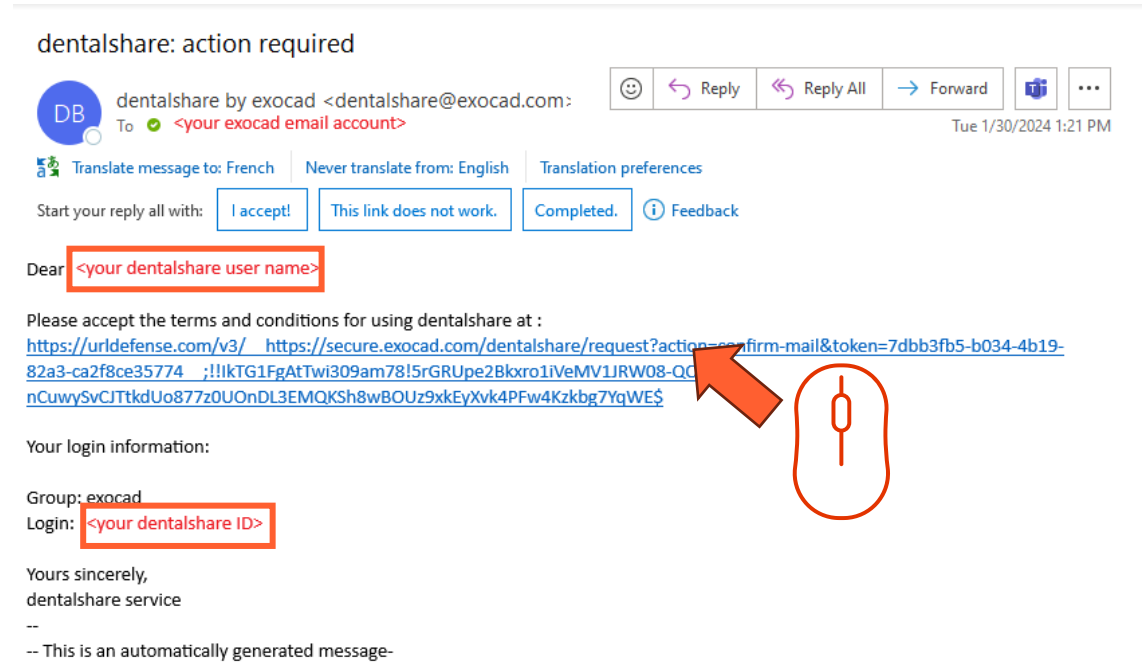

- Klik op de link in de e-mail van dentalshare om de algemene voorwaarden van dentalshare te accepteren

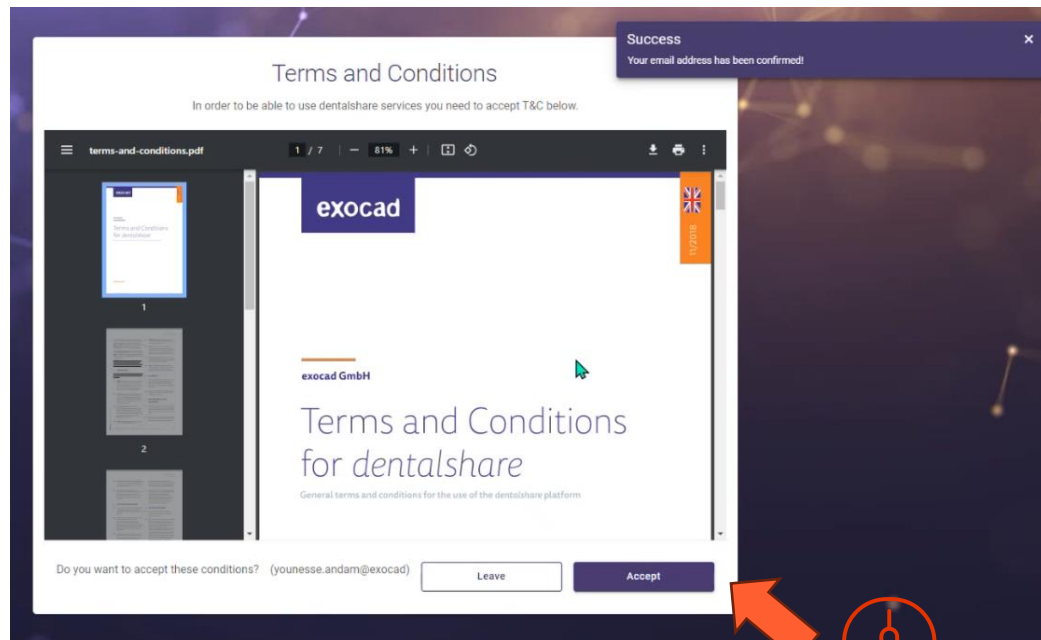


- Algemene voorwaarden accepteren

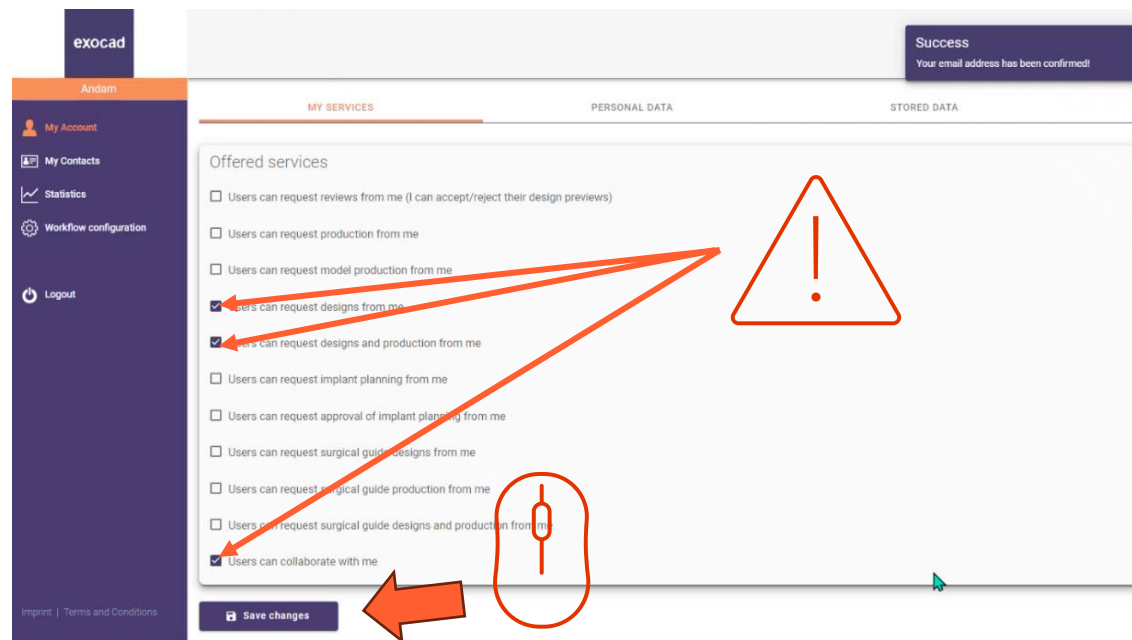


- Zorg ervoor dat uw dentalshare-account is geconfigureerd om ontwerpaanvragen te accepteren
- Klik op 'wijzigingen opslaan'


Inschakelen exocad integratie in IS Connect

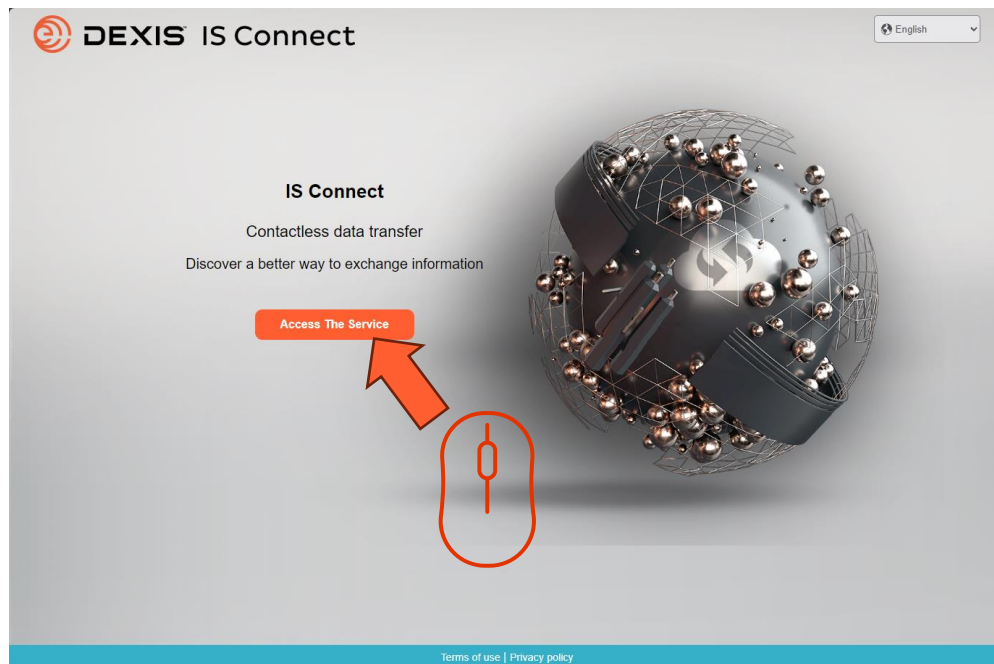


- Meld u aan bij IS Connect

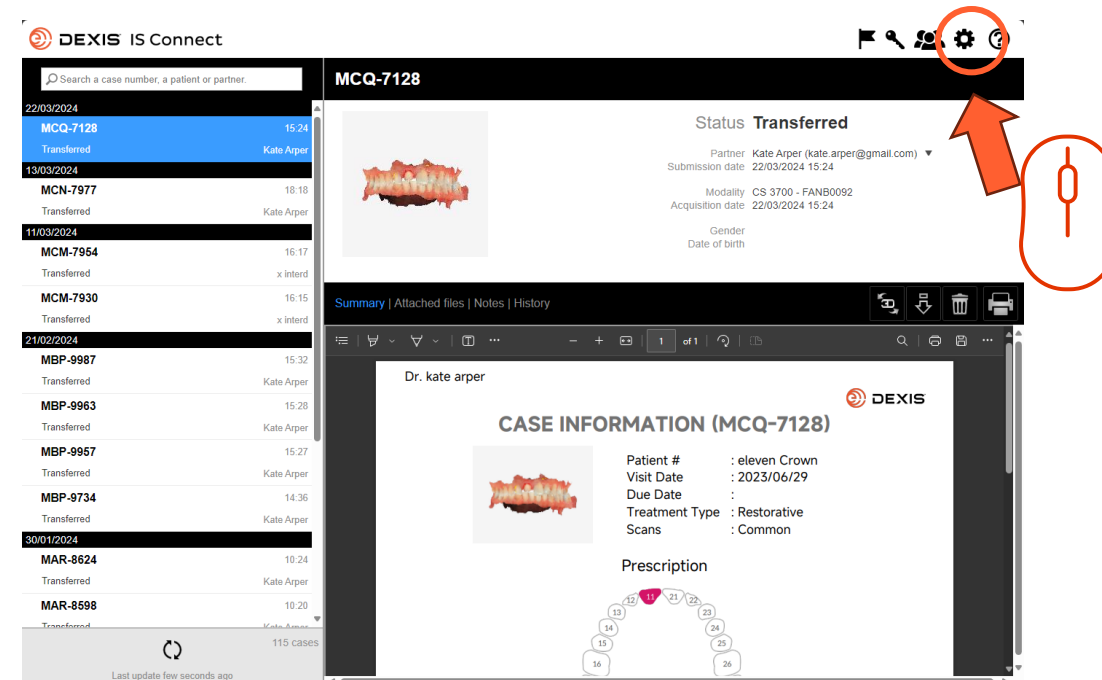


- Klik op het pictogram Instellingen

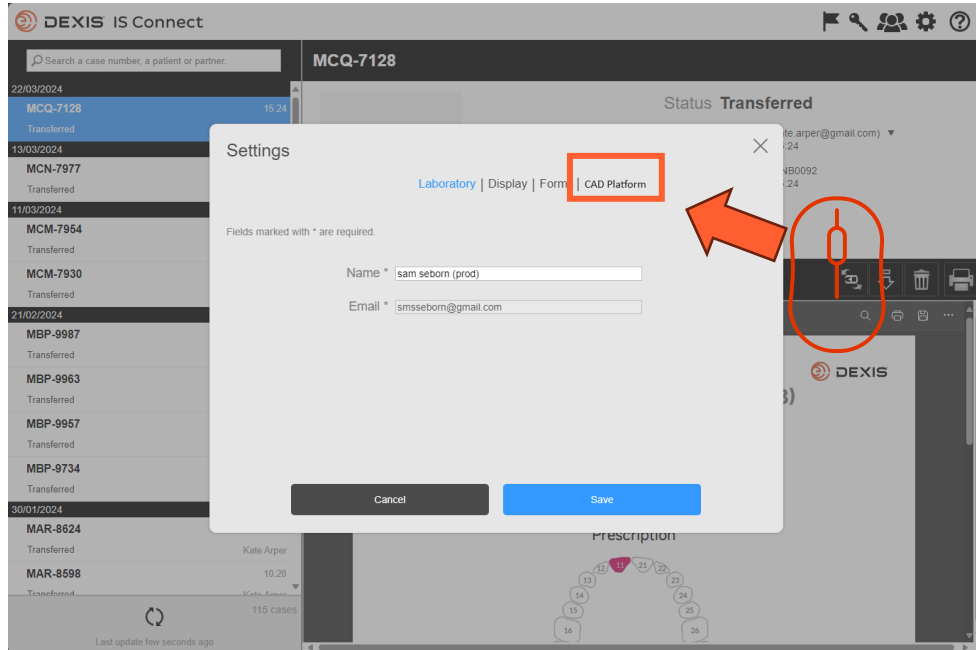


- Klik op het tabblad 'CAD-platform'

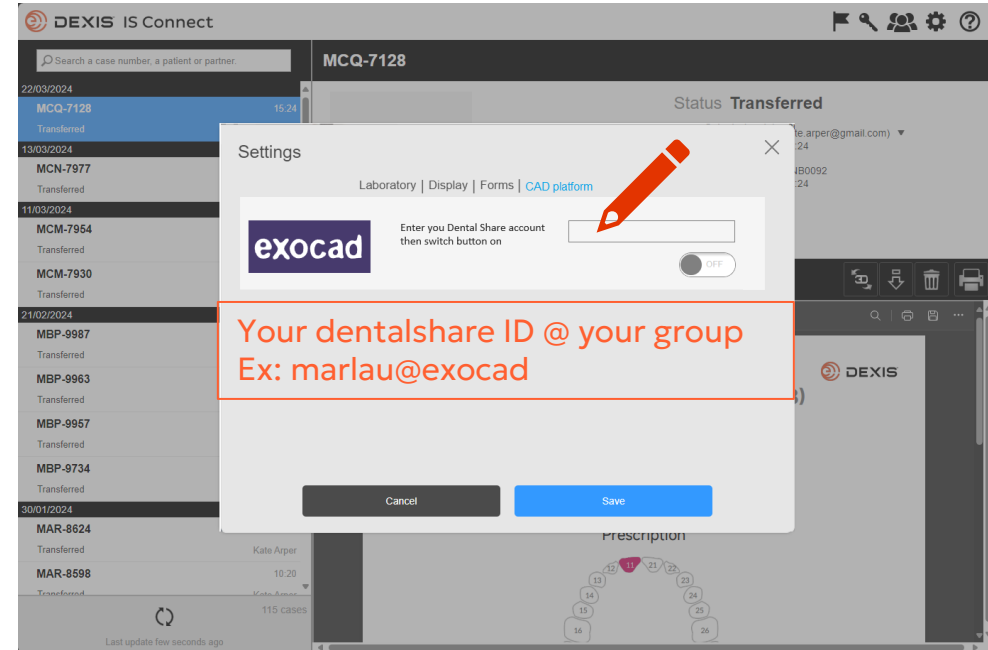

- Typ uw dentalshare ID in

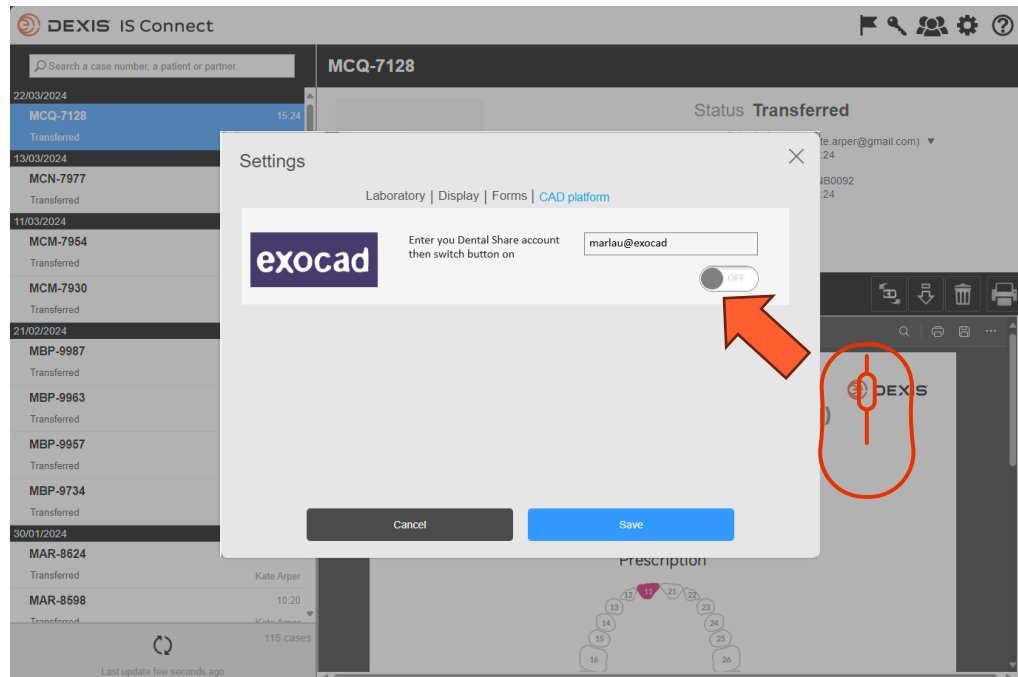


- Schakel de knop

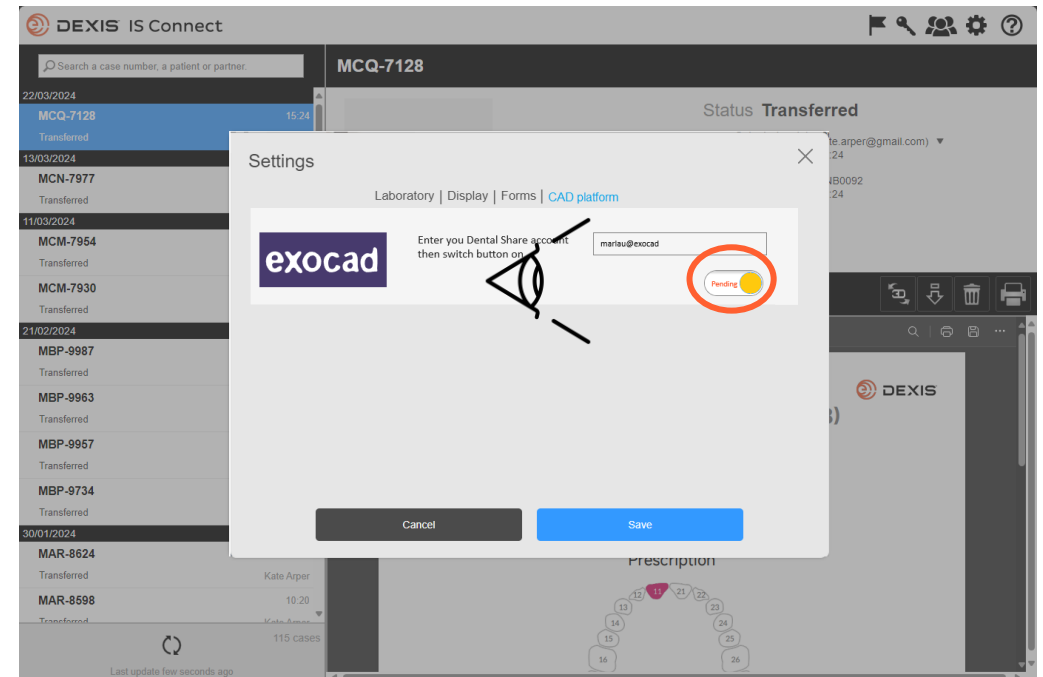

- De knop verandert in de status 'in afwachting van'.
- U kunt IS Connect afsluiten en wachten op een dentalshare-uitnodiging.



dentalshare contact request

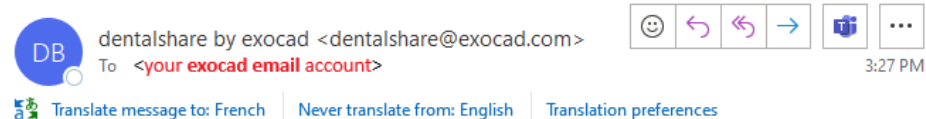

Dear <your dentalshare ID>

DEXIS IS Connect wants to offer a dentalshare community contact to you.

If you want to accept this contact, please click this link:

[https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=accept-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62VZzb3Ac\\$](https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=accept-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62VZzb3Ac$)


if you do not, please click this link:

[https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=decline-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62s4kiM30\\$](https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=decline-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62s4kiM30$)



Yours sincerely,
dentalshare service

-- This is an automatically generated message --



- U ontvangt een uitnodiging voor dentalshare van uw DEXIS IS Connect account.
- Klik op de link om deze te accepteren

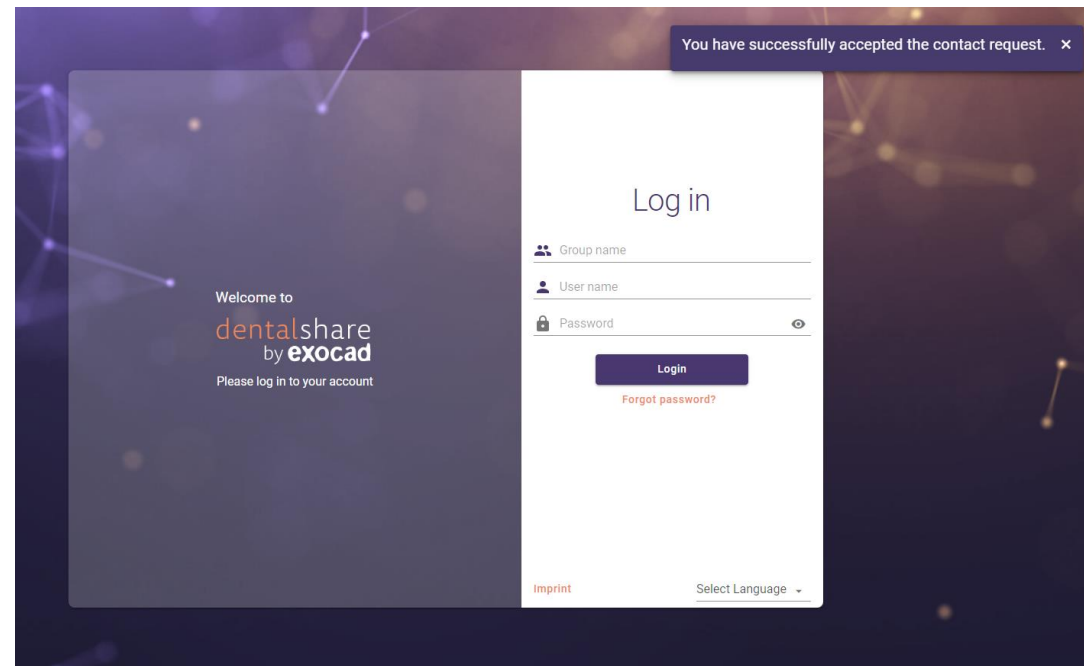

- Uw uitnodiging is bevestigd
- U kunt de dentalshare-schermen sluiten

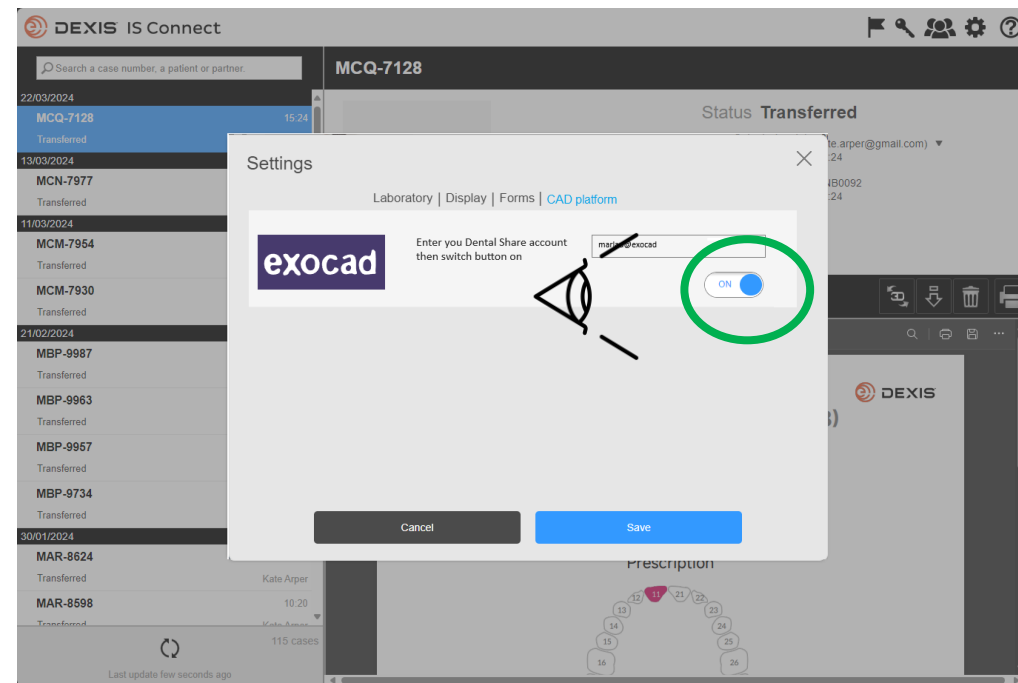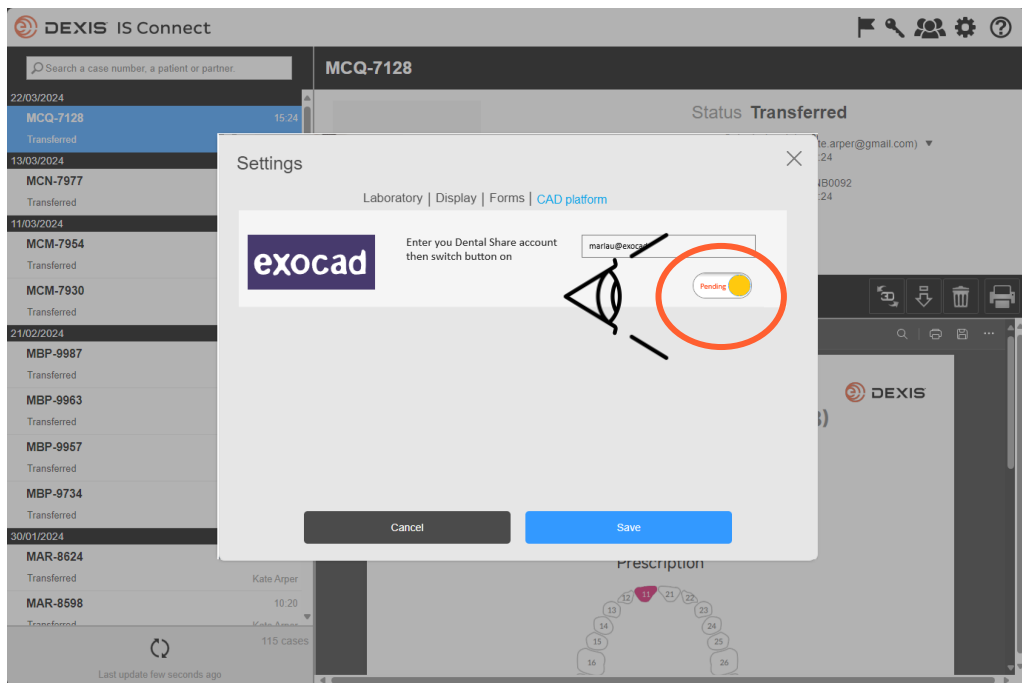


- Nadat u de dentalshare-uitnodiging van DEXIS IS Connect hebt geaccepteerd, schakelt de knop exocad in de IS Connect-instelling over van 'in behandeling' naar 'aan'.
- Er kan een vertraging optreden
- De integratie is nu geregistreerd

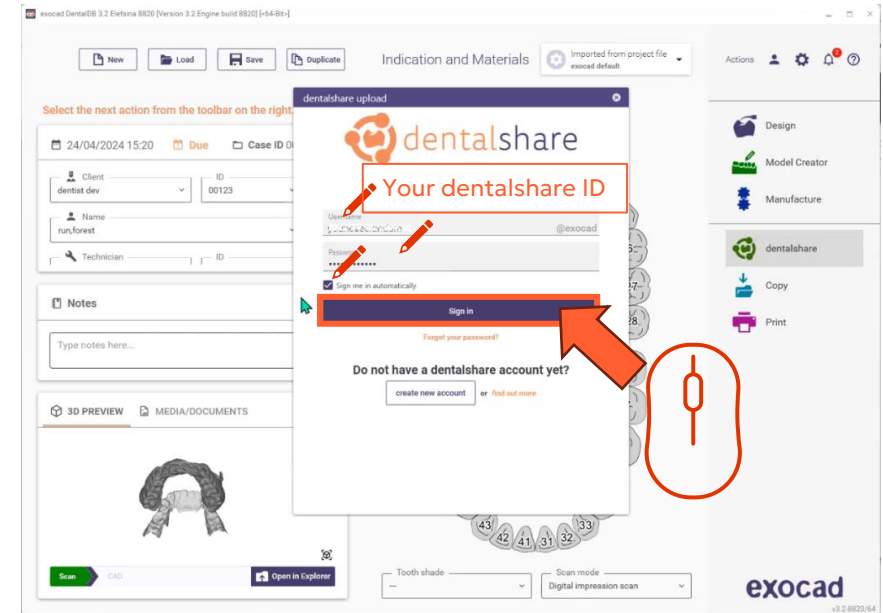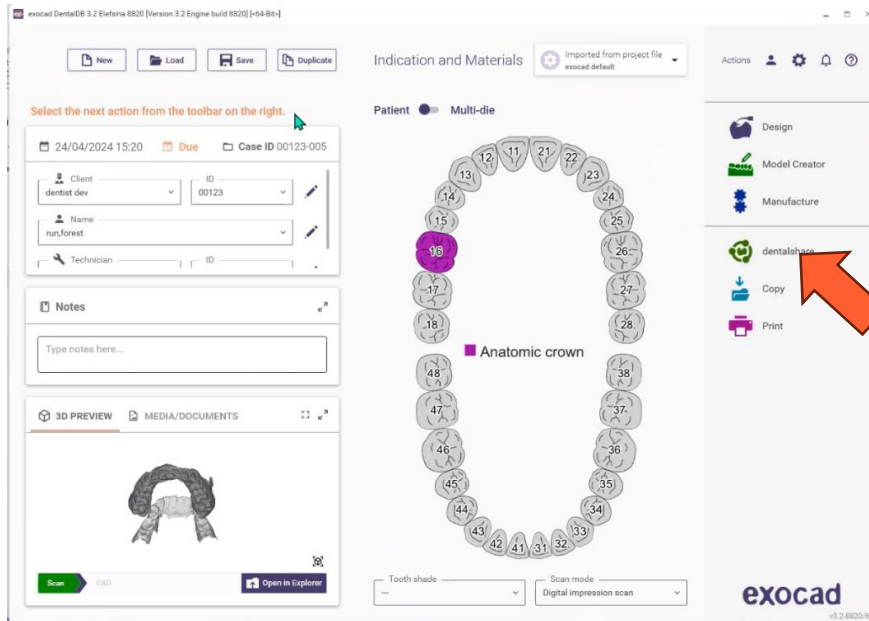

- U moet ingelogd zijn bij dentalshare terwijl u in exocad DB bent om de integratie actief te maken.

- Meld u aan bij dentalshare vanuit exocad DB met uw dentalshare ID en selecteer 'automatisch aanmelden'.


- Dentalshare wordt geopend, u kunt het sluiten
- IS Connect casussen die naar uw lab worden verzonden, worden nu geleverd als dentalshare.

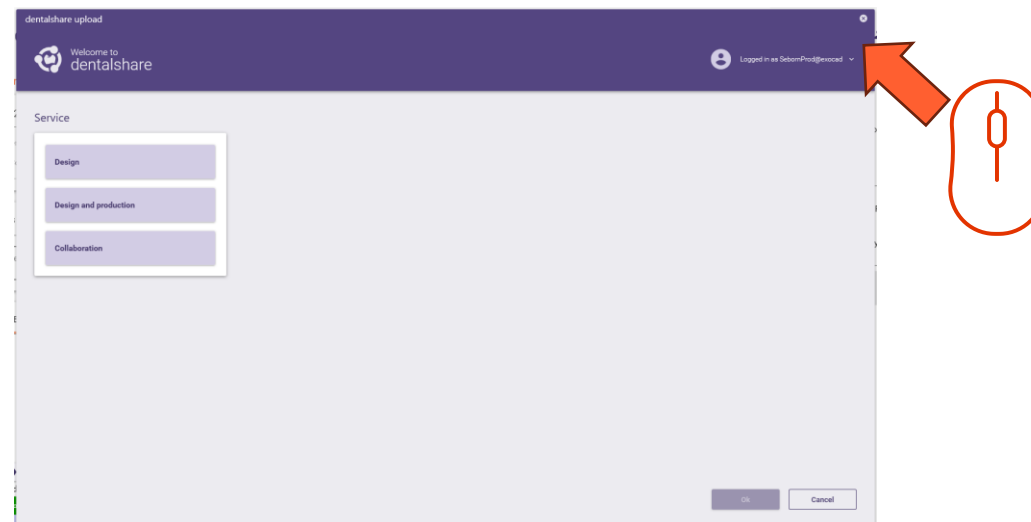




DEXIS-exocad の統合手順


必要なアカウント

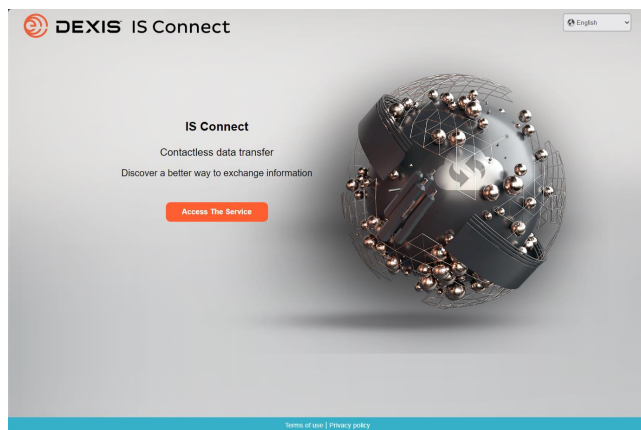

☐ IS Connect

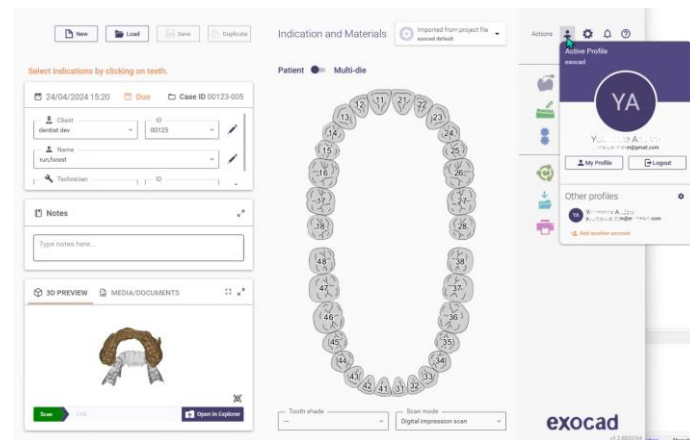


☐ exocad DB

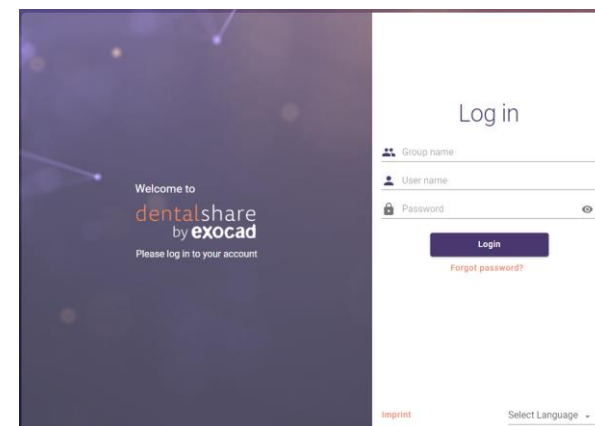


☐ exocad dentalshare


Dentalshare アカウントをお持ちですか？

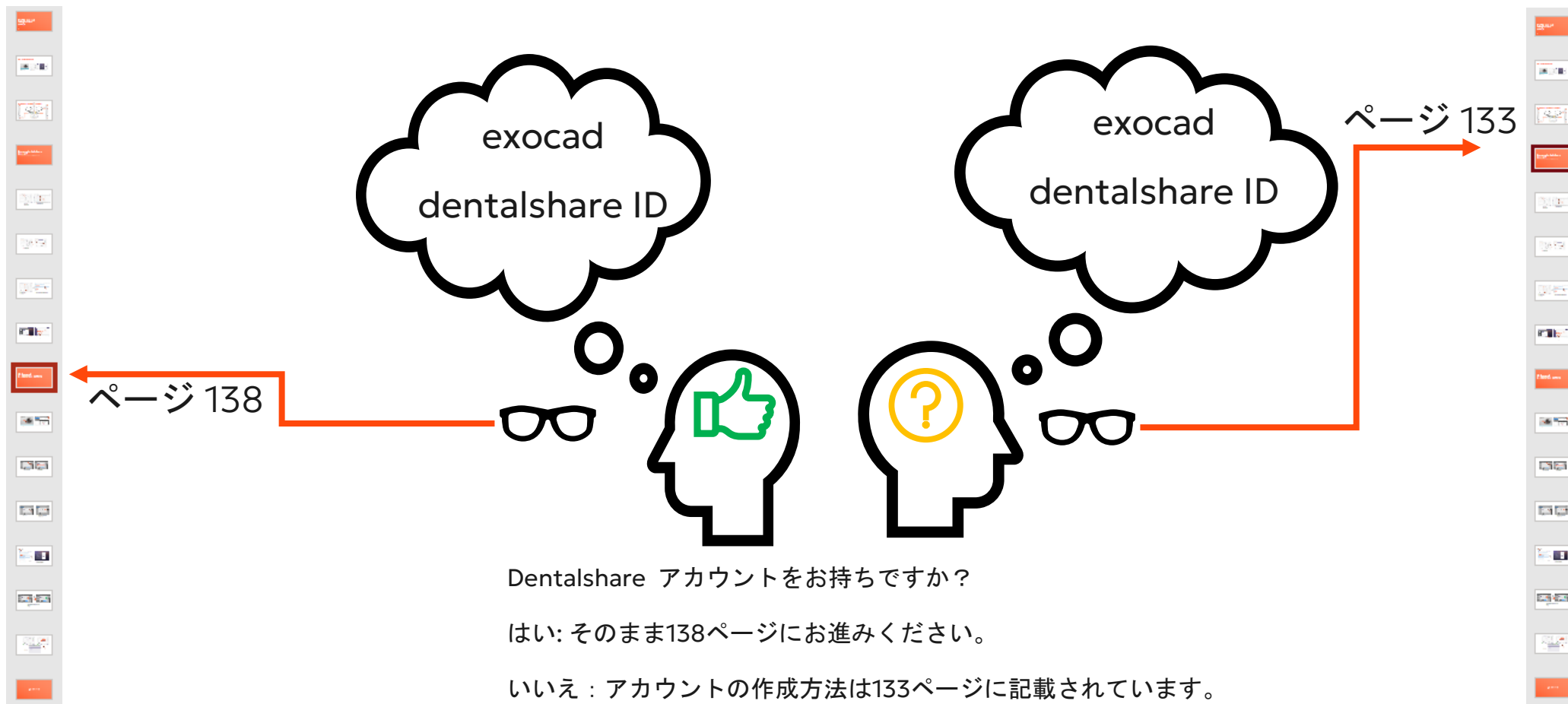


Dentalshare IDを作成する

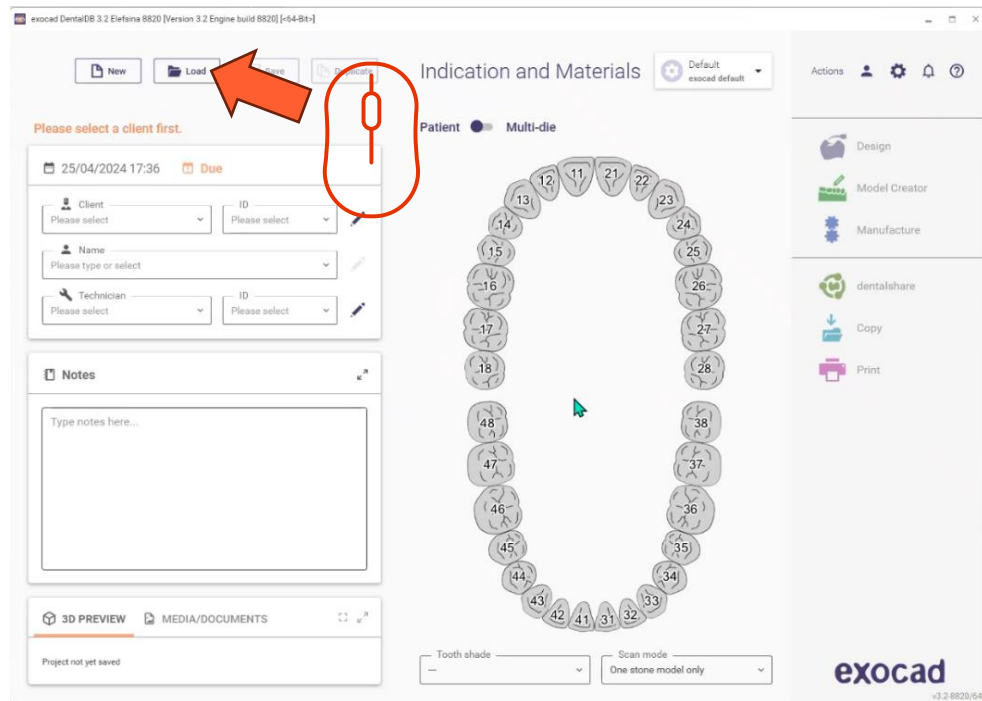


- exocad DBを開く
- ロードボタンをクリックしてください。

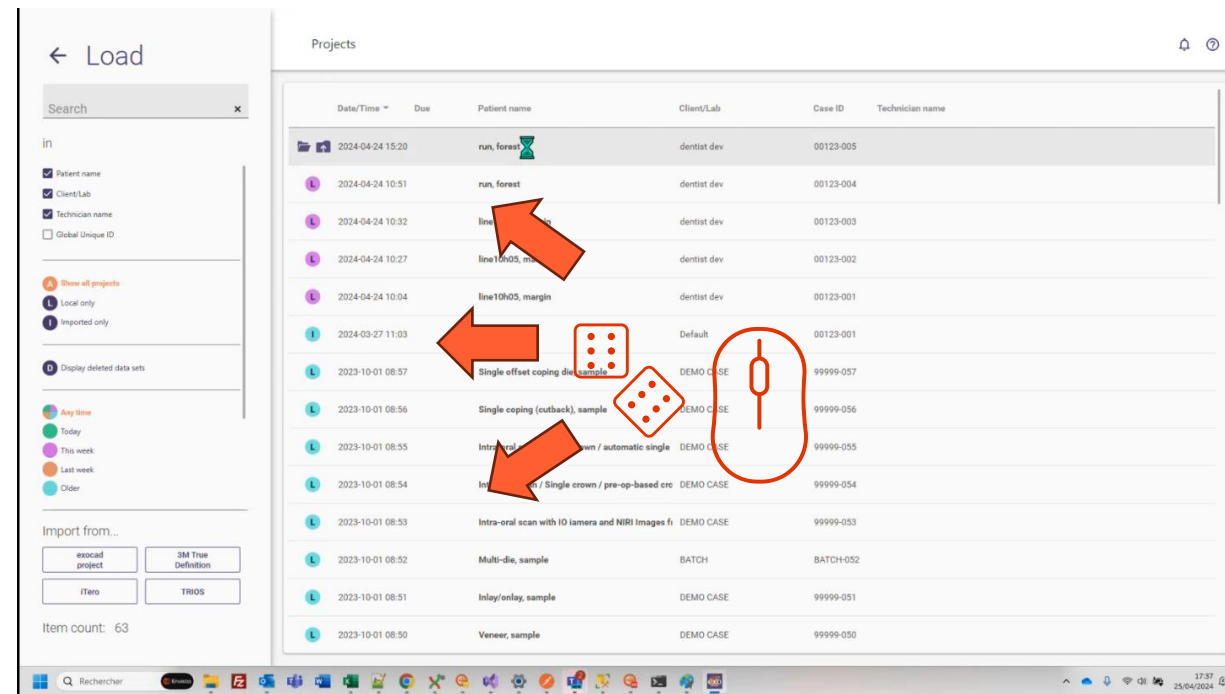


- プロジェクトを選択し、ロードします。

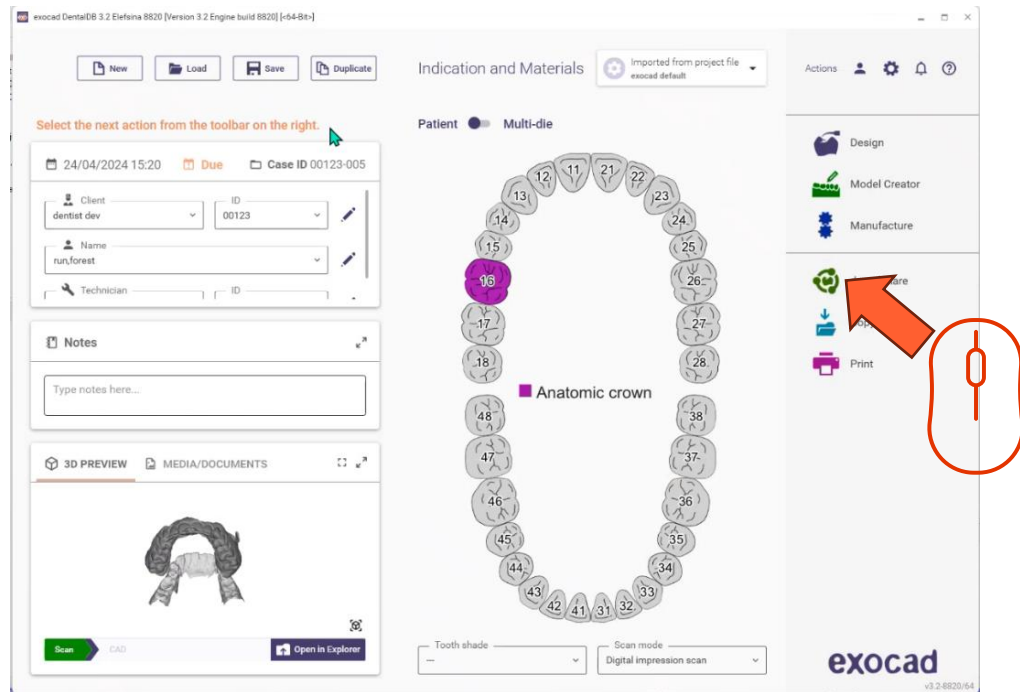


- dentalshare アイコンをクリックします。

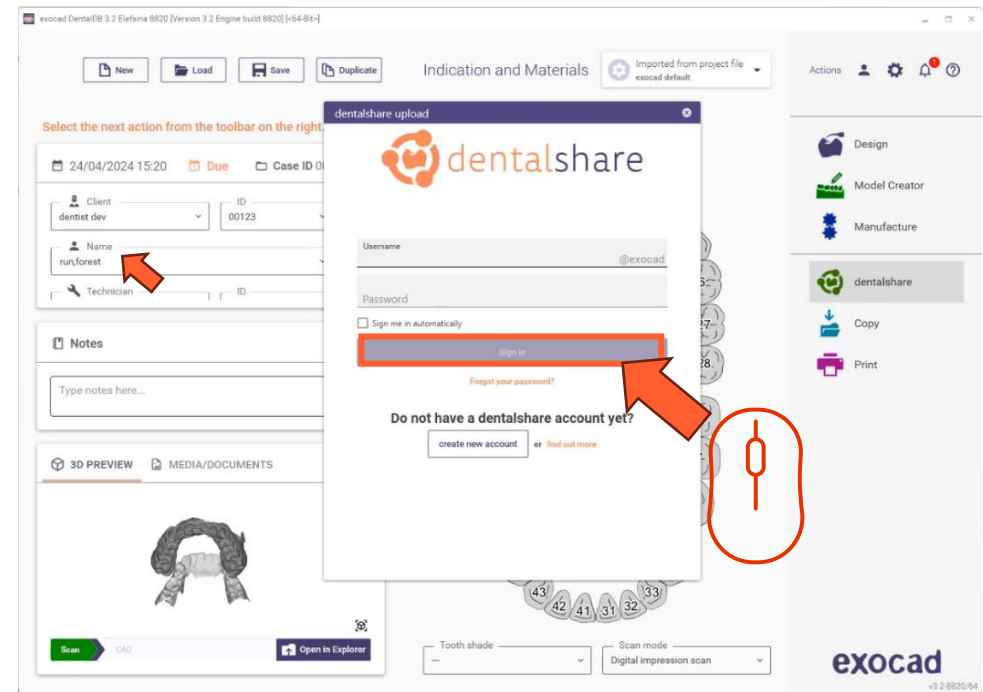


- アカウント作成をクリック

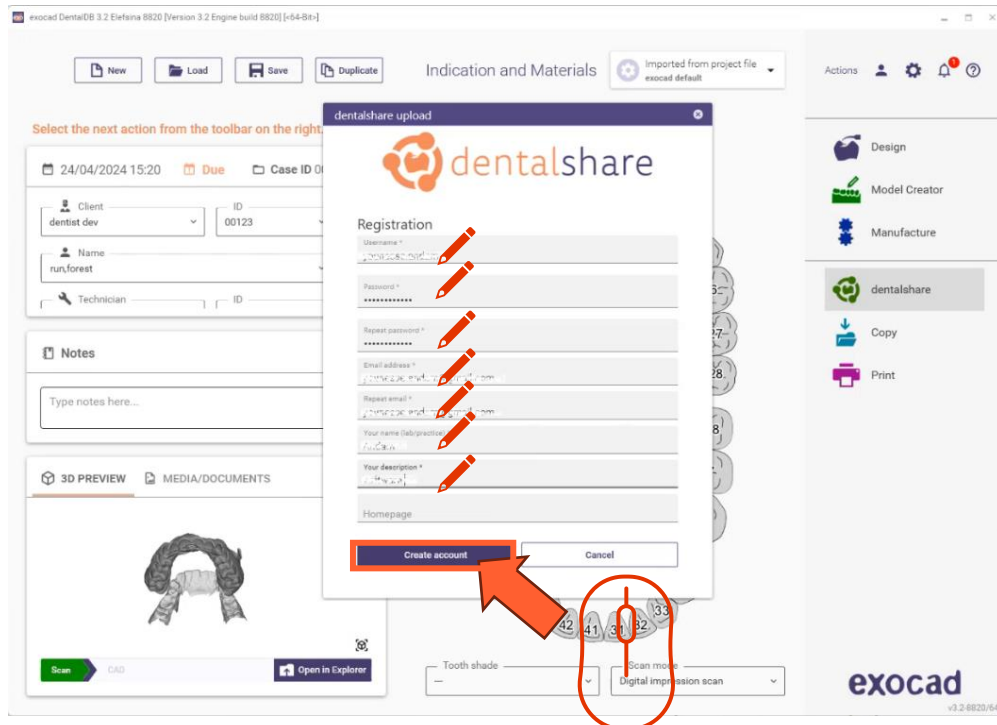


- 必要な情報を入力
- アカウント作成」をクリック
- exocadアカウントのアドレスにメールが送信されます。

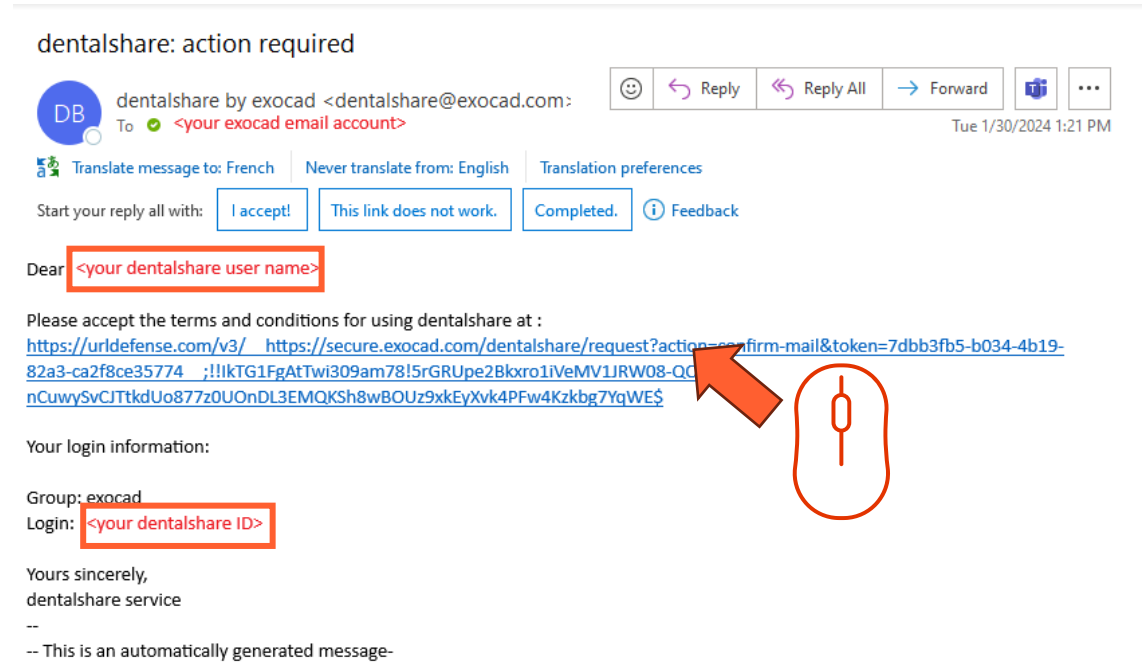

- Dentalshare からのメールに記載されているリンクをクリックし、dentalshare の利用規約に同意してください。

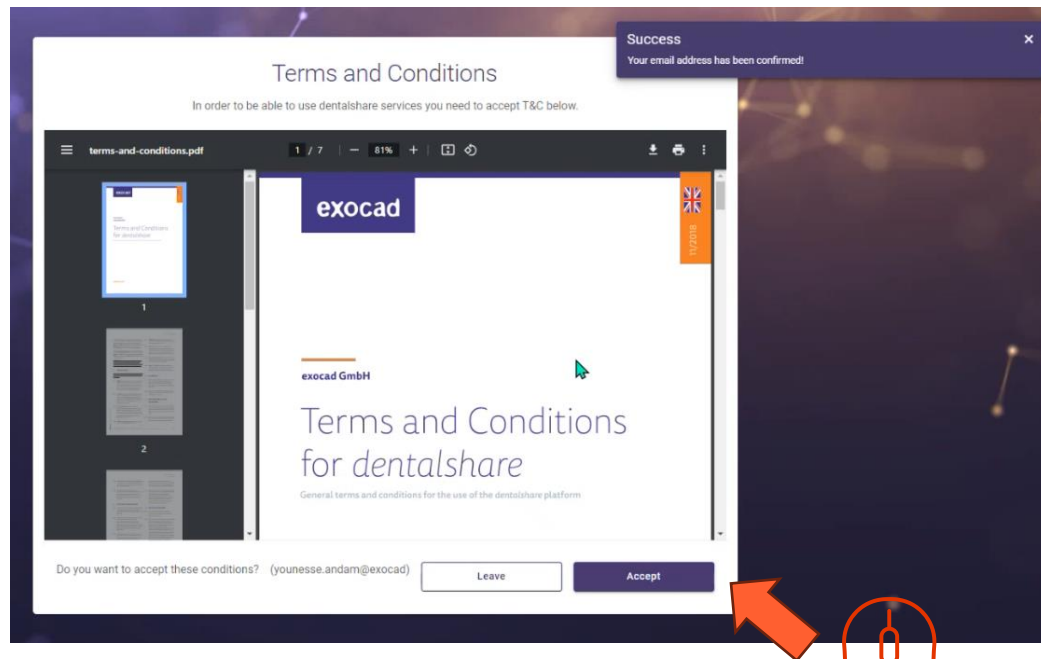


- 利用規約に同意する

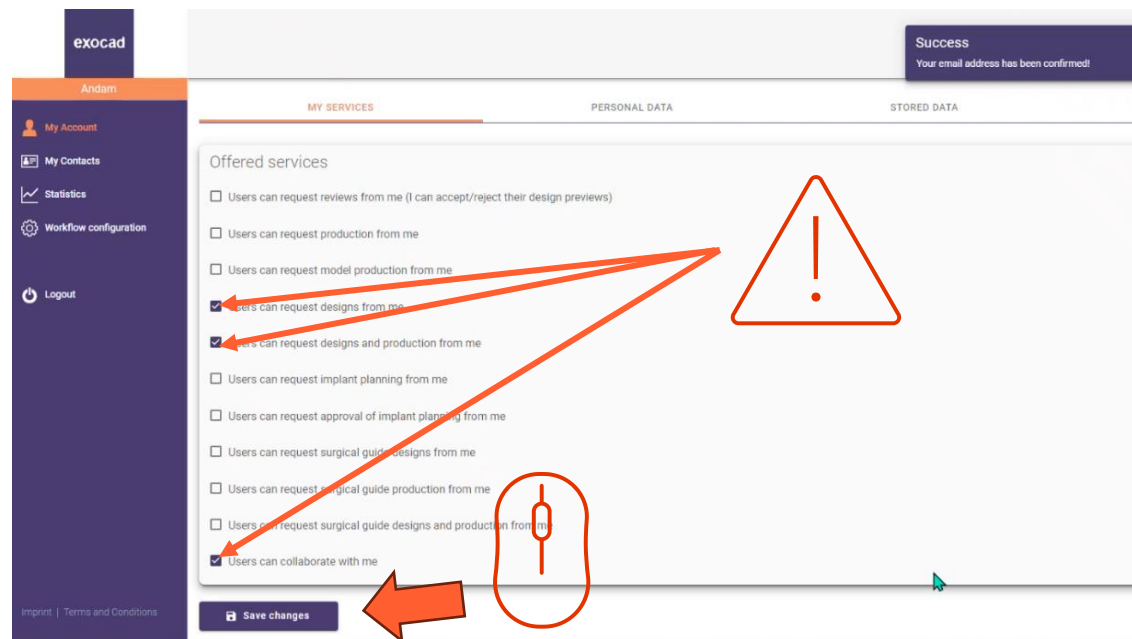


- あなたの dentalshare アカウントがデザイン依頼を受け付けるように設定されていることを確認してください。
- 「変更を保存」をクリックします。


IS CONNECT で exocad 統合を有効にする

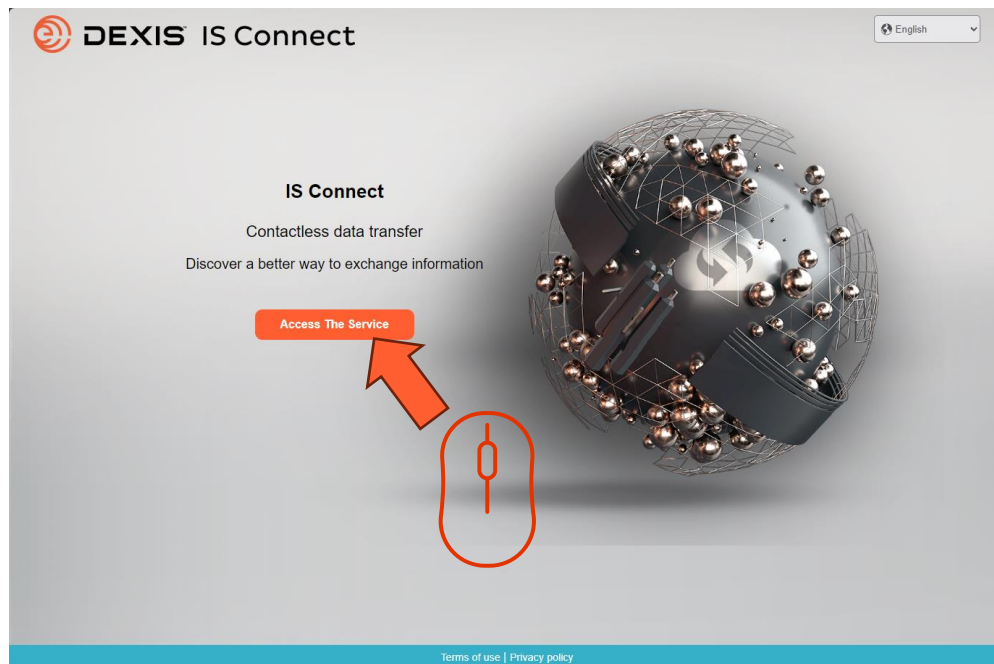


- IS Connect にログインします。

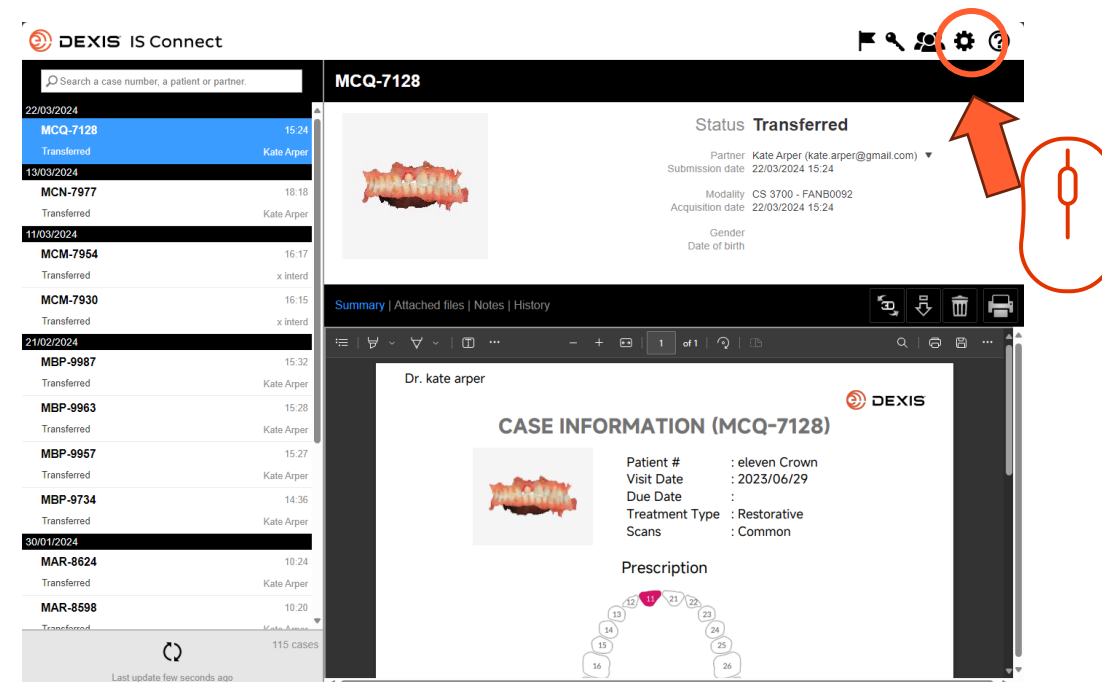


- 設定アイコンをクリックします。

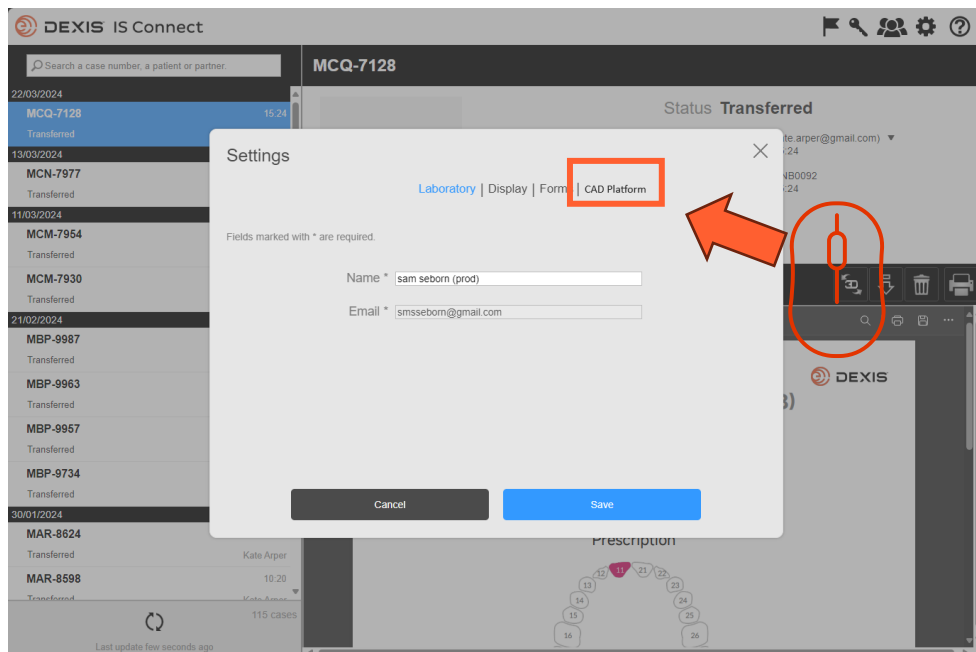


- CADプラットフォーム」タブをクリックします。

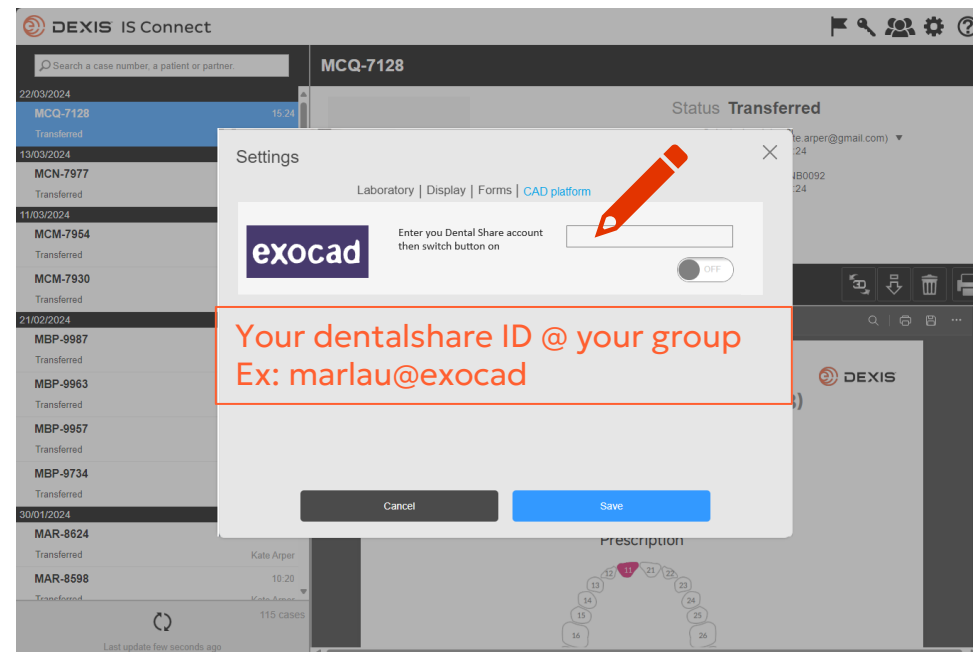

- Dentalshare IDを入力します。

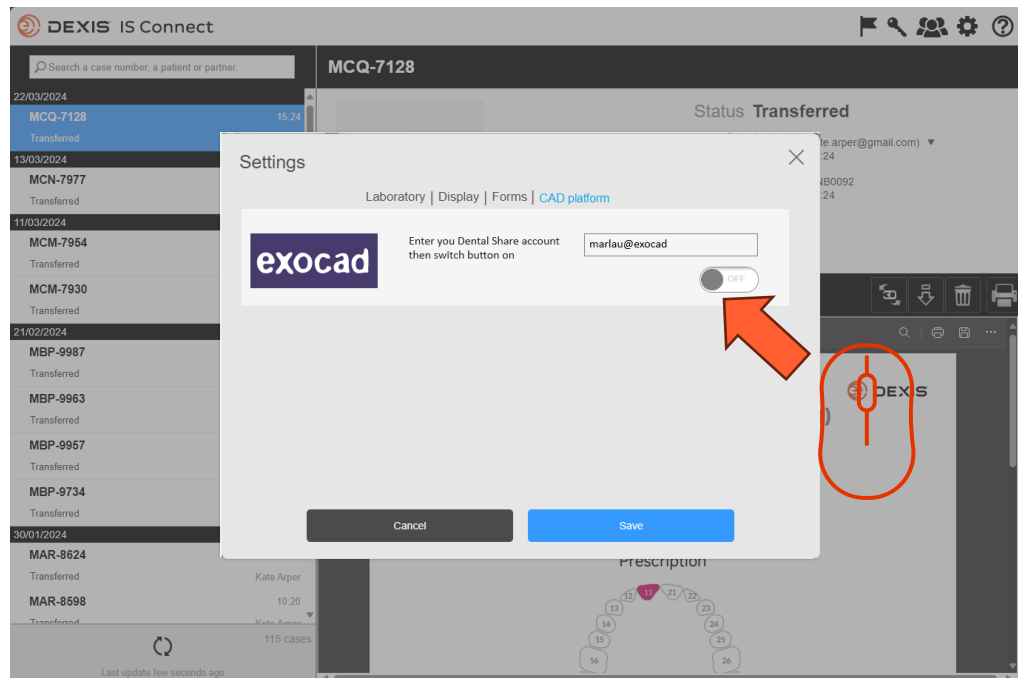


- ボタンを押す

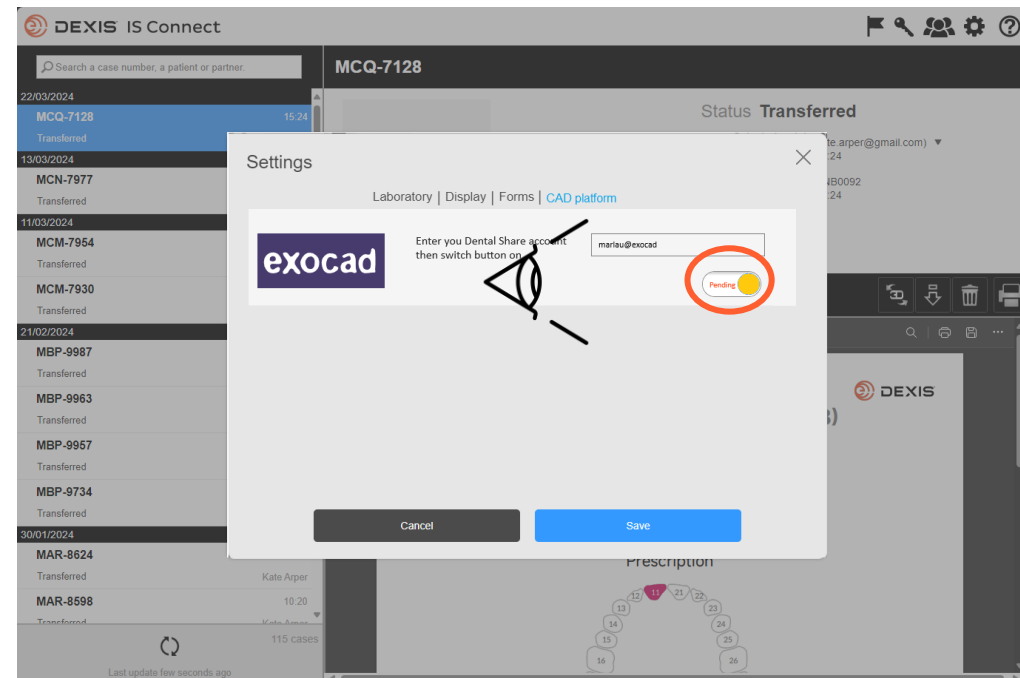

- ボタンが「保留」状態に変わります。
- IS Connectを終了し、dentalshare の招待を待つことができます。



dentalshare contact request

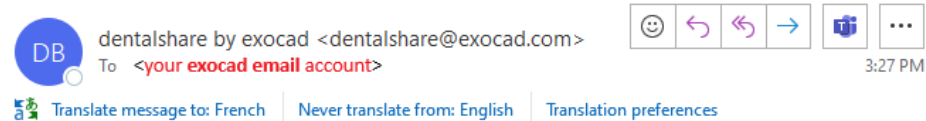

Dear <your dentalshare ID>

DEXIS IS Connect wants to offer a dentalshare community contact to you.

If you want to accept this contact, please click this link:

[https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=accept-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05SqBiv62VZb3Ac\\$](https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=accept-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05SqBiv62VZb3Ac$)


if you do not, please click this link:

[https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=decline-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05SqBiv62s4kiM30\\$](https://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=decline-contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea;!!ikTG1FgAtTwI309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmKWPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05SqBiv62s4kiM30$)




Yours sincerely,
dentalshare service

-- This is an automatically generated message --


- DEXIS IS Connectアカウントから dentalshare の招待状が届きます。
- リンクをクリックして承諾します。

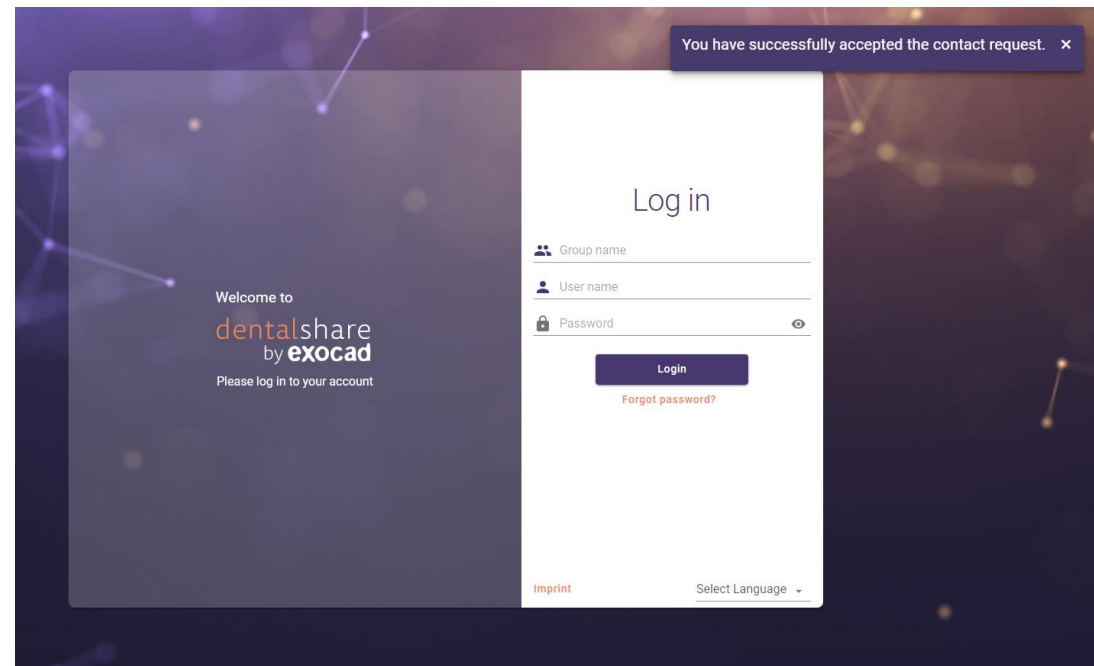


- 招待が確定します。
- dentalshare 画面を閉じることができます。

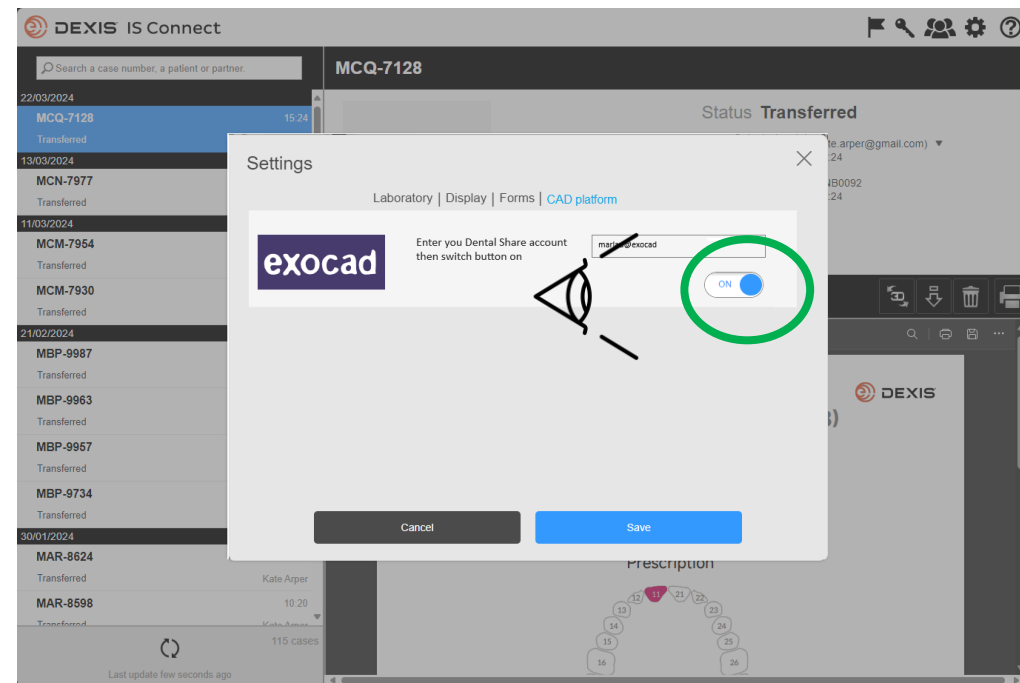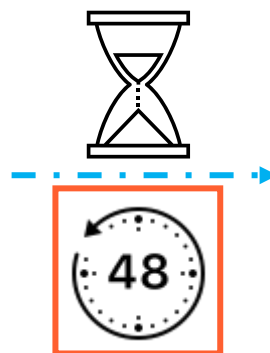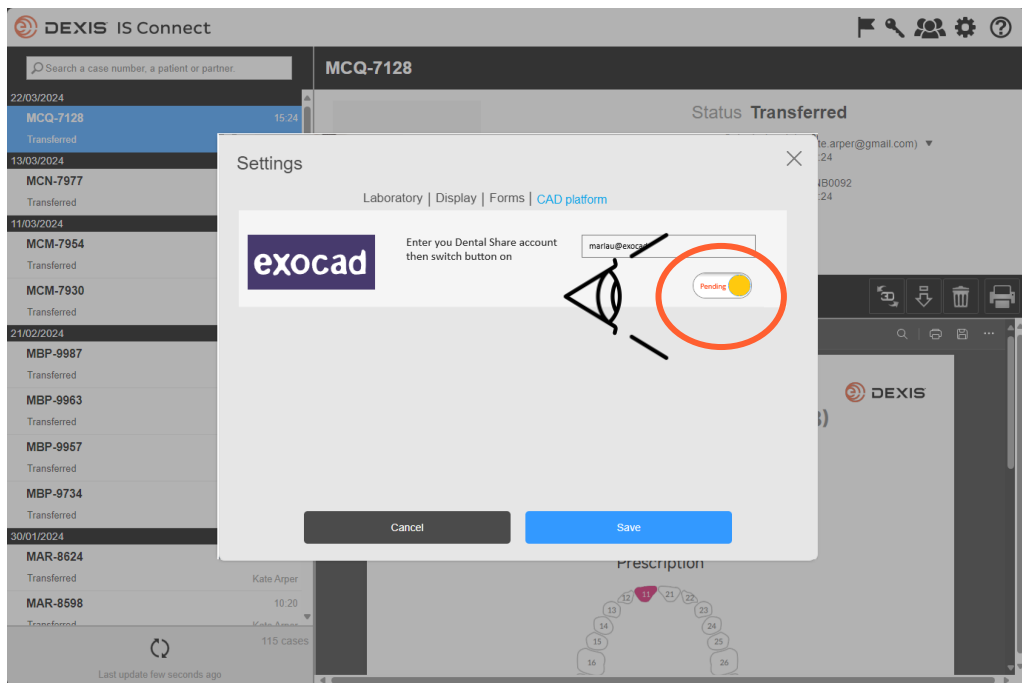

- dentalshare DEXIS IS connect 招待を承認すると、IS Connect 設定のexocadボタンが「保留」から「有効」に変わります。
- 遅延が発生する場合があります。
- これで統合が登録されました。

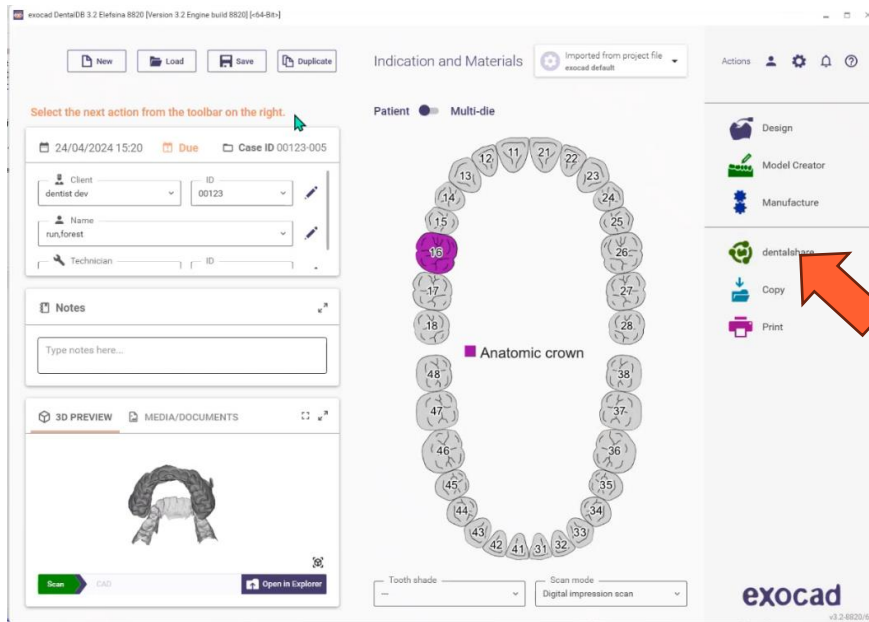

- 統合をアクティブにするには、exocad DBで dentalshareにログインする必要があります。

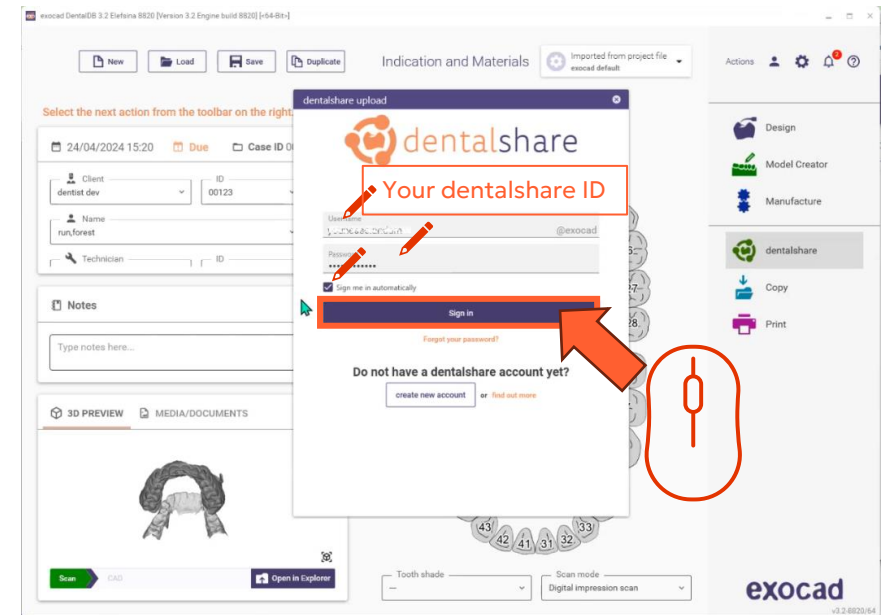

- exocad DB からdentalshare ID でサインインし、'sign in automatically'を選択します。

- dentalshare が開きますので、閉じてください。
- IS Connectでラボに送られた症例が dentalshare で配信されます。

